

Q500[®]

COMFORTABEL EN ZORGELOOS OP UIT



Q-Serie
Elektrische rolstoelen



Q500 R



Q500 H



Q500 M



Q500 F

Op basis van jarenlange ervaring met hoogwaardige aandrijf- en zitsystemen en geavanceerde technologie introduceert QUICKIE® de Q500.

Buiten biedt de Q500 goede rijeigenschappen door een krachtige 4-polige motor met hoge koppel. Maximaal comfort en stabiliteit door het hoogwaardige SEDEO PRO zitsysteem en de uitstekende vering. Het strakke design met de grote lichtmetalen velgen, snelheden tot 12,5 km/u en accu's tot 80 Ah zorgen ervoor dat je er zorgeloos en comfortabel op uit kunt!



Q500

De Q500 biedt voor iedereen een passende oplossing.

- Hoogwaardig SEDEO PRO zitsysteem voor alle zitbehoeften.
- Vier typen aandrijfsystemen (achter -, hybrid-, mid- en voorwielaandrijving) passend bij jouw voorkeur en levensstijl.
- Een uitgebreid assortiment aan alternatieve bedieningen (R-Net, VR2, Switch-IT en Link-IT).



Q500 MET
SEDEO PRO

ACHTERWIELAANDRIJVING



Q500 MET
SEDEO PRO

HYBRIDAANDRIJVING



Q500 MET
SEDEO PRO

MIDWIELAANDRIJVING



Q500 MET
SEDEO PRO

VOORWIELAANDRIJVING




Q500

GA ER COMFORTABEL EN ZORGELOOS OP UIT




MAXIMALE VRIJHEID

Ga er op uit! De krachtige en betrouwbare 4-polige motoren met hoge koppel zorgen voor snelheden van 6, 8, 10 of 12,5 km/u, en in combinatie met de 50, 60 of 80 Ah accu's kun je altijd met vertrouwen op pad.

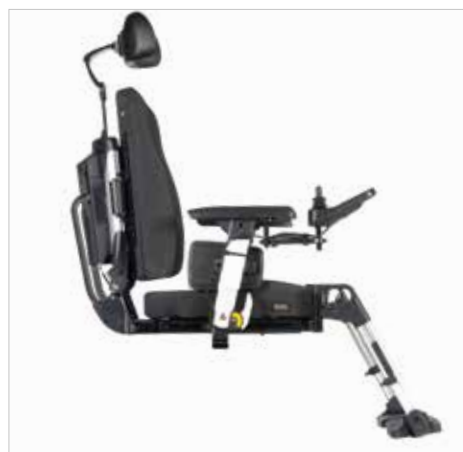

ALTIJD GOED ZITTEN

In een Q500 zit je altijd goed! Het SEDEO PRO zitsysteem is zeer configureerbaar en instelbaar en heeft daarnaast nog een ruim assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen, zitkussens, rugleuningen en positionerings-elementen. Zodat er voor jou altijd de juiste zitpositie gecreëerd kan worden waarbij je goed stabiel zit met optimale ondersteuning op de juiste plaatsen.

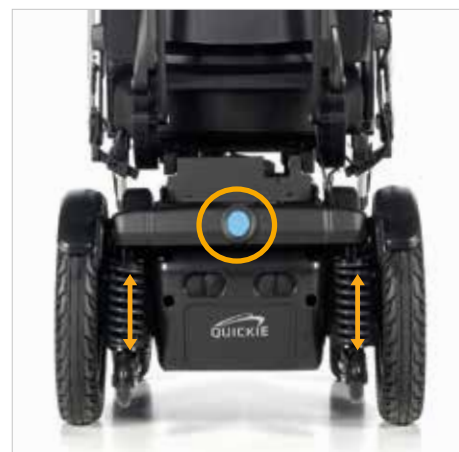

COMFORTABEL RIJDEN

De Q500 voor- en achterwiel-aandrijving zijn voorzien van het FTSS-veersysteem en de midwielaandrijving heeft vering op alle zes de wielen. De Hybrid versie heeft onafhankelijk geveerde wielen zodat je altijd contact hebt met de ondergrond. Daardoor blijf jij comfortabel en stabiel in de stoel zitten wanneer je aan het rijden bent, ook op oneffen ondergrond!



ONDSCHIEDEND

Laat zien wie je bent! De mat zwarte basis in combinatie met de stijlvolle bekleding zorgen voor een modern en slank design. Je kunt kiezen uit 7 opvallende accentkleuren. Van bekleding tot wielen, elk detail draagt bij aan een onderscheidende look!




KIES JE AANDRIJVING

ACHTER-, HYBRID-, MID- OF VOORWIELAANDRIJVING

	Q500 R	Q500 H	Q500 M	Q500 F
Aandrijving	Achterwiel	Hybrid	Midwiel	Voorwiel
Draaicirkel	1900 mm	1820 mm	1120 mm	1470 mm
Aandrijfwielen	13/14"	13/14"	13/14"	13/14"
Zwenkwielen	9/10"	4"/7"	7"	9"
Max. snelheid	6 & 8 km/u (standaard), 10 & 12,5 km/u (optioneel)			
Accu's	50 Ah / 60 Ah / 80 Ah			
Bedieningen	VR2, R-net	VR2, R-net	VR2, R-net	VR2, R-net
Max. hellingshoek	10°	10°	8°	8°
Max. obstakelhoogte	80 mm	85 mm	75 mm	70 mm
Actieradius (ISO 7176-4)*	40 km	40 km	40 km	40 km
Min. totale breedte	615 mm	620 mm	610 mm	615
Totale lengte incl. beensteunen	1110 - 1180 mm	1195 mm	1280 mm	1280 - 1340 mm
Min. totale lengte excl. beensteunen	840 mm	900 mm	900 mm	1030 mm
Max. gebruikersgewicht	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg

De keuze van de aandrijving bepaalt de rijprestaties van de stoel in verschillende situaties en omgevingen. Het is dus belangrijk dat je een aandrijving kiest die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren, ervaringen, levensstijl, klinische- en omgevingsbehoeften. De Q500 voorziet in die behoefte zodat er altijd een aandrijving is die bij jou past. Welke aandrijving kies jij?

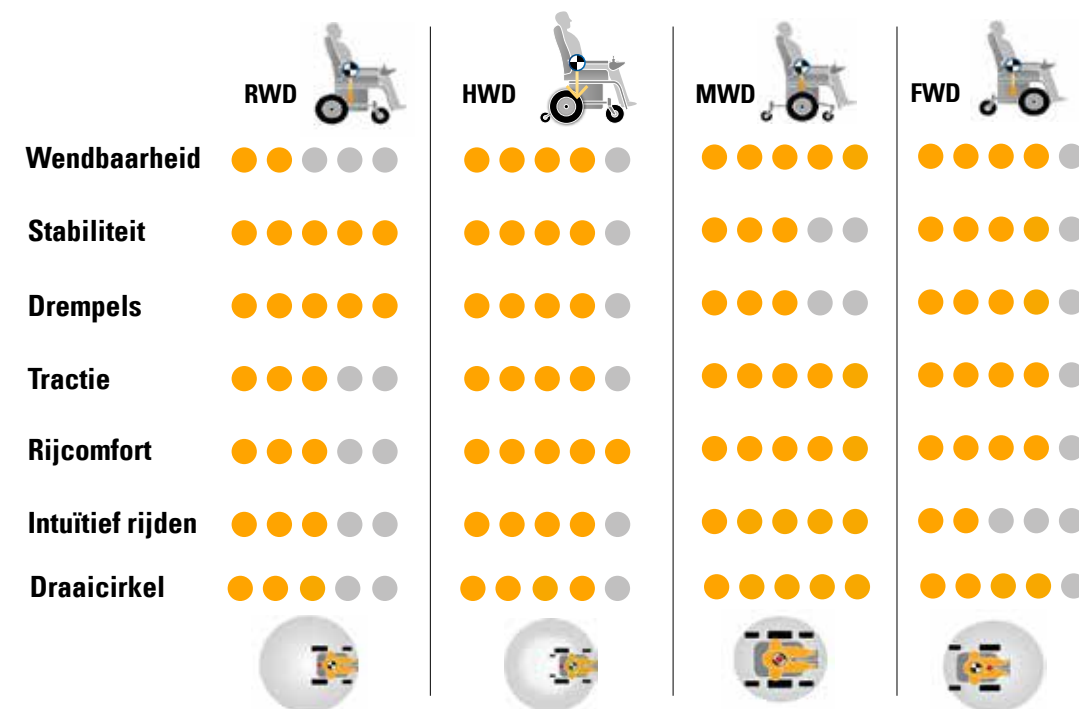

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weeromstandigheden kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.



Q500 R **ACHTERWIELAANDRIJVING**

Doordat de aandrijfwielen achter zitten, gebeurt alles voor je. Je ziet dus wat je doet en daardoor is rijden heel gemakkelijk en intuïtief. Een achterwielaandrijving is zeer stabiel door o.a. de grote wielen en daarnaast ook koersvast op alle snelheden, zelfs op oneffen ondergrond. Stoepranden tot 80 mm zijn geen probleem.



Q500 M **MIDWIELAANDRIJVING**

Door de midwielaandrijving ligt het natuurlijke draaipunt van het lichaam precies boven het draaipunt van de rolstoel. Je rijdt daarom heel intuïtief. Daarnaast is een midwielaandrijving zeer wendbaar en heeft hij ten opzicht van de voor- en achterwielaandrijving de meest compacte draaicirkel.



Q500 H **HYBRIDAANDRIJVING**

De Q500 Hybrid combineert het intuïtieve en het compacte rijden van een midwielaandrijving met de comfortabele rijeigenschappen van een achterwielaandrijving. Daarnaast kun je door de grote zwenkwielen obstakels gemakkelijk overwinnen.



Q500 F **VOORWIELAANDRIJVING**

De voorwielaandrijving combineert goede rijeigenschappen voor buiten met optimale wendbaarheid voor binnen. De stoel reageert direct op jou, je manoeuvreert makkelijk overal tussendoor. Doordat je een kleine beenhoek hebt, kun je overal dichtbij rijden en gaan transfers makkelijk.



QUICKIE

COMFORTABEL RIJDEN

FTSS, ALLE WHEEL SUSPENSION



COMFORTABEL RIJDEN - FULL TRACK SUSPENSION SYSTEM

De Q500 voor- en achterwielaandrijving zijn voorzien van het FTSS-veersysteem op de aandrijfwielen. Dit systeem absorbeert kleine maar ook grotere schokken. De aandrijfwielen zijn via een beweegbare brug met elkaar verbonden. Daardoor blijven de wielen ook in bochten en bij obstakels contact houden met de ondergrond, zelfs bij hoge snelheden. De kans op spinning wordt gereduceerd. Elke dag veilig en comfortabel!




HOOG RIJCOMFORT - ALL WHEEL SUSPENSION

Met de midwieler rijd je makkelijk obstakels van max. 75 mm op- en af. Daarnaast zorgt het all wheel suspension veersysteem, met vering op alle zes de wielen, dat je soepel en comfortabel overal naar toe kunt rijden. Je blijft controle en stabiliteit houden op stoepen en hellingen met het gepatenteerde anti-pitch-systeem, je stoel kantelt niet naar achteren en geeft je een extra veilig gevoel!

HYBRID VERING

Onafhankelijke vering op de wielen zorgt voor maximaal contact met de ondergrond.

	Q500 R	Q500 H	Q500 M	Q500 F
Aandrijving	Achterwiel	Hybrid	Midwiel	Voorwiel
Veersysteem	FTSS	Hybrid	All Wheel	FTSS
Vering op aandrijfwielen	Ja	Ja	Ja	Ja
Vering op zwenkwielen	Nee	Ja/Nee	Ja	Nee

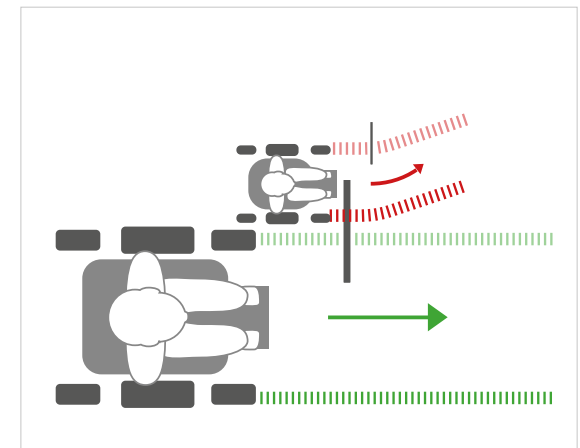

KOERSVAST OP ELK TERREIN


Lekker volgas rijden! Het (optionele) Gyro trackingsysteem detecteert en corrigeert elke kleine afwijking van de rijrichting die je hebt gekozen. Zo blijf je niet alleen veilig op het juiste spoor op een moeilijke ondergrond, je hoeft zelf ook minder te corrigeren. Dat maakt het rijden minder vermoeiend en je dag plezieriger.

SEDEO PRO

Hoogwaardig, instelbaar zitsysteem met een hoog zitcomfort en makkelijk te gebruiken en te bedienen. SEDEO PRO heeft een uitgebreid assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen, zitkussen, rugleuningen, hoofdsteunen en positioneringselementen. Zo kan er voor jou de meest optimale zitpositie gecreëerd worden, waarbij je goed stabiel zit met optimale ondersteuning op de juiste plaatsen.

SEDEO PRO

Klinische behoefte gebruiker	Gemiddeld tot hoog
Zitbreedte	380 - 560 mm
Zitdiepte	400 - 600 mm
Rughoogte	530 - 720 mm
Configureerbaar	Hoog
Rughoekverstelling elektrisch	130°
Rughoekverstelling relaxfunctie	90 - 150°
Kantelhoek	30° / 50°
Hoog/laag	300 mm
Hoog/laag en kantelverstelling	0-50°
JAY & WHITMYER opties	Ja
Max. gebruikersgewicht	160 kg

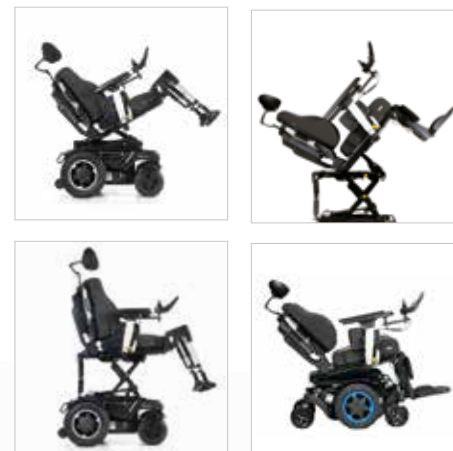

POSITIONERINGSOPTIES



Het SEDEO PRO zitsysteem heeft vele positioneringsmogelijkheden en kan ook nog eens gecombineerd worden met een uitgebreid scala aan WHITMYER hoofdsteunen en JAY zitkussens en JAY rugleuningen. Zo bieden we een oplossing voor elke klinische behoefte, en zorgen we voor de best mogelijke positionering.



DRUKONTLASTING

De biomechanische rughoekverstelling ondersteunt je effectief bij drukontlasting en zorgt gedurende de hele dag voor een optimale positionering; de hele dag goed zitten! De rughoekverstelling gaat altijd samen met een lengtecompensatie van 100 mm.



EENVOUDIGE TRANSFERS

Makkelijk je rolstoel in- en uitkomen. Het SEDEO PRO zitsysteem is voorzien van wegzwenk- of opklapbare armsteunen en wegzwenkbare beensteunen. De voetplaat kan bovendien helemaal tot de grond zodat je ook staand een transfer kunt maken. Optioneel zijn de transferhendels, voor extra ondersteuning bij het opstaan. Dat is handig!



ZELF OVERAL BIJ KUNNEN

De hoog/laag- en kantelverstelling zorgen ervoor dat je overal makkelijk bij kunt. Met een zithoogte van slechts 415 mm rijd je makkelijk onder een tafel of in een aangepaste auto. Een onafhankelijk leven!



MEER ONDERSTEUNING

Heb je behoefte aan meer zijwaartse ondersteuning of extra steun aan de lage rug? Dan is het SEDEO PRO rugkussen spanbanden flexibel met instelbare spanbanden en laterale ondersteuning een goede optie voor jou. Goede positionering en hoog zitcomfort!

CONTROLE MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

**Met geavanceerde technologie je omgeving effectief aansturen:
bij de Q500 bepaal je niet alleen hoe je je rolstoel bedient, maar
stuur je ook je telefoon, laptop of tablet en andere apparaten
aan met infrarood- of bluetoothfunctie aan.**



VR2 & R-NET

GEAVANCEERDE JOYSTICK

Met de Q500 heb je keuze uit een betrouwbare VR2 bediening of een superieure R-net bediening. Een groot, goed leesbaar HD-scherm en makkelijk te bedienen knoppen, zorgen voor een intuïtieve bediening.

CONNECT

Met de geïntegreerde infraroodfunctie stuur je je omgeving effectief aan. Home entertainment systemen, tv's, dvd-spelers, docking stations – je bedient ze allemaal eenvoudig met je joystick.

BLUETOOTH & IDRIVE

Met deze handige optie stuur je ook je telefoon, computer, tablet en andere bluetooth- en i-apparaten aan. Je kunt maximaal vier apparaten verbinden en aansturen.

QUICKIE'S GEPATENTEERDE TOEWIJSBARE-KNOPPEN-TECHNOLOGIE

Met de gepatenteerde toewijsbare-knoppen-technologie van QUICKIE verander je de functie van elke knop/schakelaar op je bedieningskast. Ook kun je een tweede (lang indrukken) functie toewijzen aan een knop/schakelaar. Zo heb je snel en makkelijk toegang tot de functies die je veel gebruikt – zonder dat je je joystick hoeft te gebruiken. Altijd handig!



SWITCH-IT & LINK-IT[®]

INNOVATIEVE BEDIENINGEN


Snel en makkelijk met de geheugenfunctie naar elke gewenste zitpositie? Met de 5-Switch box stuur je de vijf voorgedefinieerde zitfuncties eenvoudig met een druk op de knop aan.

ALTERNATIEVE BEDIENINGSOPTIES

Wanneer rijden met een joystick voor jou niet de beste optie is, dan kun je met de alternatieve bedieningen van Switch-IT de instellingen en rijprestaties van je rolstoel ook volledig bedienen. Een onafhankelijk leven!

LINK-IT

Het universele Link-IT bevestigingssysteem zorgt daarnaast dat de alternatieve bedieningen optimaal gepositioneerd worden met een strak design en fit.

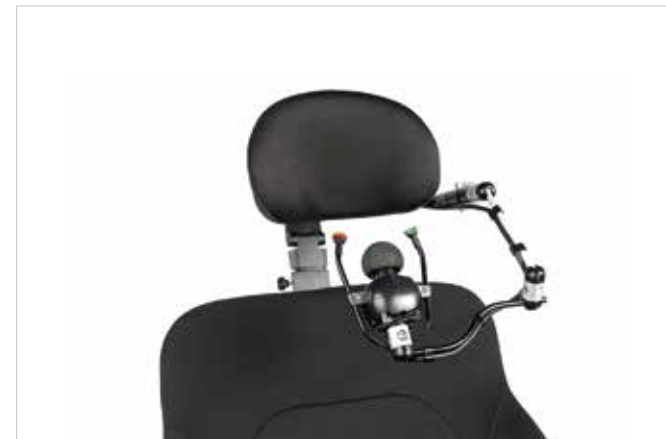



ONDSCHIEDEND DESIGN

Met de Q500 hebben we design naar een nieuw niveau getild. De mat zwarte basis in combinatie met de stijlvolle bekleding zorgt voor een modern en slank design.

EENVOUDIG PERSONALISEREN

Je kunt bij de Q500 kiezen uit 7 opvallende accentkleuren - een mooi contrast met de mat zwarte basis. Wil je eens wat anders? Dan vervang je gewoon de gekleurde inlays. Welke kleur kies jij?





Q500M

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
De Q500 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.



EDUCATION
IN MOTION

built4me



www.SunriseMedical.nl