

# Q400<sup>®</sup> SERIEN

## MED SEDEO LITE



Q-serien  
Elrullstolar

Advanced engineering. Customised for you.



Q400 M



Q400 F

# ÖVERSIKT Q400-SERIEN

---

Med ett val av två chassin, det justerbara sittsystemet SEDEO LITE (inklusive JAY och WHITMYER) samt ett stort utbud av kontroller kan du skräddarsy din Q400 till att passa varje brukares individuella behov.



**Q400 MED  
SEDEO LITE**  
FRAMHJULSDRIFT



**Q400 MED  
SEDEO LITE**  
MITTHJULSDRIFT





# PRESTANDA FÖR BÅDE UTOMHUS- OCH INOMHUSBRUK

QUICKIE Q400 erbjuder fantastisk prestanda utomhus och samtidigt bra manövrerbarhet inomhus. Tillsammans med sittsystemet SEDEO LITE för brukare med låga till medium kliniska behov.



## CHASSI

Q400 M: Mitthjulsdrift

Q400 F: Framhjulsdrift

## SITTSYSTEM

SEDEO LITE

JAY & WHITMYER

## STYRSYSTEM

VR2 kontrollen

R-NET kontrollen

SWITCH-IT kontrollen

LINK-IT monteringsystem

## STIL

UTMÄRKANDE DESIGN och ett urval av färger

# VÄLJ CHASSI

## FRAM-, ELLER

## MITTHJULSDRIFT



Alla Q400-chassin erbjuder en fantastisk prestanda utomhus med kombinationen av 2-poliga motorer och stötdämpare av gummi som ger en bekväm körning. Med en hastighet på upp till 10 km/h och batterier upp till 80 AH.

|                            | Q400 M                                | Q400 F              |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Chassi                     | Mitthjulsdrift                        | Framhjulsdrift      |
| Svängradie                 | 560-630 mm                            | 735 mm              |
| Drivhjul                   | 13"                                   | 13" - 14"           |
| Länkhjul                   | 7"                                    | 9"                  |
| Max, Hastighet             | 10 km/h                               | 10 km/h             |
| Batteri                    | 50 Ah, 60 Ah, 80 Ah                   | 50 Ah, 60 Ah, 80 Ah |
| Max. backbredd             | 1100 mm                               | 1240 mm             |
| Max. säker lutning         | 8°                                    | 8°                  |
| Max. kantklättring         | 75 mm                                 | 70 mm               |
| Färger                     | 4 färger                              | 4 färger            |
| Max. räckvidd (iso 7176-4) | 40 km                                 | 40 km               |
| Sitthöjd (golv till sits)  | 415 mm med Tilt (med 60 Ah batterier) |                     |

Valet av chassi och därmed driftsystem påverkar hur stolen fungerar i olika situationer och miljöer. QUICKIE Q400 erbjuder två sorters chassin så att varje brukare kan välja det bästa alternativet utifrån dennes personliga preferenser, erfarenhet, kliniska behov, livsstils- och miljömässiga behov.

### **Q400 M** **Mitthjulsdrift**

Mitthjulsdriften erbjuder oöverträffad manövrerbarhet och kräver mindre yta än bak- och framhjulsdrift. Den har den mest kompakta vändradien och är mycket intuitiv att köra och kontrollera.



### **Q400 F** **Framhjulsdrift**

Chassit med framhjulsdrift erbjuder fantastisk utomhusprestanda och god manövrerbarhet inomhus samt bästa stabilitet i branta sluttningar. Kan kräva mer erfarenhet vid körning.



DRIFTSYSTEM

# Q400 M

## MITTHJULSDRIFT

QUICKIE Q400 med mitthjulsdrift kombinerar fantastisk manövrerbarhet utomhus med mycket god prestanda inomhus. Motorerna i kombination med fjädring på alla sex hjul och QUICKIE's anti-pitch teknologi tillsammans med en kompakt svängradie säkerställer en fantastisk körupplevelse.

### FANTASTISK MANÖVRERBARHET INOMHUS

Tack vare ett litet vändutrumme tar den sig enkelt genom smala dörrar, in i hissar och runt i små utrymmen. Tar sig också lätt in i och ut från rullstolsanpassade fordon samt under bord med låg sitthöjd från 415 mm.



# SUPERB PRESTANDA UTOMHUS

---



## FJÄDRING PÅ ALLA HJUL

Njut av en mjuk och stabil körning med QUICKIE's patenterade fjädring. Alla 6 hjulen har oberoende fjädring för att ta upp alla stötar och ojämnheter som kan uppstå under en tur. Ta dig över trottoarkanter på upp till 75 mm och nedför sluttning med en vinkel på upp till 8 grader.



## ANTI-PITCH TEKNOLOGI

QUICKIE's anti-pitch teknologi hindrar stolen att tippa framåt vid körning nedför kanter eller i nedförsbackar. Sitsens placering rakt ovanför drivhjulen ger bra väggrepp för bästa köregenskaper utomhus.



## NJUT AV OMGIVNINGEN

Med pålitliga 2-poliga motorer och hastigheter på 6 eller 10 km/h och val mellan 50, 60 eller 80 Ah batterier som maximerar din räckvidd kan du slappna av och njuta av omgivningen.



**DRIFTSYSTEM**

# Q400 F

## FRAMHJULSDRIFT

Q400 F erbjuder en låg sitthöjd (golv till sits) på 415 mm för enkel åtkomst till rullstolsanpassade fordon, bord och mycket annat.

### **GOD MANÖVRERBARHET INOMHUS**

Q400 F med inbyggda länkhjulsarmar är responsiv och erbjuder god manövrerbarhet inomhus.





# FANTASTISK PRESTANDA UTOMHUS

Q400 F erbjuder en robust design kombinerat med avancerad fjädring på drivhjulen och pålitliga motorer som säkerställer en bekväm körupplevelse oavsett underlag.




## FJÄDRING PÅ DRIVHJULEN

Med stötdämpare av gummi får du en bekväm körupplevelse med Q400 F.



## NJUT AV OMGIVNINGEN

Med pålitliga 2-poliga motorer och hastigheter på 6 eller 10 km/h och val mellan 50, 60 eller 80 Ah batterier som maximerar din räckvidd kan du slappna av och njuta av omgivningen.

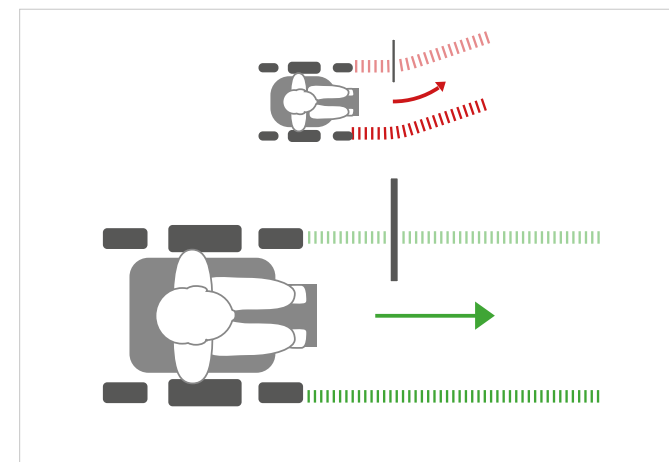

## HÅLL DIG PÅ BANAN MED GYROKONTROLL

Tillvalet Gyro-Tracking System upptäcker och korregerar automatiskt minsta avvikelse från din körriktning. Genom att tillhandahålla en in i minsta detalj korrekt drift, reducerar den de fysiska eller kognitiva åtgärder som normalt krävs för att du ska hålla dig på spåret – vilket ger en mindre krävande körning (särskilt vid bruk av specialkontroller).

## SITTSYSTEM



# SEDEO LITE

Sittsystemet SEDEO LITE är mycket bekvämt och ökar brukarens oberoende i vardagen. Den justerbara sittramen inkluderar en skena för ytterligare montering och ett brett utbud av tillbehör för milda till medium kliniska behov.

## SNABB OCH ENKEL JUSTERING

Alla justeringar av sittsystemet SEDEO LITE görs snabbt och enkelt med hjälp av självinstruerande skalor och endast ett verktyg.

Delar kan justeras eller ompositioneras för att skapa det bästa stödet och anpassas enkelt om behoven ändras.

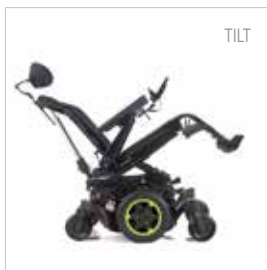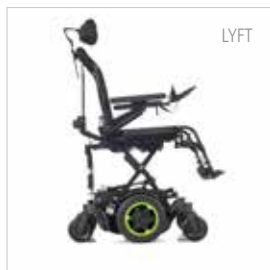

# JUSTERBART SITTANDE

---



## SLING BACK MED KOMFORT-DYNOR SOM TILLVAL

Sittsystemet SEDEO LITE erbjuder höjdjusterbar ryggklädsel med ställbara kardborreband samt ett utbud av komfortdynor som tillval. Här ingår två sittdynor och fyra ryggdynor med justerbara band och olika konturer för bästa komfort och positionering.

JAY dynor och ryggar är också kompatibla med SEDEO LITE för att täcka högre kliniska behov.

## UPPFÄLLBARA ARMSTÖD

De lätthanvända uppfällbara armstöden ger dig fritt överföringsutrymme. Du kan välja mellan en avtagbar eller en uppfällbar version. Alla kompatibla med 5 alternativ av armdynor.

## LÄNGDKOMPENSERANDE UNDANSVÄNGBARA BENSTÖD

Det längdkompenserade undansvängbara benstödet hjälper dig till den bästa positionen. Det finns också ett brett utbud av både undansvängbara benstöd och centermonterade benstöd. De finns både som manuella och i eldrivet uppfällbara versioner.

## INTEGRERADE HUVUDSTÖD

Det integrerade huvudstödsfästet är kompatibelt med SEDEO and WHITMYER huvudstöd.

## POSITIONERINGSELEMENT

Det finns många positioneringselement tillgängliga såsom laterala undansvängbara sidostöd, lårstöd eller knästöd. Alla positioneringselement är enkla att svänga ut eller så är de avtagbara. Den integrerade skenan erbjuder många alternativ för montering av olika positioneringselement.





# JAY & WHITMYER

## ALTERNATIV FÖR POSITIONERING

För att klara varje brukares kliniska behov och säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga sittsystem finns det ett stort urval av WHITMYER huvudstöd och JAY dynor tillgängliga till sittsystemet SEDEO LITE.



### WHITMYER HUVUDSTÖD

Skapat för att tillgodose en rad användarbehov med allt från behov av grundläggande stöd till mer avancerat sådant. WHITMYER huvudstöd finns i en rad olika former och storlekar för överlägsen huvudpositionering och komfort.

### JAY DYNOR OCH RYGGAR

Designad för bäckenstabilitet, trycksårsprevention och komfort, JAY dynor och ryggar kräver mycket lite underhåll, är väldigt anpassningsbara och finns i ett stort urval för att klara dina behov.





KONTROLLER OCH ANSLUTNING

## KONTROLL MED ETT KNAPPTRYCK

---

Kontrollera tekniken i din omgivning med Q400-serien och dess innovativa kontrollteknologi. Du kan inte bara styra din Q400 som du önskar utan även kontrollera din TV, hushållsmaskiner, telefoner och datorer.

**SEDEO**  
=LITE=



# VR2 & R-NET STYRSYSTEM

Varje Q400 kommer med det pålitliga VR2 och det innovativa R-Net med stora utbyggnadsmöjligheter finns som tillval.

## ANSLUT

Genom att använda integrerad infraröd teknologi kan du kontrollera omgivningen i din närhet såsom hemunderhållningssystem, TV-apparater, DVD:er, dockningsstationer och andra system - enkelt med din joystick.

## BLUETOOTH

Kontrollera din telefon, dator, surfplatta och andra Bluetooth-enheter med detta användbara tillval. Anslut och kontrollera upp till fyra enheter.

## QUICKIE'S PATENTERADE PROGRAMMERBARA KNAPPAR

Tack vare QUICKIE's patenterade programmerbara knappar kan du ändra funktionen på en knapp på din joystick till det kommando du önskar. Du kan också programmera en extra (långt tryck) funktion till knappar som ger dig snabbare, bekvämare och smidigare åtkomst till de funktioner du vanligen använder utan att behöva en joystick.



R-Net: en stor lättläst  
HD-display och intuitiv  
manövrering


# SWITCH-IT

## INNOVATIVA KONTROLLER

Bekväm tillgång till dina 5 programmerbara lägen med Ctrl+5 – en perfekt kombination med minnessystem. Det gör att du kan gå direkt till den funktion som du behöver med ett knapptryck.

### ALTERNATIVA DRIFTKONTROLLER

Om användning av en traditionell joystick inte är det bästa alternativet för dig, ger alternativa driftkontroller dig möjlighet att fullt ut uppleva din stols körkapacitet och fördelar.

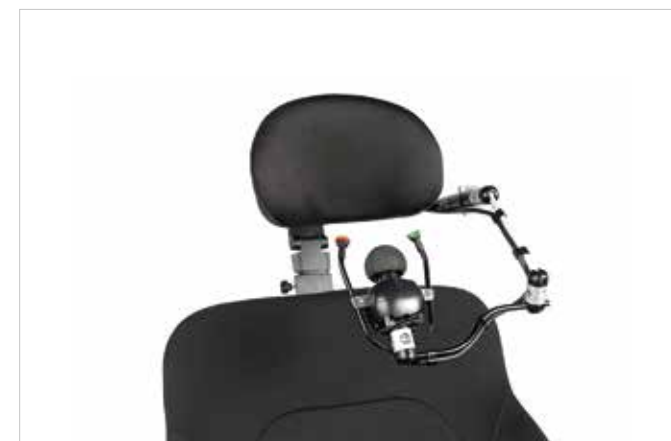

# LINK-IT MONTERINGSSYSTEM

Behöver du extra switchar eller specialkontroller? Inga problem, anslut enkelt genom att använda det universella monteringsystemet Link-It.

Genom att använda en kombination av tillgängliga moduler och delar, kan du skapa ett oändligt antal kombinationer för att underlätta dina behov. Det är inte bara enkelt att positionera, Link-It säkerställer också att den minimalistiska, rena designen hos din rullstol inte äventyras genom extra kontroller. Så oavsett om det är en extra handkontroll på armstödet, en tryckknapp på ryggstödet eller en switch på nackstödet du vill ha, bara länka ihop det.







# STIL

Q400 har en modern svart matt yta och kablar och komponenter är dolda. Klädseln är skräddarsydd.

## Vill du ha en förändring?

Q400-serien med SEDEO LITE, erbjuder också ett urval av 4 moderna färginlägg som kompletterar det svarta chassit. Byt bara ut inläggen. Enkelt!

 Silver



 Orange



 Svart



 Grön



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER / Q400 R - Q400 M - Q400 F MED SEDEO LITE

|                                       | Q400 M                     | Q400 F                     |                                   | Q400 M              | Q400 F              |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Max. brukarvikt</b>                | 136 kg                     | 136 kg                     | <b>Max. hastighet</b>             | 10 km/h             | 10 km/h             |
| <b>Sittbredd</b>                      | 385-510 mm                 | 385-510 mm                 | <b>Batteri</b>                    | 50 Ah; 60 Ah; 80 Ah | 50 Ah; 60 Ah; 80 Ah |
| <b>Sittdjup</b>                       | 410-560 mm                 | 410-560 mm                 | <b>Elektronik</b>                 | VR2, R-Net          | VR2, R-Net          |
| <b>Sitthöjd</b>                       | 415-490 mm                 | 415-490 mm                 | <b>Vändradie</b>                  | 560-630 mm          | 735 mm              |
| <b>Ryggstödshöjd</b>                  | 460-510 mm                 | 460-510 mm                 | <b>Max backbredd</b>              | 1100 mm             | 1240 mm             |
| <b>Total bredd</b>                    | 610-620 mm                 | 640 mm                     | <b>Max. säker lutning</b>         | 8°                  | 8°                  |
| <b>Total längd</b>                    | Max. 1130 mm               | Max. 1340 mm               | <b>Max. kantklättring</b>         | 75 mm               | 70 mm               |
| <b>Total höjd</b>                     | Max. 1400 mm               | Max. 1400 mm               | <b>Drivhjul</b>                   | 13"                 | 13"- 14"            |
| <b>Eldrivet bakåtlutande ryggstöd</b> | 85°-120°                   | 85°-120°                   | <b>Länkhjul, alternativ</b>       | 7"                  | 9"                  |
| <b>Tiltvinkel</b>                     | 30°/50°                    | 30°/50°                    | <b>Färger</b>                     | 4 färginlägg        | 4 färginlägg        |
| <b>Sittpositioner</b>                 | Tilt, Lyft & Tilt, Recline | Tilt, Lyft & Tilt, Recline | <b>Max. räckvidd (ISO 7176-4)</b> | Max. 40 km          | Max. 40 km          |
|                                       |                            |                            | <b>Rullstolens vikt:</b>          | Från 130 kg         | Från 130 kg         |



Sunrise Medical AB  
Neogatan 5  
435 41 Mölndal  
Tel.: 031-748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via [SunriseMedical.se](https://www.SunriseMedical.se).

