

Q100[®]/Q200[®]

Wyjątkowo kompaktowe rozwiązanie na co dzień



Wózki elektryczne
Seria Q

Indywidualne podejście do potrzeb i stylu życia użytkowników.



Q100 R



Q200 R

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



**ULTRAKOMPAKTOWY
WÓZEK ELEKTRYCZNY DO
CODZIENNYCH CZYNNOŚCI**

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY Q100 R/Q200 R

INTELLIGENTNE ROZWIĄZANIA zrywają z podziałem na wózki do użytku w domu lub poza nim. QUICKIE® Q100 R oraz Q200 R są wyjątkowo kompaktowe, dzięki czemu znakomicie sprawdzają się we wnętrzu, a przy tym tak stabilne, że na ulicy czują się jak w domu. Inteligentna konstrukcja i atrakcyjny wygląd w atrakcyjnej cenie - to nie tyle wózek w wersji podstawowej, co wózek z napędem elektrycznym, gotowy na wyzwania czekające użytkowników każdego dnia.

Wyjątkowo kompaktowy, na co dzień



Technologia Smart Base

Innowacyjne metody projektowe wykorzystane do precyzyjnego sprawdzenia sposobu, w jaki zmiana geometrii podstawy napędowej wpływa na wydajność jazdy, pozwoliły na opracowanie PRAWDZIWIE uniwersalnego wózka z napędem.

Kompaktowe, zwrotne w pomieszczeniach

Wyjątkowo wąska podstawa od 540 mm i promień skrętu od 1600 mm. Proste, intuicyjne sterowanie gotowe na nagłe zwroty i życiowe zakręty.

Skuteczność poza domem

Przemysłane wymiary zapewniają możliwie najlepszą przyczepność i stabilność na ulicy. Dynamiczny akumulator 55 Ah pozwala wybrać się w trasę do 31 km.

Ułatwiony transport

Kompatybilny z DAHL do przewozu osób niepełnosprawnych i przetestowany zderzeniowo do użytku jako fotela podczas transportu. Wyjątkowo mały ciężar, 94 kg, sprawia, że podczas załadunku wózek wydaje się lekki jak piórko.

Stylowo praktyczne

Opływowe, minimalistyczne wzornictwo kontrastuje z eleganckim, czarnym korpusem. Możliwość dostosowania do własnych gustów za pomocą akcentów kolorystycznych w żywych kolorach

Tilt-in-space

Q200 R jest teraz dostępny z funkcją przechylenia siedziska w przestrzeni. Największa dostępna podstawa (580 mm), środek ciężkości 70 mm i przechylenie siedziska w przestrzeni pod kątem 22° sprawiają, że Q200 R jest najmniejszym na rynku wózkiem z napędem na tylną oś i możliwością przechylenia siedziska w przestrzeni.



WSZYSTKIE WÓZKI Z NAPĘDEM DO JAZDY PO DOMU I POZA NIM MUSZĄ SIĘ ZMIERZYĆ Z TYM SAMYM PROBLEMEM. TECHNOLOGIA SMART BASE TO SPOSÓB QUICKIE NA JEGO ROZWIĄZANIE.



Model Q100 R/Q200 R to nasza odpowiedź na wyzwanie stworzenia PRAWDZIWIE uniwersalnego wózka z napędem elektrycznym. Takiego, który będzie znakomicie manewrował w ciasnych pomieszczeniach, BEZ narażania na szwank stabilności i wydajności w jeździe poza domem. Ale jak uzyskać tak wyważony wózek?

Położ nacisk na dużą podstawę napędową, a natychmiast zaczną się problemy z manewrowaniem w ciasnych przestrzeniach. Zredukuj nadmiernie wielkość, a wózek stanie się niestabilny i straci przyczepność. Uzyskanie idealnej równowagi wymaga setek prób. I właśnie tak stworzyliśmy naszą TECHNOLOGIĘ SMART BASE.

Jest to INTELIGENTNA podstawa testowa, umożliwiająca szybką regulację szerokości, długości, wysokości kół i kółek antywywrotnych oraz położenia siedziska. Precyzyjne, drobne zmiany umożliwiły uzyskanie idealnej geometrii podwozia tego PRAWDZIWIE uniwersalnego wózka z napędem elektrycznym.

W efekcie powstały wózki QUICKIE Q100 R i Q200 R. Prawdziwie kompaktowe, podstawowe wersje wózków z napędem elektrycznym charakteryzujących się najwyższą przyczepnością, stabilnością, a nawet możliwością wjazdu na krawężniki o wysokości do 100 mm.

KOMPAKTOWE, ZWROTNE WE POMIESZCZENIACH

DOSTOSOWANE DO TWOJEJ PRZESTRZENI

Dom, kawiarnia czy centrum handlowe - wózki Q100 R i Q200 R odnajdują się równie dobrze w pomieszczeniach, jak i w drodze do nich. Wyjątkowo wąska podstawa i mały promień skrętu sprawiają, że nawet niewielka przestrzeń wyda się obszerna.



Q100 R: **540 mm**

Q200 R: **580 mm**

Wjeżdżaj tam, gdzie inni nie mogą

Precyzyjnie dobrana długość wózków oznacza, że modele Q100 R (1010 mm) i Q200 R (1070 mm) bez trudu mieszczą się w windach wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych miejscach o niewielkiej powierzchni, bez typowego w takich przypadkach narażania stabilności.

Nie zawężaj horyzontów

Masz już dość ścinania boków wózka i rysowania lakieru w zbyt wąskich futrynach? WYJĄTKOWO WĄSKA podstawa wózków Q100 R i Q200 R umożliwi Ci łatwy wjazd tam, gdzie inne wózki się nie zmieszczą, nawet w wąskie ścieżki czy między stoliki zatłoczonej kawiarni (dotyczy to szczególnie Q100 R z jego niewiarygodnie wąską podstawą o szerokości 540 mm).

Pokonuj najostrejsze wiraże dzięki bardzo małemu promieniowi skrętu wózków Q100 R/Q200 R. Bez trudu zawracaj w wąskich przejściach, kuchniach i innych miejscach o ograniczonej powierzchni, nie musząc przy tym wykonywać skomplikowanych manewrów



Kompaktowe, praktyczne, proste w obsłudze

Tylny napęd wózków Q100 R i Q200 R jest niezwykle intuicyjny. Obsługa układu sterowania jest tak oczywista, że użytkownik bez trudu poradzi sobie w najtrudniejszych sytuacjach.



Wypad na miasto?

Wózki Q100 R/Q200 R czują się na ulicy jak w domu. Starannie wypracowane kompaktowe wymiary zapewniają niezawodną przyczepność i stabilność na różnym podłożu, przy różnym nachyleniu, a nawet przy pokonywaniu krawężników.

SKUTECZNOŚĆ POZA DOMEM

MAŁY WÓZEK Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM NA DUŻE WYPRAWY

Podjazd bez wysiłku

Typowe wózki z napędem do jazdy w domu i poza nim nie radzą sobie najlepiej ze stromymi podjazdami, ale my mamy TECHNOLOGIĘ SMART BASE. Precyzyjne testy dowiodły, że podstawa o długości 1010 mm (Q100 R) oraz 1070 mm (Q200 R) zapewnia najlepszą stabilność, zapobiegając wywróceniu i zapewniając bezpieczeństwo nawet podczas jazdy w górę stoku o nachyleniu do 8 stopni (Q200 R).



Pokonuj wszelkie przeszkody

TECHNOLOGIA SMART BASE nie tylko pomogła obliczyć wymiary kompaktowej podstawy, ale także idealnego położenia siedziska dla MAKSYMALNEJ PRZYCZEPNOŚCI kół napędowych. W połączeniu z zawieszeniem kół napędowych wózków Q100 R/Q200 R, daje to bezpieczną, płynną i dynamiczną jazdę, jakiej zazwyczaj oczekujemy od większych wózków elektrycznych.



SKUTECZNOŚĆ POZA DOMEM

MOC, Z KTÓRĄ DOJEDZIESZ NA MIEJSCE

Dynamiczne akumulatory 55 Ah w modelach Q100 R/Q200 R są stworzone do wyjścia na miasto czy dłuższych wyjazdów. Możliwość przejechania nawet 31 km bez doładowania pozwala zaglądać po drodze w różne ciekawe miejsca.

Krawężnik to żadna przeszkoda

Potrzebujesz małej pomocy przy pokonywaniu krawężników? Mechanizm łagodnego pokonywania krawężników w wózkach Q100 R/Q200 R pozwoli z małą prędkością, a nawet ze stania, pokonać krawężniki o wysokości do 10 cm (przy zachowaniu przez użytkownika siedzącej pozycji).

Dyskrecja w pakiecie

Element do pokonywania krawężników mieści się pod podnóżkami, nie zajmując miejsca przeznaczonego na stopy, jak w typowych wózkach, co ma szczególne znaczenie podczas siadania na wózek i wstawania z niego.





HOME

TRAIN

CAFE

LIBRARY

RESTAURANT

TRAM

SHOPPING

COFFEE

HOME

TOWARZYSZ PODRÓŻY

Przystosowane do transportu publicznego intuicyjne wózki Q100 R/Q200 R są tak kompaktowe i zwrotne, że wjazd nimi do tramwaju, autobusu czy pociągu nie stanowi problemu. Wolisz jeździć samochodem?

Modele Q100 R/Q200 R składają się i mieszczą w bagażniku lub zastępują fotel podczas podróży.



Idealne do wciągania

Q100 R waży zaledwie 94 kg (a Q200 R - 98 kg), dlatego oba wózki można łatwo wciągnąć do samochodu i z niego wyładować. Ale czy się zmieszczą? Całkowicie składane i demontowane podnóżki/podłokietniki pozwalają zmieścić wózek w większości samochodów czy przechowywać w domu.

Wózek przystosowany do transportu w autach (DAHL)

Wstępnie przygotowany i przetestowany dla systemu dokującego Dahl, możesz pewnie prowadzić swój pojazd z wygodnego Q100 R/Q200 R. Testy zderzeniowe zgodne z ISO 7176, możesz również transportować siedząc na wózku elektrycznym przytwierdzonym za pomocą czterech punktów mocowania.



USIĄDŹ I ODPOCZNIJ

Siedzisko Q100 R/Q200 R zaprojektowano z myślą o Tobie. Liczne ustawienia i 5-paskowe oparcie z regulacją naprężenia spełniają wymagania dotyczące sylwetki, a w razie pojawienia się nowych potrzeb, siedzisko można do nich dostosować.



- (1) Głębokość siedziska od 410 do 510 mm
- (2) Opcjonalna szerokość podnóżków od 380 do 490 mm
- (3) Kąt oparcia: 0°, 4°, 8° i 12°
- (4) Kąt siedziska: 0°, 3° i 6°



- (5) Szerokość siedziska od 420-540 mm, zredukowana do 380 mm z zestawem do zmniejszania
- (6) Osłona boczna od 0-50 mm
- (7) Opcjonalna wysokość siedziska od 450-490 mm
- (8) Opcjonalna wysokość podłokietników od 230 do 305 mm



KTÓRĄ PODSTAWĘ

Q100 R

Wyjątkowo kompaktowa podstawa.

Znakomita zwrotność w pomieszczeniach

Najmniejsza zajmowana przestrzeń, dzięki szerokości zaledwie 540 mm i długości 1010 mm, a do tego minimalny promień skrętu 1600 mm sprawiają, że Q100 R bez trudu manewruje nawet w najciaśniejszych przestrzeniach. Wyjście na miasto? Q100 R zapewnia stabilną jazdę po miejskich nawierzchniach, sprawdzając się idealnie przy codziennych wyjściach. Niewiarygodnie lekki, ważący zaledwie 94 kg, Q100 R daje się łatwo umieścić w samochodzie i z niego wyciągnąć.



Koła napędowe 12"
Kółka przednie 8"



1010 mm

540 mm

NAPĘDOWĄ WYBRAĆ?



Q200 R

Kompaktowa podstawa.
Sprawniejszy na zewnątrz.

Nieco większa długość - 1070 mm i szerokość 580 mm, a także większe koła napędowe 14 cali i przednie 9 cali sprawiają, że Q200 R zapewnia lepszą stabilność i przyczepność niż jego mniejszy brat. Ta nieco większa sprawność przyda się na nierównym terenie oraz przy pokonywaniu krawężników o wysokości do 10 cm.

Koła napędowe 14"
Kółka przednie 9"



1070 mm

580 mm

WZORNICTWO I WYGLĄD

ZAPROJEKTOWANY INTELIGENTNIE WYGLĄDA INTELIGENTNIE

Wyraź swoją opinię dzięki wyrafinowanej osłonie, napędowi i samonastawnym Q100 R/Q200 R w matowej czerni. Jego superstylizowane krzywe są równie eleganckie jak jego konstrukcja.


Wyraź siebie kolorem

Wyglądaj elegancko dzięki 4 akcentom w żywych kolorach, które dopełnią Twoją osobowość.



NASTĘPNA GENERACJA UNIKALNEJ TECHNOLOGII.

Aby kontynuować dążenie do innowacji w Q100 R i Q200 R, opracowaliśmy całą gamę nowych opcji i akcesoriów. Te nowe opcje przyciągają szerszą grupę użytkowników do korzystania z tego, co mają do zaoferowania modele Q100 i Q200.

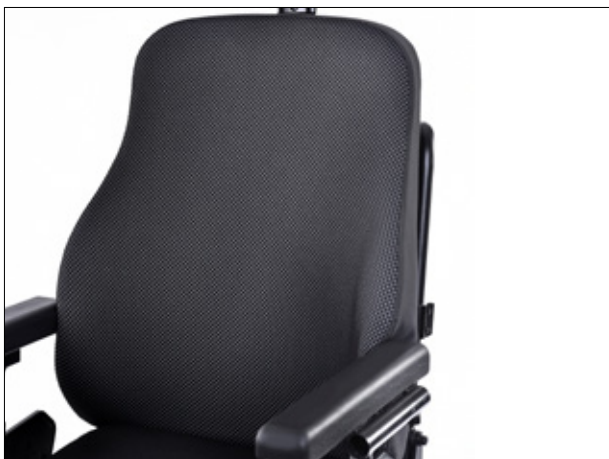

Komfortowe oparcie

Użyj nowego komfortowego oparcia SEDEO LITE, aby uzyskać lepsze wsparcie postawy i wygodną jazdę.

Tylko Q200 R



Tilt-in-space

Największa dostępna podstawa (580 mm), środek ciężkości 70 mm (3 cale) i przechylenie w siedziska przestrzeni pod kątem 22° sprawiają, że Q200 R jest najmniejszym wózkiem elektrycznym z napędem na tylną oś na rynku z przechylenie w siedziska przestrzeni.



Rama 420 mm lub 480 mm

Wybierz swoje siedzisko w oparciu o swój rozmiar dzięki wzrostowi od 380 mm do 540 mm Q100 R i Q200 R oferuje rozwiązanie dla jeszcze szerszego grona użytkowników.



Tylko Q100 R

Centralnie montowany podnózek

Nowe mniejszy centralnie montowanych podnózek zmniejsza promień skrętu o 100 mm, dzięki czemu wózek jest jeszcze bardziej intuicyjny w manewrowaniu w pomieszczeniach bez uszczerbku dla wydajności na zewnątrz.



Gyro

Bądź na bieżąco z żyroskopową kontrolą trąkci. System śledzenia automatycznie wykrywa i koryguje najmniejsze odchylenie od Twojego kierunku jazdy.



Elektrycznie odchylane oparcie

Elektrycznie odchylane oparcie jest idealne, gdy chcesz niezależnie dostosować swoją pozycję, aby się zrelaksować.



Silniki 10 km/h

Większe możliwości działania w terenie oznaczają, że Q100 R/Q200 R może zajeżdżać jeszcze dalej niż wcześniej.



Opcje niższej wysokości siedziska

Niższe opcje wysokości siedziska 420 mm ułatwiają dostęp do WAV lub manewrowanie pod stołami.



Światła i kierunkowskazy

Nowe opcje ze światłami i kierunkowskazami. Skorzystaj z naszych nowych opcji w ciągu dnia i w nocy.



R-Net

Doskonały zaawansowany joystick R-Net z dużym, czytelnym wyświetlaczem HD i prostymi w obsłudze przełącznikami łopatkowymi pozwala na intuicyjną obsługę.



Sterowanie dla opiekuna

Sterowanie przez opiekuna ułatwia mu sterowanie wózkiem z łatwością i większą pewnością.



Elektryczny i manualnie podnoszony podnóżek

Wybierz z szerokiej gamy podnóżków od 70° do 80°; ciesz się manulanie lub elektrycznie podnoszonym podnóżkiem.



Sztywna płyta siedziska

Wybierz siedzisko z zawieszeniem tapicerkowym dla wygody lub sztywną płytę siedziska, aby ustabilizować pozycję siedzenia.



Poduszki JAY

Zaprojektowane z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i komforcie, poduszki i oparcia JAY są łatwe w utrzymaniu i można je w dużym stopniu dostosować do indywidualnych potrzeb.



Zagłówki Whitmyer

Na zamówienie dostępna jest szeroka gama zagłówków Whitmyer, mamy zagłówek spełniający potrzeby kliniczne każdego użytkownika.

Dane techniczne / Q100 R - Q200 R

	Q100 R	Q200 R		Q100 R	Q200 R
Maks. waga użytkownika	125 kg	136 kg	Średnica zawracania	1600 mm (1500 mm z centralnie montowanym podnóżkiem)	1700 mm
Szerokość siedziska	380 - 540 mm	380 - 540 mm	Maks. nachylenie	6°	8°
Głębokość siedziska	410 - 510 mm	410 - 510 mm	Maks. wys. krawężnika	75 - 100 mm (z elementem do pokonywania krawężników)	
Wysokość siedziska	od 450 mm	od 450 mm	Koła	12" koła napędowe; 8" koła przednie	14" koła napędowe; 9" koła przednie
Wysokość oparcia	500 or 570 mm	500 or 570 mm	Opcje kolorystyczne	4 kolory: czerwony, niebieski, zielony, czarny	
Kąt oparcia	0° do 12° (manualna)	0° do 12° (manualna)	Maks. zasięg (ISO 7176-4)	do 31 km	do 31 km
Szerokość całkowita	540 mm	580 mm	Waga wózka	od 94 kg (z akumulatorami 55 Ah)	od 98 kg (iz akumulatorami 55 Ah)
Długość całkowita	1010 mm	1070 mm	Crash test	Tak - zatwierdzony do transportu w samochodzie (ISO 7176-19). Załącznik: 4 punkty mocowania z 2 podwójnymi paskami z tyłu i 2 pojedynczymi paskami z przodu. Zabronione jest stosowanie pasów montowanych na stałe. Łatwość dostępu i zwrotność w pojazdach zależy od	
Całkowita wys. po złożeniu	640 mm	680 mm			
Stały kąt nachylenia	0° - 6°	0° - 6°	Transport bez użytkownika	Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)	
Maks. prędkość	6 km/h	6 lub 10 km/h	Przeznaczenie i środowisko	Dla użytkowników z ograniczoną mobilnością; produkt do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Klasa wózka - B	
Akumulatory	55 Ah	55 Ah			
Elektronika	R-Net, VR2	R-Net, VR2			



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0