



EASyS Modular S



Cadeiras de PCI



EASyS Modular S

Cadeira postural basculante e dobrável, com apoio de cabeça

Easys Modular S é a solução ideal para crianças com uma **maior necessidade de posicionamento**, graças aos seus suportes pélvicos, apoios de braços de série e o seu encosto baixo regulável em altura que permite instalar **3 modelos diferentes de apoios de cabeça Thomashilfen para um suporte de cabeça ótimo e também compatível com a vasta gama de apoios de cabeça da Whitmyer.**

O seu ângulo de **basculação, desde -10° até 35°**, permite colocar a criança em posição de descanso para redução da pressão. Além disso, **o encosto é reclinável até 180°.**



Sistema de fechar compacto com sistema de bloqueio



Apoio de pés ergonômico

Suporte lateral

Easys Modular S incorpora suportes laterais, que oferecem sujeição a nível pélvico e desempenha a função de apoio de braços, oferecendo à criança um maior conforto na posição de relax.

Com amortecedores para absorver as irregularidades do terreno proporcionando à criança máximo conforto.



Suportes laterais e apoios de braços ajustáveis em altura e profundidade



Ajustável ao crescimento em largura e profundidade



A posição de relax com 140° de reclinación proporciona conforto extra

Características standard

- Estrutura de alumínio dobrável
- Altura do encosto mais baixo para a instalação do apoio de cabeça
- Tecido respirável, de secagem rápido e muito acolchoado para maior conforto, e disponível em 5 cores
- Assento basculante desde -10° a 35°
- Encosto reclinável até 180°
- Largura e profundidade do assento ajustáveis
- Altura do encosto e punhos ajustáveis
- Longitude da perna ajustável
- Rodas dianteiras giratórias com fixação
- Amortecimento das rodas
- Disponível em 2 tamanhos
- Com cesta, cinto pélvico de 4 pontos, suportes pélvicos e apoios de braços de série

Posicionamento e conforto

Para configurar a cadeira é necessário seleccionar um tipo de apoio de cabeça em função do tipo de suporte de cabeça requerido: Apoio de cabeça com suporte sub-occipital, com contorno ou ajustável. Todos os modelos oferecem um grande ajuste em altura, profundidade e assimetricamente. Além disso, existe a opção de seleccionar um adaptador para instalar outros apoios de cabeça.

Distintas opções de apoios de cabeça



Apoio de cabeça com suporte sub-occipital



Apoio de cabeça com contorno



Apoio de cabeça ajustável

Adaptador para outros apoios de cabeça

Adaptável às necessidades particulares da criança

Gama de acessórios de posicionamento

Easys Modular S é compatível com todos os acessórios da gama Easys. Para mais informação sobre estes acessórios, consulte a folha de pedido ou o catálogo da cadeira Jazz Easys.

Cambio de direção






O assento pode ser mudado de direção de forma muito fácil e rápida, permitindo a observação para a frente e para trás



5 cores para os laterais

Especificações técnicas

19 a 30 cm (Modular 1)
27 a 38 cm (Modular 2)

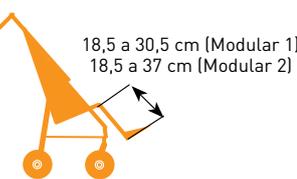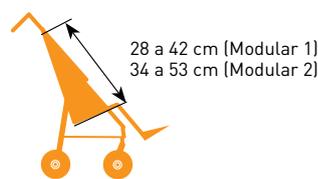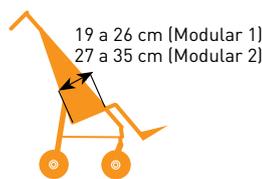

90 a 180°

-10 a 35°



59,5 cm (Modular 1)
69 cm (Modular 2)



114 cm (Modular 1)
120 cm (Modular 2)



99,5 cm (Modular 1)
107 cm (Modular 2)



35 kg (Modular 1)
40 kg (Modular 2)



18,6 kg (Modular 1)
21,9 kg (Modular 2)

Modular 1

Modular 2

Modular 1

Modular 2

Largura de assento:	19 a 30 cm	27 a 38 cm	Largura total:	59,5 cm	69 cm
Profundidade do assento:	19 a 26 cm	27 a 35 cm	Altura total:	114 cm	120 cm
Altura do encosto*:	28 a 42 cm	34 a 53 cm	Comprimento total:	99,5 cm	107 cm
Altura do assento:	47 cm	46 cm	Dimensões dobrada:	85 x 59,5 x 60 cm	81 x 69 x 69 cm
Comprimento da perna:	18,5 a 30,5 cm	18,5 a 37 cm	Altura dos punhos:	71,5 a 117 cm	71,5 a 117 cm
Reclinação do encosto:	90 a 180°	90 a 180°	Rodas dianteiras:	7,1" (18 cm)	7,1" (18 cm)
Ângulo do apoio de pés:	78 a 100°	78° a 100°	Rodas traseiras:	10" (25 cm)	10" (25 cm)
Basculação do assento:	-10° a 35°	-10 a 35°	Peso máximo do usuário:	35 kg	40 kg
Tamanho do apoio de pés:	28 x 18 cm	32 x 21 cm	Peso assento:	8,8 kg	11 kg
Tamanho do apoio de braços:	23 x 12 cm	29 x 11 cm	Peso chassis:	9,8 kg	10,9 kg

* sem apoio de cabeça

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Testada para o transporte em veículos (Crash tested)

Aprovada para ser utilizada como assento durante o seu transporte num veículo. Para isso, é necessário adquirir como acessório os encaixes para o transporte em veículos.



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: + 34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



Rev.4- Janeiro 2019