


SEDEO LITE

JUSTERBART OCH
KONFIGURERBART
SITTSYSTEM





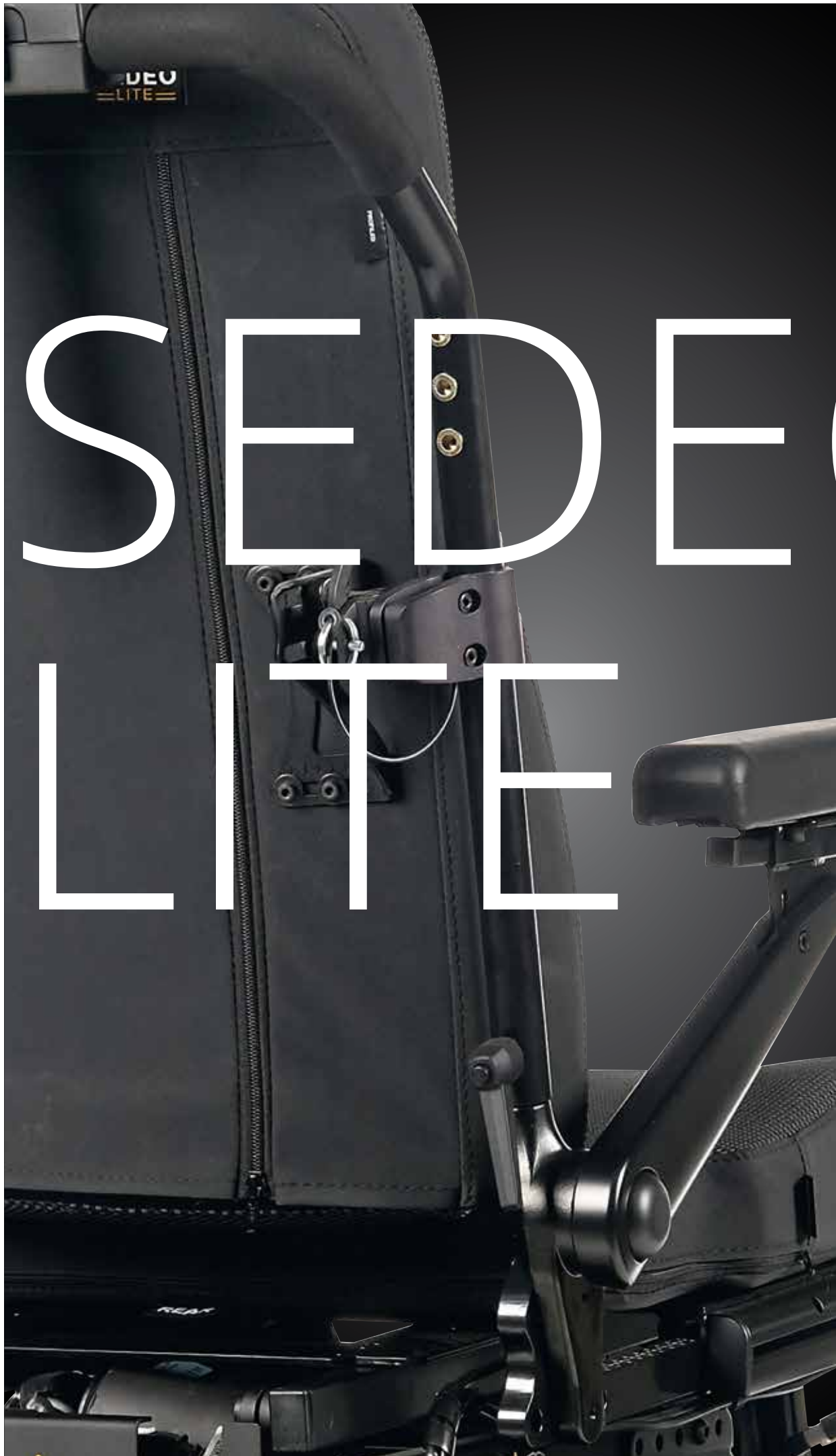

INNEHÅLL



PRESENTATION

SEDEO LITE Sittsystem	4
-----------------------	---

SEDEO LITE SITTSYSTEM

Sitsramen är snabb och enkel att justera	6
--	---

Konfigurerbar sitsram	8
-----------------------	---

SEDEO LITE RYGGDYNOR & SITTDYNOR

SEDEO LITE ryggdynor	12
----------------------	----

SEDEO LITE sittdynor	15
----------------------	----

SEDEO LITE TILLVAL

Huvudstöd	20
-----------	----

Switch-It & Link-It	21
---------------------	----

Positioneringsstöd	22
--------------------	----

Tillbehör	23
-----------	----

SEDEO LITE SITTSYSTEM

SEDEO LITE ÄR ETT MÅNGSIDIGT MODULÄRT SITTSYSTEM. DET ÄR DESIGNAT FÖR BRUKARE MED MILDA TILL MÅTTLIGA KLINISKA BEHOV SOM BEHÖVER ETT MYCKET JUSTERBART SITTSYSTEM.

Sittsystemet SEDEO LITE erbjuder en höjdjusterbar rygg med justerbara kardborreband och ett stort utbud av bekväma dynor. Det finns också ytterligare positioneringsalternativ för bättre komfort och positionering. Dessa kan enkelt anpassas för olika användare.

- Dynor för sits och ryggstöd
- Armstöd, sidoskydd och bålstöd
- Benstöd och knästöd
- Huvudstöd

För att kunna erbjuda avancerade positioneringsmöjligheter ingår både JAY™ och WHITMYER™ som tillbehör. SEDEO LITE har en modulär design och levererar en ny nivå av funktionalitet, komfort och design. Sittsystemet kan enkelt ändras till en brukares förändrade behov.

TILLSAMMAN
Q-SERIE

Q400

F
M
R



JAY
Superior Clinical Seating

WHITMYER



MANS MED
IEN

Q500
M



Sittsystemet SEDEO PRO är bekvämt och ökar självständigheten i vardagen. Sitsramen är justerbar, konfigurerbar och passar ett stort urval av elrullstolar från Q-serien.



SEDEO LITE

SNABB OCH ENKEL ATT JUSTERA

ATT SKAPA DEN PERFEKTA SITTSTÄLLNINGEN ÄR ENKELT

- Total flexibilitet / mycket justerbar
- Intuitiv att justera: Endast ett verktyg behövs (5 mm insexnyckel) plus att det finns en självförklarande mätskala
- Delar kan justeras steglöst, vändas, ompositioneras och breddas för att skapa det bästa stödet.
- Justeringar kan göras med brukaren i stolen. Lättillgängligt också från sidan.



1 = Sittbredd: 38,5 - 51 cm

2 = Sittdjup: 41 - 56 cm

3 = Ryggstödshöjd: 46 - 51 cm

SEDEO LITE

SITSRAM

TACK VARE MÖJLIGHETERNA ATT STÄLLA IN SITTBREDD OCH SITTDJUP ÄR SEDEO LITE SITSRAM IDEALISK ÄVEN VID ÅTERANVÄNDNING.


Sittbredd sitsplattan är justerbar 38,5 - 51 cm



Sittdjup steglöst justerbart 41 - 56 cm



Eldriven bakåtlutning/tilt
0° till 30° // -5° till 25° // 0° till 50°

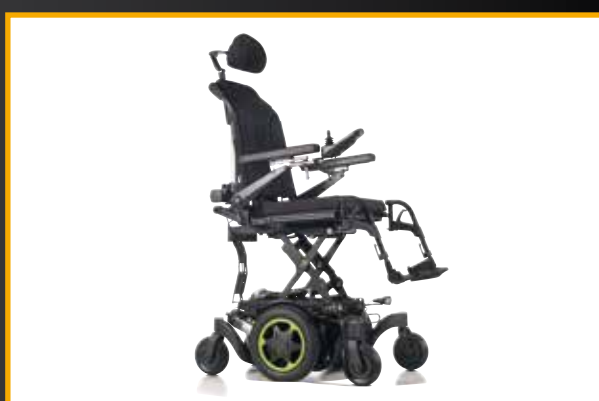

Sitslyft
30 cm

KONFIGURERBAR SITSRAM

4

RYGGAR ATT VÄLJA MELLAN



Ryggstöd manuellt ställbart (med verktyg).

86°, 90°, 94°, 98°, 102° och 106°



Ryggstöd manuellt ställbart, via vårdare ställbart och eldrivet ställbart.

85°-120°




Fällbar rygg, smidigt vid transport



4

FYRA ARMSTÖD MED FLERA ALTERNATIVA ARMSTÖDSDYNOR OCH SIDOSKYDD

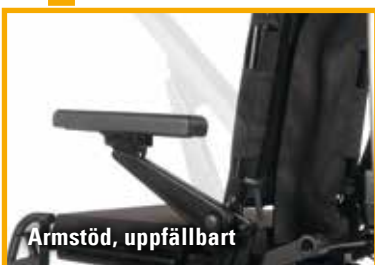

Armstöd, uppfällbart



Armstöd, tillbakalutande*, uppfällbart

*följer med ryggstöd vid bakåtlutning



Armstöd, sitsmonterat, SEDEO LITE

GENOM ATT VÄLJA KOMPONENTER FRÅN ETT STORT
UTBUD AV TILLVAL KAN DU KONFIGURERA SITTSYSTEMET SEDEO LITE
TILL ATT PASSA PERFEKT. INGA KOMPROMISSER.

3

TRE CENTERMONTERADE BENSTÖD MED ALTERNATIVA VADSTÖD



Benstöd, centermonterat, eldrivet




Benstöd, fast centermonterat




Benstöd centermonterat, justerbart
med verktyg

6 SEX SIDOSVÄNG- BARA BENSTÖD MED ALTERNATIVA VADSTÖD

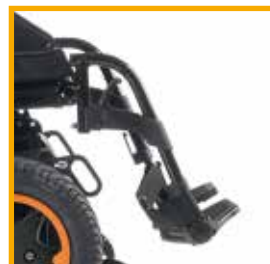

SEDEO LITE, sidesvängbart
benstöd, 70°

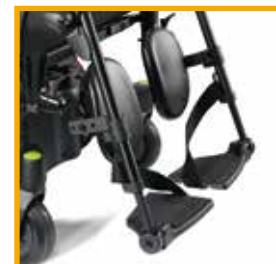

SEDEO LITE, sidesvängbart
benstöd, manuellt uppfällbart



UNI, sidesvängbart
benstöd, 80°



SEDEO PRO, sidesväng-
bart benstöd, 70°



SEDEO PRO, sidesvängbart
benstöd, eldrivet uppfällbart



SEDEO PRO, sidesvängbart
benstöd, manuellt uppfällbart



Armstöd, fällbart bakåt, sitsmonterat

KONFIGURERBAR SITSRAM

4

FYRA TYPER AV ARMSTÖD



Armstödstyna Integralskum 38 cm



Armstödstyna Integralskum 40 cm
Bekvämt stöd tack vare insidans P-form. Detta skapar extra stöd vid vila.



Armstödstyna Comfort 40 cm polstrad.
Mjukare material ger extra komfort.



Armstödstyna Hemiplegi med integralskum



1

ETT SIDOSKYDD



Sidoskydd

7


SJU TILLBEHÖR TILL SIDOSVÄNGBARA BENSTÖD



Vadstöd, integralskum



Fotplatta, vinkeljusterbar

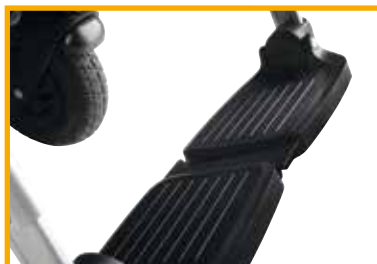

Fotplattor, sammankopplade



Hälband



Vadstöd polstrat



Knästöd, integralskum



Vadband




SEDEO LITE

RYGGDYNOR



VÄLJ RYGG EFTER ANVÄNDARENS BEHOV				
	MÅL	Främja rörlighet	Hjälpa att bevara hållningen	Öka bålstabilitet
PROFILERAD		● ● ●	●	●
PROFILERAD JUSTERBAR		● ●	● ●	● ●
DJUP KONTUR PASSIV JUSTERBAR		●	● ●	● ● ●
DJUP KONTUR AKTIV JUSTERBAR		● ●	● ●	● ● ●

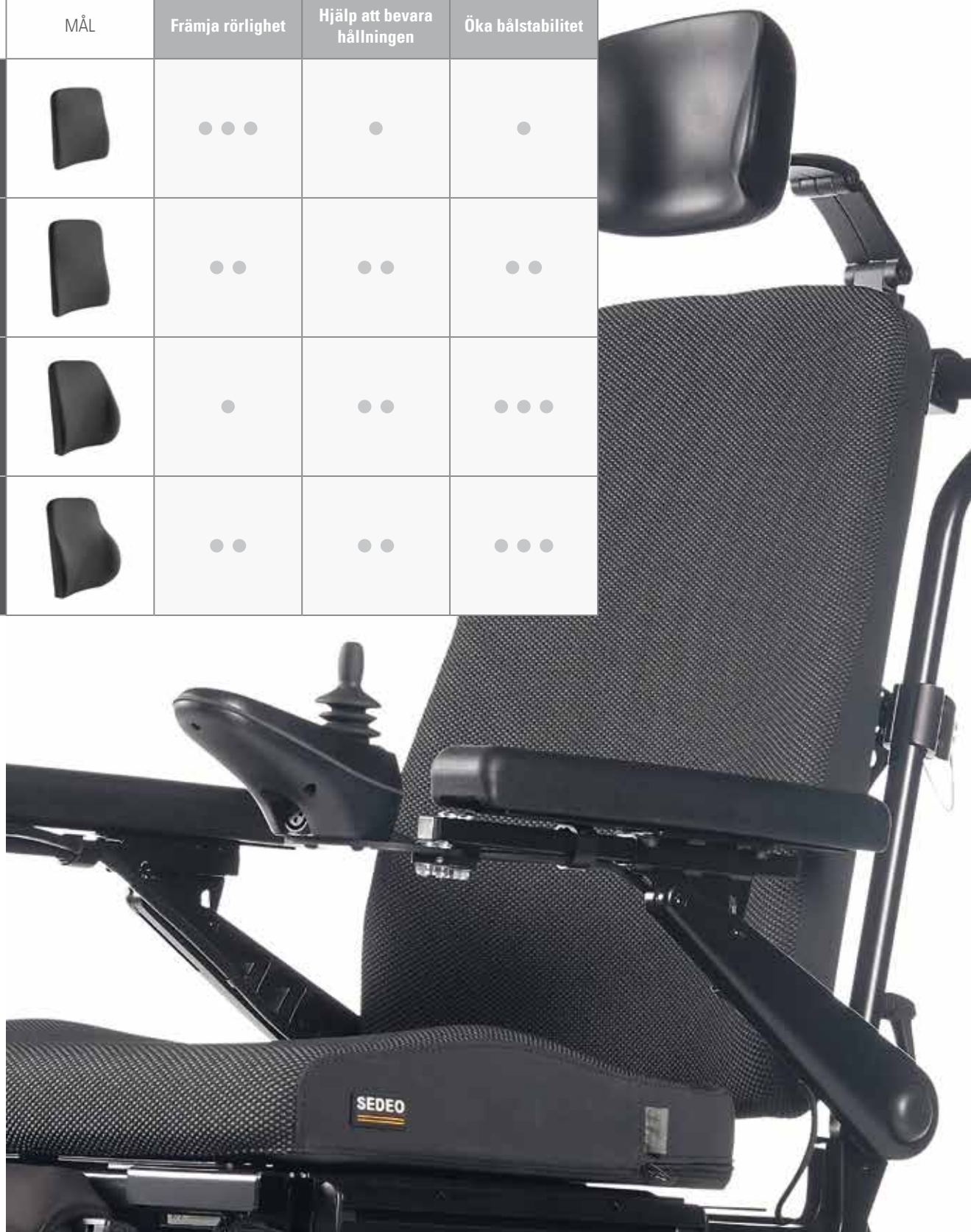

SEDEO LITE RYGGDYNOR

PROFILERAD



Produktegenskaper:

- Rundad bas, med visst stöd för bålen och ett lager skum för ökad komfort
- Kan användas tillsammans med separata bålstöd
- Comfort överdrag

Klinisk tillämpning:

- För brukare med en stabil hållning
- För brukare som vill ha rörelsefrihet

STORLEKAR

HÖJD	BREDD					
cm	38,5	41	43,5	46	48,5	51
50						
57						

PROFILERAD, JUSTERBARA BAND



Produktegenskaper:

- Rundad bas, med visst stöd för bålen och justerbara band som följer ryggradens kontur
- Individuellt justerbar
- Kan användas tillsammans med separata bålstöd
- Comfort överdrag

Klinisk tillämpning:

- För brukare med en stabil hållning
- För brukare som behöver visst justerbart stöd av ryggraden eller bäckenet

STORLEKAR

HÖJD	BREDD					
cm	38,5	41	43,5	46	48,5	51
50						
57						

SEDEO LITE

RYGGDYNOR

DJUP KONTUR PASSIV, JUSTERBARA BAND



STORLEKAR

HÖJD	BREDD					
cm	38,5	41	43,5	46	48,5	51
50						
57						

Produktegenskaper:

- Rundad bas med justerbara band med möjlighet att följa och stödja ryggens kontur.
- Tillåter stabilisering av bäckenet
- Djupt sidostöd över ryggstödet totala höjd
- Individuellt justerbar
- Comfort överdrag, luftgenomsläppligt

Klinisk tillämpning:

- De individuellt justerbara remmarna stöder en upprätt ställning samt ger en stabil och ergonomisk sittposition
- För passiva brukare som behöver ett djupt sidostöd längs med ryggstödet totala höjd
- Individuellt justerbara band för att optimera stöd för bålen och ge korrigering/anpassning av mild postural deformitet

DJUP KONTUR AKTIV, JUSTERBARA BAND



STORLEKAR

HÖJD	BREDD					
cm	38,5	41	43,5	46	48,5	51
50						
57						

Produktegenskaper:

- Rundad bas med justerbara band med möjlighet att följa och stödja ryggens kontur
- Tillåter stabilisering av bäckenet
- Djupt sidostöd med fritt utrymme över skulderområdet
- Individuellt justerbar
- Comfort överdrag, luftgenomsläppligt

Klinisk tillämpning:

- De individuellt justerbara banden stöder en upprätt ställning samt ger en stabil och ergonomisk sittposition
- För aktiva brukare som behöver fritt utrymme runt skuldrorna
- Individuellt justerbara band för att optimera stöd för bålen och ge korrigering/anpassning av mild postural deformitet

SEDEO LITE

SITTDYNOR



VÄLJ SITTDYNA EFTER ANVÄNDARENS BEHOV					RISK FÖR TRYCKSÅR		
	MÅL	Främja rörlighet	Hjälpa att bevara hållningen	Öka bål-stabilitet	Ge tryck-fördelning	Minska risken för skjuvning	Minska deformation av mjukvävnad
SEDEO PROFIL		● ●	● ●	● ●	●	●	●
SEDEO SUPPORT		●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●

SEDEO PROFIL

BEKVÄMT SITTANDE



MED SIDOSTÖD




Produktegenskaper:

- Bekväm profilerad sittdyna med måttligt sidostöd och en fast platt bas
- Inkontinensöverdrag

Klinisk tillämpning:

- Brukaren har god kroppsbalans och behöver måttlig rörelsefrihet
- Brukaren behöver komfort och medium sidostöd
- Låg risk för trycksår och skjuvning
- Brukaren kan göra viktfordelningar och /eller överflyttningar på egen hand

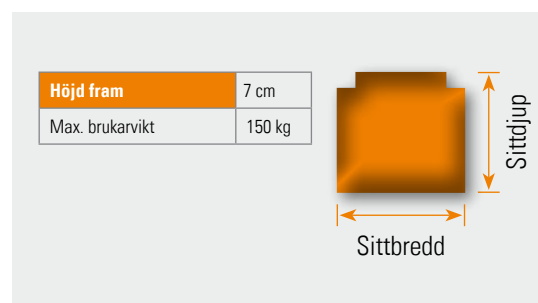

STORLEKAR

DJUP	BREDD									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

SEDEO SUPPORT

ANATOMISKT FORMAD

ANATOMISKT FORMAD KONTUR MED MJUKT TOPPSKIKT




Produktegenskaper:

- Anatomiskt formad kontur med mjukt toppskikt
- Fasta sidostöd och kontur för låren för optimal positionering
- Fast bas med tygband som förhindrar genom-sittning
- Inkontinensöverdrag

Klinisk tillämpning:

- Brukaren behöver maximalt stöd framåt/nedåt för att behålla hållningen/förhindras att kana ner
- Måttlig risk för trycksår
- Hjälper till att förhindra deformation av mjukdelar

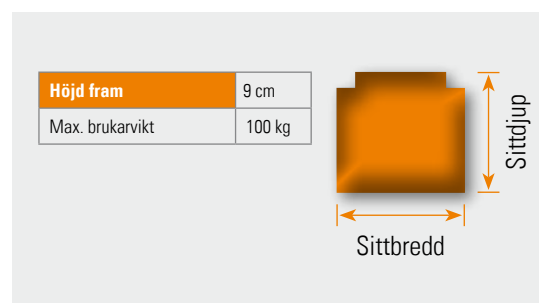

STORLEKAR

DJUP	BREDD									
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

JAY SITTDYNOR

LÄTTA ATT BESTÄLLA

DESSA JAY-DYNOR PASSAR BRA IHOP MED SEDEO LITE SITTSYSTEM

(För mer information om de kliniska tillämpningarna av dessa dynor hänvisar vi till till JAY-broschyren.)



JAY Balance



JAY J2



JAY J2 Deep Contour



JAY Xtreme Active



JAY Easy



JAY Soft Combi P

JAY J3 RYGGAR

J3 PRODUKTSORTIMENT...

... FINNS I ETT STORT UTBUD AV BREDDER OCH HÖJDER SOM VÄLJS FÖR ATT ÖVERENSSTÄMMA MED BÅLENS BREDD OCH HÖJD SAMT RULLSTOLENS BREDD, DETTA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT RYGGEN PASSAR BÅDE BRUKAREN OCH RULLSTOLEN.

Fyra olika djup

JAY J3 Ryggarna erbjuder fyra olika typer av konturdjup:
Standard Kontur (SC*) med 5 cm djup,
Mellan Kontur (MC*) med 8 cm djup, Djup Kontur (DC*)
& Rib Kontur (MDC*) med 15 cm djup.

MDC* & DC* Ryggarna finns också tillgängliga i en extra djup version med 18 cm djup.

Standard Kontur
Måttligt sidostöd



Mellan Kontur
Medium sidostöd



Djup Kontur, Extra djup
Fullt sidostöd



Rib Kontur, Extra Djup
Fullt sidostöd



*SC = Shallow Contour, MC = Mid Contour, DC = Deep Contour, MDC = Mid Deep Contour

PASSAR PERFEKT HUVUDSTÖD



SEDEO HUVUDSTÖDSDYNA

24 x 15 cm, överdrag är tillval



SEDEO HUVUDSTÖDSDYNA, JUSTERBAR

40 x 11 cm

WHITMYER®

FÖR ATT MÖTA VARJE BRUKARES KLINISKA BEHOV OCH FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT VI ERBJUDER BÄSTA MÖJLIGA SITTANDE FINNS ETT BRETT UTBUD AV HUVUDSTÖD FRÅN WHITMYER TILLGÄNGLIGA TILLSAMMANS MED SITTSYSTEMET SEDEO LITE.



LINX



LINX2



AXYS



AXYS Offset



Cobra XTRA Flip Back



PLUSH



PLUSH JUSTERBAR



Full integrering av
Whitmyer huvudstöd.

SWITCH-IT

INNOVATIVA KONTROLLER

Ett antal valfria specialinmatningsenheter från SWITCH-IT säkerställer att brukaren uppnår optimal kontroll över sin elrullstol.

Oavsett om det är en speciell joystick, en switch eller huvudstyrning du vill ha så kan systemet anpassas för att komplettera sittsystemet SEDEO LITE för att tillgodose alla behov.





LINK-IT

MONTERINGSSYSTEM

Genom att använda en kombination av tillgängliga moduler och stavar kan du skapa ett oändligt antal kombinationer för att passa till det du behöver.

Det är inte bara enkelt att positionera, Link-It säkerställer också att den minimalistiska rena designen av din rullstol inte förstörs av ytterligare kontroller. Så, oavsett om det är en extra styrenhet på armstödet, en knapp på ryggstödet eller en switch på huvudstödet, "just link it".

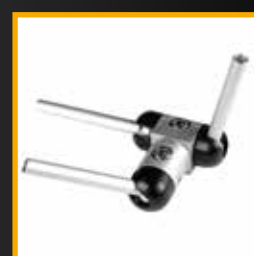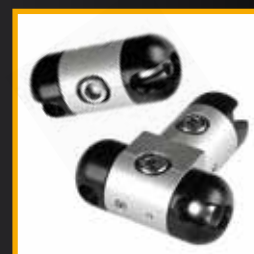

SEDEO LITE

POSITIONERINGSSTÖD

BÅLSTÖD



Storlekar:

- Kort dyna: 9 x 12 cm
- Lång dyna: 15 x 13 cm

ABDUKTIONSKLOSS



- Djup- och höjjusterbar
- Sidosvängbar

Storlek:

- Dyna: 7 x 19 x 10 cm

- Rekommenderas tillsammans med rygg profilerad med justerbara band
- Justerbar i djup, bredd, höjd och vinkel
- Smidig integrerad undansvängbar mekanism

KLINISK TILLÄMPNING/ TIPS FÖR SIDOSTÖD:

För brukare med reducerad balans i överkroppen eller som lutar tungt åt ena sidan p.g.a stroke. Kan användas för att stödja eller korrigera skolios för brukare med t. ex CP eller MS med hjälp av trepunktsstöd.

KNÄSTÖD



Storlekar:

- Liten dyna: 12 x 12 cm
- Stor dyna: 18 x 12 cm

POSITIONERINGSBÄLTE



- Justerbar i djup, bredd och höjd
- Sidosvängbar

- Bilbältesversion

SEDEO LITE

TILLBEHÖR

SIDOSVÄNGBAR JOYSTICK



- Justerbar i djup och höjd
- Sidosvängbar

Frigör handleden genom att svänga din joystick inåt.

BACKSPEGEL



BORD





Sunrise Medical arbetar med kontinuerlig produktutveckling. Följaktligen kan den aktuella produkten avvika från informationen i denna broschyr.

För ytterligare information kring specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via hemsidan.



Sunrise Medical AB

Neongatan 5

431 53 Mölndal

031-748 37 00

Fax: 031-748 37 37

post@sunrisemedical.se

www.SunriseMedical.se

