

Empulse R20

Liste de produits compatibles



Fauteuil roulant / modèle	Connexion	Fauteuil roulant / modèle	Connexion
Sunrise Medical		Meyra	
Breezy UniX ²	B	Service 3.600	B
Breezy PariX ²	B	Budget	B
Breezy BasiX ²	B	Avanti	B
Breezy BasiX ² Plus	B	Avanti Pro	B
Breezy RubiX ²	B	S3 Swing	B
Breezy RubiX ² Plus	B	Eurochair family	B
Breezy HeliX ²	B	Smart F & S	B
Breezy HeliX ² Comfort	B	Invacare*	
Breezy Ibis	C	Rea Clematis	B
Breezy Relax ²	B	Rea Azalea Family	B
Breezy Cirrus G5	B	Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	B
Breezy Cirrus G5 Onderstel	B	Action XT	B
Breezy Emineo	B	Rea Focus	B
Breezy Exigo 10 / 20 / 30	B	XLT	B
Breezy 250	B	Drive	
Breezy 300	B	Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	B
Quickie Life	A/B	Freetec	B
Quickie Life i	A/B	Ecotec / Ecotec 2G	B
Quickie Life T	A/B	Rotec / Rotec XL	B
Quickie Life R	A/B	Vassilli	
Quickie Life RT	A/B	VARIO Plus	B
Quickie Easy 200	A/B	Bischoff & Bischoff	
Quickie Easy 300	A/B	S-Eco 300 / S-Eco 300XL	B
Quickie Neon ²	B	S-Eco 2	B
Zippie Youngster 3	B	Pyro Light Optima / Pyro Light Optima XL	B
		Pyro Light / Pyro Light XL	B
		Pyro Start / Pyro Start Plus	B
		BX 11	B

Remarque: la liste ci-dessus indique les modèles de fauteuil roulant sur lesquels le R20 peut être monté. Cependant, l'année de fabrication, la forme du cadre, les tubes entre les flancs latéraux du châssis et les accessoires ont une influence sur le montage. C'est pourquoi il est important d'essayer et de le tester pour obtenir une certitude à 100%! Ou demandez au fournisseur des conseils. La vue d'ensemble de la compatibilité montre uniquement les fauteuils roulants avec une clause signée. Sur la page suivante, vous trouverez des informations sur la connexion. * Seulement avec frein à tambour ** Docking B, 30 mm avec clamp (art. no 07501106) *** Longues poignées de poussée requises en raison de l'unité de commande **** Uniquement avec anti-basculement, sans couvercles et boîte d'accessoires.

Empulse R20

Liste de produits compatibles



Fauteuil roulant / modèle	Connexion	Fauteuil roulant / modèle	Connexion
DIETZ		Vermeiren*****	
AS 01**	B	D100, D100 (30°)	B
Caneo series (incl. XL)	B	D200, D200 (30°)	B
Tomtar Basic / Basic+	B	V200D	B
Serena II**	B	V300D, V300D (30°), V300DL	B
PRO ACTIV***		V500 (30°)	B
TRAVELER (Classicline, 4all Ergo, 4you Ergo)	B	Eclips+, Eclips+ (30°)	B
BUDDY (D3, D4, D7)	B	Eclips X4, Eclips X4 (30°)	B
SPEEDY (A1, A2, F4, 4all, 4you, 4all Ergo, 4teen)	B	Bobby	B
ALU REHAB		Inovys II, Inovys II-E	B
Netti 4U (CE, CE Plus, CED, Base)	B	REHATEC	
Netti III (HD, XHD & Dynamic functions (SW 350 – 600 mm))		Galileo (maat 1,2,3,4,5)	
Netti S (SW 350, 400 mm)	B	Sunny (maat 2)	B
Netti Dynamic S (SW 350, 400)	B	Mika (maat 1)	B
BEROLLKA****		Hoggi	
F1 (frame diameter 30 mm)	B	SHERPA	B
B2 (frame diameter 30 mm)	B	SWINGBO-VTI, SWINGBO-VTI XL	A
RACER (frame diameter 30 mm)	B	SWINGBO-2, SWINGBO 2 XL	A
TRAXX / TRAXX TT (frame diameter 23 mm)	B	BINGO-Evo	B
TOURER / CRUISER (frame diameter 25 mm)	B	SWINGBO-2, SWINGBO 2 XL	B
SLADE SLT / AR	B	DURO, DURO CROSS	B
SPRINT SLT / AR	B	Etac	
BASIC	B	Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6	E
FINESS	B	M 100	B
Filou	B	Crissy	B
Junior 2 SLT / AR	B	Prio, Prio 3D	B
Findus	B	SORG	
Little AR / SLT	B	Vector	B
LUKE AR / SLT	B	Vector BSA	B
		Jump alpha	B
		Jump beta Sport	B
		Jump beta BSA	B
		Tiltu Vario	B

Remarque: la liste ci-dessus indique les modèles de fauteuil roulant sur lesquels le R20 peut être monté. Cependant, l'année de fabrication, la forme du cadre, les tubes entre les flancs latéraux du châssis et les accessoires ont une influence sur le montage. C'est pourquoi il est important d'essayer et de le tester pour obtenir une certitude à 100%! Ou demandez au fournisseur des conseils. La vue d'ensemble de la compatibilité montre uniquement les fauteuils roulants avec une clause signée. Sur la page suivante, vous trouverez des informations sur la connexion. * Seulement avec frein à tambour ** Docking B, 30 mm avec clamp (art. no 07501106)*** Longues poignées de poussée requises en raison de l'unité de commande **** Uniquement avec anti-basculement, sans couvercles et boîte d'accessoires.

Empulse R20

Information sur la connexion

Le support de poussée pliable R20 s'adapte à tous les fauteuils roulants manuels répondant aux spécifications suivantes:

Largeur d'assise 320- 600 mm

Hauteur du siège arrière > 380 mm

Poignées de poussée longues ou réglables en hauteur pour fixer le panneau de commande- espace libre minimum 10 mm.



A - Version à vis:

Nécessite un trou horizontal existant dans le tube de cadre. Généralement le cas avec les fauteuils roulants actifs de Sunrise Medical (Easy 200/300, Life, Life i, Life T, Life R, Life RT). Pour les fauteuils roulants de la famille X (PariX², BasiX², BasiX² Plus, RubiX², RubiX² Plus, HeliX² & HeliX² Comfort), remplacez que les pinces du croisillon.

D - Version à clamp:

Pour Roxx et Canto Nxt.
Article n °: 07501120




B - Version à clamp:

Est fixé au tube de cadre inférieur. Généralement appliqué à tous fauteuils roulants manuels sauf le Breezy Ibis et les fauteuils actifs. Fauteuils standards avec par exemple les fauteuils roulants de la famille X.



C - Version à clamp pour le Breezy Ibis:

Est serré au milieu du tube de cadre inférieur.

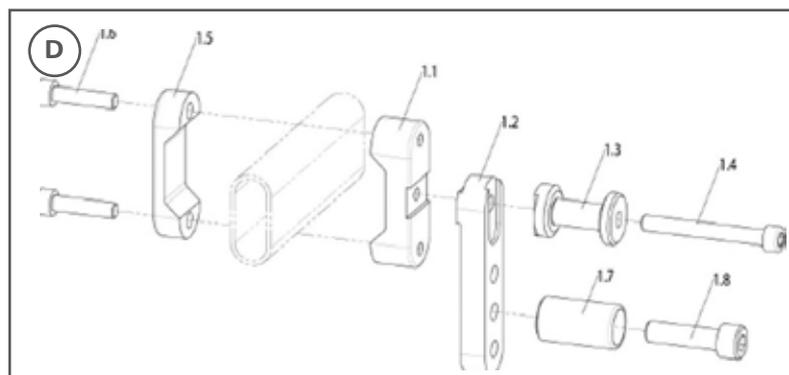


Empulse R20

Information sur la connexion

D - Version à clamp:

Pour Etac Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6

Article n°: ET07501005

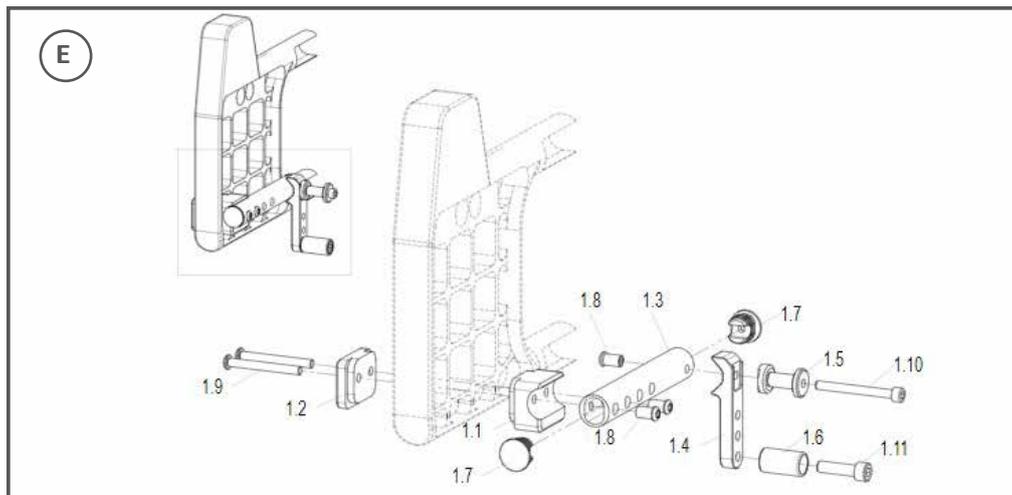


Dockingarm Matrix R20 pour la longueur de bras

A. Hauteur du siège arrière en mm, * uniquement pour les sièges Sunrise avec clamps A ou B

B. Distance tube bas cadre - sol en mm

	A.	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	540	560
	B.	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	275	295
Largeur du siège en mm	320						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
	330						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
	340					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	350						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
	360				XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	370				XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	380			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	390			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	400			XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
	410			XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
	420							S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
	430							S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
	440				S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L
	450				S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L
	460			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	470			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	480		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	490		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	500		S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	510		S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	520		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
530		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
540		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
550		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
560		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
570		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
580		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
590		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
600		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	

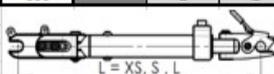

XS - 206 mm
S - 236 mm
L - 276 mm