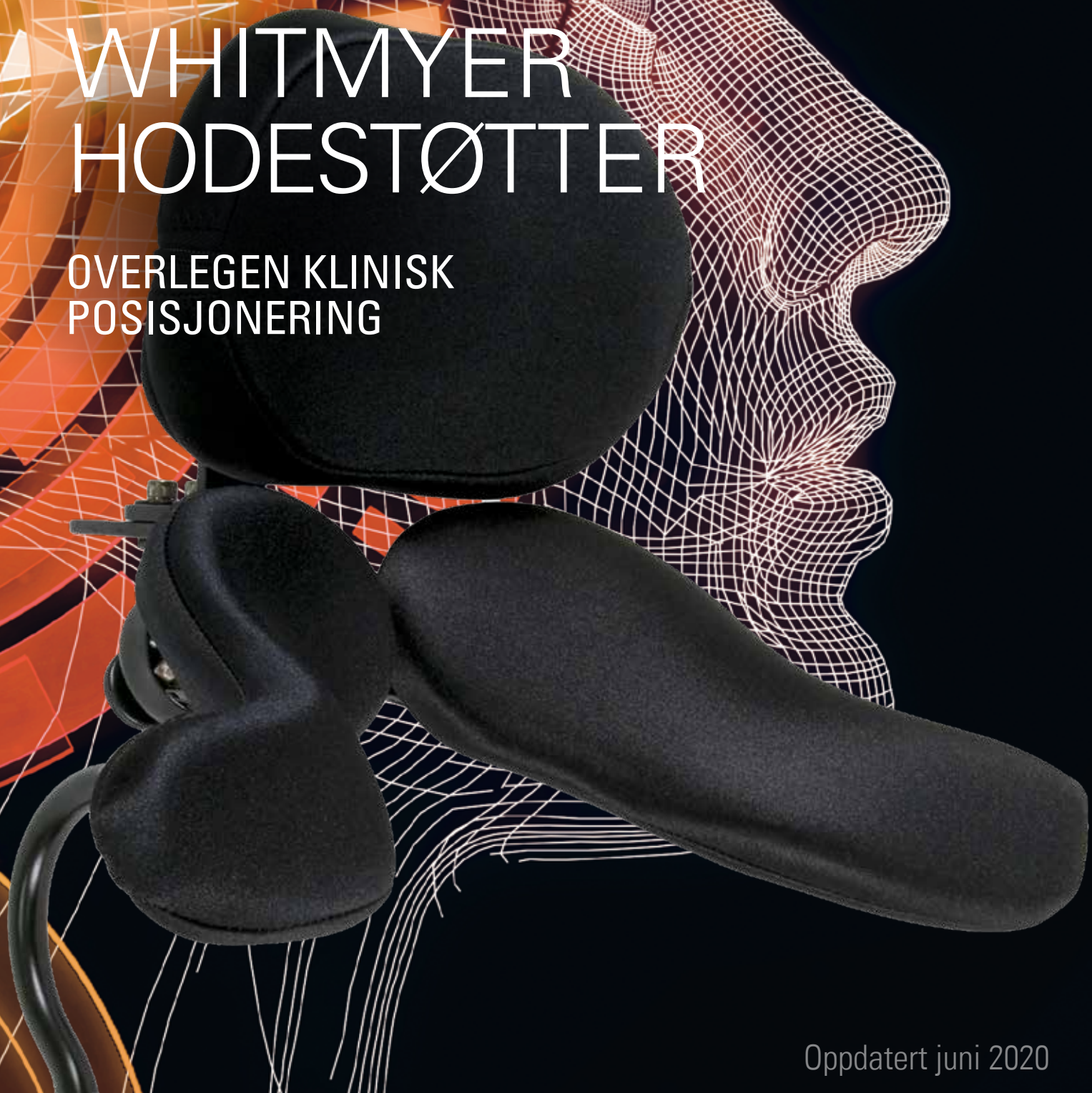


WHITMYER HODESTØTTER

OVERLEGEN KLINISK
POSISJONERING





INNHALDSFORTEGNELSE



BLI KJENT MED KATALOGEN VÅR	4
-----------------------------	---

WHITMYER EGENSKAPER	6
---------------------	---

VEILEDNING FOR BRUK AV PRODUKTENE	7
-----------------------------------	---

WHITMYERS UTVALG AV HODESTØTTER	8
---------------------------------	---

UTVALG AV HODESTØTTESTAG	12
--------------------------	----

HODESTØTTER

PLUSH Hodestøtter med hel støttepute og tilbehør	14
--	----

Spesial PLUSH hodestøtter med hel støttepute og tilbehør	16
--	----

Contoured Cradle hodestøtter og tilbehør	18
--	----

S.O.F.T. Hel sub-oksipitalpute hodestøtter og tilbehør	20
--	----

S.O.F.T. Voksen hodestøtter og tilbehør	22
---	----

S.O.F.T. Barn hodestøtter og tilbehør	24
---------------------------------------	----

Cuddles hodestøtter	26
---------------------	----

HEADS UP Anterior hodestøtter	28
-------------------------------	----

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Skreddersydde løsninger Alternativer og tilbehør	31
--	----

Skreddersydde løsninger Festeløsninger	33
--	----

TEKNISK INFO

Teknisk info AXYS hodestøttestag	34
------------------------------------	----

Teknisk info LINX hodestøttestag	35
------------------------------------	----

Teknisk info PRO hodestøttestag	36
-----------------------------------	----

Teknisk info ONYX hodestøttestag	37
------------------------------------	----

Teknisk info COBRA hodestøttestag	38
-------------------------------------	----

Teknisk info COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag	39
--	----

Teknisk info PLUSH hodestøtteputer	40
--------------------------------------	----

Teknisk info Spesial PLUSH hodestøtteputer	41
--	----

Teknisk info Oksipitalputer og Contoured Cradle hodestøtteputer	42
---	----

Teknisk info Sub-oksipitalputer og hel sub-oksipitalpute	43
--	----

Teknisk info S.O.F.T. Base Plate Assembly	44
---	----

RESERVEDELER

Reservedeler Anterior støtte og Laterale punktstøtter	45
---	----

Reservedeler Reservedeler skum og trekk	46
---	----

BLI KJENT MED KATALOGEN VÅR

SIDER MED KONFIGURERTE HODESTØTTER

For å forenkle bestilling av hodestøtter, er vår katalog lagt opp til at du kan bestille en komplett hodestøtte med tilbehør uten å bla om til en annen side. Hodestøttene er delt opp etter type hodestøttepute.

Venstre side

Her kan du velge:

Hodestøttepute



Hodestøttetag



Festebrakett



PLUSH | Hodestøtte med hel støttepute

TRINN 1

Velg putestørrelse og hodestøttetag. Informasjon om dimensjoner på de ulike hodestøtteputene finner du på side 40.

TRINN 2

Bruk tabellen til å finne varenummeret på ønsket hodestøtte.

TRINN 3

Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten. Eksempel: PRO-P4L og M2200-WB. Unntak: Cobra XTRA hodestøttetag.



480 mm



350 mm



250 mm



200 mm



150 mm

TRINN 1

HODESTØTTESTAG



AXYS

LINX

PRO

COBRA XTRA
NEDFELLBART

TRINN 2

STR HODESTØTTEPUTE

480 mm

350 mm

250 mm

200 mm

150 mm

AXYS-P4L

AXYS-P2L

AXYS-P1L

AXYS-P3L

AXYS-P8L

VARENUMMER FOR HODESTØTTE

LINX-P4L

LINX-P2L

LINX-P1L

LINX-P3L

LINX-P8L

PRO-P4L

PRO-P2L

PRO-P1L

PRO-P3L

PRO-P8L

FB-Cobra-P4L

FB-Cobra-P2L

FB-Cobra-P1L

FB-Cobra-P3L

FB-Cobra-P8L

TRINN 3

FESTEBRACKETT



Dette hodestøttetaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart

Avtakbart

M2500

M2300

M2200-WB



Dette hodestøttetaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart

Nedfellbart

M5500

M5300

M5200

Høyre side

Velg tilbehør:

Laterale punktstøtter →

Anterior støtte/pannestøtte →

PLUSH | Laterale punktstøtter

TRINN 4A

Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A

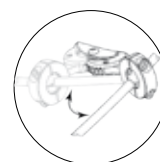
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral



Bilateral



MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL STØTTE	LFC10-PLL	LFC15-PLL	LFC20-PLL	LFC25-PLL	LFC30-PLL	LFC35-PLL	LFC40-PLL
	BILATERAL STØTTE	LFC10-PL2L	LFC15-PL2L	LFC20-PL2L	LFC25-PL2L	LFC30-PL2L	LFC35-PL2L	LFC40-PL2L

PLUSH | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNSTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN ¹	DFS10	DFSQ10	CAP10 (svart)	HU10
	BARN ¹	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (rød) CAP30-B (blå)	HU10

¹ Anterior støtte er ikke kompatibel med PLUSH hodestøttepute 480 mm og har begrensede resultater med PLUSH hodestøttepute 350 mm.

WHITMYER EGENSKAPER

Hver funksjon dekker et bestemt posisjoneringsbehov.

Oksipitalpute:

Gir posterior støtte til hodet.

Sub-oksipitalputer:

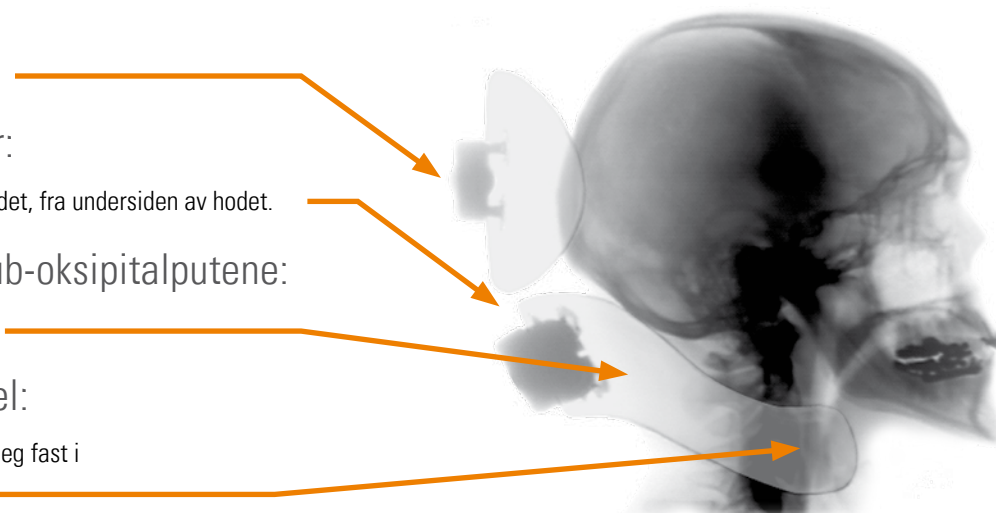
Gir proksimal stabilitet for hodet, fra undersiden av hodet.

Utformingen av sub-oksipitalputene:

Gir lateral støtte til nakken

Utsvingt framre del:

Hindrer at brukeren "hefter" seg fast i kanten på hodestøtten.



- **Hodestøtteputer med forskjellige fasonger og størrelser**
 - Hodestøtter med hel hodestøttepute støtter hodet mot tyngdekraften, med minimalt med posisjonerende funksjoner.
 - Hodestøtter med hel sub-oksipitalpute tilbyr enklere justering.
 - S.O.F.T.-hodestøtter med tre puter er beregnet for brukere med mer sammensatte behov.
- **Et utvalg av hodestøttestag** gir en rekke forskjellige justerings- og posisjoneringsmuligheter. Alle hodestøttestag er laget for å være slitesterke og samtidig ha et attraktivt design.
- **Riflede kuler** garanterer et sikkert feste og sikrer at hodestøtteputene forblir i den tilpassede posisjonen.
- **Universalstørrelse på kuleledd** bidrar til at du kan tilpasse individuell hodestøtte med standardprodukter.
- **Nedfellbart feste** er konstruert slik at hodestøtten enkelt kan flyttes ut av veien ved forflytninger, mens hodestøtten fortsatt er festet til stolen.
- **Tilbehør** gir lateral og/eller anterior støtte ved mer sammensatte behov.
- **Anterior støtte/pannestøtte:**
Dynamisk bevegelse gir både fri rotasjon og støtte.
- **Statisk pannestropp** fungerer som ytre støttepunkt for personer som gjør motstand mot konstant kontakt.
- **Lateral punktstøtte til ansikt** kan svinges bort for bedre plass ved forflytning eller i perioder der brytere/støtteputer ikke benyttes.
- **Adapterplater** gir enkel integrering av alt Whitmyer-tilbehør på hodestøtter med hel støttepute.

VEILEDNING FOR BRUK AV PRODUKTENE



Sett realistiske mål

Ingen hode støtte kan rette utfordringer med sittestilling! En hode støtte er en integrert del av tilpasningen av sittestillingen, ikke et tilbehør. Sett oppnåelige mål for sittestilling, posisjonering og støtte av hodet, slik at brukeren kan oppnå optimal posisjonering. Hvis det lar seg gjøre, bruk en sittesimulator for å definere nødvendig utstyr for å oppnå disse målene.



Evaluer den komplette tilstanden

Fastsett brukerens ortopediske tilstand ved å utføre en full evaluering i sittende og liggende stilling på en matte. Evaluer følgende for å fastsette hvilken grad av hode støtte som er nødvendig:

- Lateral fleksjon og rotasjon
- Tonus
- Toleranse for trykk eller kontakt
- Muskelstyrke eller -svakhet
- Hvor mye kraft som er nødvendig for å tilpasse/korrigere.

Fastsett hvilken grad av støtte brukeren tolererer. I enkelte tilfeller er det bedre å unngå omfattende hode støtter og heller oppnå konsekvent bruk og posisjonering.



Bruk hendene!

Simuler posisjoneringen av hodet med hendene dine. Vurder hvor mye kraft som er nødvendig for å oppnå målene i forhold til posisjonering av hodet. Noter deg retningen og hvor mye kraft du må bruke, og observer graden av aktiv bevegelse eller motstand fra brukeren. Ta brukerens hode størrelse/fasong med i betraktning, samt hvor mye av hodets overflate som kan brukes til trykkfordeling.



Velg riktige komponenter

Velg hode støtten og utstyret som likner mest på kraften og fasongen som hendene dine hadde under evalueringen på matten. Vurder behovet for støtteflater:

- Støtte fra én, to, tre eller flere puter?
- Valg av lateral, anterior eller posterior støtte?
- Tilpasning lateralt eller for rotasjon?
- Dynamisk eller statisk støtte?



Områder som ikke må påføres direkte trykk

Unngå direkte trykk på disse punktene:

- Tinning og øyne
- Ører
- Øreknuten (benutspring som ligger bak øret)
- Kjeve eller kjevebein.

Områder som skal støttes

La bakhodet få så mye støtte som mulig. Se etter flate områder på siden av hodet, ansiktet eller pannen som kan støttes.

Monteringsposisjon

Husk at ortopediske problemer kan påvirke brukerens evne til å oppnå en plassering av hodet i midtlinjen. Vurder å montere hode støtten til siden for midtlinjen, slik at nakken står i en bedre stilling i forhold til skuldrene.

WHITMYERS UTVALG AV HODESTØTTER

PLUSH



Hodestøtte med hel støttepute

PLUSH-hodestøtter med hel støttepute har to skumlag med ulik tetthet på et buet skall. Disse hodestøttene, med hel pute, er lette å justere og kan tilpasses endringer eller inkonsekvente kroppsstillinger. Den unike fordypningen gir posterior støtte med høy komfort og sikkerhet. Den enkle hodestøtten er ideell ved bruk av tilt/ryggvinkelregulering, og kan utstyres med lateral og anterior støtte, eller brytere, etterhvert som brukerens behov endrer seg. De større hodestøtteputene gir trygghet for brukere med atferdsproblemer og aktive bevegelser.



SPECIAL PLUSH



Hodestøtte med hel støttepute

PLUSH spesialhodestøtter med hel pute, som tidligere kun var tilgjengelig som et spesialbestilt produkt, er nå et lagerført standardprodukt. PLUSH hodestøtteputer 48x35cm, med to innfestninger, er ideelle for brukere med høy tonus og sterke ekstensjonsmønstre. Den smale PLUSH hodestøtteputen på 300 mm gir en mindre synlig hodestøtteløsning. Adjust-A-PLUSH hodestøtteputen har to ledd slik at hodestøtten kan tilpasses i fasong for ønsket lateral støtte. Trekk med glidelås skjuler justeringspunktene.



WHITMYERS UTVALG AV HODESTØTTER

CONTOURED CRADLE



Hodestøtte

Contoured Cradle hodestøttepute gir god posisjonering takket være den unike anatomiske formen. Hodestøtten holder brukerens bakhode i en vugge og gir lateral støtte til nakken. Hodestøtten gir god posisjonering av hodet, er svært komfortabel og er enkel å justere. En enkelt justering av kuleleddet gir posisjonering med maksimal støtte og overflatekontakt. Seks putestørrelser, fra barnestørrelse til voksenstørrelse. Legg til lateral punktstøtte, brytere og/eller anterior støtte for større tilpasningsmuligheter.



S.O.F.T HEL SUB-OKSIPITALPUTE



Hodestøtte

S.O.F.T. med hel sub-oksipitalpute gir sub-oksipital og proksimal støtte til nakken ved bruk av en hel, buet sub-oksipitalpute. Den generisk formede puten krever færre kompliserte justeringer. En unik egenskap er at oksipitalputen kan flyttes forover eller bakover separat. Konsekvent, gjentatt posisjonering av brukeren er nødvendig for å oppnå best mulig resultat. Tilleggsutstyr som lateral punktstøtte, brytere og anterior støtte gjør hodestøtten enda mer tilpasningsdyktig.



WHITMYERS UTVALG AV HODESTØTTER

S.O.F.T. VOKSEN OG BARN



Hodestøtte

S.O.F.T. hodestøtter med tre puter løser de mest krevende utfordringene innen posisjonering av hodet. Den patenterte løsningen med tre puter kombinerer to sub-oksipitalputer som kan roteres og justeres i bredden, og én justerbar oksipitalpute som kan flyttes forover og bakover separat. De ekstra justeringsmulighetene for de individuelle sub-oksipitalputene betyr at man kan tilpasse støtten til asymmetriske kroppsstillinger og deformasjoner. Den unike putekonfigurasjonen gir maksimal oksipital støtte og proksimal lateral støtte for nakken, for å gi brukeren mer aggressiv posisjonering samt komfort. Konsekvent, gjentatt posisjonering av brukeren er nødvendig for å oppnå best mulig resultat. Ved å legge til lateral punktstøtte, brytere og anterior støtte blir hodestøtten enda mer tilpasningsdyktig.



CUDDLES



Hodestøtte

CUDDLES hodestøtte bruker de samme putene og støttedelene som S.O.F.T. hodestøtte for barn, men har i tillegg et mykt og skånsomt fleecetrek.



WHITMYERS UTVALG AV HODESTØTTER

HEADS UP



Anterior hodestøtte

HEADS UP – Den innovative, anterior hodestøtten gir brukeren maksimal interaksjon med omgivelsene ved å gi anterior, posterior og lateral støtte til hodet og nakken. Hodestøtteputen er utstyrt med utsvingbare og justerbare armer for enklere forflytning og andre aktiviteter.



TILBEHØR TIL HODESTØTTE



Lateral punktstøtte

Lateral punktstøtte kan konfigureres for å gi mulighet for eller blokkere lateral fleksjon og/eller rotasjonsmønstre eller fungere som generelle støtteflater eller plassering for hodebrytere. Putene kan svinges bort slik at de er ute av veien ved forflytning eller når de ikke er i bruk. Buede støttetag gjør at støtteputer kan plasseres lateralt eller anterior. Med et utvalg av punktstøtteputer i syv forskjellige størrelser, hvorav fem kan formes til, finnes det alltid en pute som passer området som skal støttes.



Utvalg av anterior støtter

Valg av anterior støtte – Den patenterte, dynamiske pannestroppen holder brukerens hode i oppreist stilling og gir samtidig frihet til å rotere hodet. Utmerket for personer med lav tonus og redusert hodekontroll, personer som har et fleksjonsmønster, eller for personer som må beholde hodet i en oppreist stilling av medisinske årsaker, for eksempel på grunn av redusert puste- og svelgefunksjon. Ideell å bruke ved utføring av oppgaver, som interaksjon i klasserom eller under måltider. Bruk av en cap med stropper gir en løsning for anterior støtte som er mindre synlig. Løsningen egner seg også for personer som kanskje ikke kan benytte pannestroppen. Den statiske pannestroppen Hedz-Up ble konstruert som en avgrensende støtte for å begrense hodets bevegelse forover og lateralt. Man kan oppnå ønsket bevegelsesområde med riktig justering av stroppen rundt pannen. Justerbare vinkelbraketter forhindrer at stroppen sklir nedover, og gir en konsekvent plassering av stroppen. Hedz-Up passer svært godt for personer med ALS, MS og muskeldystrofi. Ved bruk av anterior støtte vil gjentatt posisjonering av brukeren være nødvendig for å oppnå best mulig resultat.

UTVALG AV HODESTØTTESTAG

AXYS HODESTØTTESTAG



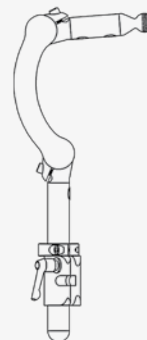
AXYS hodestøttestag er et velutprøvd og kostnadseffektivt valg av hodestøttestag. Overflaten i sort krom, kombinert med en liten, firkantet stålstang, gir en kompakt og elegant monteringsløsning. Staget er konstruert for kraftig bruk, enkel tilpasning og enkle endringer. Staget er kompatibelt med alt Whitmyer-tilbehør.



LINX HODESTØTTESTAG




LINX hodestøttestag inneholder den nyeste teknologien innen moderne hodestøttestag. Kombinasjonen av to enkle og unike justeringspunkter gir fullt og trinnløst bevegelsesutslag anterior og posterior. Dette gir utallige muligheter for å plassere støtteflater. Matt-sorte rør i kontrast med blanke aluminiumsklemmer og en riflet monteringskule gir sikre justeringer i et elegant design.



PRO HODESTØTTESTAG



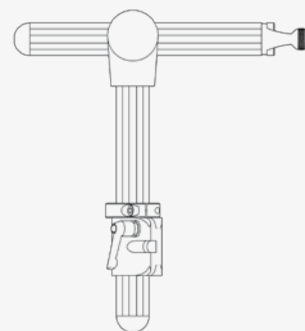PRO hodestøttestag er et velutprøvd hodestøttestag for krevende tilpasninger. Hodestøttestaget er ideelt for brukere med redusert styrke eller utfordringer med tonus. Det er ypperlig å bruke på institusjoner.



UTVALG AV HODESTØTTESTAG

COBRA XTRA NEDFELLBART HODESTØTTESTAG



COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag

kan enkelt felles ned ved hjelp av en trykknapp på siden av hodestøttestaget. Hodestøtten kan da felles ned bak rullestolens rygg. COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag har uovertruffen styrke og posisjoneringsmuligheter, og leveres i størrelsene Liten (spedbarn), Medium (barn) og Stor (voksen). Komponentene er modulære og kan lett byttes ut, slik at riktig posisjonering av hodet kan oppnås selv om brukerens behov endrer seg over tid.



ONYX HODESTØTTESTAG



ONYX hodestøttestag er en kompakt løsning med en overflate i sort krom, kombinert med en liten, firkantet stålstang. Hodestøttestaget er konstruert for kraftig bruk, enkel tilpassing og enkle endringer.



COBRA HODESTØTTESTAG



COBRA hodestøttestag har et glatt og enkelt design uten utspring bak på stolen. COBRA har uovertruffen styrke og posisjoneringsmuligheter, og er tilgjengelig i tre størrelser. Komponentene er modulære og kan lett byttes ut uansett hvor man befinner seg. Det er derfor mulig å oppnå en nøyaktig posisjonering av støtteputen, selv om brukerens hodeplassering skulle endre seg over tid.



PLUSH | Hodestøtte med hel støttepute

TRINN 1









Velg putestørrelse og hodestøttestag.
Informasjon om dimensjoner på de ulike
hodestøtteputene finner du på side 40.

TRINN 2

Bruk tabellen til å finne
varenummeret på ønsket
hodestøtte.

TRINN 3

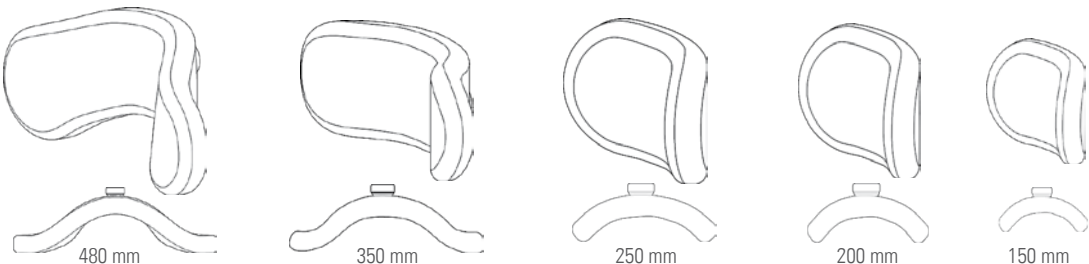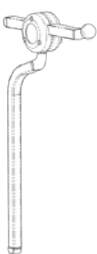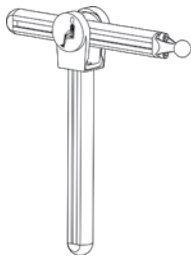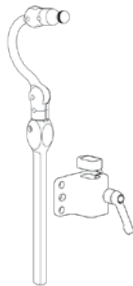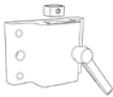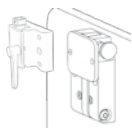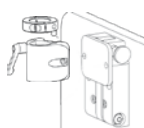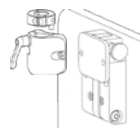Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten.
Eksempel: PRO-P4L og M2200-WB
Unntak: Cobra XTRA hodestøttestag.

TRINN 1					
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA NEDFELLBART
	HODESTØTTESTAG				
	STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE			
TRINN 2	480 mm	AXYS-P4L	LINX-P4L	PRO-P4L	FB-Cobra-P4L
	350 mm	AXYS-P2L	LINX-P2L	PRO-P2L	FB-Cobra-P2L
	250 mm	AXYS-P1L	LINX-P1L	PRO-P1L	FB-Cobra-P1L
	200 mm	AXYS-P3L	LINX-P3L	PRO-P3L	FB-Cobra-P3L
	150 mm	AXYS-P8L	LINX-P8L	PRO-P8L	FB-Cobra-P8L
TRINN 3		FESTEBRAKETT			
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Avtakbart	M2500	M2300	M2200-WB	
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Nedfellbart	M5500	M5300	M5200	


PLUSH | Laterale punktstøtter

TRINN 4A


Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A


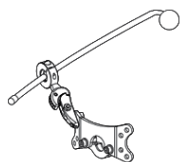
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral

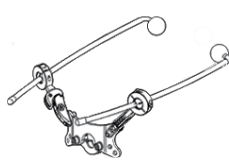

Bilateral

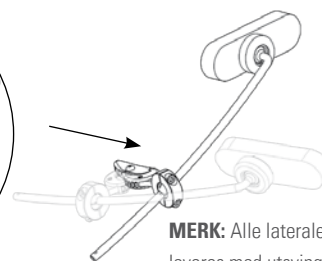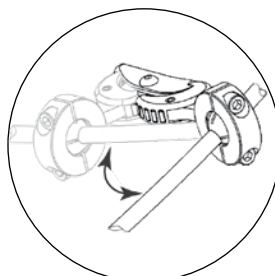

MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL STØTTE	LFC10-PLL	LFC15-PLL	LFC20-PLL	LFC25-PLL	LFC30-PLL	LFC35-PLL	LFC40-PLL
	BILATERAL STØTTE	LFC10-PL2L	LFC15-PL2L	LFC20-PL2L	LFC25-PL2L	LFC30-PL2L	LFC35-PL2L	LFC40-PL2L

PLUSH | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNSTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN ¹	DFS10	DFSQ10	CAP10 (svart)	HU10
	BARN ¹	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (rød) CAP30-B (blå)	HU10

¹ Anterior støtte er ikke kompatibel med PLUSH hodestøttepute 480 mm og har begrensede resultater med PLUSH hodestøttepute 350 mm.

SPELIAL PLUSH | Hodestøtte med hel støttepute¹

TRINN 1







Velg putestørrelse og hodestøttestag.
Du finner informasjon om
putedimensjonene på side 41.

TRINN 2

Bruk tabellen til å finne
varenummeret på ønsket
hodestøtte.

TRINN 3

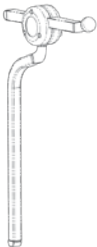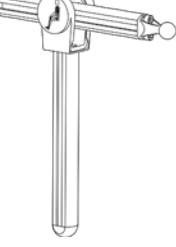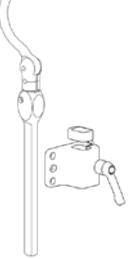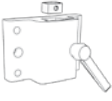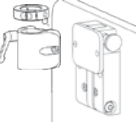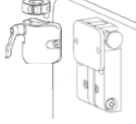Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten.
Eksempel: PRO-P4L og M2200-WB
Unntak: Cobra XTRA hodestøttestag.

TRINN 1					
	480 mm Plush to innfestningspunkter	350 mm Plush to innfestningspunkter	300 mm PLUSH smal	Adjust-A-PLUSH standard	Adjust-A-PLUSH smal
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA NEDFELLBART
TRINN 2	HODESTØTTESTAG				
	STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE			
	480 mm PLUSH to innfestningspunkter ²	AXYS-P44L	LINX-P44L	PRO-P44L	-
	350 mm PLUSH to innfestningspunkter ²	AXYS-P22L	LINX-P22L	PRO-P22L	-
	300 mm PLUSH smal	AXYS-P12L	LINX-P12L	PRO-P12L	FB-Cobra-P12L
	Adjust-A-PLUSH smal	AXYS-AP1L	LINX-AP1L	PRO-AP1L	FB-Cobra-AP1L
TRINN 3	Adjust-A-PLUSH standard	AXYS-AP2L	LINX-AP2L	PRO-AP2L	FB-Cobra-AP2L
		FESTEBRAKETT			
					Dette hodestøttes- taget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Avtakbart	M2500	M2300	M2200-WB	
					Dette hodestøttes- taget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Nedfellbart	M5500	M5300	M5200	

¹ MERK: Hodestøtteputer er ikke skalert proporsjonalt. Se side 41 for dimensjoner på hodestøtteputer.

² Det er nødvendig med to festebraketter for 480 mm og 350 mm Plush hodestøtter med to innfestninger. Nedfellbare løsninger anbefales ikke.


SPESIAL PLUSH | Laterale punktstøtter

TRINN 4A


Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A


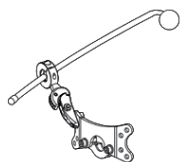
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral

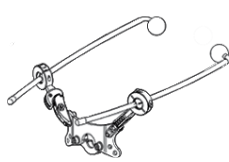

Bilateral

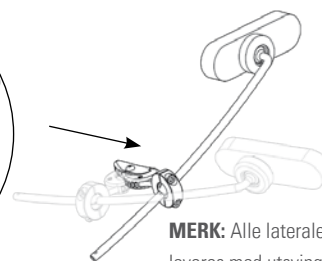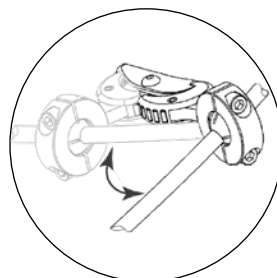

MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL ¹ STØTTE	LFC10-PLL	LFC15-PLL	LFC20-PLL	LFC25-PLL	LFC30-PLL	LFC35-PLL	LFC40-PLL
	BILATERAL ¹ STØTTE	LFC10-PL2L	LFC15-PL2L	LFC20-PL2L	LFC25-PL2L	LFC30-PL2L	LFC35-PL2L	LFC40-PL2L

SPESIAL PLUSH | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNESTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN ^{1,2}	DFS10	DFSQ10	CAP10 (svart)	HU10
	BARN ^{1,2}	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (rød) CAP30-B (blå)	HU10

¹ Lateral punktstøtte bør ikke brukes i kombinasjon med PLUSH hodestøtte med to innfestningspunkter.

² Anterior støtter er ikke compatible med PLUSH hodestøtte med to innfestningspunkter.

CONTOURED CRADLE | Hodestøtte

TRINN 1


Velg putestørrelse og hodestøttestag.
Du finner informasjon om
putedimensjonene på side 42 og 43.

TRINN 2

Bruk tabellen til å finne
varenummeret på ønsket
hodestøtte.

TRINN 3

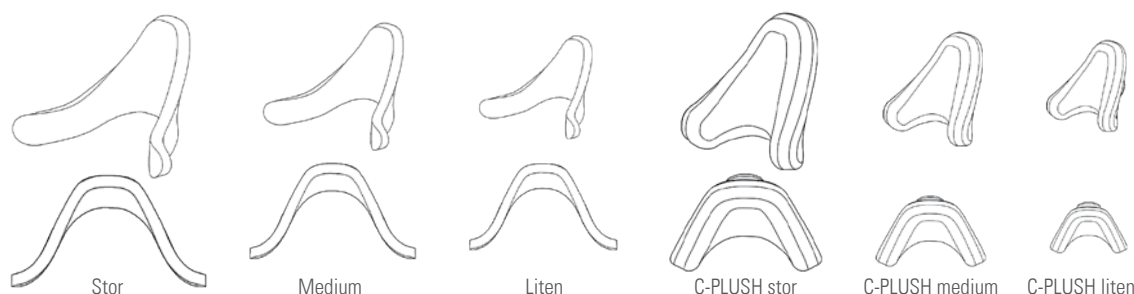Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten.
Eksempel: PRO-CCS4L og M2200-WB
Unntak: Cobra XTRA hodestøttestag.



TRINN 1

	AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA NEDFELLBART
HODESTØTTESTAG				

TRINN 2

STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE			
Stor	AXYS-CCS4L	LINX-CCS4L	PRO-CCS4L	FB-Cobra-CCS4L
Medium	AXYS-CCS3L	LINX-CCS3L	PRO-CCS3L	FB-Cobra-CCS3L
Liten	AXYS-CCS2L	LINX-CCS2L	PRO-CCS2L	FB-Cobra-CCS2L
C-PLUSH stor	AXYS-CCP4L	LINX-CCP4L	PRO-CCP4L	FB-Cobra-CCP4L
C-PLUSH medium	AXYS-CCP3L	LINX-CCP3L	PRO-CCP3L	FB-Cobra-CCP3L
C-PLUSH liten	AXYS-CCP2L	LINX-CCP2L	PRO-CCP2L	FB-Cobra-CCP2L

TRINN 3

	FESTEBRAKETT			
				Dette hodestøttes- taget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
Avtakbart	M2500	M2300	M2200-WB	
				Dette hodestøttes- taget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
Nedfellbart	M5500	M5300	M5200	


CONTOURED CRADLE | Lateral punktstøtte

TRINN 4A


Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A


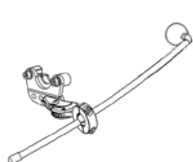
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral

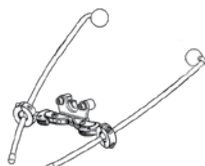

Bilateral

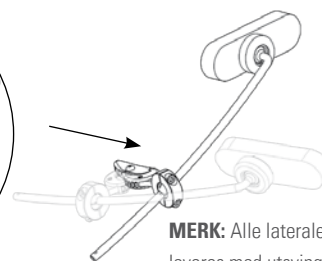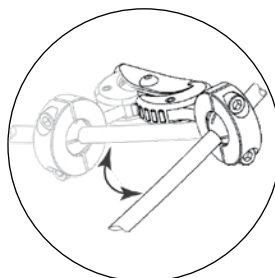

MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL STØTTE	LFC10-CSL	LFC15-CSL	LFC20-CSL	LFC25-CSL	LFC30-CSL	LFC35-CSL	LFC40-CSL
	BILATERAL STØTTE	LFC10-CS2L	LFC15-CS2L	LFC20-CS2L	LFC25-CS2L	LFC30-CS2L	LFC35-CS2L	LFC40-CS2L

CONTOURED CRADLE | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNSTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN	DFS10	DFSQ10	CAP10 (svart)	HU10
	BARN	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (rød) CAP30-B (blå)	HU10

S.O.F.T HEL SUB-OKSIPITALPUTE | Hodestøtte

TRINN 1











Velg putestørrelse og hodestøttestag.
Du finner informasjon om
putedimensjonene på side 43.

TRINN 2

Bruk tabellen for å finne
hodestøttens varenummer.

TRINN 3

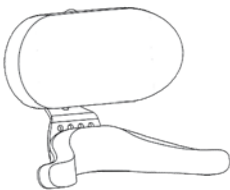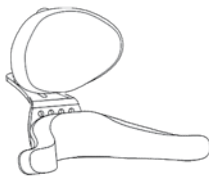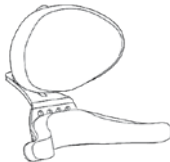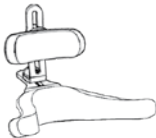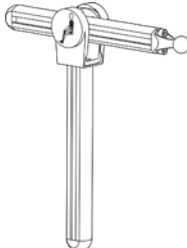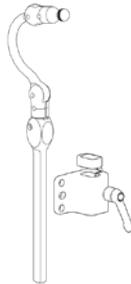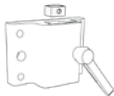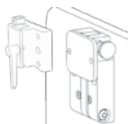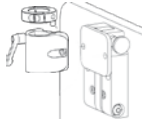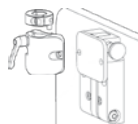Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten.
Eksempel: PRO-SS10L og M2200-WB
Unntak: Cobra XTRA hodestøttestag.

TRINN 1					
	SS10 PLUSH 250mm m/ hel sub-oksipitalpute stor.	SS8 Oksipitalpute voksen m/ hel sub-oksipitalpute stor.	SS4 Oksipitalpute voksen m/ hel sub-oksipitalpute liten.	SS3 Oksipitalpute barn m/ hel sub-oksipitalpute liten.	
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA NEDFELLBART
	HODESTØTTESTAG				
	STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE			
TRINN 2	SS10	AXYS-SS10L	LINX-SS10L	PRO-SS10L	FB-Cobra-SS10L
	SS8	AXYS-SS8L	LINX-SS8L	PRO-SS8L	FB-Cobra-SS8L
	SS4	AXYS-SS4L	LINX-SS4L	PRO-SS4L	FB-Cobra-SS4L
	SS3	AXYS-SS3L	LINX-SS3L	PRO-SS3L	FB-Cobra-SS3L
		FESTEBRACKETT			
TRINN 3					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Avtakbart	M2500	M2300	M2200-WB	
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Nedfellbart	M5500	M5300	M5200	


S.O.F.T HEL SUB-OXSIPITALPUTE | Lateral punktstøtte

TRINN 4A


Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A


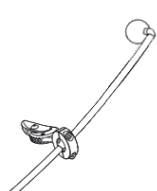
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral

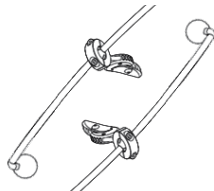

Bilateral

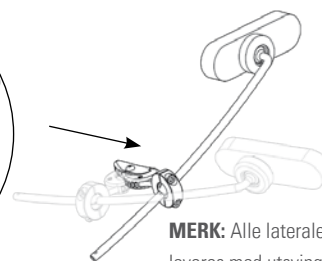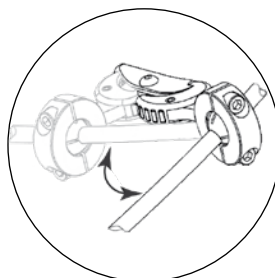

MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL STØTTE	LFC10L	LFC15L	LFC20L	LFC25L	LFC30L	LFC35L	LFC40L
	BILATERAL STØTTE	(2) LFC10L	(2) LFC15L	(2) LFC20L	(2) LFC25L	(2) LFC30L	(2) LFC35L	(2) LFC40L

S.O.F.T. HEL SUB-OXSIPITALPUTE | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNSTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN	DFS1	DFSQ1	CAP1 (svart)	HU1
	BARN	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (rød) CAP3-B (blå)	HU1

S.O.F.T. VOKSEN | Hodestøtte

TRINN 1








Velg putestørrelse og hodestøttestag.
Du finner informasjon om
putedimensjonene på side 47.

TRINN 2

Bruk tabellen for å finne
hodestøttens varenummer.

TRINN 3

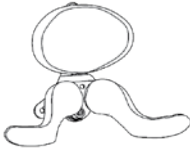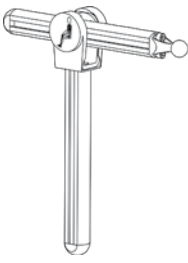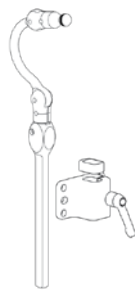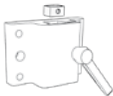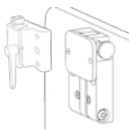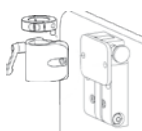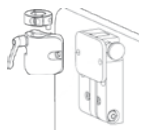Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten. Eksempel: PRO-8L
og M2200-WB
Unntak: Cobra XTRA hodestøttestag.

TRINN 1					
	5 PLUSH 250mm m/ sub-oksipitalputer str1	8 PLUSH 200mm m/ sub-oksipitalputer str1	2 Oksipitalpute voksen m/ sub-oksipitalputer str2	1 Oksipitalpute voksen m/ sub-oksipitalputer str1	
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA NEDFELLBART
	HODESTØTTESTAG				
	STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE			
TRINN 2	8	AXYS-8L	LINX-8L	PRO-8L	FB-Cobra-8L
	5	AXYS-5L	LINX-5L	PRO-5L	FB-Cobra-5L
	2 ¹	AXYS-2L	LINX-2L	PRO-2L	FB-Cobra-2L
	1	AXYS-1L	LINX-1L	PRO-1L	FB-Cobra-1L
TRINN 3		FESTEBRAKETT			
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Avtakbart	M2500	M2300	M2200-WB	
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Nedfellbart	M5500	M5300	M5200	

¹ Sub-oksipitalputer i størrelse 2 anbefales for personer som har bedre tonus og hodekontroll.


S.O.F.T. VOKSEN | Lateral punktstøtte

TRINN 4A


Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A


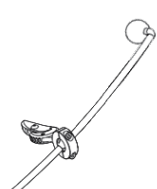
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral

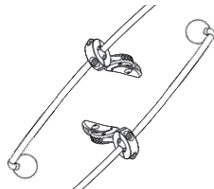

Bilateral

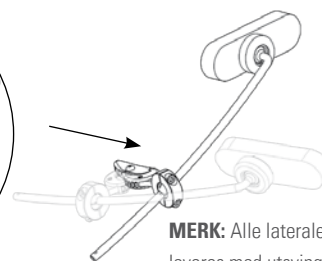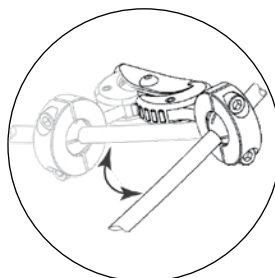

MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL STØTTE	LFC10L	LFC15L	LFC20L	LFC25L	LFC30L	LFC35L	LFC40L
	BILATERAL STØTTE	(2) LFC10L	(2) LFC15L	(2) LFC20L	(2) LFC25L	(2) LFC30L	(2) LFC35L	(2) LFC40L

S.O.F.T. VOKSEN | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNSTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN	DFS1	DFSQ1	CAP1 (svart)	HU1
	BARN	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (rød) CAP3-B (blå)	HU1

S.O.F.T. BARN | Hodestøtte

TRINN 1









Velg putestørrelse og hodestøttestag.
Du finner informasjon om
putedimensjonene på side 47.

TRINN 2

Bruk tabellen for å finne
hodestøttens varenummer.

TRINN 3

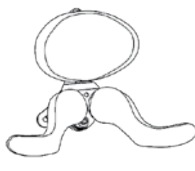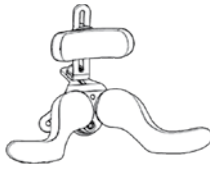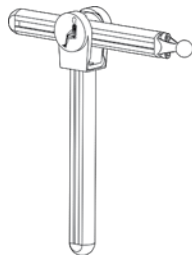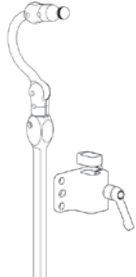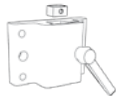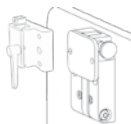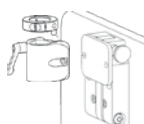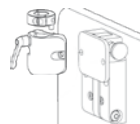Velg festebrakett for å komplettere hodestøtten. Eksempel: PRO-7L
og M2200-WB
Unntak: Cobra XTRA hodestøttestag.

TRINN 1					
	7 PLUSH 200 mm m/ sub-oksipitalputer str3	6 Oksipitalpute barn m/ sub-oksipitalputer str4	4 Oksipitalpute voksen m/ sub-oksipitalputer str3	3 Oksipitalpute barn m/ sub-oksipitalputer str3	
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA NEDFELLBART
	HODESTØTTESTAG				
	STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE			
TRINN 2	7	AXYS-7L	LINX-7L	PRO-7L	FB-Cobra-7L
	6 ¹	AXYS-6L	LINX-6L	PRO-6L	FB-Cobra-6L
	4	AXYS-4L	LINX-4L	PRO-4L	FB-Cobra-4L
	3	AXYS-3L	LINX-3L	PRO-3L	FB-Cobra-3L
TRINN 3		FESTEBRAKETT			
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Avtakbart	M2500	M2300	M2200-WB	
					Dette hodestøttestaget inkluderer en avtakbar festebrakett og staget er nedfellbart
	Nedfellbart	M5500	M5300	M5200	

¹ Sub-oksipitalputer i størrelse 4 anbefales for personer som har bedre tonus og hodekontroll.


S.O.F.T. BARN | Lateral punktstøtte

TRINN 4A


Velg punktstøttefasong og størrelse.

TRINN 5A


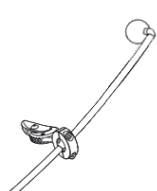
Bruk tabellen til å finne ønskede laterale punktstøtter og varenumre.



Unilateral

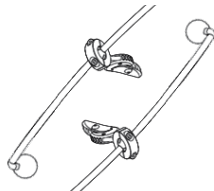

Bilateral

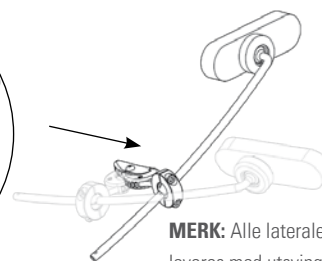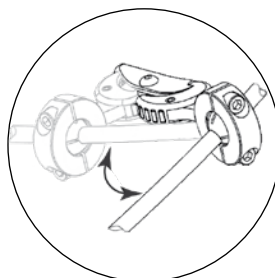

MERK: Alle laterale punktstøtter leveres med utsvingbare fester

		SPOT	STANDARD	LANG	OVAL	STOR-C	MEDIUM-C	LITEN-C
TRINN 4A								
TRINN 5A		LATERAL PUNKTSTØTTE, VARENUMMER						
	UNILATERAL STØTTE	LFC10L	LFC15L	LFC20L	LFC25L	LFC30L	LFC35L	LFC40L
	BILATERAL STØTTE	(2) LFC10L	(2) LFC15L	(2) LFC20L	(2) LFC25L	(2) LFC30L	(2) LFC35L	(2) LFC40L

S.O.F.T. BARN | Anterior støtte

TRINN 4B

Velg anterior støtte.

TRINN 5B

Bruk tabellen til å velge størrelse/farge, samt finne varenummer til anterior støtte.

		DYNAMISK PANNSTØTTE	DFS ²	CAP MED STROPP	HEDZ-UP
TRINN 4B					
TRINN 5B	VOKSEN	DFS1	DFSQ1	CAP1 (svart)	HU1
	BARN	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (rød) CAP3-B (blå)	HU1

CUDDLES | Hodestøtte

TRINN 1

Velg putestørrelse og
AXYS hodestøttestag.

TRINN 2




Bruk tabellen til å finne
varenummeret på ønsket
hodestøtte.

TRINN 3

Velg festebrakett for å
komplettere hodestøtten.

MERK:

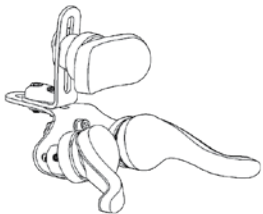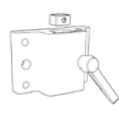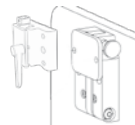Kun tilgjengelig med trekk i
Lycra og AXYS hodestøttestag.

TRINN 1		
	S.O.F.T Oksipitalpute liten m/sub-oksipitalputer småbarn	Contoured Cradle baby
TRINN 2		AXYS
	HODESTØTTESTAG	
	STR HODESTØTTEPUTE	VARENUMMER FOR HODESTØTTE
	S.O.F.T.	AXYS-INFT
TRINN 3	CCS	AXYS-CCS1
		FESTEBRAKETT
		
	Avtakbart	M2500
		
	Nedfellbart	M5500



HEADS UP | Anterior hode støtte

HEADS UP har varenumre som bygges opp når hode støtten konfigureres. Følg de seks enkle trinnene nedenfor for å sette sammen varenummeret for ønsket hode støtte. Hode støttestaget (Trinn 7) og feste braketten (Trinn 8) må bestilles separat.

Eksempel på varenummer:

HU: HEADS UP

ISSSL-05: I: bredde 71 mm, S: høyde S (short/lav) S: lengde armer 142 mm, Standard skum, Lycra trekk, hode støttestad 127 mm -05

+
AX7010: AXYS hode støttestag

+
M2500: AXYS feste brakett

TRINN 1	TRINN 2	TRINN 3	TRINN 4	TRINN 5	TRINN 6
Definer bredde på nakken	Definer ønsket pute høyde	Definer ønsket lengde for de utsvingbare armene	Definer ønsket skumtype	Velg Lycra	Definer ønsket størrelse på oksipitalputen Kun tilgjengelig for hode støtteputer med lav høyde.

TRINN 1		Bredde nakke							
		71 mm (spedbarn)		89 mm (liten)		104 mm (medium)		135 mm (stor)	
		I		S		M		L	
TRINN 2		Putehøyde							
		Høy (Tall)				Kort (Short)			
		T				S			
TRINN 3		Utsvingbar armlengde							
				Kort (Short)		Lang			
				S		L			
		Spedbarn og liten		142 mm		185 mm			
		Medium og stor		178 mm		229 mm			
TRINN 4	 StandardKomfort	Skumtype							
		Standard				Komfort			
		S				C			
		Sped- barn	Liten	Medium	Stor	Sped- barn	Liten	Medium	Stor
		10 mm	13 mm	15 mm	18 mm	15 mm	15 mm	20 mm	23 mm
TRINN 5		Lycra (neopren)							
		L							
TRINN 6	MERK: Etter trinn 6 er varenummeret for hodestøtten klart. Gå videre til trinn 7 og 8, og legg til disse varenumrene, hodestøttestag og festebrakett bestilles separat.	Størrelse oksipitalpute (valgfri)							
		Barn 127 mm		Voksen 152 mm		PLUSH 203 mm		PLUSH 254 mm	
		-05		-06		-08		-010	

TRINN 7

Velg
hodestøttestag

TRINN 8

Velg
festebrakett

MERK:

Bestill begge varenumrene i tillegg til
varenummeret for hodestøtteputen.

		HODESTØTTESTAG					
		AXYS	ONYX	LINX	PRO	COBRA	COBRA XTRA NEDFELLBART
TRINN 7		AX7010	VOKSEN: OX7010 BARN: OX7030	LX7000	VOKSEN: PRC7010 BARN: PRC7030	VOKSEN: CRBA7010 BARN: CRBA7030 SPEDBARN: CRBA7080	VOKSEN: CRBA5010 BARN: CBRA5030 SPEDBARN: CBRA5080
TRINN 8		FESTEBRAKETT					
	Avtakbart	M2500	M2100-WB	M2300	M2200-WB	COBRA-festesystem inkluderer avtakbar festebrakett.	
	Nedfellbart	M5500	M5100	M5300	M5200	Velg COBRA nedfellbart hodestøttestag for denne funksjonen.	

































MERK:

Hakestøtte inkludert.

Hodestøtten kan gjøres enda mer allsidig ved
å legge til lateral punktstøtte og anterior
støtte (se side 19, Contoured Cradle)




HEADS UP | Bestillingshjelp

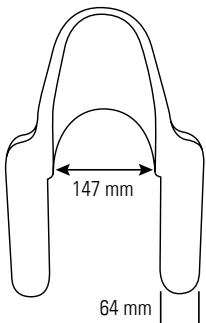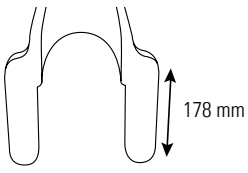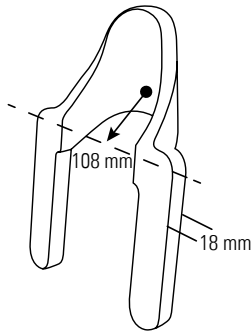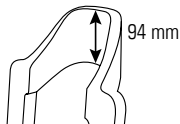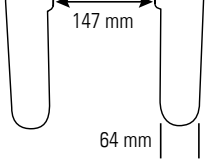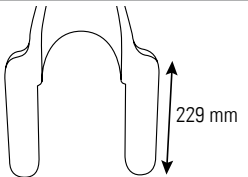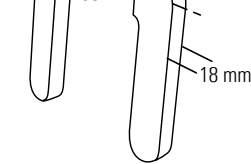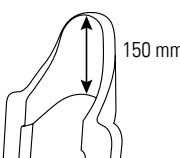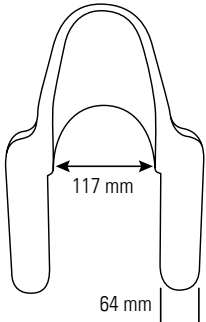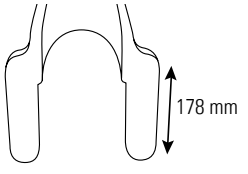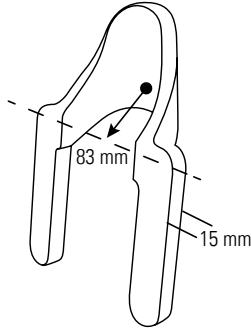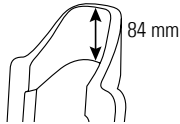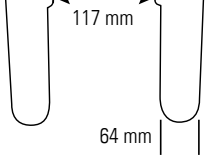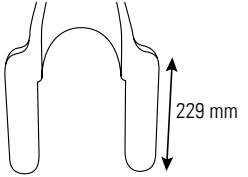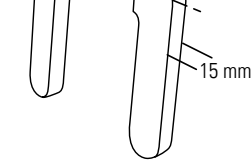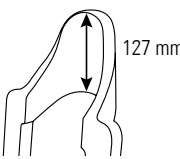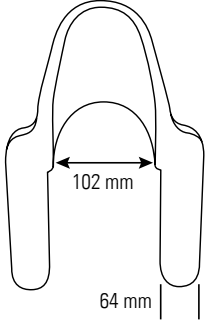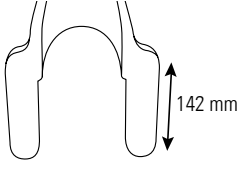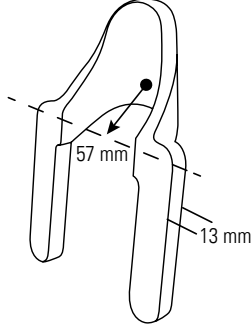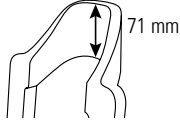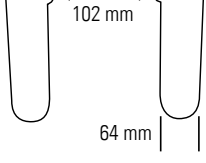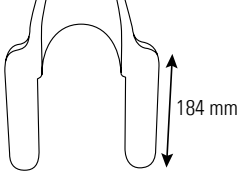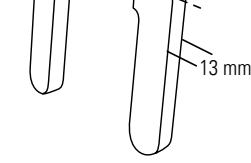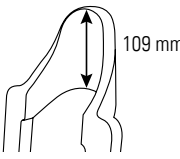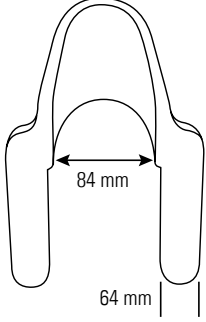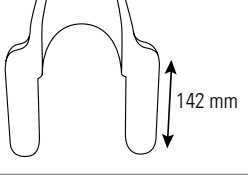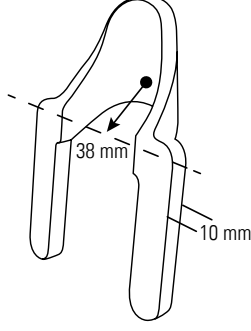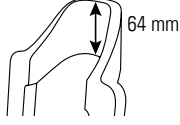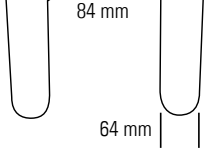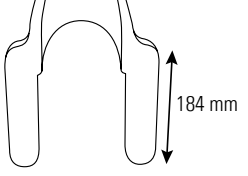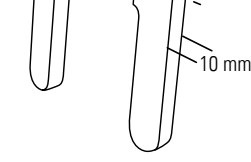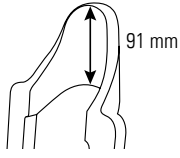Heads Up puter				
Stor				
Kort				
Høy				
Medium				
Kort				
Høy				
Liten				
Kort				
Høy				
Spedbarn				
Kort				
Høy				

MERK: Målene kan variere på grunn av variasjoner i skummet.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER | Alternativer og tilbehør

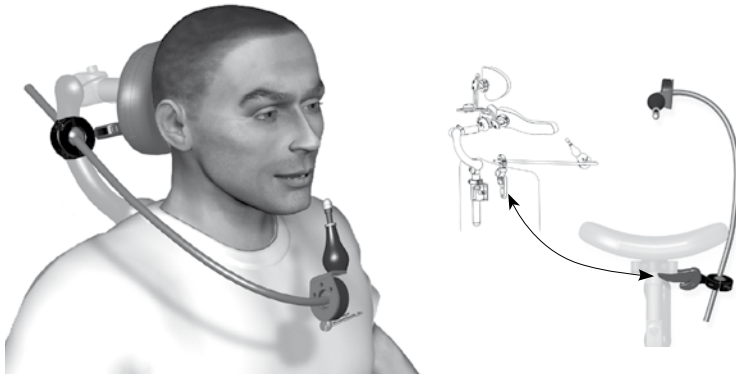Feste mini-joystick




Festet for Mini-joystick gir nøyaktig plassering av joysticken ved hjelp av to fullt roterbare kuleledd. Festet er utsvingbart. Utløsermekanismen aktiveres med én finger og festet vil automatisk låse i posisjon på nytt når det returneres til den tilpassede posisjonen. Den buede festestangen gir muligheter for tilpassing både i lengde og rotasjon. Festet for mini-joystick kan enten monteres direkte til en Whitmyer-hodestøtte eller bak på setesystemet. LM115 utsvingbart feste bestilles separat. Mini-joystick er ikke inkludert.

VARENUMMER:

LM1094	Feste mini-joystick
LM1092	Feste mini-joystick for PLUSH
LM1093	Feste mini-joystick for Contoured Cradle

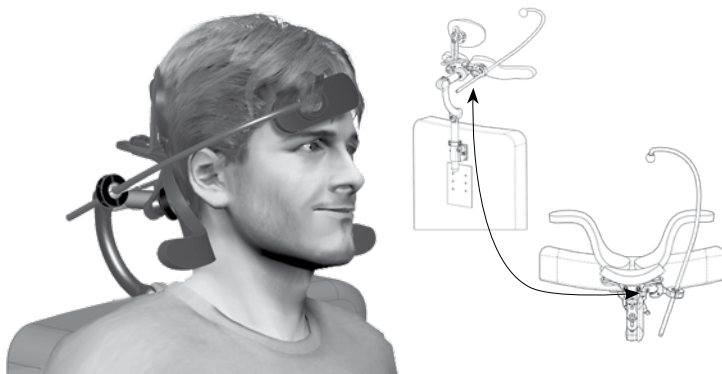Anterior støttestag




Støttestaget gir nøyaktig posisjonering av en posisjoneringspute eller bryter på eller ved personens panne. Staget kan monteres på brukerens høyre eller venstre side, eller rett ovenfra, og gir konsekvent posisjonering av en pute eller en bryter, samtidig som det opprettholdes tilstrekkelig avstand til brukerens hode. Den utsvingbare festebraketten har en utløsermekanisme som aktiveres ved bruk av én finger, og som automatisk låser på plass når den føres tilbake i den forhåndstilpassede posisjonen. LM115 utsvingbart feste og støttepute bestilles separat.

VARENUMMER:

LM2094	Anterior støttestag for S.O.F.T.
LM2092	Anterior støttestag for PLUSH
LM2093	Anterior støttestag for Contoured Cradle

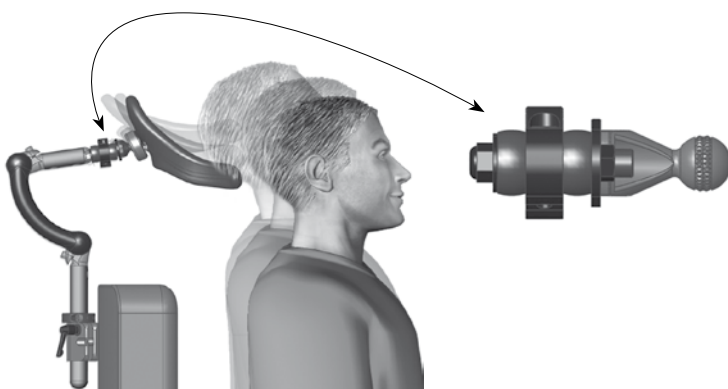Flex brakett




Flex braketten tillater fleksjon oppover, bevegelse og retur når hodestøtten blir utsatt for ekstensjonskrefter. Denne dynamiske bevegelsen opprettholder støtte for hodet gjennom hele bevegelsesmønsteret. Flex braketten bruker elastisk støtdemping som gir forsvarlig motstand mot kraft, mens hodestøtten returneres til den tilpassede posisjonen. Flex braketten monteres mellom hodestøttestaget og hodestøtteputen, og kan benyttes sammen med de fleste av Whitmyers produkter.

VARENUMMER:

M9450	Flex brakett
--------------	--------------

SKREDDERSYDDE LØSNINGER | Alternativer og tilbehør

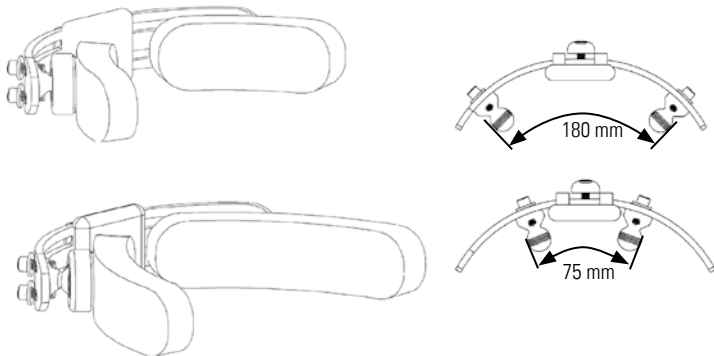Oksipitalstøtte T-bar



Oksipitalstøtte T-bar, plassert riktig, kan korrigere eller blokkere lateral fleksjons- eller rotasjonsmønstre. Bilaterale punktstøtter er utviklet for korrigering, blokkere rotasjon eller for å opprettholde hodet i midtlinjen. Avvik i lateral fleksjon kan tilpasses ved å benytte unilaterale støtteputer. Hodestøtteputene bør imitere håndplasseringen som ble brukt under evaluering og/eller simulering. Unngå direkte trykk på brukerens tinning eller området i nærheten av øyne eller ører.

VARENUMMER:

PLT15L	T-bar med korte hodestøtteputer
PLT20L	T-bar med lange hodestøtteputer

Kartleggingssett Whitmyer



Kartleggingssettet lar deg utforske optimale hodestøtteløsninger. Kartleggingssettet er pakket i en kasse på hjul med teleskophåndtak, slik at du kan transportere et komplett utvalg av hodestøtteputer, tilbehør og hodestøttestag. Settet ble utviklet som en hjelp til å velge den Whitmyer hodestøtten som passer best mulig. Kartleggingssettet leveres komplett med et universelt hodestøttefeste for rullestoler. Dette lar deg montere hodestøttene uten å endre rullestolen til hver enkelt bruker. Hodestøttefestet er justerbart 300-600 mm, og passer dermed på de fleste rullestoler.

VARENUMMER:

KIT-100	Kartleggingssett Whitmyer
----------------	---------------------------

PRO hodestøttestag off-set



Ved å montere det horisontale støttestaget motsatt vei oppnår du 63 mm justering forover.

PRO hodestøttestag off-set muliggjør 63 mm justering bakover på den horisontale stangen. Ved å montere det horisontale støttestaget motsatt vei oppnår du 63 mm justering forover.

VARENUMMER:

PRC7070	PRO hodestøttestag off-set
----------------	----------------------------


Verkøysett Imperial

VARENUMMER:

T 2500	Verkøysett Imperial
---------------	---------------------

SKREDDERSYDDE LØSNINGER | Festeløsninger

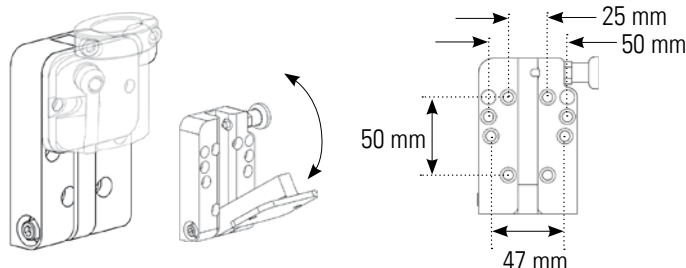Festebrakett nedfellbar universal




Whitmyers avtakbare festebraketter kan monteres på vårt nedfellbare universalfeste. Når festebraketten er montert på det nedfellbare festet, blir monteringen en kombinasjon av en avtakbar og nedfellbar festebrakett.

VARENUMMER:

M5000

Festebrakett nedfellbar universal

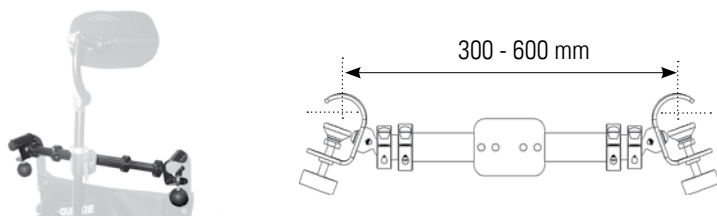Hodestøttefeste rullestol




Whitmyers hodestøttefeste for rullestol lar deg montere Whitmyer hodestøtter på enhver rullestol uten å lage hull eller andre tilpasninger på rullestolen. Hodestøttefestet monteres på rullestolens ryggør. Festeklemmene kan tilpasses for å passe på vinklede rør eller kjørehåndtak. Hodestøttefestet kan benyttes på rullestoler med bredde mellom 300-600 mm.

VARENUMMER:

M7000

Hodestøttefeste rullestol

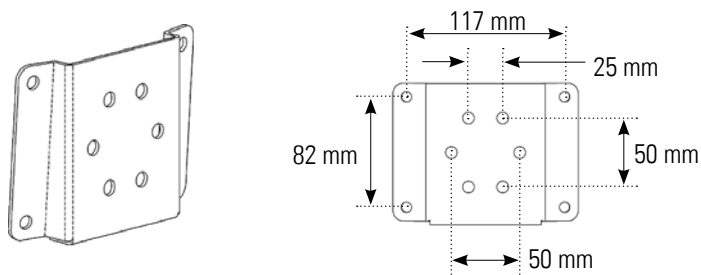Adapter for skallrygg




Adapter for skallrygg gir en flat overflate som kan brukes til å montere hodestøttens festebrakett til rullestoler med buet rygg. Adapteret fungerer også som en forsterkningsplate som fordeler trykket på et større monteringsområde.

VARENUMMER:

M1010

Adapter for skallrygg

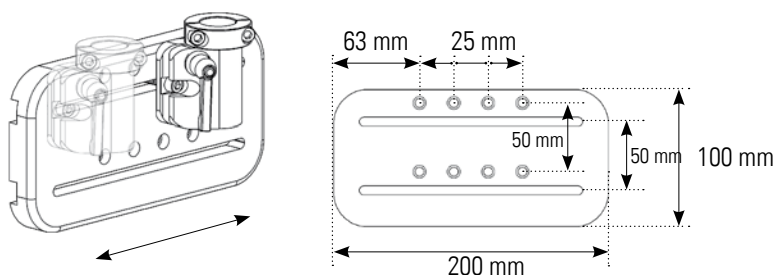Festebrakett sideforskyv




Festebraketten for sideforskyving har flere huller og tillater at hodestøtten kan plasseres riktigere i forhold til hodets plassering for personer med kraftig asymmetri. Platen festes til stolens eksisterende hullmønster, og tillater 100 mm bevegelse mot høyre eller venstre. En perfekt løsning dersom du ønsker å prøve en forskjøvet plassering av hodestøtten, dersom du må korrigere for feilplasserte klomuttere, eller dersom hodestøtten må flyttes for å være mer på linje med kraften som hodestøtten utsettes for.

VARENUMMER:

M7010

Festebrakett sideforskyv

TEKNISK INFO | AXYS hodestøttestag

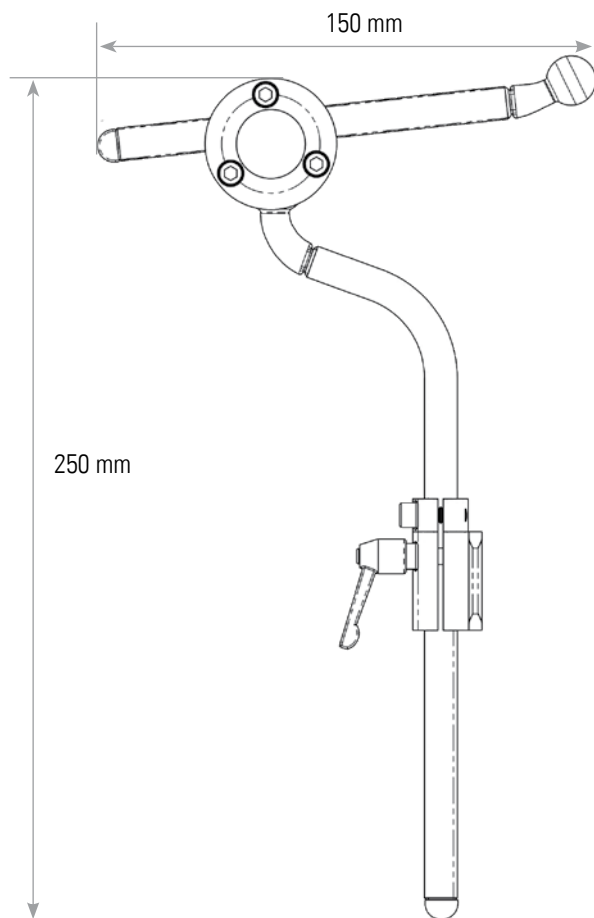

AXYS hodestøttestag er et velutprøvd og kostnadseffektivt valg av hodestøttestag. Overflaten i sort krom, kombinert med en liten, firkantet stålstang på 12,5 mm, gir et kompakt og elegant hodestøttestag. Staget er konstruert for kraftig bruk, enkel tilpasning og enkle endringer. Staget er kompatibelt med alt Whitmyer-tilbehør.

AXYS hodestøttestag uten pute(r) for voksne, varenr. AX7010

Spesielle hensyn:

Roter den horisontale stangen 180° for økt vinkeljustering av puten.

Et vertikalt off-set stag er tilgjengelig for tynnere rygg.

Feste for firkantet, vertikalt stag tilgjengelig.

Materiale: Stål

Overflate: Sort krom

Profil/størrelse:

12,5 mm firkantet stag

120 mm horisontal stag og 250 mm vertikal stag

Justeringsmuligheter:

Klemme i møtet mellom vertikalt og horisontalt støttestag

Støttestagets mål endres ved bruk av festeplater:

legg til 45 mm for S.O.F.T festeplate.

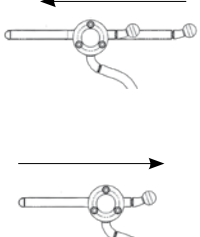
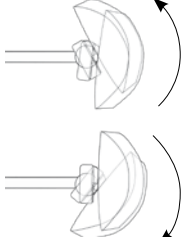
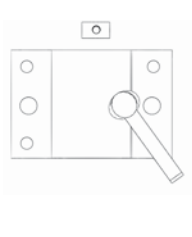
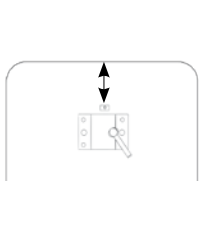
Festebraketter:

Avtakbar: M2500


Nedfellbar: M5500

Materiale: Ekstrudert aluminium

Overflate: Sort eloksert

					
	Høyde	Horisontal dybde	Vinkeljustering	Monteringshull	Festeplassering
Standard	250 mm	150 mm	30°	47 - 50 mm på midten	Minimum 75 mm fra toppen på stolryggen

TEKNISK INFO | LINX hodestøttestag

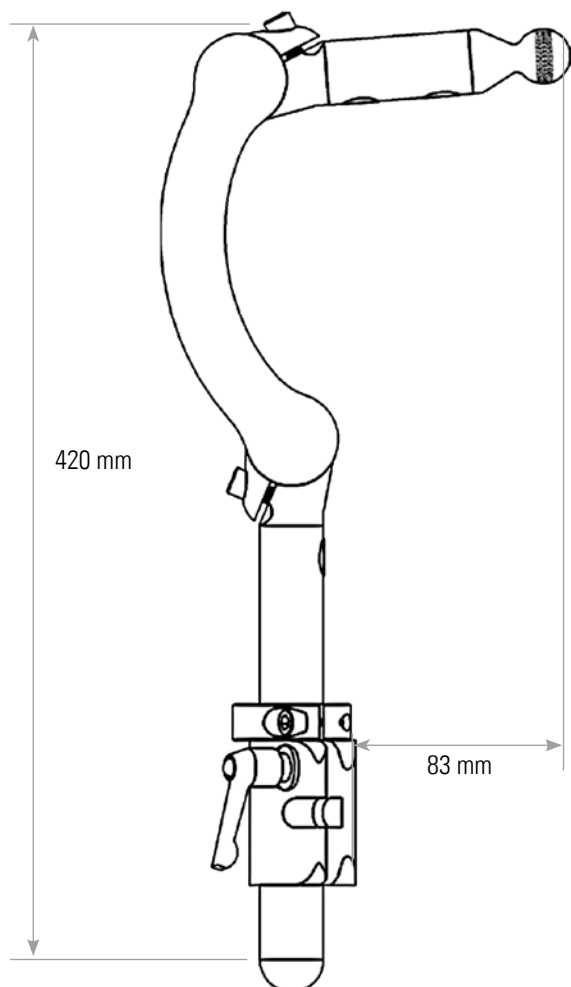

LINX hodestøttestag inneholder den nyeste teknologien innen moderne hodestøttestag. Kombinasjonen av to enkle og unike justeringspunkter gir fullt og trinnløst bevegelsesutslag anterior og posterior. Dette gir utallige muligheter for å plassere støtteflater. Matt-sorter rør i kontrast med blanke aluminiumsklemmer og en riflet monteringskule gir sikre justeringer i et elegant design.

LINX hodestøttestag uten pute(r) for voksen, varenr. LX7000

Spesielle hensyn:

Uten deler som stikker ut bakover og med to lett tilgjengelige justeringspunkter blir tilpassingsprosessen enklere.

Materiale:

Ekstrudert og støpt aluminium, samt rustfritt stål
Overflate: klemmer eloksert, riflet kule blankpolert, rør i sort matt eloksering.

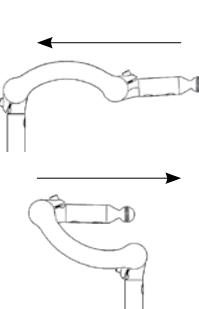
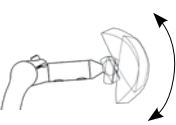
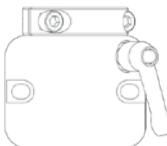
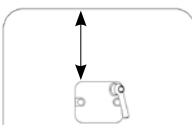
Profil/størrelse: 22 mm rør

Justeringsmuligheter:


To låsbare ledd gir en tredelt støtteløsning
Støttestagets mål endres ved bruk av festeplater:
legg til 45 mm for S.O.F.T festeplate.

Festebraketter:

Avtakbar: M2300
Nedfellbar: M5300
Materiale: Ekstrudert aluminium
Overflate: Sort eloksert

					
	Høyde	Horisontal dybde	Vinkeljustering	Monteringshull	Festeplassering
Standard	178 mm	215 mm forover 20 mm bakover	30°	47 - 50 mm på midten	Minimum 150 mm fra toppen på stolryggen

TEKNISK INFO | PRO hodestøttestag

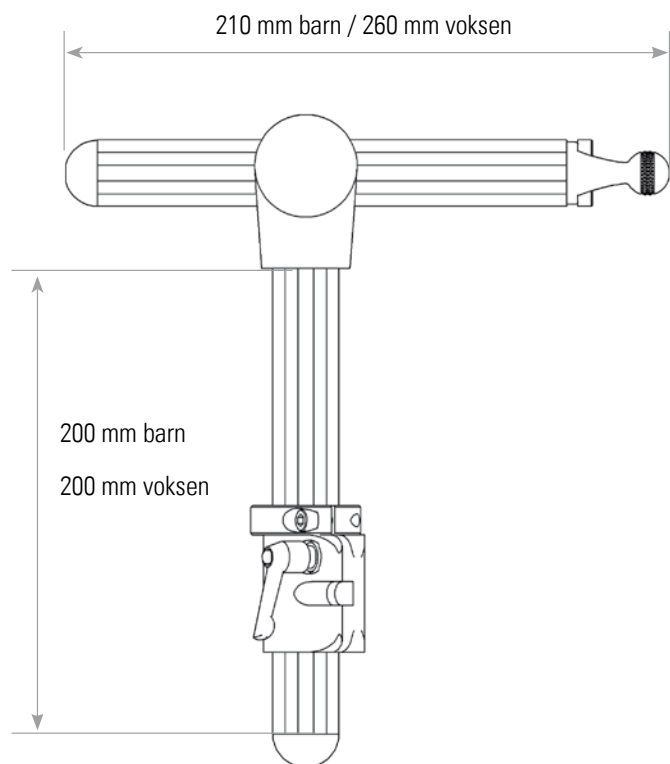

PRO hodestøttestag er et velutprøvd hodestøttestag for krevende tilpasninger. Hodestøttestaget er ideelt for brukere med redusert styrke eller utfordringer med tonus. Det er ypperlig å bruke på institusjoner.

PRO hodestøttestag uten pute(r) for voksen, varenr. PRC7010

PRO hodestøttestag uten pute(r) for barn, varenr. PRC7030

Spesielle hensyn:

Utspring bakover: den horisontale stangen kan lett kappes.
En off-set brakett er tilgjengelig for tynnere rygg.

Materiale: Aluminium

Overflate: Sort eloksert

Profil/størrelse:

Voksne og barn 30 mm ekstrudert profil

Justeringsmuligheter:

Horisontalt dreiepunkt.

Støttestagets mål endres ved bruk av festeplater: legg til 30 mm for S.O.F.T festeplate.

Festebraketter:

Avtakbar: M2200


Nedfellbar: M5200

Materiale: Aluminium

Overflate: Sort eloksert

	Høyde	Horisontal dybde	Vinkeljustering	Monteringshull	Festeplassering
Voksen	150 mm	38 mm forover 200 mm bakover	45°	47 - 50 mm på midten	Minimum 75 mm fra toppen på stolryggen
Barn	150 mm	38 mm forover 150 mm bakover	45°	47 - 50 mm på midten	Minimum 75 mm fra toppen på stolryggen

TEKNISK INFO | ONYX hodestøttestag

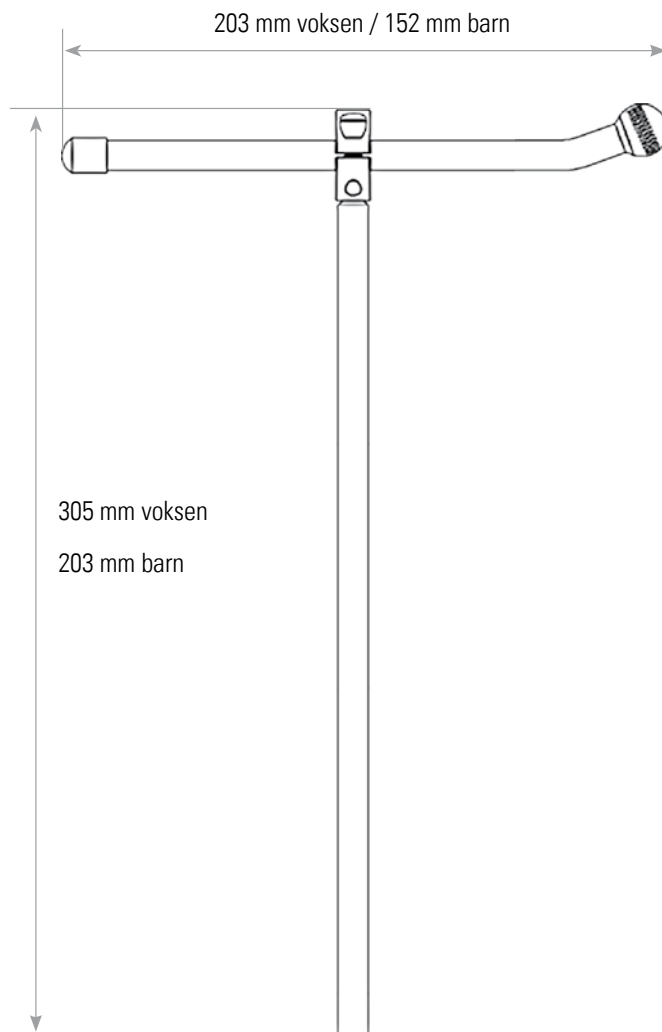

ONYX hodestøttestag er en kompakt løsning med en overflate i sort krom, kombinert med en liten, firkantet stålstang. Hodestøttestaget er konstruert for kraftig bruk, enkel tilpassing og enkle endringer.

ONYX hodestøttestag uten pute(r) for voksen, varenr.: OX7010
for barn, varenr. OX7030

Spesielle hensyn:

Roter det horisontale staget 180° for økt vinkeljustering av puten. Et off-set stag er tilgjengelig for tynnere rygg. Feste for firkantet, vertikalt stag er tilgjengelig.

Materiale: Stål

Overflate: Sort krom

Justeringsmuligheter:

Fast klemme i møtet mellom vertikalt og horisontalt støttestag. Støttestagets mål endres ved bruk av festeplater: legg til 45 mm for S.O.F.T festeplate.

Monteringsbraketter:


Avtakbar: M2100 Nedfellbar: M5100

Materiale: Ekstrudert aluminium

Overflate: Sort eloksert

	Høyde	Horisontal dybde	Vinkeljustering	Monteringshull	Festeplassering
Voksen	279 mm	25 mm min 203 mm maks.	30°	48 - 51 mm på midten	Minimum 76 mm fra toppen på stolryggen
Barn	178 mm	25 mm min 152 mm maks.	30°	48 - 51 mm på midten	Minimum 76 mm fra toppen på stolryggen

TEKNISK INFO | COBRA hodestøttestag

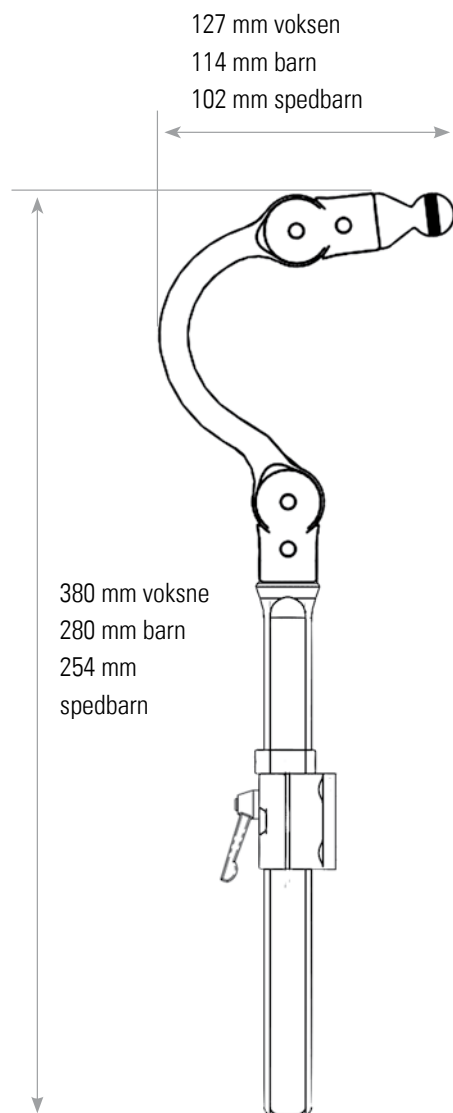

COBRA hodestøttestag har et glatt og enkelt design uten utspring bak på stolen. COBRA har uovertruffen styrke og posisjoneringsmuligheter, og er tilgjengelig i tre størrelser. Komponentene er modulære og kan lett byttes ut, slik at riktig posisjonering av hodet kan oppnås selv om brukerens behov endrer seg over tid.

Spesielle hensyn:

Alle COBRA hodestøttestag leveres med en avtakbar festebrakett. Øverst på det vertikale COBRA-staget sitter låsbare rotasjonsledd som, sammen med svane Halsen, tillater vinkeljustering og dybdejustering av hode støtteputen. Utformingen er ikke til hinder for tilgang fra baksiden.

Materiale: Aluminium

Overflate: Sort eloksert

Justeringsmuligheter:

To justerbare og låsbare rotasjonsledd på hver side av en svane Hals.

Festebraketter:


En avtakbar festebrakett er inkludert med alle COBRA hodestøttestag.

Materiale: Ekstrudert aluminium

Overflate: Sort eloksert

	Høyde	Horisontal dybde	Vinkeljustering	Monteringshull	Festeplassering
Voksen	165 mm	165 mm forover 50 mm bakover	30°	48 - 51 mm på midten	Minimum 127 mm fra toppen på stolryggen
Barn	89 mm	127 mm forover 38 mm bakover	30°	48 - 51 mm på midten	Minimum 127 mm fra toppen på stolryggen
Spedbarn	89 mm	100 mm forover 12 mm bakover	30°	48 - 51 mm på midten	Minimum 127 mm fra toppen på stolryggen

TEKNISK INFO | COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag

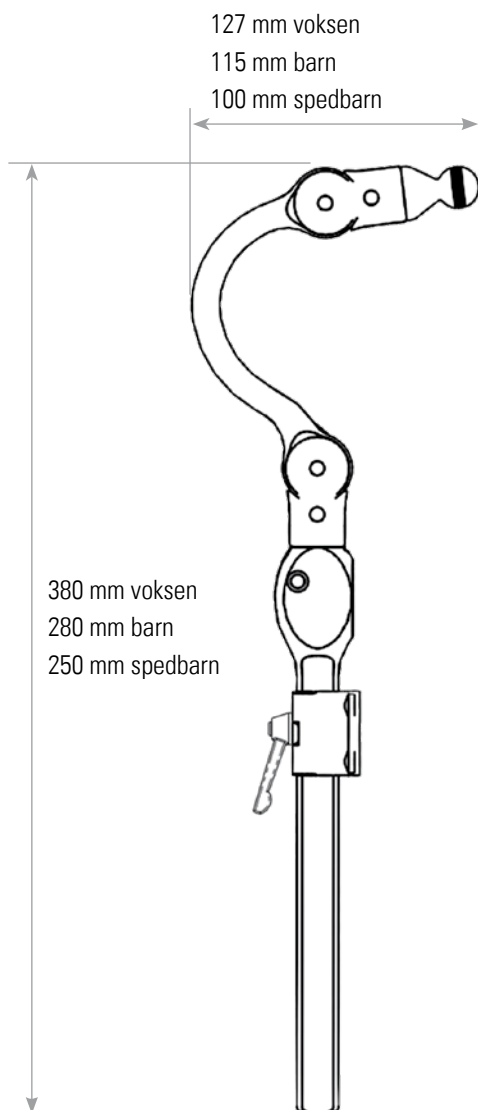

COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag kan enkelt felles ned ved hjelp av en trykknapp på siden av hodestøttestaget. Hodestøtten kan da felles ned bak rullestolens rygg. COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag har uovertruffen styrke og posisjoneringsmuligheter, og leveres i størrelsene Liten (spedbarn), Medium (barn) og Stor (voksen). Komponentene er modulære og kan lett byttes ut, slik at riktig posisjonering av hodet kan oppnås selv om brukerens behov endrer seg over tid.

Spesielle hensyn:

Alle COBRA XTRA nedfellbare hodestøttestag leveres med avtakbar festebrakett, men uten pute(r):

Spedbarn	varenr. CBRA5080
Barn	varenr. CBRA5030
Voksen	varenr. # CBRA5010

Øverst på det vertikale COBRA-staget sitter låsbare rotasjonsledd som, sammen med svanehalen, tillater vinkeljustering og dybdejustering av hodestøtteputen.

Utformingen er ikke til hinder for tilgang fra baksiden.

Materiale: Aluminium

Overflate: Sort eloksert

Profilstørrelse: 12 mm x 22 mm stolpe og 12 mm stag

Spedbarn 70 mm hals, 280 mm vertikalt stag

Barn 115 mm hals, 280 mm vertikalt stag

Voksen 140 mm hals, 288 mm vertikalt stag

Justeringsmuligheter: To justerbare og låsbare rotasjonsledd på hver side av en svanehals.

Festebraketter:

En avtakbar festebrakett er inkludert med alle COBRA XTRA nedfellbart hodestøttestag.

Materiale: Ekstrudert aluminium

Overflate: Sort eloksert

	Høyde	Horisontal dybde	Vinkeljustering	Monteringshull	Festeplassering
Voksen	140 mm	165 mm forover 50 mm bakover	30°	47 - 50 mm på midten	Minimum 127 mm fra toppen på stolryggen
Barn	62 mm	127 mm forover 38 mm bakover	30°	47 - 50 mm på midten	Minimum 127 mm fra toppen på stolryggen
Spedbarn	62 mm	100 mm forover 12 mm bakover	30°	47 - 50 mm på midten	Minimum 127 mm fra toppen på stolryggen

TEKNISK INFO | PLUSH hodestøtteputer

Skum:

To lag skum med ulik tetthet, limt sammen:

16mm fast skum (sort) som stabiliserende lag i bunnen, fri for latex. Selvheftende flanell på baksiden for enkelt å kunne erstatte skummet.

Komfortlag:

19 mm mykt skum for komfort (hvit).

Skall:

Formet, epoxybelagt stålskall med selvheftende krokmaterialer for enkelt å kunne erstatte skummet.

Krage:

Delt universalkrage med 19 mm radius, inkludert vinyloverdrag.

Trekk:

Trekk med glidelås, neopren med Lycra utvendig og nylon på innsiden (sort).

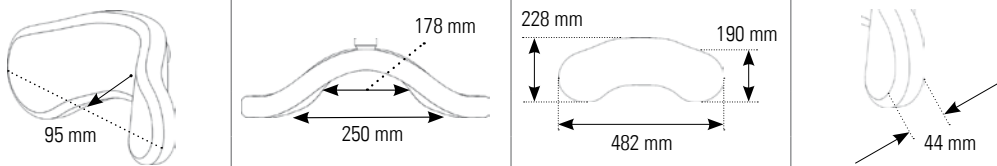
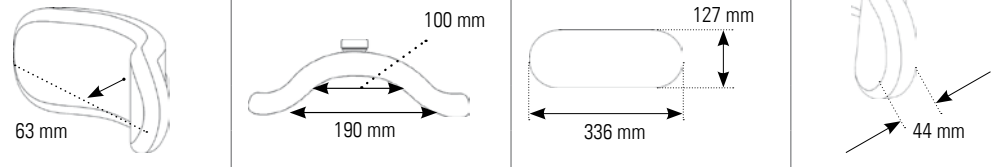
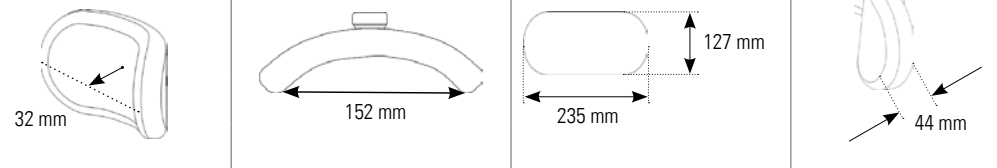
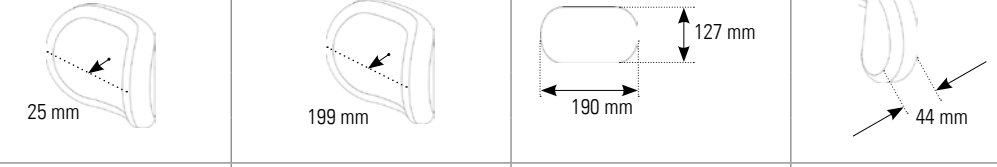
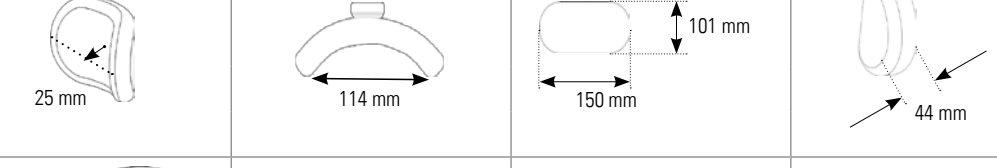
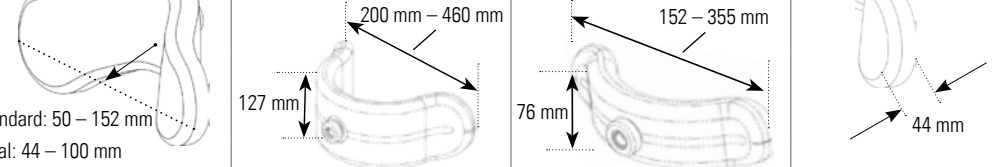
Alternative trekk:

Lycra-trekk er standard.

MERK:

Målene kan variere på grunn av variasjoner i skummet.

Vaskeanvisning: Vaskes for hånd med et skånsomt vaskemiddel og kaldt vann. Tørkes flatt.

PLUSH hodestøtteputer				
480 mm PLUSH P1900L				
350 mm PLUSH P1400L				
250 mm PLUSH P1000L				
200 mm PLUSH P800L				
150 mm PLUSH P600L				
Justerbar PLUSH Standard: P8088L Smal: P8044L	 Standard: 50 – 152 mm Smal: 44 – 100 mm	Standard Justering: 200 mm – 460 mm	Smal Justering: 152 – 355 mm	

TEKNISK INFO | Spesial PLUSH hodestøtteputer

Spesial PLUSH hodestøtteputer				
480 mm PLUSH to innfestn. P1920L				
350 mm PLUSH to innfestn. P1420L				
PLUSH Smal P1205L				

Spesial PLUSH C-PLUSH hodestøtteputer				
C-PLUSH stor P4010L				
C-PLUSH medium P3010L				
C-PLUSH liten P2010L				

TEKNISK INFO | Oksipitalputer og Contoured Cradle hodestøtteputer

Skum:

Stabilt skum (sort), fri for latex. Selvheftende flanell på baksiden for enkelt å kunne erstatte skummet.

Skall:

Formet, epoxybelagt stålskall. Selvheftende krokmateriale for enkelt å kunne erstatte skummet.

Krage:

Delt universalkrage med 19 mm radius, inkludert vinyloverdrag.

Trekk:

Trekk med glidelås, neopren med Lycra utvendig og nylon på innsiden (sort).

Mykt fleece-trekk er kun tilgjengelig for CUDDLES hodestøtte.

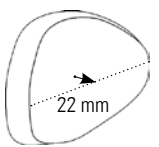
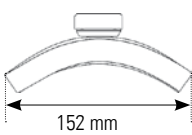
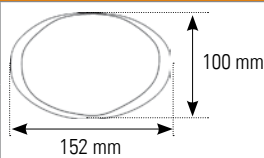
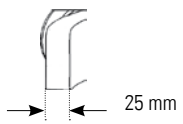
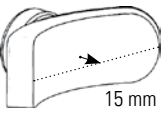
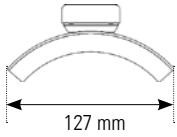
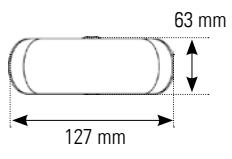
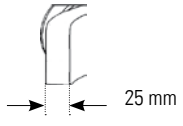
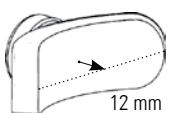
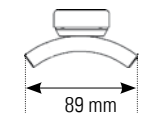
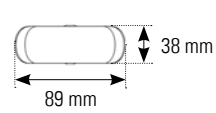
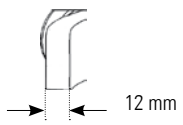
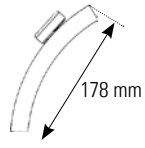
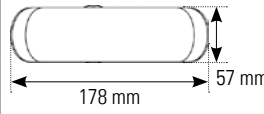
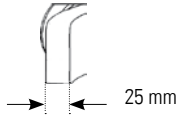
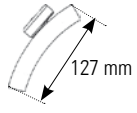
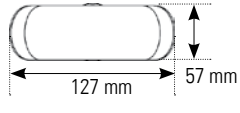
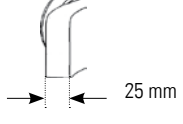
Alternative trekk:








Lycra-trekk er standard. Mykt fleece-trekk er kun tilgjengelig for CUDDLES hodestøttepute (spedbarn).

MERK:
































Målene kan variere på grunn av variasjoner i skummet.

Vaskeanvisning: Vaskes for hånd med et skånsomt vaskemiddel og kaldt vann. Tørkes flatt.


Oksipitalputer				
Voksen P600L				
Barn P500L-WB				
Spedbarn INFT100				
T-bar lang PL20L				
T-bar standard PL15L				

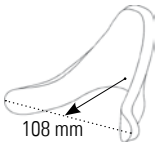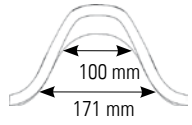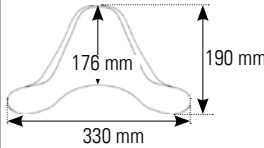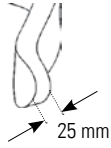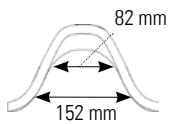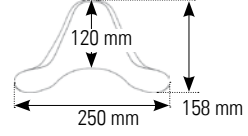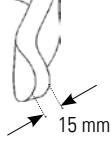Contoured Cradle hodestøtteputer				Fortsetter på side 43
Stor P400L				
Medium P300L				

TEKNISK INFO | Sub-oksipitalputer og hel sub-oksipitalpute

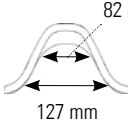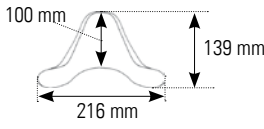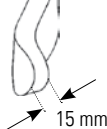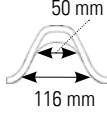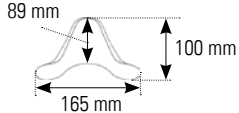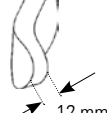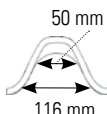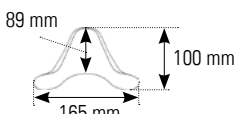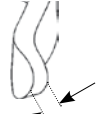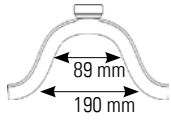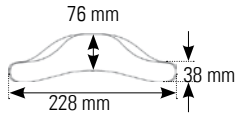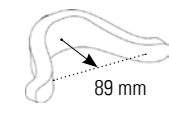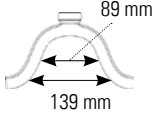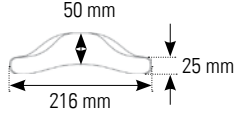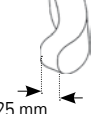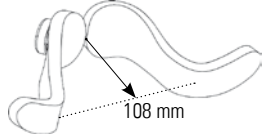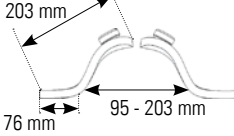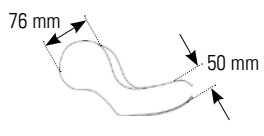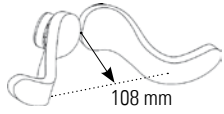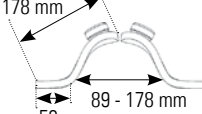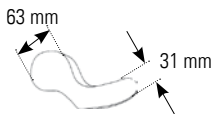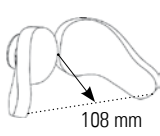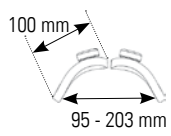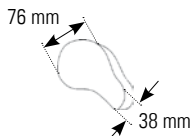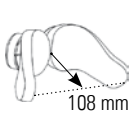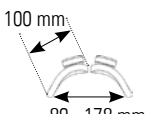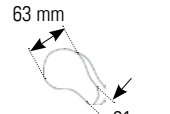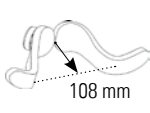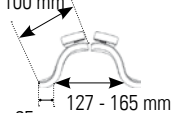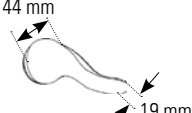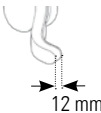Contoured Cradle hodestøtteputer, fortsetter				
Liten P200L	 57 mm	 82 mm 127 mm	 100 mm 216 mm 139 mm	 15 mm
Spedbarn INFT200LSE	 38 mm	 50 mm 116 mm	 89 mm 165 mm 100 mm	 12 mm
Cuddles INFT200	 38 mm	 50 mm 116 mm	 89 mm 165 mm 100 mm	 12 mm
Hel sub-oksipitalpute				
Stor PSS01L	 114 mm	 89 mm 190 mm	 76 mm 228 mm 38 mm	 25 mm
Liten PSS03L	 89 mm	 89 mm 139 mm	 50 mm 216 mm 25 mm	 25 mm
Sub-oksipitalputer				
Størrelse 1 PS01R / PS01L	 108 mm	 203 mm 76 mm 95 - 203 mm	 76 mm 50 mm	 25 mm
Størrelse 3 PS03R / PS03L	 108 mm	 178 mm 89 - 178 mm 50 mm	 63 mm 31 mm	 25 mm
Størrelse 2 PS02R / PS02L	 108 mm	 100 mm 95 - 203 mm	 76 mm 38 mm	 25 mm
Størrelse 4 PS04R / PS04L	 108 mm	 100 mm 89 - 178 mm	 63 mm 31 mm	 25 mm
Spedbarn INFT-R / INFT-L	 108 mm	 100 mm 25 mm 127 - 165 mm	 44 mm 19 mm	 12 mm


TEKNISK INFO | S.O.F.T. hel sub-oksipitalpute Festeplate

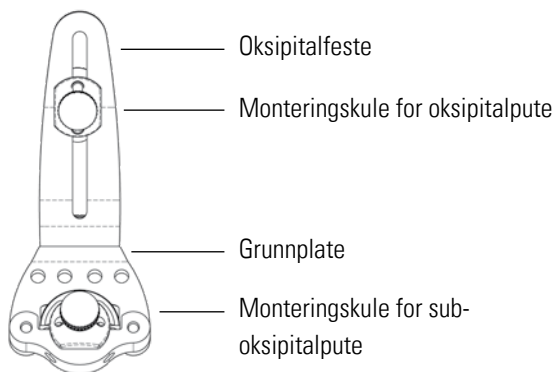

Den universale utformingen på festeplaten for hel sub-oksipitalpute passer det horisontale staget på alle Whitmyer hodestøttestag. Ved hjelp av kuleleddet kan festeplaten roteres og tiltes i hele justeringsintervallet. Kuleleddet på oksipitalfestet gir mulighet for tilpasning av høyde og rotasjon. Separat dybdejustering av oksipitalputen ved hjelp av slissespoet.

M9275 Justering					
	Rotasjon 30°	Vinkeljustering forover 30°	Dybde 57 mm	Reversert oksipital-feste 127 mm	Høyde 50 mm


TEKNISK INFO | S.O.F.T. voksen og barn festeplate



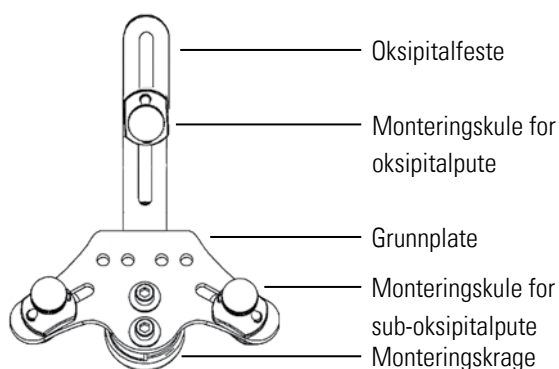


Den universelle utformingen av S.O.F.T festeplaten passer det horisontale staget på alle Whitmyer hodestøttestag. Festeplaten er laget for å kunne montere tre posisjoneringsputer. Kuleleddet for innfestning gir gode muligheter for tilt og rotasjon av hele festeplaten. De breddejusterbare monteringskulene for sub-oksipitalputer sikrer jevn trykkfordeling når putene posisjoneres. Monteringskulen for oksipitalpute kan justeres i høyde. Sammen med separat dybdejustering av oksipitalfestet, bidrar dette til riktig anatomisk tilpasning for korrigeringer/kontroll og støtte.

M9375 Justering					
	Rotasjon 30°	Vinkeljustering forover 30°	Dybde 57 mm	Reversert oksipital-feste 127 mm	Høyde 50 mm

RESERVEDELER | Anterior støtte

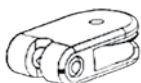					
DFS	Frotté mot huden	Neopren mot huden	Festeplate anterior støtte	DFS trinse	Snor inkl justerings-låser
Voksen	D1017	D1018	D1010	D1015	D1013
Barn	D1028	D1027	D1010	D1015	D1013

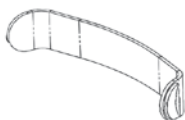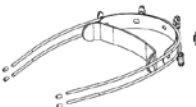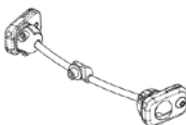				
DFS²	Neopren mot huden	Støtte inkl stropp	Tverrstag	Monteringsbolter
Voksen	D2018	DQ1010	DQ-CBA1	DQ-HDW
Barn	D2027	DQ3010	DQ-CBA3	DQ-HDW

RESERVEDELER | Laterale punktstøtter

							
	Spot	Standard	Lang	Oval	Stor "C"	Medium "C"	Liten "C"
Varenummer	PL10L	PL15L	PL20L	P600L	PL30L	PL35L	PL40L
Størrelse	50 mm	60 x 127 mm	60 x 178 mm	100 x 150 mm	50 x 152 mm	15 x 127 mm	12 x 100 mm



					
	Utsvingbart feste	Kule	Støttestag punkt-støtte	PLUSH festeplate for punkt-støtte	CCS festeplate for punkt-støtte
Varenummer	LM115	LM1100	LM1090	LM-PL	LM-CCS
Størrelse	-	12 mm	279 mm	-	-



TEKNISK INFO | Reservedeler skum og trekk

Skum og trekk utsettes for slitasje og bør derfor kontrolleres, vaskes og skiftes ut med jevne mellomrom. Whitmyr leveres med trekk i Lycra. For CUDDLES (spedbarn) tilbys også et mykt trekk i fleece. Reservedeler for å erstatte skummet er tilgjengelig for alle Whitmyr hodestøtteputer.

MERK: Våre nåværende reservedeler i skum kan også benyttes på tidligere S.O.F.T hodestøtteputer (krom). På tidligere hodestøtter må nye trekk kjøpes i tillegg, for å sikre riktig passform.

PLUSH hodestøtteputer					
					
	480 mm PLUSH	350 mm PLUSH	250 mm PLUSH	200 mm PLUSH	150 mm PLUSH
Skum	PF1900	PF1400	PF1000	PF800	PF605
Trekk	PC1900L	PC1400L	PC1000L	PC800L	PC605L

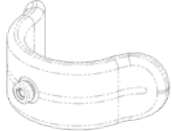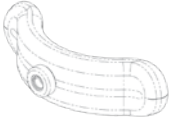
Adjust-A-PLUSH hodestøtteputer	
	
Standard	Smal
Skum	PF8088
Trekk	PC8088L
	PF8044
	PC8044L

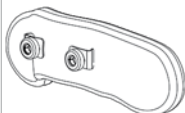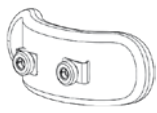PLUSH hodestøtteputer						
						
	480 mm PLUSH to innfestn.	350 mm PLUSH to innfestn.	300 mm PLUSH smal	"C" PLUSH stor	C PLUSH medium	"C" PLUSH liten
Skum	PF1900	PF1400	PF1205	PF4010	PF3010	PF2010
Trekk	PC1900L	PC1400L	PC1205L	PC4010L	PC3010L	PC2010L

Contoured Cradle hodestøtteputer				
				
Stor	Medium	Liten	Spedbarn	CUDDLES
Skum	PF400	PF300	PF200	INFTF200
Trekk	PC400L	PC300L	PC200L	INFTC200-L
				INFTC200F

TEKNISK INFO | Reservedeler skum og trekk

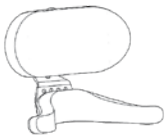
Hodestøtte med hel sub-oksipitalpute

				
	SS10	SS8	SS4	SS3
Skum	PFSS10	PFSS8	PFSS4	PFSS3
Trekk	PCSS10L	PCSS8L	PCSS4L	PCSS3L

S.O.F.T. hodestøttepute voksen

				
	S.O.F.T. 5	S.O.F.T. 1	S.O.F.T. 2	S.O.F.T. 8
Skum	PF5	PF1	PF2	PF8
Trekk	PC5L	PC1L	PC2L	PC8L

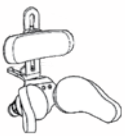S.O.F.T. hodestøttepute barn

				
	S.O.F.T. 3	S.O.F.T. 6	S.O.F.T. 4	S.O.F.T. 7
Skum	PF3	PF6	PF4	PF7
Trekk	PC3L	PC6L	PC4L	PC7L



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3
1540 Vestby
Tel.: +47 66 96 38 00
E-Mail: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



Se bestillingsskjemaet for mer informasjon om fullstendige spesifikasjoner, alternativer og ekstrautstyr. All informasjon kan endres uten forvarsel. Vennligst kontakt Sunrise Medical dersom du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan dette dokumentet ses i PDF-format på www.SunriseMedical.eu, eller du kan bestille det med større tekst.