


 **E | F55**



GER DIG EXTRA KRAFT

F55

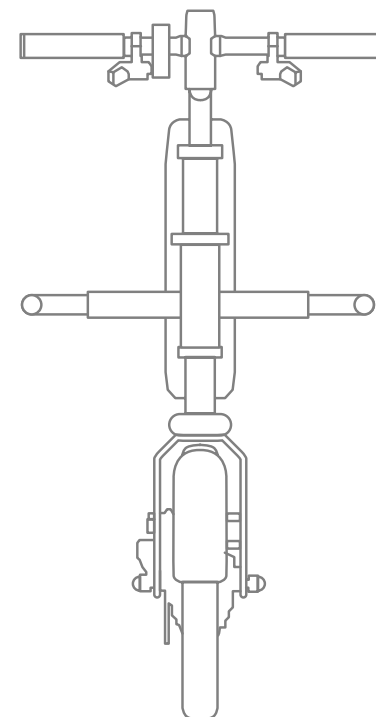

EXTRA KRAFTER TILL DIN RULLSTOL ...

BRUKARSTYRT DRIVAGGREGAT PERFEKT ATT ANVÄNDA BÅDE I STAN OCH PÅ LANDET

... SÅ ATT DU ORKAR LÄNGRE

Smart utformad för att ge självständighet och frihet. F55 ingår i vårt varumärke Empulse där produkterna hjälper till att spara brukarens energi så att man orkar ta längre utflykter. Det är också fantastiskt roligt att köra med F55!

Ultrakompakt och lätt att docka på och av din rullstol så att man lätt kan få tillgång till den extra kraften när man behöver den. Det är den perfekta lösningen när man inte vill använda bilen och när du vill ha en mer miljövänlig lösning - eller om du bara vill ha kul.



NJUT AV ÅKTUREN



KUL ATT
KÖRA



GER MER FRIHET

Livet i staden är dynamiskt och levande. Följ med, njut av rörlighet och flexibilitet. Smala hissar, smala gator, smala korridorer? Ingen större utmaning tack vare mycket litet vändutrymme.

Aktivera farthållaren så håller Empulse F55 den valda hastigheten vilket underlättar längre turer. Vill du ta med din Empulse F55 på semesterresan utomlands? Inga problem, batteriet är IATA-certifierade vilket förenklar din flygresor.

Med Empulse F55 kan du fokusera på det som är viktigt i ditt liv.



GÖR DET ENKELT ATT TA SIG FRAM

Den kraftfulla borstlösa elmotorn i kombination med optimerat väggrepp hjälper till att ta dig fram på nästan alla typer av underlag.

**NO
LIMITS**

BATTERI

Litiumjonbatteriet på 8,1 Ah ger en räckvidd på upp till 25 km och har ett intelligent batterihanteringssystem som ger förbättrade laddningscykler och längre livslängd.

DISPLAY

På den lättlästa displayen har du full kontroll: hastighet, trippmätare, total sträcka, batterinivå och energiförbrukning.

VÄGGREPP

Det som betyder mest i branta uppförbackar. Med den fullt justerbara Empulse F55 kan du justera viktbalansen och optimera väggreppet.

BEKVÄMT & SMIDIGT

Korrigera styrets position när du behöver det.

VALET ÄR DITT


Vill du köra din Empulse F55 genom staden med smidiga 8,5" hjul eller vill du ha lite mer komfort som du får med det större hjulet på 14".

LYSER UPP DIN VÄG

LED belysning är standard på Empulse F55

BROMSSYSTEM

Två oberoende bromssystem för ökad säkerhet: elektrisk broms och kraftfull skivbroms.

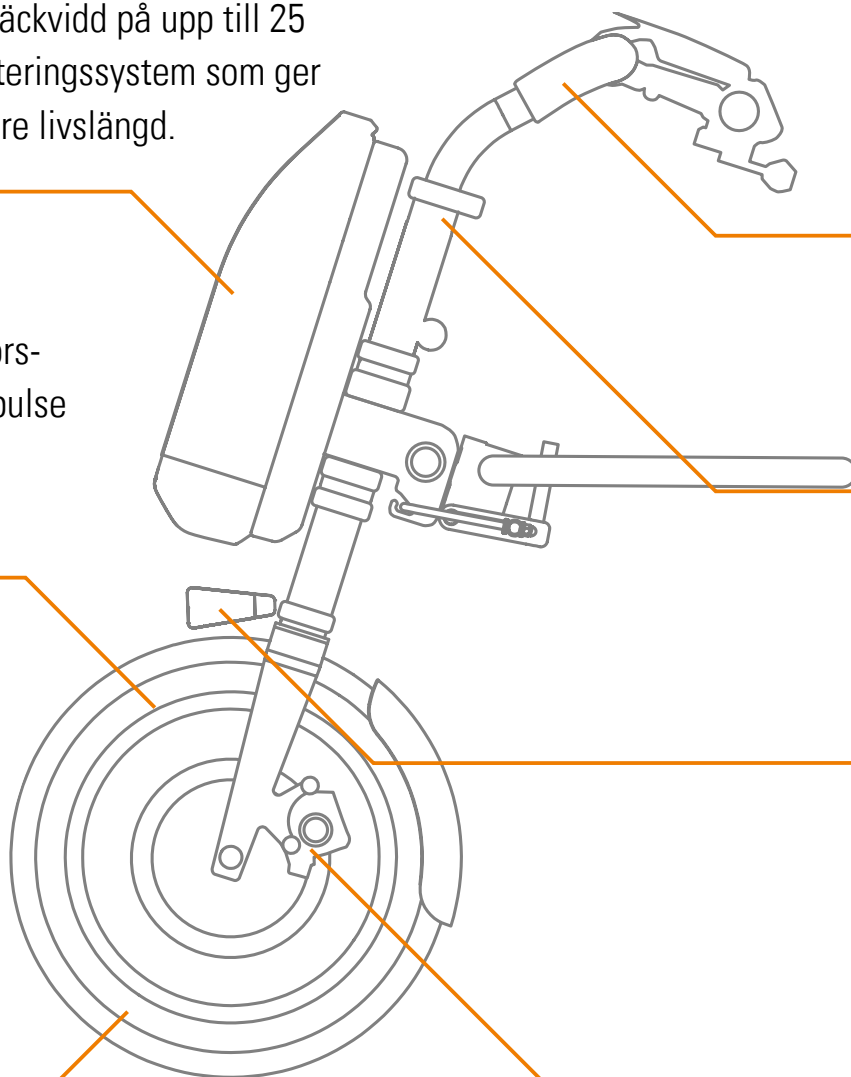

ENKEL ATT MONTERA NÄR DU BEHÖVER DEN OCH TAR LITEN PLATS NÄR DU INTE BEHÖVER DEN.

DET TAR BARA NÅGRA SEKUNDER ...

... att docka på din Empulse F55 och du är redo för äventyr. Med den lätt-använda dockningsmekanismen kan din Empulse F55 dockas till alla typer av manuella rullstolar inom några sekunder och blir en kraftfull del av det dagliga livet.



Hjul 8,5", massivt däck, dockning för manuella rullstolar med fast front.



Hjul 14", luftdäck, dockning för manuella rullstolar med fast front.



Hjul 8,5", massivt däck, dockning för manuella rullstolar med swing-away benstöd med längre ramrör och förlängd styrstång.





Vik ihop ramen och för in i stativet så får du ett praktiskt paket som enkelt kan förvaras.


Om det behövs kan man till och med montera bort stativet helt och hållet.



FÄRGVAL

INGÅR



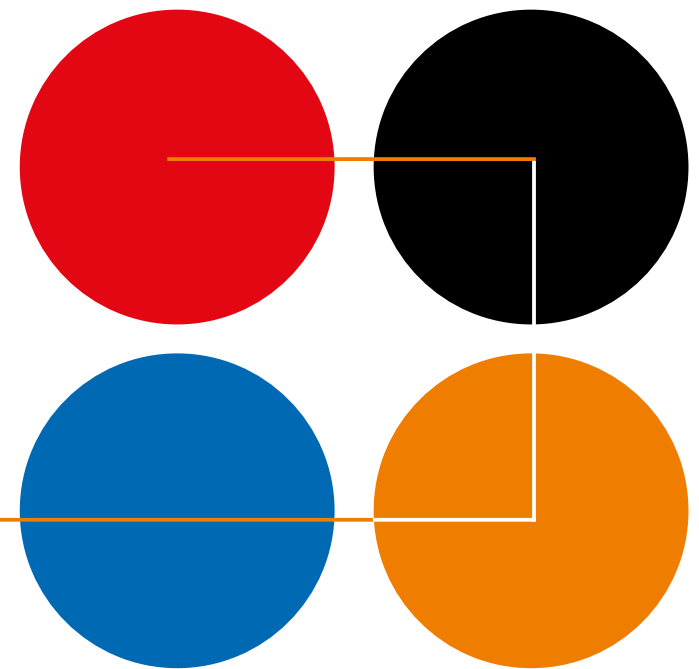

Skapa din personliga stil med hjälp av olika färgval på paneler och stänkskärm. Välj mellan svart, blå, röd och orange. Alla färgerna levereras med produkten och kan enkelt bytas ut när du önskar.



TEKNISK SPECIFIKATION

Empulse F55

Driftspänning	36 Volt
Räckvidd	25 km max.
Klättringskapacitet	upp till 11% (6°)
Stativets bredd	260 – 480 mm ⁽¹⁾
Max. brukarvikt	110 kg
Max. hastighet framåt	6 km/h; tillval: 10 km/h och 15 km/h
Batteriets vikt	2 kg
Hjul	8,5" massivt däck/14" luftdäck
Total vikt utan batteri	11 kg
Batterityp	Litiumjon, 36V, 8.1 Ah
Total vikt med batteri	Från 13 kg
Broms	Dubbelt bromssystem: mekanisk och elektrisk broms
Färg	svart
Färginlägg (inkl. med produkten)	svart, röd, blå, orange (levereras med svart monterad)

⁽¹⁾ Rambredden mäts från centrum av ramrören där stativet ska monteras. Vid kontroll av kompatibilitet, utgå från detta mått, inte stolens sittbredd.

För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via www.SunriseMedical.se.



Sunrise Medical AB

Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel.: 031-748 37 00
E-post: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

