

Q300[®] M Mini

Pequena nas dimensões, ENORME no desempenho



Q300 M Mini SEDEO LITE



Q300 M Mini SEDEO PRO

VAI ONDE OUTRAS CADEIRAS ELÉTRICAS NÃO CONSEGUEM COM A Q300 M MINI

Com uma largura de apenas **52 cm**, a nova Q300 M Mini é a cadeira elétrica com tração central mais estreita do mercado! O seu reduzido diâmetro de viragem de **112 cm** permitir-lhe-á não apenas aceder onde outras cadeiras não podem, mas também movimentar-se através de espaços que anteriormente considerava fora de alcance.

Com excelente agilidade também em ambientes exteriores, as suas suspensões patenteadas em todas as rodas mantêm-no seguro e estável em todos os momentos. É necessário ultrapassar **desníveis de até 7 cm**? Uma brincadeira de criança com as rodas motrizes de 14". Inclusivamente, pode até sair do caminho estabelecido graças aos seus **motores de 4 polos** muito resistentes que lhe permitirão avançar por onde outros recuam. Com uma **autonomia de 36 km**, não precisará de voltar tão cedo.

Combine a base de desempenho comprovado da Q300 M Mini com o sistema de assento **SEDEO LITE** para necessidades posturais de leves a moderadas ou com o **SEDEO PRO** se precisar de um posicionamento mais complexo.

Com uma completa gama de funções elétricas disponíveis e inúmeras opções de personalização, desde desenhos personalizados de quadros até detalhes de cores. Desloque-se sempre com estilo e em primeira classe com a Q300 M Mini.

O que espera para a descobrir?



Siga o Código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo.



PROBLEMAS DE ESPAÇO? CONHEÇA A SUA BASE ULTRACOMPACTA!

Está cansado que lhe digam por onde se pode movimentar? A base ultracompacta de 52 cm da Q300 M Mini é tão incrivelmente estreita que lhe permitirá chegar até onde outras cadeiras elétricas não podem.

52 cm

112 cm



DIÂMETRO DE VIRAGEM ULTRA REDUZIDO DE 112 CM

Graças à sua autêntica tecnologia de tração central, a Q300 M Mini gira virtualmente sobre o seu próprio eixo, proporcionando uma viragem ultra reduzida de **112 cm**, ao contrário de outras cadeiras de rodas elétrica com tração dianteira ou traseira que precisam de mais espaço para virar sobre as rodas motrizes, resultando num diâmetro de viragem maior.



VERDADEIRA TECNOLOGIA DE TRAÇÃO CENTRAL

Se o centro de gravidade estiver deslocado em direção à frente ou traseira da cadeira, existe menos peso na roda motriz, reduzindo a tração, fazendo com que o diâmetro de viragem seja maior. No entanto, na Q300 M Mini, as rodas motrizes da cadeira de rodas estão alinhadas mesmo no centro da base, proporcionando assim um diâmetro de viragem mais compacto e uma maior tração e estabilidade, graças à sua autêntica tecnologia de tração central.

A CONFIGURAÇÃO MAIS ESTREITA COM RODAS DE 12"

Pretende largura mais compacta para garantir uma manobrabilidade mais precisa? A cadeira de rodas elétrica Q300 M Mini está equipada de série com rodas motrizes de 12", proporcionando uma largura da base muito reduzida de 52 cm.





TRANSFERÊNCIAS FÁCEIS GRAÇAS AOS APOIOS DE BRAÇOS REBATÍVEIS

Se apresenta dificuldades para subir ou sair da sua cadeira de rodas elétrica, poderá facilmente rebater totalmente os apoios de braços da Q300 M Mini, o que lhe proporcionará espaço adicional. Estão também disponíveis como opção as versões desmontáveis ou reclináveis



41 cm

BAIXA ALTURA DE ASSENTO, DESDE APENAS 41 CM

Graças à sua reduzida altura de assento ao solo, a Q300 M Mini permite aceder confortavelmente por baixo de mesas e a condução de veículos adaptados. Apresenta uma altura ultrabaixa de assento: desde 41 cm (com basculação manual) e desde 43 cm (com elevação e basculação elétrica)

COMPRIMENTO DE APENAS 106 CM

Com apenas **106 cm** de comprimento mínimo (com apoios de pés centrais), a Q300 M Mini permite entrar e sair confortavelmente dos elevadores mais pequenos e de outros espaços reduzidos como cozinhas. Com um peso desde apenas 118 kg, é suficientemente leve para ser utilizada na maioria dos elevadores comuns.



Para aqueles momentos em que precisa de se aproximar um pouco mais, poderá mover o comando de controlo para os lados ou rebater os apoios de braços totalmente para trás



CONSIGA VIRAGENS MAIS FECHADAS COM OS APOIOS DE PÉS CENTRAIS

Com os apoios de pés centrais (tanto manuais como elétricos) poderá não só fazer viragens mais fechadas sem se preocupar em contornar objetos, mas também poderá aproximar-se mais das mesas. Além disso, podem ser facilmente ajustados em comprimento e em ângulo.

O MELHOR DESEMPENHO

Experimente uma verdadeira cadeira de rodas elétrica compacta, com um rendimento realmente sensacional no exterior. É suficientemente estreita para ser ágil numa cidade cheia, mas com a aparência de uma cadeira de maiores dimensões que suplanta outras cadeiras compactas



TECNOLOGIA ANTI ROLAMENTO

Quando uma cadeira de rodas elétrica para numa pendente, a inércia da cadeira tende a empurrar a pessoa para a frente. Com a tecnologia de anti rolamento, esses problemas terminaram! Conseguirá permanecer **seguro** e **estável** no seu assento



SUSPENSÃO INDEPENDENTE EM TODAS AS RODAS

Com a suspensão independente QUICKIE em todas as rodas, as seis rodas permanecem no solo mesmo durante a superação de obstáculos. Como cada roda tem a sua própria suspensão, as bordas e irregularidades do terreno são absorvidas pela suspensão dessa roda, proporcionando a confiança de uma condução suave e fluida.



SEM NECESSIDADE DE VOLTAR PARA TRÁS COM A SUA AUTONOMIA DE 36 KM

Alimentada por potentes baterias de 56 Amp, a Q300 M Mini leva-o aonde deseja com a sua incrível autonomia de até **36 km**.



ULTRAPASSE OS LIMITES COM AS RODAS DE 14"

Se procura o melhor desempenho ao ar livre, a melhor tração, estabilidade e superação de obstáculos, selecione as rodas opcionais para o exterior de 14". Todo o desempenho com uma largura total de **apenas 57 cm**.



LUZES LED NOS GUARDA-LAMAS

As elegantes luzes LED integradas iluminam o caminho e proporcionam mais visibilidade.



SUBIDA E DESCIDA DE OBSTÁCULOS

A Q300 M Mini, com as suas rodas motrizes de **12"**, pode ultrapassar desníveis com até 5 cm, pelo que já não há necessidade de percorrer o caminho mais longo. Precisa de algo mais complexo? Selecione as rodas de **14"** e poderá enfrentar obstáculos de **até 7 cm**.

A man and a woman are riding electric mobility scooters on a city sidewalk. The man, on the left, is wearing a dark jacket and a scarf, smiling at the camera. The woman, on the right, is wearing a yellow and white plaid coat and a black beanie, looking towards the camera. The background shows a blurred city street with other pedestrians.

ROBUSTOS MOTORES QUICKIE DE 4 POLOS

Os nossos motores não são facilmente encontrados noutros sítios. Isto acontece porque trabalhamos arduamente, durante anos, com o fabricante destes motores para o desenvolvimento de um produto mais duradouro e eficiente, com um melhor rendimento, facilidade de condução e vida útil.

EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO ÓTIMA

Normalmente passa mais tempo a deslocar-se com a sua cadeira de rodas em ambientes interiores ou no local de trabalho do que a percorrer grandes distâncias. Por isso mesmo, desenhamos os nossos motores para se adaptarem a esses ambientes sem sacrificar a potência necessária para ultrapassar obstáculos. Além disso, graças à sua eficiência energética, poderá conduzir até mais 10% com a mesma capacidade de bateria. Como um carro que circula na autoestrada ou na cidade, não sacrifique o desempenho nos locais em que mais precisa.

10 SEGUNDOS EXTRA DE AUMENTO DE POTÊNCIA

Superar obstáculos como declives pronunciados é mais fácil com a nossa combinação da caixa de controlo R-Net e motor. Estes dois sistemas trabalham em conjunto para lhe proporcionar 10 segundos adicionais de potência para aquele impulso extra de que possa precisar.

REDUÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR

As aletas de refrigeração dos nossos motores não são apenas uma elegante característica de design. Ao serem maiores, permitem a dissipação do calor de forma mais eficaz, reduzindo o risco de retrocesso térmico, para que em conjunto com a potência adicional, possa conseguir um aumento de até 25% de autonomia e velocidade, inclusivamente em pendentes ou em superfícies irregulares.

DESENVOLVIDOS PARA DURAR

Ao contrário dos de outros fabricantes, os motores QUICKIE foram desenvolvidos com engrenagens metálicas e não de plástico. Isto não apenas reduz o ruído, como também aumenta a eficiência e a durabilidade, permitindo um desempenho excepcional, mesmo em condições difíceis. Estamos convencidos de que cada pequeno esforço conta no caminho para uma experiência de condução sem igual.

A SUA COMPANHEIRA DE VIAGEM

Viaja em transportes públicos? A largura muito reduzida da cadeira Q300 M Mini de apenas 52 cm e o diâmetro de viragem de 112 cm ajudarão nas suas viagens mais exigentes.

A Q300 M Mini está aprovada para o transporte em veículos (com sistemas Dahl e Q-Straint).

UMA ECONOMIA DE ESPAÇO REAL

Com um peso a partir de 118 kg, a Q300 M Mini é perfeita para utilização com guias de veículos que a poderão facilmente colocar e retirar do porta-bagagens. As opções como o encosto rebatível, os apoios de pés rebatíveis ou os apoios de braços removíveis facilitam ainda mais a sua utilização em espaços reduzidos.



INCRÍVEL TRAÇÃO EM RAMPAS

Por vezes, nas rampas, pode acontecer de se perder a tração quando as rodas dianteiras forçam a roda motriz a elevar-se do solo. Com a Q300 M Mini, os braços das rodas dianteiras movem-se de forma independente da base, pelo que a roda motriz conservará a sua tração.



VEÍCULOS ADAPTADOS

Graças à reduzida altura do assento ao solo, a partir de 41 cm, a Q300 M Mini caberá facilmente por baixo do volante de qualquer veículo adaptado. E graças à sua reduzida largura, não terá problemas em aceder através de portas estreitas ou espaços confinados.

CRIE A SUA Q300 M MINI

A Q300 M Mini não tem apenas o desempenho, tem também as características de uma grande cadeira de rodas elétrica!

Basculação elétrica, elevação, reclinção, apoios de pés eleváveis... a Q300 M Mini está repleta de opções para satisfazer as suas necessidades clínicas e estilo de vida.



APOIOS DE PÉS COM ELEVAÇÃO ELÉTRICA

Escolha a opção de apoios de pés que melhor se adapta às suas necessidades: a 70° ou 80°; apoios de pés com elevação manual ou elevação elétrica. Ao elevar e baixar as pernas, os apoios de pés eleváveis ajudam a reduzir o inchaço e melhoram a circulação. Quando ajustados em comprimento, o posicionamento mantém-se sem alterações, evitando movimentos pélvicos não desejados. A versão de montagem central também oferece um maior espaço na parte frontal da cadeira para manobras ou transferências.

BASCULAÇÃO

A tração central da QUICKIE mais estreita, disponível com basculação de 30° ou 50° para aliviar a pressão e sentar-se confortavelmente. Ajuda a aliviar a pressão redistribuindo o peso do acolchoamento para o encosto, mantendo um posicionamento confortável e esforço muscular reduzido.



30 cm

ELEVAÇÃO E BASCULAÇÃO ELÉTRICA

Alcance novas alturas e aceda a todos os lugares com a opção de elevação de **30 cm**, e sinta o conforto, o relaxamento e os benefícios da redistribuição da pressão com **até 50° de basculação**.

ENCOSTO RECLINÁVEL ELÉTRICO

De forma semelhante à reclinção de um assento de um carro, o encosto reclinável elétrico ajuda a redistribuir o peso por uma maior fração do encosto, mantendo ao mesmo tempo um ângulo de assento constante. O encosto reclinável elétrico é ideal para quando desejar ajustar de forma independente a sua posição para relaxar.



Função C-Me

CONDUZA ELEVADO E COM SUSPENSÃO ATÉ 4,5 KM/H

Uma nova e poderosa função para as cadeiras de rodas elétricas da série Q que lhe permitem elevar-se de forma segura até **30 cm** e conduzir até 4,5 km/h, tudo ao mesmo tempo! Ao contrário de outras cadeiras elétricas, **a suspensão não trava**, proporcionando uma condução suave do início ao fim. Inclusivamente, permite subir ou baixar o assento com um simples botão, sem necessidade de parar durante a transição.

PERSONALIZE A SUA CADEIRA

A Q300 M Mini permite mais de 97 combinações de cores, incluindo os novos e emocionantes desenhos de estampados para as estruturas! Poderá combinar as suas escolhas com os detalhes de cores para as rodas e forquetas. Qual é a sua combinação favorita?

As cores mostradas neste catálogo podem diferir das cores reais devido às limitações do processo de impressão.

DESENHOS PERSONALIZADOS PARA A CARÇAÇA:



Flores brancas

Carbono



Chamas cinzentas

Chamas azuis

Chamas vermelhas

Chamas brancas



Marmoreado cinza

Marmoreado azul

Marmoreado vermelho

Marmoreado branco

CARÇAÇA:



DETALHES DE COR



E AGORA QUE CONHECE AS VANTAGENS DA BASE, QUE ASSENTO IRÁ ESCOLHER?

A Q300 M Mini permite combinar a sua base de alto desempenho com vários sistemas de assento para se adaptar a diferentes necessidades clínicas: sedeo lite ou sedeo pro. Agora todos podem desfrutar da Q300 M Mini!



Q300 M Mini SEDEO LITE



Q300 M Mini SEDEO PRO

Q300 M MINI SEDEO LITE

A Q300 M Mini com sistema de assento SEDEO LITE combina um assento modular desenhado para utilizadores que se encontram numa condição médica estável e que podem ser beneficiados pelas funções elétricas.

Promove posturas saudáveis uma vez que oferece suporte a problemas posturais e patologias leves. Em utilizadores mais jovens, SEDEO LITE assegura que o corpo mantém o alinhamento durante os períodos de crescimento. Muito fácil de usar, o SEDEO LITE pode ser ajustado com uma única ferramenta.

- Suportes posturais
- Ajuste de crescimento
- Basculação elétrica, apoios de pés elétricos, função C-Me
- Trilhos de assento integrados
- Leve e de fechar

APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS COM COMPENSAÇÃO DE COMPRIMENTO

Ajustáveis em comprimento para conseguir o melhor ajuste, estes apoios de pés opcionais podem rebater-se para facilitar as transferências de assento. Também está disponível a opção de apoios de pés eleváveis elétricos ou centrais.

PARA
UTILIZADORES
COM
NECESSIDADES
POSTURAS DE
LIGEIRAS A
MODERADAS

ENCOSTO AJUSTÁVEL EM TENSÃO

O encosto padrão ajustável em altura oferece uma capa suave e respirável com 4 cintos ajustáveis em tensão para se adaptar a uma grande variedade de posturas. Selecione um encosto e almofada SEDEO ou JAY para aumentar o conforto e o posicionamento.



Leia o Código QR com
o seu telemóvel para
saber mais.

APOIOS DE BRAÇOS REBATÍVEIS ATÉ ATRÁS

Rebata os apoios de braço para trás para dispor de mais espaço para entrar ou sair da cadeira. Também disponíveis na versão desmontável ou rebatível.



TRILHOS DE ASSENTO INTEGRADOS

Os trilhos de assento integrados oferecem muitas opções de montagem para os elementos de posicionamento como os apoios laterais de tronco, apoios laterais das coxas ou de joelhos. Apenas será necessário colocar e deslizar para as suas posições.



WEB Q300 M MINI SEDEO LITE



Q300 M MINI SEDEO PRO

PARA
UTILIZADORES
COM
NECESSIDADES
POSTURAS DE
MODERADAS A
COMPLEXAS

Usufrua da agilidade oferecida pela base ultracompacta da Q300 M Mini combinada com o sistema de assento SEDEO PRO, um sistema de assento totalmente ajustável, desenhado para utilizadores com necessidades clínicas de moderadas a complexas.

Combina uma armação de assento altamente ajustável com uma excelente variedade de opções de apoio postural, para responder a uma ampla gama de necessidades clínicas. SEDEO PRO pode ser facilmente personalizado para responder às necessidades individuais, sendo rapidamente adaptável para novas necessidades do utilizador. Muito fácil de usar, o SEDEO PRO pode ser ajustado com uma única ferramenta.

SEDEO PRO oferece todas as características principais do SEDEO LITE (suportes posturais, ajuste ao crescimento, C-Me, apoios de pés eleváveis elétricos, basculação elétrica e estrutura de trilhos de assento integrados). E, além disso:

- Reclinação elétrica até 60°
- Encosto antifricção
- Plataformas elétricas



Leia o Código QR com o seu telemóvel para saber mais.



ENCOSTO RECLINÁVEL ELÉTRICO 0°/60°

Ajuda na respiração e previne as lesões por pressão e as complicações digestivas. Ajuda na manutenção de uma boa postura quando se reclina e se volta à posição original.

ENCOSTO RECLINÁVEL ANTIFRICÇÃO

Os 100 mm de deslocamento antifricção asseguram que não haja atrito entre o utilizador e o encosto, proporcionando uma experiência agradável de reclinação.

FUNÇÃO RELAX

Permite ajustar ao mesmo tempo a basculação e a reclinação antifricção, mantendo o apoio de cabeça na sua posição durante a reclinação.



BASCULAÇÃO ELÉTRICA ATÉ 50° COM ELEVÇÃO DE ASSENTO

Permite alcançar zonas que antes estavam fora do alcance, enquanto ajuda a reduzir as lesões por pressão, contribui para a manutenção de uma postura correta e garantia de conforto.

WEB Q300 M MINI SEDEO PRO



ENCOSTO SEDEO PRO FLEXÍVEL

Equipe o seu Q300 M Mini com este encosto único que combina sem esforço o suporte total ajustável das costas e o suporte lateral do tronco com um nível de imersão tão elevado, que terá de o sentir para acreditar.

ADAPTA-SE À SUA COLUNA VERTEBRAL

Ao contrário de encostos rígidos, o Encosto SEDEO PRO Flexível envolve e molda-se à forma da sua coluna vertebral para proporcionar um contacto perfeito, conforto e estabilidade.



É tão envolvente que inclusivamente pode acomodar **posturas cifóticas** de moderadas a severas ou escolioses da coluna vertebral.



Siga o Código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo.

ENVOLVE E ACOMODA-SE AO SEU CORPO

As laterais integradas abraçam lateralmente, fazendo com que a espuma se molde às suas curvas anatômicas e mantenha o seu tronco estável e alinhado. Ao ter mais de si em contacto com o suporte, a pressão fica mais bem distribuída, evitando desconforto ou um aumento da pressão.

Os apoios laterais proporcionam estabilidade e alinhamento do tronco. Construídos no encosto para uma aparência suave e elegante, eles também não se movem ou escorregam com o tempo. São ajustáveis de forma independente, podendo ser:

1

Posicionados para dentro ou para fora



2

Subidos ou descidos



3

Bloqueados para dar apoio a posturas como a escoliose ou afrouxamento para uma maior liberdade.



JAY & WHITMYER

OPÇÕES DE POSICIONAMENTO

Descubra a ampla gama de encostos de cabeça WHITMYER e almofadas e encostos JAY disponíveis para os sistemas de assento SEDEO LITE e SEDEO PRO para oferecer soluções para as necessidades clínicas de cada utilizador.




APOIOS DE CABEÇA WHITMYER

Criados para responder a uma variedade de necessidades, desde o suporte básico até ao controlo em vários pontos. Os apoios de cabeça WHITMYER estão disponíveis numa variedade de formatos e tamanhos de almofadas para um posicionamento e conforto superiores.

ALMOFADAS E ENCOSTOS JAY

Desenhados para proporcionar estabilidade pélvica, proteção da pele e conforto, as almofadas e encostos JAY são altamente personalizáveis e estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos para satisfazer as suas necessidades.

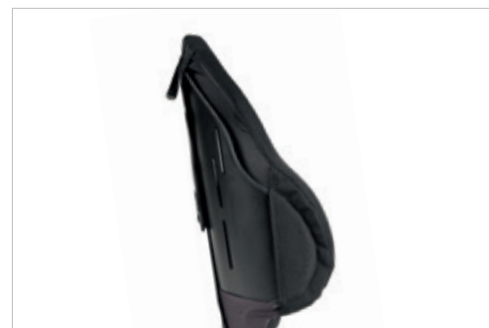

VR2 & R-NET

COMANDOS DE CONTROLO

Escolha entre uma ampla gama de comandos de controlo, desde o fiável VR2 até ao avançado R-net equipado com um grande ecrã HD de fácil leitura. R-net oferece a melhor tecnologia ao alcance da sua mão, para que possa impor um controlo absoluto sobre o seu ambiente:

CONECTIVIDADE IR

Controle o seu ambiente usando a funcionalidade de infravermelhos integrada no comando R-net Advanced. Controle o sistema de entretenimento da sua casa, televisão, DVD e outros sistemas de domótica, tudo de forma simples a partir do seu joystick.

CONEXÃO BLUETOOTH

Controle o seu Smartphone, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo eletrónico por Bluetooth com este comando opcional. Conecte e controle até quatro dispositivos.

BOTÕES PROGRAMÁVEIS PATENTEADOS DA QUICKIE

Mude a função de qualquer botão do comando R-net Advanced quando desejar, graças à função de botões programáveis **patenteada** da QUICKIE. Para ter um acesso mais rápido, simples e suave das funções que usa habitualmente, sem ter de usar o joystick.



SWITCH-IT

COMANDOS INOVADORES

Aceda comodamente às 5 posições programadas com a caixa de controlo opcional Ctrl+5 que lhe permitirá ir diretamente para a função que necessita com um simples apertar de um botão.

COMANDOS DE CONDUÇÃO ALTERNATIVOS

Se conduzir com o joystick tradicional não for a opção mais confortável, os comandos de condução alternativos permitir-lhe-ão experimentar completamente as capacidades e benefícios de condução da sua cadeira.



Leia o Código QR com o seu telemóvel para saber mais.



Controlo de cabeça Dual Pro



Joystick MicroPilot



Joystick Allround



LINK-IT

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Precisa de utilizar controlos adicionais ou especiais? Não há problema, conecte-os facilmente com o sistema universal de instalação Link-It.

Através da utilização de módulos e ligações disponíveis, poderá criar um número infinito de combinações para se adaptar às suas necessidades. Não só é fácil de colocar, o Link-It também garante que o design minimalista da sua cadeira de rodas não seja comprometido pela instalação desordenada de controlos opcionais.

Tanto se for um comando especial no apoio de braços, um botão no encosto, ou um botão de pressão no apoio de cabeça, basta apenas... link-it



Módulo básico



Módulo com 2 entradas



Módulo de conexão



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ESPECIFICAÇÕES DO ASSENTO



**Q300 M Mini
SEDEO LITE**



**Q300 M Mini
SEDEO PRO**

Medidas configuração standard

Largura do assento	38,5 a 51 cm	38 a 56 cm
Profundidade do assento	41 a 56 cm	40 a 56 cm
Altura do assento	41 a 49 cm	41 a 49 cm
Ângulo do assento	0 a 9° Basculação elétrica opcional até 50°	0 a 9° Basculação elétrica opcional até 50°
Altura do encosto	46 a 51 cm	44 a 62 cm
Reclinação do encosto	-4 a 16° Reclinação elétrica opcional até 30°	0° a 30° Reclinação elétrica opcional até 60°
Peso máx. utilizador	136 kg	136 kg

Características

Sistema de assento	SEDEO LITE	SEDEO PRO
Opção de encosto SEDEO PRO Flexível	●	●
Opção de encosto reclinável elétrico	●	●
Opção de encosto reclinável elétrico antifrição	-	●
Opção de apoios de pés eleváveis elétricos	●	●
Opção de plataformas elétricas	-	●
Opção de Função C-Me	●	●

- Disponível

Q300M Mini



ESPECIFICAÇÕES DA BASE

Dimensões

Largura total	Desde 52 cm (com rodas de 12") Desde 54 cm (com rodas de 13") Desde 57 cm (com rodas de 14")
Comprimento total (com apoios de pés central)	Desde 106 cm
Diâmetro de viragem	Desde 112 cm
Pendente máx. segurança	8°
Trepa-passeios	5 cm (com rodas de 12") 6 cm (com rodas de 13") 7 cm (com rodas de 14")
Autonomia máx*. (ISO 7176-4)	Até 36 km (com baterias de 56 Ah)
Peso da cadeira (com baterias)	Desde 118 kg
Rodas centrais	12" / 13" / 14"
Velocidade máx.	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Baterias	56 Ah
Eletrónica	VR2, R-NET
Crash tested	Testada para o transporte em veículos segundo ISO 7176-19

*A autonomia foi calculada sob condições de ensaio.
O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

PROCURA UMA CADEIRA ÚNICA?

Durante os últimos anos a nossa equipa de cadeiras personalizadas Built-4-Me desenhou e fabricou inúmeras cadeiras de rodas elétricas personalizadas em toda a Europa. Se quiser quebrar todos os padrões, Built-4-Me ajudará a criar uma cadeira de rodas verdadeiramente original.

Mais informação aqui:

www.sunrisemedical.pt/built4me/cadeiras-de-rodas-personalizadas





Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



Para mais informação sobre opções, consulte o nosso formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as características indicadas sem aviso prévio.