




**UNE POUSSÉE
ÉLECTRIQUE POUR
VOTRE FAUTEUIL
ROULANT.**

**HAUTE
PERFORMANCE**

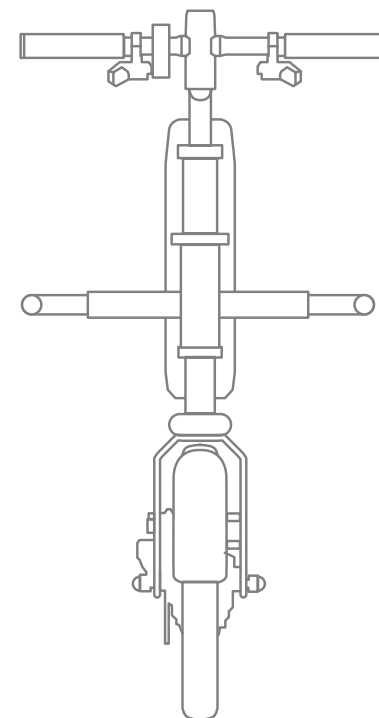

ÉLARGIR VOS HORIZONS

VOTRE COMPAGNON IDÉAL OÙ QUE VOUS ALLEZ.



DÉCOUVRIR DE NOUVELLES DESTINATIONS

En route avec le Empulse F55 : le nouveau membre de notre famille Empulse. Ce dispositif de poussée électrique agrandit votre rayon d'action et vous donne la liberté d'aller où vous voulez en toute autonomie.

Très compact et facile à connecter à votre fauteuil roulant - même d'une seule main - il fournit l'énergie supplémentaire dont vous avez parfois besoin. Très maniable et facile à transporter. Augmentez votre mobilité sans solliciter vos épaules. La solution idéale lorsque vous ne voulez pas vous déplacer en voiture.



AUTONOMIE ACCRUE

A woman with long dark hair, wearing a yellow blazer and blue jeans, is riding a black and red e-bike on a city street. The e-bike has 'Impulse F55' written on the frame. In the background, there are trees, a white car, and a building. The scene is bright and sunny.

MOBILITÉ
ACCRUE



VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT

Shopping, sortir avec des amis ou visiter un musée : découvrez les avantages d'une mobilité et flexibilité accrues avec l'Empulse F55. Manœuvrer dans des espaces étroits, un magasin ou un ascenseur ? Aucun problème grâce au très petit rayon de braquage.

Parcourir des distances plus longues ? Simplifiez-vous la vie et activez simplement le régulateur de vitesse : avec le cruise control vous conduisez à une vitesse constante sans toucher l'accélérateur. Aller plus loin encore ? Vous pouvez emporter votre Empulse F55 dans l'avion, les batteries ont la certification IATA.



LA MOBILITÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE.

Rouler facilement sur
(presque) tous les terrains
grâce au puissant moteur
électrique et à la traction
optimisée.

SANS
LIMITES

BATTERIE

La batterie Li-ion 8.1 Ah offre un rayon d'action jusqu'à 25 km. Haute densité énergétique et absence d'effet mémoire (= diminution de la capacité lorsque chargée sans être déchargée d'abord).

TRACTION

Pentes importantes ? Aucun problème ! Ajuster la position du guidon vers l'avant pour équilibrer la masse et ainsi optimiser l'adhérence et la traction.

CHOIX DE ROUES

Roue 8,5" pneu solide - manœuvrer aisément dans des espaces étroits.
Roue 14" pneu à air (en option) - plus de confort et de traction, meilleure stabilité à vitesse élevée.

ÉCRAN

Affichage clair :
vitesse, distance parcourue totale et par trajet, puissance absorbée, autonomie de batterie.

CONDUITE CONFORTABLE


Marche avant et arrière.
Vitesse maximale: 6,10 ou 15 km par heure.

ÉCLAIRAGE

L'éclairage avant à LED est une option standard.

FREINAGE EXCELLENT

Deux systèmes de freinage à commandes séparées: un disque mécanique (stationnement) et un disque électrique - rouler en toute sécurité !

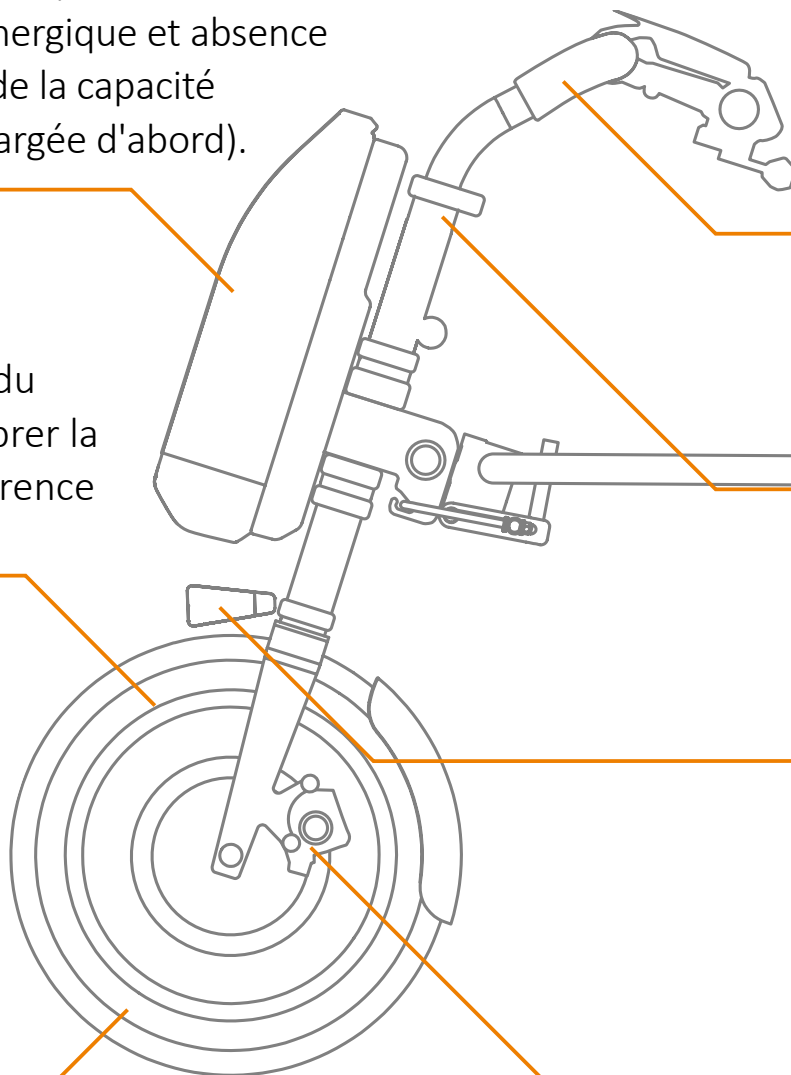

À VOTRE DISPOSITION N'IMPORTE QUAND N'IMPORTE OÙ.

ACCROCHER / DÉCROCHER AISÉMENT...

... Le système d'amarrage permet de (dé)connecter le F55 facilement, juste en quelques secondes. Le F55 est compatible avec pratiquement tous les fauteuils roulants manuels courants. Une fois accroché, le F55 est solidement verrouillé à l'avant de votre fauteuil roulant afin que vous puissiez prendre la route en toute sécurité et confortablement.



Roue motrice 8,5", pneu solide,
pour ancrage à un fauteuil roulant
à châssis fixe.



Roue motrice 14", pneu à air, pour
ancrage à un fauteuil roulant à
châssis fixe.



Roue motrice 8,5", pneu solide,
pour ancrage à un fauteuil roulant à
repose-pieds escamotables.



Roue motrice 14", pneu à air, pour
ancrage à un fauteuil roulant à
repose-pieds escamotables.



EN ROUTE




Vous pouvez replier ou détacher le sous-châssis. Ainsi l'Empulse F55 est facile à emporter en voiture et à stocker chez soi.



VOTRE TOUCHE DE COULEUR !

4
COLORIS



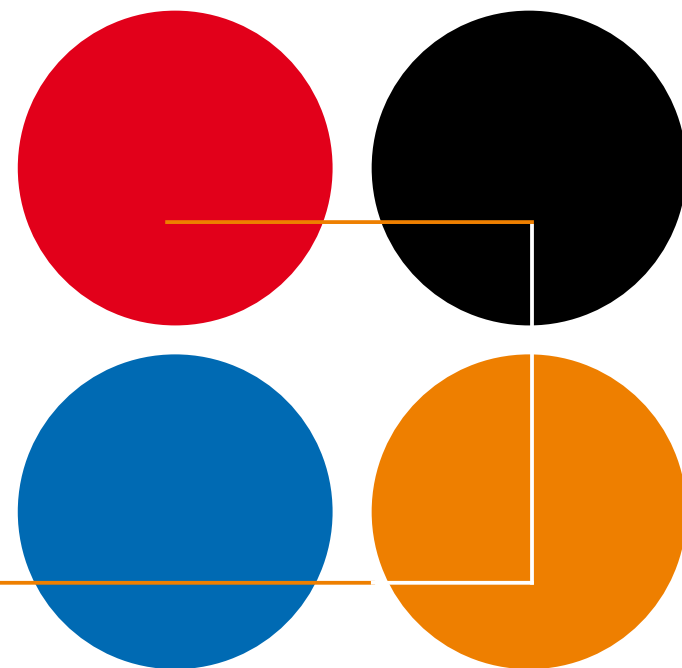

Personnalisez votre F55 avec des kits de couleurs gratuits. Vous pouvez changer à votre gré la couleur sur les barres latérales et le garde-boue. Quelle couleur choisirez-vous: le noir standard, ou plutôt du rouge, du bleu ou de l'orange ?



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Empulse F55

Rayon d'action	30 km max. (ISO 7176-4)
Pente maximale	11% (6°)
Largeur châssis avant	260 – 480 mm
Poids maximal de l'utilisateur	110 kg
Vitesse maximale	6 km/h; en option 10, 15 ou 20 km/h
Poids de la batterie	2 kg
Taille de la roue	8,5" pneu solide 14" pneu pneumatique
Batterie	Lithium-ion, 36V, 8.1 Ah
Poids total sans la batterie	à partir de 11 kg
Poids total avec la batterie de 2 kg	à partir de 13 kg
Freins	Deux systèmes de freins indépendants : disque mécanique (stationnement) disque électrique à commande séparée.
Couleur	Noir
Fixation colorées (kits de couleurs gratuits)	Noir, rouge, bleu et orange (livraison standard en noir)

Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande. Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques et peuvent être modifiées sans préavis. Si vous avez une déficience visuelle, ce document peut être consulté en format pdf sur fr.sunrise-medical.be/produits/empulse/f55

Combiner l'Empulse F55 avec le Nitrum

Le fauteuil roulant à cadre rigide le plus léger* de sa catégorie. Son design vise à créer un maximum de mouvement avec un minimum d'effort, en d'autres termes : Energy into Motion. Le Nitrum offre une gamme de tailles complète et un grand nombre d'options de positionnement pour un ajustement parfait. L'idéal absolu pour ceux qui repoussent leurs limites sans cesse, qui cherchent un fauteuil roulant à cadre rigide avec une conduite inégalée et des contours parfaitement adaptés à leurs corps.

* Selon une recherche comparative réalisée par Sunrise Medical des fauteuils roulants légers les plus courants sur le marché européen. Approuvée par les autorités réglementaires allemandes. Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à marketing@sunrise-medical.be



Pour plus d'informations sur l'Empulse F55 voyez fr.sunrise-medical.be/produits/empulse/f55 ou scannez le code QR ci-contre avec la camera de votre smartphone pour accéder directement à la page du produit F55.



Mareen et Timo témoignent de leurs expériences avec l'aide à la poussée F55.

Mareen: <https://www.youtube.com/watch?v=ReYkZOt8ZMQ>
Timo: <https://www.youtube.com/watch?v=w3cxQlKirC8>

ou scannez le code QR ci-contre avec la camera de votre smartphone pour accéder directement à la vidéo de Mareen ou Timo.



fr.SunriseMedical.be