

 loopwheels **urban**

*Det eneste hjulet du trenger*

Velg det lette  
Velg det komfortable  
Velg å dra hvor du vil

[loopwheels.com](http://loopwheels.com)



 **SUNRISE**  
MEDICAL



## Lette hjul som reduserer vibrasjoner i hverdagen.

Trygge nivåer av kroppsvibrasjoner i over to timer hver dag.

### ISO SIKKERHETSKRAV 2631-1 1985

Denne standarden måler vibrasjonene i sittende stilling før det må gjøres tiltak for å beskytte helsen.

**ATV (gjennomsnittlig daglig bruk) testet ved 12 km/t på ujevne underlag.**

Spinergy 24-tommers hjul til dagrullestol	trygt i 1 time og 3 minutter
Softwheel 24-tommers hjul til dagrullestol	trygt i 1 time og 18 minutter (+24 %)
<b>Loopwheels Urban</b>	<b>trygt i 2 timer og 10 minutter (+106 %)</b>

Loopwheels Urban er trygt å bruke over **DOBBELT SÅ LENGDE** som et Spinergy-hjul på offroad-underlag og ved en gjennomsnittlig hastighet på 12 km/t.

### PRODUKTKARAKTERISTIKKER

**Hjulstørrelse:** 24 tommer (540 mm)

**ETRTO-nummer:** 25-540 (24 x 1,00)

**Aksellager:** 0,5 tommer (12,7 mm) og 12 mm

**Drivring:** 6 RIVNUT®-fester

**Størrelser på RIVNUT®-festene** 515 mm

**Fjær-/loop-materialer:** Karbonfiberkompositt

**Felg:** Dobbelvegget aluminiumsfelg, svart

**Indre felgbredde:** 16 mm

**Nav:** CWC-maskinert aluminium, anodiserte, svarte forseglede lager


**Lagerbredde på sidene:** 1,8 tommer (45,8 mm)

**Hjulvekt:** 1,3 kg (2,87 lb)

NB! Hjulvekt uten drivring, dekk og aksling

**Høyeste vekt (bruker pluss rullestol):** 120 kg (265 lb)

**Anbefalte dekk:** Schwalbe Marathon Plus

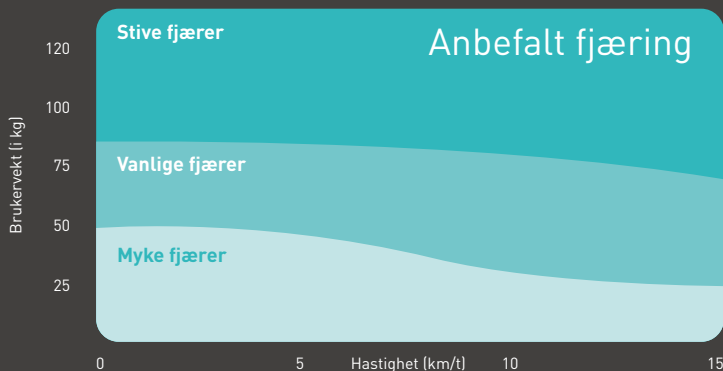

Loopwheels Urban finnes i tre ulike fjærstyrker – **Myk fjæring**, **Vanlig fjæring** og **Stiv fjæring**. Bruk tabellen over for å vurdere den vanligste hastigheten på hjulene og vekten til rullestolen når den er i bruk.

### Jelly Products Ltd

Unit 202 Boughton Industrial Estate North,  
Newark, Nottinghamshire NG22 9LD,  
England

Tlf.: +44 (0) 1623 860909

E-post: [info@loopwheels.com](mailto:info@loopwheels.com)

Nettside: [www.loopwheels.com](http://www.loopwheels.com)



Sunrise Medical AS  
Deltoppen 3, 1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

Se hva som gjør Loopwheels så enestående på [loopwheels.com](http://loopwheels.com)