

Q300[®] M Mini Kids

Imagine the Possibilities



Q300 M Mini Kids

ZIPPIE


Q300 M MINI KIDS

Med Q300 M Mini Kids kan du ta dig fram där andra elrullstolar inte får plats. Med en **smal bas på bara 520 mm** och en **vändradie på endast 560 mm** är det lättare att ta sig fram i klassrummet och andra små utrymmen.

När det är dags för utflykter kan man lita på att den starka **4-poliga motorn** och fjädringen på alla hjul ger en smidig och stabil körning, även i tuffare terräng.

Allt detta tillsammans med ett sittsystem som går att justera för att passa det växande barnet. Samt ett stort urval av färgkombinationer till rullstolen.

Tillsammans med ett urval av elektriska tillval designar du Q300 M Mini Kids för att göra barnet mer oberoende.

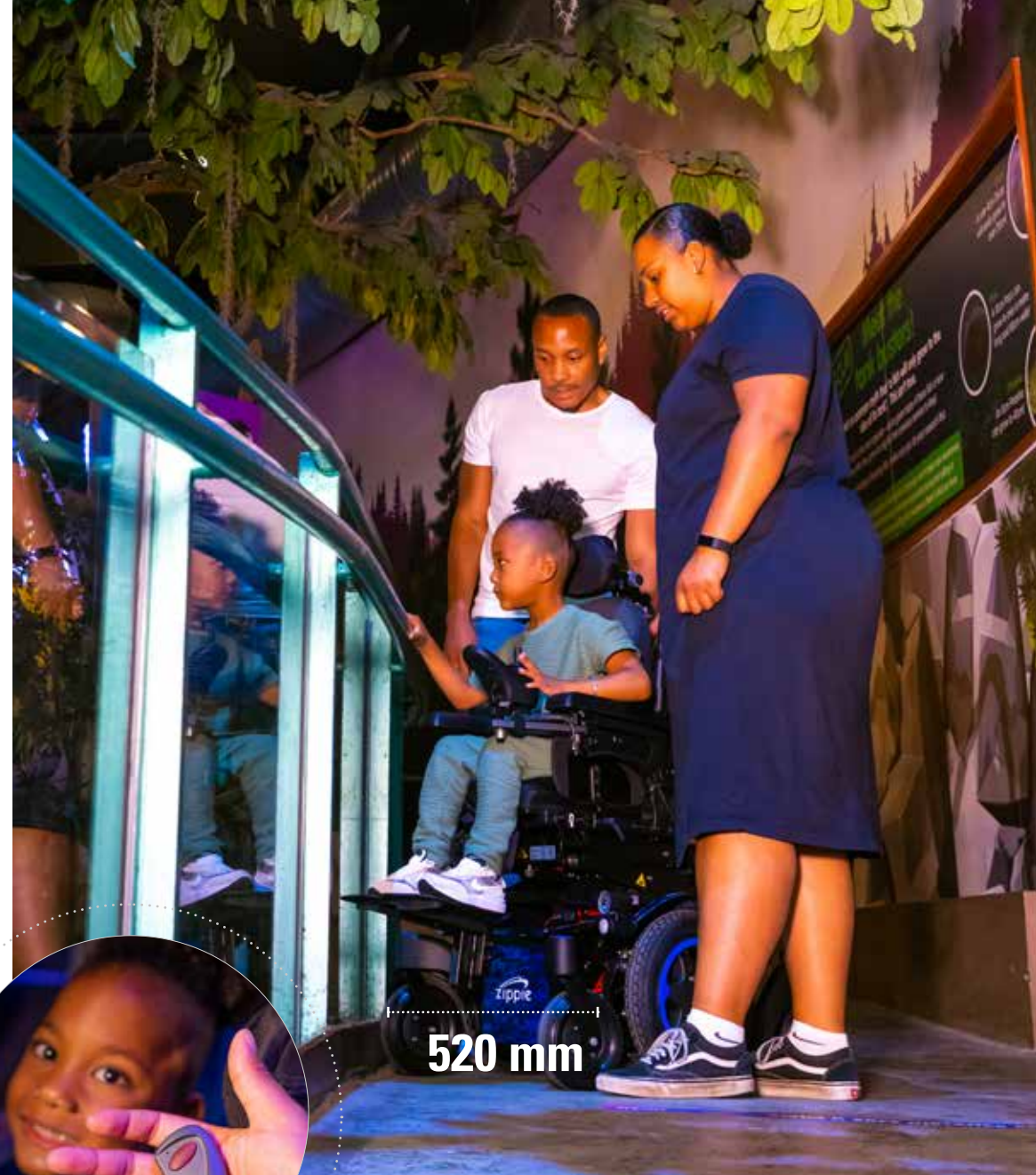

520 mm

Extra trygghet

I vissa situationer kan det kännas tryggt att det finns en fjärrkontroll i form av en nyckelbricka. Med den kan du stoppa rullstolen på upp till på 30 m avstånd (beroende på miljö).


VAD SKA NI GÖRA I DAG?

Låt ditt barn upptäcka världen på sina villkor med Q300 M Mini Kids och teknologin från mitthjulsdrift.

Den mitthjulsdrivna elrullstolen är den mest intuitiva modellen att köra och passar därför perfekt för barn.

När elrullstolens drivhjul är helt centrerade i förhållande till sin längd vänder elrullstolen på stället och är naturligt enkel att manövrera inomhus och i trånga utrymmen. Dessutom, med mer tyngd på drivhjulen förbättras även väggreppet vilket gör den praktisk även utomhus.

Letar du efter en rullstol som är kompakt och smidig att manövrera inomhus? Då ska du välja 12" hjulen. Om du i stället föredrar bättre utomhusprestanda rekommenderar vi 14" hjul.

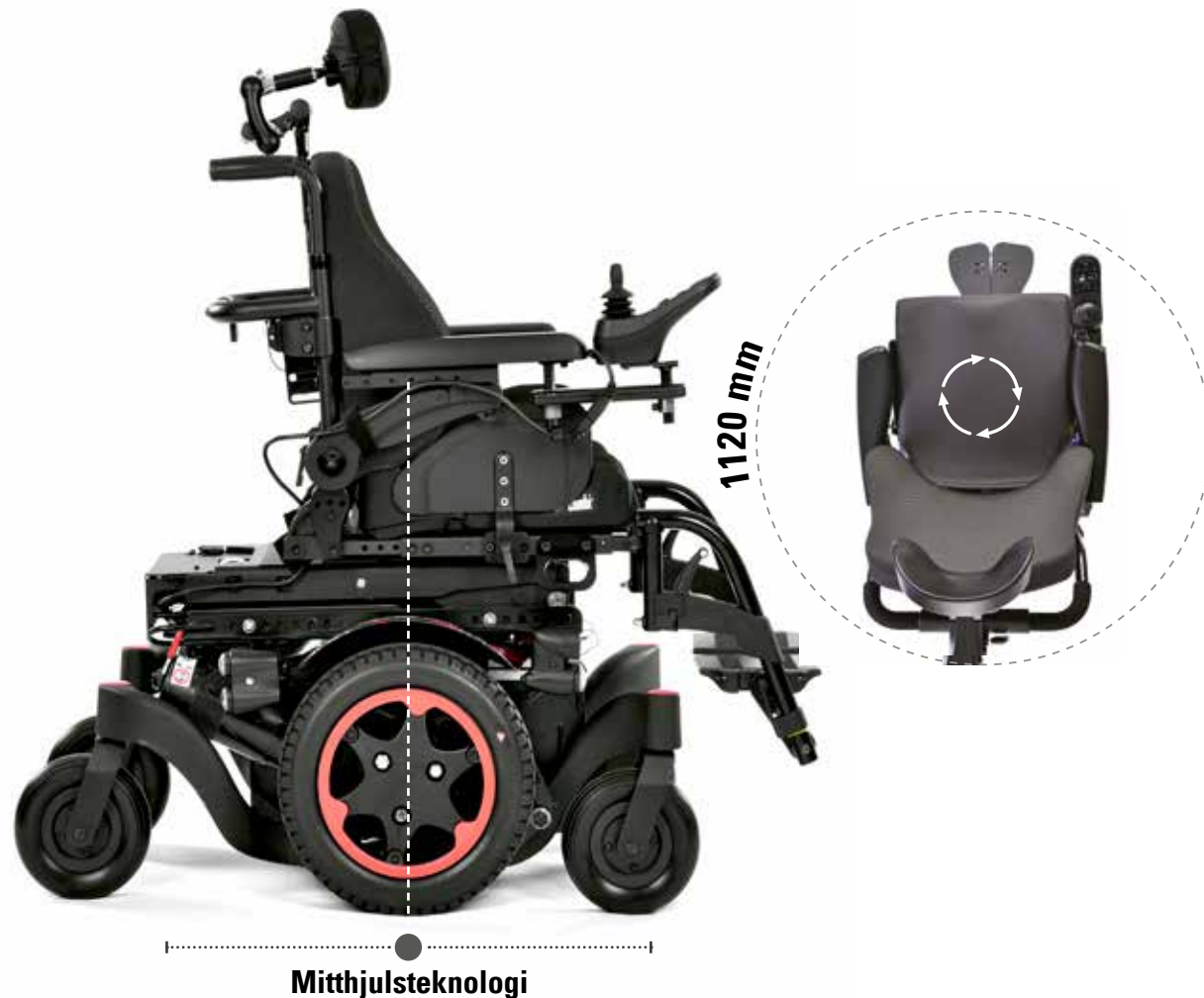

Oberoende fjädring på alla hjul

Med den patenterade oberoende fjädringen från QUICKIE håller sig alla sex hjul på marken medan de tar dig över hinder. Eftersom varje hjul har sin egen fjädring absorberas stötar och ojämnheter av hjulets fjädrar, så att barnet upplever en mjuk och smidig körning.

Anti-pitch teknologi

Traditionellt när en elrullstol stannar i en sluttning kommer stolens stopprörelse att skjuta dig något framåt. Det problemet har vi eliminerat med anti-pitch-teknik så att barnet sitter säkert och stabilt.

Smidig över trottoarkanter

Q300 M Mini Kids med 12" drivhjul kan hantera trottoarkanter på upp till 50 mm. Om man i stället väljer 14" drivhjul klarar den kanter på upp till 70 mm.



SITTSYSTEMET SOM VÄXER MED BARNET

Barn växer, och ibland växer de väldigt snabbt.

Sittsystemet på Q300 M Mini Kids har utformats speciellt för att kunna växa tillsammans med barnet. Därför behöver du inte oroa dig för att behöva byta till en ny elrullstol när barnet precis har vant sig vid att köra och manövrera.

Det justerbara sittsystemet växer med barnet i bredd (280 - 400 mm) och djup (260 - 400 mm) utan behov av extra delar. Detta leder till mycket bra positionering samt god stabilitet och gör att ditt barn sitter bekvämt hela tiden.

Q300 M Mini Kids är en mycket bra följeslagare i ett växande barns liv.



Z-Finity fotstöd

Fotstödet **Z-Finity** är steglöst justerbart (mellan 160 mm ovanför sitsen till 480 mm nedan) längs dess biangulärjustering. Flera vinklar och placeringsalternativ för positionering av fötter, vristar och knän kan uppnås.



Elektrisk lyft & tilt

Med 300 mm sittlyft sitter man högre och når därmed vardagsföremål som annars vore utom räckhåll. Denna position underlättar också vid överförflyttningar tack vare att man är i en högre position. Dessutom, med upp till 50 ° lutning, kan man luta sig tillbaka och njuta av avslappning och tryckavlastning.

Universalt huvudstöd

Fästet till huvudstödet är kompatibelt även med huvudstöd från SEDEO och WHITMYER, vilket tillgodoser en rad behov allt från de mer grundläggande till mer omfattande sådana.

Inkapslat parallellbeslag

Parallellbeslaget (tillval) kan låsas i tre olika lägen. Antingen i linje med armstödet eller offset in, offset ut samt vikas undan helt för att komma nära bord.



KÖR I FÖRHÖJD POSITION MED C-ME

C-Me ger fler möjligheter.

Med C-Me kan man köra i 4,5 km/h samtidigt som man sitter i 300 mm förhöjt läge. Det innebär att barnet kommer upp i axelhöjd med familj och vänner.

Att kunna köra i promenadhastighet och att samtidigt vara i förhöjt läge är både praktiskt och trevligt när man är tillsammans med klasskamrater eller när man tar en promenad med familjen.

Låt barnet upptäcka världen på sitt eget sätt, utan att vara så beroende av dig eller andra.



Bekvämt

Våra elrullstolar är designade för långvarig prestanda och till skillnad från andra elrullstolar med denna funktion behåller Q300 M sin fjädring även i upphöjt läge och du får samma smidiga körning från början till slut. Du kan också byta läge med en knapptryckning utan att behöva stanna och får därmed en bekväm åktur.

VÄLJ FAVORITFÄRGEN

Färger som visas i den här broschyren kan skilja sig från de faktiska färgerna p.g.a av begränsningarna i utskriftsprocessen. Detta bör därför endast användas som en indikation.



built4me

Det finns 12 olika mönster på kåpan att välja mellan. Kombinera med någon av de 7 färginläggen på hjul och länkhjul för att få en färgmix som tilltalar dig.



ENFÄRGAD KÅPA:



FÄRGINLÄGG:



Letar du efter något unikt?

Du kanske vill att din personlighet ska avspeglas i t.ex designen på rullstolskåpan. Nästan vilken typ av design som helst kan skrivas ut på folie och fästas på rullstolens ram, sidoskydd och till och med på fotstödet.

Använd din fantasi.



Individuellt designad folie till kåpan.

Vår avdelning BUILT-4-ME har utfört tusentals specialbeställningar och anpassningar av rullstolar. När du vill sticka ut i mängden hjälper vi dig att skapa en verkligt originell rullstol.

Läs mer här:

<https://www.sunrisemedical.se/rullstolsanpassningar/built-4-me>

TEKNISK SPECIFIKATION

Q300 M Mini Kids

Sittsystem	Kids	Underbenslängd	180 - 460 mm
Eldriven tilt	0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°	Sitthöjd	410 - 490 mm
Sittbredd	280 - 400 mm	Max. brukarvikt	75 kg
Sittdjup	260 - 400 mm	C-Me	Ja
Rygghöjd	380 - 485 mm	Max. räckvidd (ISO 7176-4)	Upp till 25 km (med 41 Ah batterier) Upp till 36 km (med 56 Ah batterier)
Total bredd bas	Från 520 mm	Produktens vikt (med batterier)	Från 103 kg
Total längd (m. centermonterat benstöd) bas	1060 mm	Drivhjul	12" / 13" / 14"
Vändradie	560 mm	Max. hastighet	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Max. säker lutning	6°	Batteri	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Max. kantklättring	50 mm (med 12" drivhjul) 60 mm (med 13" drivhjul) 70 mm (med 14" drivhjul)	Transport utan brukare	Fäst rullstolen ordentligt i fordonet (t.ex en bil eller flygplan).
Elektronik	R-NET	Avsett bruk och miljö	För personer som inte kan gå eller som har begränsad rörlighet, för inomhus och utomhus bruk. Rullstolstyp klass B.



Sunrise Medical

Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel.: 031-748 37 00
E-post: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se.

