



StreetJet

1-2-3 *GO!*



MONTAGEM FÁCIL FÁCIL DE USAR POTÊNCIA MÁXIMA

MONTAGEM FÁCIL

- As abraçadeiras patenteadas One Touch permitem uma montagem fácil, rápida e sem esforço da handbike na cadeira de rodas, para que a condução seja pura diversão.

FÁCIL DE USAR

- A StreetJet foi também projetada para pessoas com função das mãos limitada. Todas as ações podem ser realizadas com pouco esforço.

POTÊNCIA MÁXIMA


- O seu motor de elevado desempenho e a grande capacidade da bateria permitem percorrer até 50 km, inclusivamente em superfícies irregulares, para um prazer de condução sem preocupações.

ALTAMENTE PERSONALIZÁVEL

- A StreetJet oferece uma ampla gama de acessórios e opções de cores, além de aceleração ajustável para que se adapte perfeitamente a si.



MAIS POTÊNCIA PARA VIAGENS LONGAS

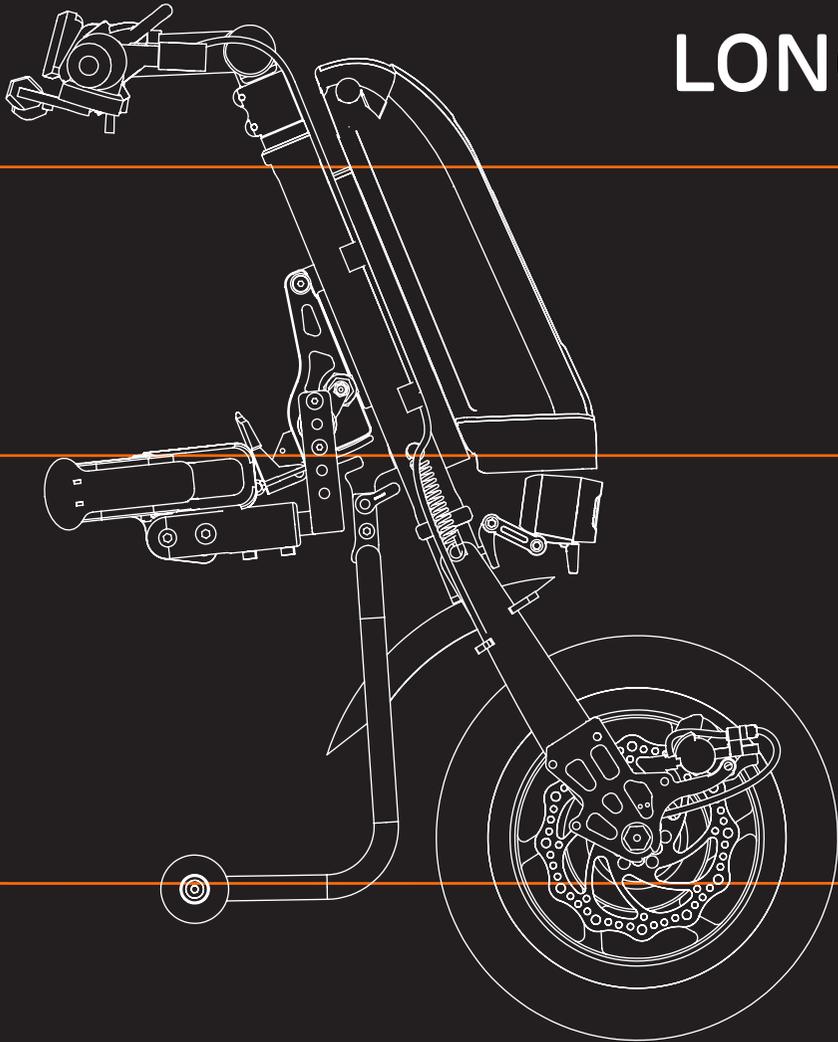

A Empulse StreetJet é uma solução fiável e de "zero emissões" para aqueles que preferem uma condução desportiva de grande autonomia e gostam de enfrentar os caminhos mais desafiantes.

Graças à potência da handbike elétrica StreetJet, poderá satisfazer os seus desejos de aventura e experimentar uma nova sensação de liberdade e independência. Aproveite a potência extra que lhe proporciona o motor para percorrer distâncias mais longas e não deixe que o cansaço dos ombros dite até onde vai. O motor de 250 W permite uma potência máxima de 630 W na versão com rodas de 12" e máxima de 750 W na versão com rodas de 16".

O sistema elétrico de elevado rendimento, composto por um motor sem escovas de alto torque e uma bateria de iões de lítio de alta capacidade, proporciona a potência necessária para enfrentar sem esforço declives e caminhos mais longos.

A função "velocidade de cruzeiro" e a roda pneumática garantem uma condução confortável mesmo em viagens longas.

Já não há desculpa para não desfrutar de uma mobilidade sem limites: jovens ou menos jovens, para uso urbano ou no campo. Grande diversão e pura experiência de condução, tanto na cidade como nos caminhos no campo. Assim é a StreetJet.

ABRAÇADEIRAS **PATENTED** ONE TOUCH

As abraçadeiras patenteadas One Touch proporcionam uma **montagem fácil, rápida e sem esforço na cadeira de rodas.**

O seu desenho especial permite a montagem com apenas um pequeno movimento, que inclusivamente pode ser realizado por **pessoas com função limitada das mãos.**

As abraçadeiras One Touch adaptam-se a uma ampla variedade de quadros e **não exigem nenhuma peça adicional nas cadeiras de rodas,** que poderiam interferir e acrescentar peso durante a utilização.

Graças ao seu suporte com rodas, ao desenho das abraçadeiras e a função de marcha atrás, nunca terá que levantar a sua StreetJet.



Digitalize o código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo com a montagem da StreetJet.



1 Abra as abraçadeiras One Touch. Introduza na armação frontal da cadeira de rodas e feche-as com um simples movimento.



2 Segure a alavanca de desbloqueio do guiador enquanto empurra o StreetJet para trás e para cima. Desbloqueie a alavanca de desbloqueio para bloquear a posição.



3 Feche a pequena alavanca vermelha (fecho de segurança) e desfrute do prazer de conduzir.

GO!



QUE TAMANHO VAI ESCOLHER?

RODA DE 12"

Vai deslocar-se pela cidade ou em ambientes urbanos? A roda de 12" oferece um raio de viragem muito reduzido e um comprimento de base mais curto, pelo que é ideal para ambientes urbanos e para o transporte.



RODA DE 16"

Se preferir viver aventuras ao ar livre, a roda de 16" proporciona maior conforto para enfrentar terrenos difíceis.



DESENHADA PARA SAIR DO CAMINHO ESTABELECIDO

A StreetJet incorpora várias ideias inovadoras para o manter em segurança, como os faróis frontais LED muito brilhantes. Estes asseguram que poderá ver e ser visto durante as noites escuras e nas condições mais difíceis. E por falar de condições difíceis, o guarda-lamas em carbono não só adiciona um pouco de estilo extra, mas também o protegerá da areia, lama e qualquer outra sujidade da estrada. E, portanto, a handbike StreetJet está também certificada de acordo com todas as normas europeias EN12184.



TUDO SOB CONTROLO

- 1- **Guiador ajustável em ângulo.**
- 2- **Alavanca de aceleração** para uma condução ergonómica e de precisão.
- 3- **Alavanca de travão elétrico** proporcional para um controlo fino da desaceleração.
- 4- A **alavanca de desengate** garante uma montagem e desmontagem segura e fácil da StreetJet com ambas as mãos no guiador.
- 5- Alavanca para acionar o **travão de disco mecânico**. E com a ajuda do **travão de estacionamento**, permitirá parar a cadeira de rodas em superfícies que não sejam planas.
- 6- A **velocidade de cruzeiro** permite manter confortavelmente uma velocidade constante durante as viagens mais longas.
- 7- **Avanço e recuo** para facilitar as manobras para a frente e para trás.
- 8- **Ecrã LCD** de fácil leitura para controlar a velocidade, tempo de condução, distância percorrida, distância percorrida total, o estado da bateria e o consumo de energia.
- 9- Opção de **controlo da tetraplegia**: desenhado para pessoas com função manual limitada. O punho do acelerador (direito) é acionado pelo movimento descendente do pulso, enquanto o punho do travão (esquerdo) é acionado pelo movimento ascendente do pulso.



Configura o modo de velocidade ou ajusta a velocidade independentemente (por exemplo, aceleração mais lenta para pessoas com menor estabilidade de tronco)



MAIOR DISTÂNCIA, MAIS AVENTURAS

Com a sua bateria de íões de lítio de 14 Ah, que proporciona uma autonomia de até 50 km, não só poderá viajar durante mais tempo e mais depressa sem necessidade de carregar, como também poderá carregar o seu telemóvel e outros dispositivos compatíveis com o prático posto de carga USB.




PODER DE TRAVAGEM EM QUE PODE CONFIAR

A handbike elétrica StreetJet está equipada com um **potente travão de disco** para uma travagem de rápida resposta numa grande variedade de terrenos e nas condições meteorológicas mais adversas. O **sistema de duplo travão** de série inclui um **travão elétrico** e **outro mecânico**, que requer menos força para a sua utilização e é mais sensível para produzir desacelerações mais suaves.


Como alternativa, está disponível a **opção de adicionar um duplo disco de travão mecânico**, que incorpora uma segunda alavanca de travão para maior segurança em situações de emergência.



COR DA ARMAÇÃO

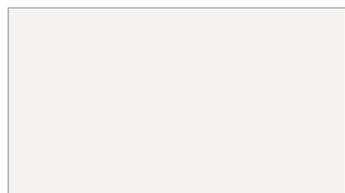

Branco brilhante 100



Branco mate 101



Preto brilhante 103



Preto mate 105



Verde brilhante 107



Vermelho brilhante 108



Amarelo brilhante 120




Cinza mate 131



Cinza brilhante 132



Cinza claro mate 133




Creme brilhante 135



Turquesa brilhante 141



Verde floresta brilhante 143

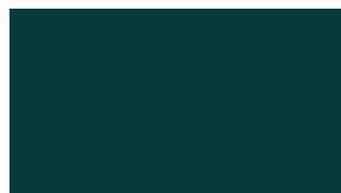

Azul marinho mate 152



Roxo brilhante 157



Azul escuro brilhante 151



Azul real brilhante 154



Azulão brilhante 174



Laranja brilhante 180



Rosa brilhante 188

A StreetJet incorpora inúmeras características e acessórios disponíveis para responder às suas necessidades pessoais.



Kit cor anodizado

em suporte com rodas, secção central e Abraçadeiras One Touch



Preto anodizado



Vermelho anodizado



Azul anodizado



Roxo anodizado



Dourado anodizado

Cabos em cor

(cabo do travão e cabo de desbloqueio)



Preto



Azul




Vermelho



Bateria opcional de 8 Ah

Bateria adicional de íões de lítio de 36V, 8 Ah, 288Wh. Compatível com viagens aéreas, para que possa viajar livremente com o seu StreetJet*.

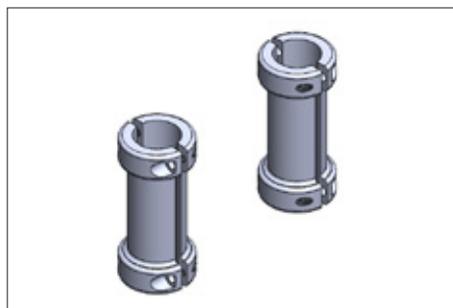

Proteções para armação frontal (opcionais).

Disponíveis para tubos redondos e ovalados, protegem a armação frontal da tua cadeira de rodas.




Suporte com rodas de apoio. Não é necessário levantar a handbike StreetJet. Com este suporte, mantém-se em posição vertical e assim poderá a movimentar facilmente para montar na sua **cadeira**.



Faróis LED

A luz LED ilumina o seu caminho e torna-o mais visível.

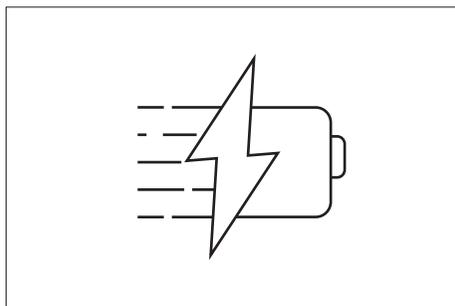

Carregador rápido 4A opcional

Carregue a sua StreetJet até duas vezes mais depressa do que com o carregador normal de 2A.



Guarda lamas em carbono

Desenho moderno e leve.



Porta-malas (opcional)

Construção robusta que suporta cargas de até 8 kg, para que possa colocar e transportar comodamente a sua mala.



Duplo travão de disco mecânico (opcional)

que incorpora uma segunda manete de travão para maior segurança em situações de emergência.

* Antes de viajar, consulte a sua companhia aérea para se informar sobre os requisitos específicos relativos às baterias.

Empulse StreetJet

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Autonomia máx.	até 50 km (com bateria de 14 Ah) (1) até 26 km (com bateria de 8 Ah opcional) (1)
Inclinação máx.	até 11% (6°)
Motor	Com roda de 12": 250 W (630 W máx.) Com roda de 16": 250 W (750 W máx.)
Largura da estrutura frontal	220 a 425 mm (2)
Carga máx.	120 kg
Máx. velocidade de avanço	20 km/h (6 km/h, 10 km/h e 15 km/h opcionais) (4)
Peso da bateria	2,6 kg (bateria de 14 Ah) 2,1 kg (bateria de 8 Ah opcional)
Peso total sem bateria	desde 12,9 kg (3)
Peso total	desde 15 kg (3)
Bateria	lões lítio, 36 V e 14 Ah, com sistema de gestão inteligente lões lítio, 36 V e 8 Ah opcional (apta para avião) (5)
Tamanho da roda	12" / 16" (pneu pneumática)
Carregador	36V, 2A (carregador rápido de 4A opcional)
Travão	Travão duplo: travão elétrico/eletrofreno proporcional e travão de disco mecânico

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm



Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical se reserva o direito de alterar as características e as especificações dos mesmos sem aviso prévio.

Certificada de acordo com todas as normas aplicáveis da EN12184

(1) Autonomia calculada segundo a norma ISO 7176, parte 4. O peso do utilizador, as condições do terreno, o uso e o tipo de condução, assim como as condições meteorológicas podem afetar o desempenho.

(2) Largura do quadro da cadeira de rodas medida de interior ao interior do tubo na posição de montagem das abraçadeiras. Utilize apenas esta medida e não a largura do assento para verificar a compatibilidade.

(3) Em função da configuração

(4) Consulte sempre as disposições municipais de tráfego dos locais onde circula, respeite as velocidades máximas.

(5) Antes de viajar, consulte a sua companhia aérea para se informar sobre os requisitos específicos relativos às baterias.



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

