

# Q300 R

La silla de ruedas eléctrica compacta  
con tracción trasera



# NO RENUNCIES A TU VIDA PORQUE QUIERAS UNA SILLA ELÉCTRICA COMPACTA.

Con la **Q300 R**, ya no tendrás que renunciar a nada. En interiores, es muy ágil y maniobrable: con una base súper estrecha ideal para maniobrar en espacios reducidos. Sin embargo, si te gustan las aventuras en el exterior, esta silla cuenta con una tracción excelente, un potente motor y un rendimiento de conducción que compite con otras sillas eléctricas de mayores dimensiones.

Nuestro diseño de tracción trasera marca la diferencia. La silla de ruedas eléctrica **Q300 R** posee una base meticulosamente probada y refinada que proporciona el equilibrio perfecto entre estabilidad y tamaño. Es una base que permite regular el centro de gravedad para maximizar la tracción. ¿Prefieres la agilidad en interiores? Selecciona la rueda trasera de 12" y podrás disfrutar de una base aún más compacta (sólo 55 cm de anchura) para realizar los giros y las maniobras más ajustadas.

Elijas lo que elijas, el sofisticado sistema de asiento **SEDEO LITE** te proporcionará el soporte clínico que necesitas. Disponible con una gran cantidad de opciones de asiento eléctricas, llamativos colores para la carcasa y detalles de color para deslumbrar, la silla de ruedas eléctrica **Q300 R** se ve (y se siente) increíble tanto por dentro como por fuera.



Escanea el código QR con la  
cámara de tu teléfono móvil para  
ver el vídeo.

## RENDIMIENTO TOTAL

---

# ¿PENSABAS QUE TODAS LAS SILLAS CON TRACCIÓN TRASERA SE CONDUCCIÓN IGUAL? CAMBIA EL CHIP.

**Cuando pruebes la Q300 R, notarás la diferencia. La forma en que se agarra al suelo. El magnífico manejo. Pero... ¿cómo consigue esta silla lo que otras no pueden?**

Sencillo, gracias a su base optimizada. Probando, refinando cuidadosamente y con precisión cientos de ajustes en la anchura, la longitud, la rueda y la posición del asiento, hemos encontrado la geometría de base más pequeña posible, sin comprometer la estabilidad ni la tracción.

Su gran estabilidad hace que la Q300 R sea compatible con un amplio rango de ajustes del centro de gravedad. Así, la posición del asiento puede moverse más hacia delante o hacia atrás para equilibrar el centro de masas y aumentar la tracción y el rendimiento de la conducción. Y todo ello con una silla con unas medidas ultra-compactas que rinde igual de bien en interiores que en exteriores.



## RENDIMIENTO EN EXTERIORES

# CONSIGUE UNA MAYOR TRACCIÓN

Con una base medida con precisión y orientada al rendimiento en exteriores, la Q300 R tiene todo el agarre y el rendimiento de conducción que necesitas para moverte por un centro urbano ajetreado o conducir fuera de los caminos convencionales.




## SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS

Con la opción de subebordillos opcional, la Q300 R puede superar sin problemas bordillos de hasta **10 cm**. Ya nada se interpondrá en tu camino y no tendrás que tomar el camino más largo.



## RUEDAS TRASERAS DE 14"

¿Buscas un rendimiento puro de exteriores? Las ruedas traseras de 14" proporcionan tracción y estabilidad en los terrenos más difíciles. Y todo ello con una anchura total de solo **58 cm**.

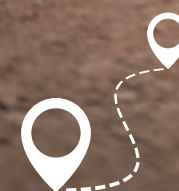

# 32 km

## DE ALCANCE

Alimentada por baterías de **64 Ah**, la Q300 R proporciona una autonomía máxima de **32 km** para que puedas llegar sin apuros a todos los sitios que quieras.



### **CONTROL DE LA DIRECCIÓN CON EL MÓDULO OPCIONAL GYRO**

Puesto que hay menos ruedas en la base (en comparación con otras tracciones), la silla de ruedas Q300 R ofrece un comportamiento excelente al conducir en línea recta a velocidades altas, cubriendo el terreno más rápidamente y sin la necesidad de sobrevirar. Y además, cuentas con el módulo de control opcional Gyro, que realizará automáticamente correcciones en la dirección para mantenerte en línea recta también cuando te muevas por superficies irregulares. Algo que resulta beneficioso sobre todo si utilizas mandos especiales para conducir tu silla o si tienes dificultades en la coordinación de las manos.

### **SUSPENSIÓN TRASERA**

La suspensión trasera de la Q300 R reduce la cantidad de impactos y vibraciones que se transmiten a través de la silla de ruedas, proporcionando una amortiguación agradable cuando se conduce por terrenos irregulares o con baches. Disfruta de una conducción suave y cómoda con la Q300 R.



## MANIOBRABILIDAD EN INTERIORES

# DENTRO Y FUERA DE CASA

Pasillos estrechos, oficinas concurridas... No hay espacio pequeño que la estrecha base de 58 cm de la Q300 R no pueda recorrer con soltura. Con un excelente manejo y una intuitiva tracción trasera, te resultará increíblemente fácil de maniobrar.

## 43 cm

ALTURA DE ASIENTO AL SUELO

Accede cómodamente debajo de las mesas o conduce sin problemas tu vehículo adaptado sentado en tu silla de ruedas eléctrica gracias a la altura súper reducida del asiento al suelo que parte de **43 cm**.



## 180 cm

DIÁMETRO DE GIRO  
(Con ruedas de 14")

## 110 cm

LONGITUD DE LA BASE  
(Con ruedas de 14")

Con una longitud ultracompacta, la Q300 R cabe en los ascensores y lugares más pequeños, por lo que ya no tendrás que preocuparte por el espacio.



### **RUEDAS TRASERAS DE 12"**

¿Necesitas una silla aún más compacta? La Q300 R permite la opción de seleccionar ruedas traseras de 12", para reducir la anchura total de la silla a solo 55 cm.

**55 cm**

**ANCHURA TOTAL**  
(Con ruedas de 12")

**170 cm**

**DIÁMETRO DE GIRO**  
(Con ruedas de 12")



**106 cm**

**LONGITUD DE LA BASE**  
(Con ruedas de 12")

### **ACÉRCATE MÁS CON EL REPOSAPIÉS CENTRAL**

Con el reposapiés central, no sólo podrás acercarte más a mesas o mostradores de servicio, sino que también conseguirás giros más cerrados.

## OPCIONES ELÉCTRICAS

# SEDEO LITE, UN SISTEMA DE ASIENTO VERDADERAMENTE MODULAR

Un sistema de asiento ajustable y configurable con la más amplia gama de opciones de soporte y posicionamiento, SEDEO LITE es la solución para usuarios con necesidades posturales de leves a moderadas. SEDEO LITE puede ajustarse con una sola herramienta, perfecto para realizar ajustes de manera rápida y sencilla.



### RAÍLES DE ASIENTO INTEGRADOS

Los raíles de asiento integrados ofrecen muchas opciones de montaje para los elementos de posicionamiento como soportes laterales de tronco, soportes laterales de muslos o de rodillas. Lo único que tendrás que hacer será colocarlos y deslizarlos hasta su posición.



### REPOSACABEZAS UNIVERSAL

El soporte de reposacabezas integrado es compatible con los reposacabezas **SEDEO** y **WHITMYER** y ha sido creado para dar soporte a una variedad de necesidades, desde el más básico hasta el control en múltiples puntos.



### REPOSAPIÉS ABATIBLES CON COMPENSACIÓN DE LONGITUD

Ajustables en longitud para conseguir el mejor ajuste, estos reposapiés opcionales pueden abatirse para facilitar las transferencias de asiento. También está disponible la opción de reposapiés elevables eléctricos o centrales.

# RESPALDO SEDEO PRO FLEXIBLE

Equipa tu Q300 R con este respaldo único que combina sin esfuerzo el soporte completo ajustable de la espalda y soporte lateral del tronco con un nivel de inmersión tan alto, que tendrás que sentirlo para creerlo.

## SE ADAPTA A TU COLUMNA VERTEBRAL

A diferencia de los respaldos rígidos, el Respaldo SEDEO PRO Flexible te envuelve y se amolda a la forma de tu columna vertebral para proporcionar un contacto completo, comodidad y estabilidad. Los laterales integrados abrazan tus costados, haciendo que la espuma se amolde a tus curvas anatómicas y manteniendo tu tronco estable y alineado.



Es tan envolvente que incluso puede acomodar posturas cifóticas de moderadas a severas o escoliosis de la columna vertebral.



## ¿TIENES OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ASIENTO?

El sistema de asiento SEDEO LITE también es compatible con el **respaldo JAY J3**. Adecuado para posturas de moderadas a complejas, el respaldo JAY J3 ofrece la más amplia gama de tamaños, formas y opciones para ajustarse con precisión y crear un asiento único para ti.

## OPCIONES ELÉCTRICAS

# SACA TODO EL PARTIDO A TU SILLA

La Q300 R no sólo ofrece un **GRAN** rendimiento, sino que además posee **GRANDES** características para satisfacer tus necesidades clínicas y adaptarse a tu estilo de vida.



### ELEVACIÓN Y BASCULACIÓN ELÉCTRICA

Alcanza nuevas alturas con esta opción que te permite elevar el asiento de tu silla de ruedas hasta **30 cm**. Así podrás llegar a objetos cotidianos que de otro modo estarían fuera de tu alcance y facilitar tus transferencias gracias a una posición más elevada o incluso para ponerte de pie. Y además, siente la comodidad, la relajación y los beneficios de la redistribución de la presión con los **30° de basculación**.





## MANDO R-NET ADVANCED

Equipa tu silla con la mejor tecnología gracias al mando Advanced con pantalla a color LCD de gran tamaño y fácil lectura, e interruptores de uso sencillo. Su tecnología Bluetooth integrada ofrece la posibilidad de conectarte a tus dispositivos inteligentes, todo ello desde la comodidad de tu Q300 R.

## RECLINACIÓN ELÉCTRICA DE 30°

¿Necesitas aliviar la presión y redistribuir tu peso a lo largo del día? La opción de inclinación eléctrica te permite ajustar el ángulo entre el asiento y el respaldo de forma similar a como se reclinaría un asiento en un coche.



## REPOSAPIÉS ELEVABLES ELÉCTRICOS

Si necesitas soporte adicional para las piernas, estos reposapiés son una gran alternativa a los manuales, ya que te ayudan a elevar las piernas siempre que lo necesites para reducir por ejemplo la hinchazón.





**C-ME**

## ELÉVATE Y CONDUCE CON C-ME

En tu día a día quizás te encuentres en multitud de situaciones que no están adaptadas a la altura de una silla de ruedas. Por eso C-Me permite elevarte hasta 30 cm mientras conduces a una velocidad máxima de hasta 4,5 km/h, ¡todo al mismo tiempo! Así podrás seguir el ritmo de tus amigos y familiares y mirarlos a los ojos sin la frustración de quedarte atrás. Alcanza esas alturas que antes estaban fuera de tu alcance y asegúrate de ser visto en todo momento.



### SUSPENSIÓN INCLUSO CON EL ASIENTO ELEVADO

Con la función C-Me opcional, la suspensión de la silla de ruedas eléctrica permanecerá activa incluso cuando estés elevado. Por lo tanto, obtendrás la misma conducción suave y estable de siempre independientemente de la altura a la que se encuentre el asiento.



### FÁCIL DE USAR, CON BOTONES ASIGNABLES

¿Harto de tener que realizar interminables movimientos con el joystick o de tener que detenerte para poder elevar el asiento? Con los botones asignables patentados de QUICKIE del mando R-Net, simplemente asigna C-Me a cualquier botón para ascender o descender con una simple acción. Es tan fácil que podrás hacerlo incluso mientras conduces.



Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono móvil para ver el vídeo.

ESTILO

# PREPÁRATE PARA IMPRESIONAR

Convierte las calles en una auténtica pasarela de estilo y deslumbra con la exquisita gama de 5 colores disponibles para la carcasa de tu Q300 R. Incluso puedes complementar o contrastar esa elección con 7 colores para los detalles.

AZUL

MORADO

AMARILLO

ROJO

NEGRO



Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono móvil para ver el vídeo.

## COLOR DE DETALLES



NEGRO



AZUL



VERDE MANZANA



NARANJA



ROJO



GRIS PLATA



BLANCO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Q300 R

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Anchura de asiento</b>           | 38,5 a 51 cm                                                        |
| <b>Profundidad de asiento</b>       | 41 a 51 cm                                                          |
| <b>Altura de asiento</b>            | 43 a 49 cm                                                          |
| <b>Altura de respaldo</b>           | 46 a 51 cm                                                          |
| <b>Longitud de pierna</b>           | 30,5 a 46 cm                                                        |
| <b>Basculación</b>                  | 0° a 9° manual / eléctrica opcional hasta 30°                       |
| <b>Reclinación de respaldo</b>      | De -4° a 16° manual / 30° eléctrica (opcional)                      |
| <b>Anchura total</b>                | 55 cm (con ruedas de 12") / 58 cm (con ruedas de 14")               |
| <b>Longitud total</b>               | Desde 106 cm (con ruedas de 12") / Desde 110 cm (con ruedas de 14") |
| <b>Diámetro de giro</b>             | 170 cm (con ruedas de 12") / 180 cm (con ruedas de 14")             |
| <b>Pendiente máx. de seguridad</b>  | 6°                                                                  |
| <b>Bordillos máx.</b>               | 10 cm                                                               |
| <b>Autonomía máx. (ISO 7176-4)*</b> | 32 km                                                               |
| <b>Peso de la silla</b>             | desde 131 kg                                                        |
| <b>Peso máx. usuario</b>            | 136 kg                                                              |
| <b>Ruedas traseras</b>              | 12" / 14"                                                           |
| <b>Ruedas delanteras</b>            | 8" / 9"                                                             |
| <b>Velocidad</b>                    | 10km/h (6 km/h opcionales)                                          |
| <b>Baterías</b>                     | 64 Amp                                                              |
| <b>Electrónica</b>                  | VR2 / R-Net                                                         |
| <b>Crash tested</b>                 | Sí, aprobada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19      |

\*Autonomía calculada según ISO standard 7176 parte 4. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.

Sunrise Medical se preocupa por tu seguridad. Por favor, lee el manual de usuario para obtener instrucciones de funcionamiento seguro y directrices de mantenimiento.

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)