

GEMINO 30
carbon

GEMINO 30M
carbon



En rullator gir deg mulighet til å fortsatt være uavhengig og leve et aktivt liv. Personer som trenger litt støtte når de går og kanskje trenger muligheten til å sette seg for en liten hvil underveis har god nytte av en rullator. Rullatoren hjelper deg med å bevege deg rundt ved å tilby fysisk støtte, sikkerhet og stabilitet og passer perfekt for seniorer eller yngre mennesker med utfordringer etter skader eller sykdom.



GEMINO 30 Carbon


Førsteklasses karbonrullator for en aktiv livsstil

GEMINO 30 Carbon er svært lett i vekt. Med sitt patenterte låsesystem, som automatisk låser rullatoren i sammenslått stilling, kan rullatoren enkelt pakkes sammen for transport eller oppbevaring. Rullatoren har et funksjonelt og elegant design. En smal totalbredde og gode kjøreegenskaper gjør rullatoren enkel å manøvrere i trange omgivelser, som for eksempel kaféer. Rullatoren er den perfekte ledsager i hverdagen og på reisefot.

Karbon er svært sterkt og solid, samtidig som materialet er lett i vekt. Materialet brukes derfor i alle deler av produktet der det stilles særskilt høye krav til akkurat dette. Til tross for den lave vekten er Gemino 30 Carbon svært stabil og gir en god kjøreeopplevelse både innendørs og utendørs – brostein eller ujevne stier er heller ikke noen utfordring.



Integrert vippestuss for enkelt å forser for eksempel fortauskanter.

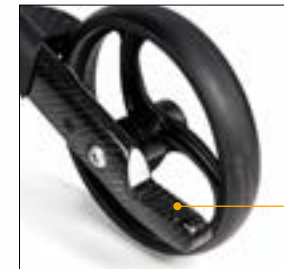

// PATENTERT LÅSESYSTEM

Takket være det patenterte låsesystemet låser rullatoren automatisk når den foldes sammen til en kompakt størrelse. Med den lave vekten kan rullatoren lett løftes og stues bort – selv med én hånd om det er ønskelig.



// HJUL SOM GJØR EN FORSKJELL

De funksjonelle hjulene gjør det mulig å bevege seg behagelig på alle typer underlag.



// ERGONOMISK FORMEDE HÅNDTAK

Ergonomisk formede håndtak gir ekstra komfort og trygghet på turen.

// HØYDEREGULERBARE KJØREHÅNDTAK

Den enkle høydereguleringen, med memoryfunksjon, sikrer at kjørehåndtakene alltid kommer til riktig stilling. Dette gir en oppreist gange og reduserer faren for en foroverbøyd stilling i overkroppen. Kjørehåndtaket låser automatisk i nærmeste stilling og bidrar dermed til økt sikkerhet mot fall.



// GOD SITTEPLASS

Brede parallelle rammerør gir god plass slik at du kan sitte behagelig på setet.

// ENKEL HÅNDTERING AV INNKJØP

Har du mye å bære? Kurven har god plass og kan bære inntil 5kg. Veske med lokk, som enkelt kan åpnes med en hånd, er tilgjengelig som tilbehør.

GEMINO 30 Carbon er den perfekte ledsager både innendørs og utendørs.

Trange rom? Med en bredde på kun 600 mm kan du bevege deg rundt i smale og trange rom uten problemer. Du kan også manøvrere trygt på enda smalere steder ved å folde rullatoren delvis sammen.



Trenger du en pust i bakken? Rullatorens brede sete, sammen med ryggstøtte (tilbehør) legger til rette for en behagelig hvil når du har behov for det.



PRAKTISK TILBEHØR TIL DEG

GEMINO rullatorer er ikke bare enkle å regulere og bruke, de leveres også med et komplett utvalg av tilbehør for å gjøre hverdagen din enda enklere. Velg de mulighetene som passer dine behov: for eksempel en veske med lakk, en praktisk krykkeholder eller en behagelig ryggstøtte.

// FARVERIKE VESKER MED LOKK

Kompletter din rullator med en veske med lakk. Lokket leveres i ulike farger, slik at du kan velge den som passer deg best. Vesken har bærehåndtak og er enkle å bære med seg.



Fest og fjern vesken enkelt med et enkelt klikk – kan fint betjenes med én hånd.



Svart



Alcantara svart



Griffittgrå



Mint



Rød



Blå



Grønn



Rosa





// RYGGSTØTTE

Gir deg støtte til å sitte komfortabelt og trygt når du tar en pust i bakken. Det er ikke nødvendig å fjerne ryggstøtten når rullatoren skal foldes sammen.



// REGULERBAR RYGGSTØTTE

For ekstra komfort velger du den store, mykt polstrede ryggstøtten. Ryggstøtten er rask og enkel å regulere og kan sitte på når rullatoren foldes sammen.



// SERVERINGSBRETT

Et praktisk serveringsbrett med koppholder gir deg mulighet til å frakte kopper og kar rundt innendørs. Brettet er enkelt å løfte av rullatoren ved hjelp av håndtakene.



// KRYKKEHOLDER

Krykkeholder holder krykken eller stokken trygt på plass når du går. Krykkeholderen er enkel å montere og enkel å få tilgang til.



// UNIVERSALHOLDER

Holder til ulike typer tilbehør.



// LYS

Sikrer at du er synlig i mørket - for ekstra trygghet.



// ENHÅNDSBREMS

Behagelig og trygg bruk med én hånd.



// ROMVENDT BREMSEFUNKSJON

Rullatoren stopper straks bremsehåndtakene slippes. En trygghet for deg som er usikker på bruk av rullator.

Tekniske spesifikasjoner

GEMINO 30 Carbon // RULLATOR

		Gemino 30 Carbon	Gemino 30M Carbon
Totalhøyde	mm	780 - 1000	730 - 880
Totallengde	mm	650	650
Totalbredde	mm	600	600
Bredde mellom kjørehåndtak	mm	470	470
Setehøyde	mm	620	550
Høyde sammenlagt	mm	800	760
Lengde sammenlagt	mm	650	650
Bredde sammenlagt	mm	230	230
Vendesirkel	mm	840	840
For/bakhjul	mm	200 x 36	200 x 36
Totalvekt uten kurv	kg	5,6	5,4
Vekt kurv, standard	kg	0,3	0,3
Maks brukervekt	kg	150	130
Maks vekt i kurven	kg	5	5
Anbefalt brukerhøyde	mm	1500 - 2000	1350 - 1700



Sunrise Medical AS
 Delitoppen 3
 1540 Vestby
 T.: +47 66 96 38 00
 E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

