

Q300E

La carrozzina elettronica compatta
che non rinuncia all'avventura.



Q300 R



Q300 R Mini

NON RINUNCIATE ALL'AVVENTURA IN CAMBIO DI UNA CARROZZINA ELETTRONICA COMPATTA.

Q300 R in interni è estremamente maneggevole, super compatta e agile anche nelle situazioni più affollate. Se vi avventurate all'esterno, però, la trazione, la tecnologia del motore e le prestazioni di guida sono in grado di competere con carrozzine molto più ingombranti.

È il design del carro a fare la differenza. Una base meticolosamente testata e perfezionata che offre il perfetto equilibrio tra stabilità e dimensioni, in grado di distribuire il vostro peso per massimizzare l'aderenza e conquistare i grandi spazi aperti. Preferite l'agilità in interni alle prestazioni? Scegliete **Q300 R Mini** e godetevi una base più compatta, **550 mm** di larghezza totale e ruote motrici da 12" per effettuare manovre e svolte ancora più strette.

Qualunque sia la vostra scelta, il sofisticato sistema di seduta **SEDEO LITE** offre lo stesso supporto clinico anche per le esigenze più complesse. Disponibile con una serie di opzioni elettroniche per la seduta e con colori accattivanti per il rivestimento e i particolari, **Q300 R** è straordinaria sia in interni che in esterni.



Scansionate il QR code con il vostro smartphone per guardare il video.



SIETE CONVINTI CHE TUTTE LE CARROZZINE A TRAZIONE POSTERIORE SI GUIDINO ALLO STESSO MODO? RIPENSATECI.

Fate un giro con Q300 R e noterete la differenza. Il modo in cui aderisce al terreno. La superba maneggevolezza. Ma come riesce a fare ciò che le altre non riescono a fare?

Grazie alla base ottimizzata di Q300 R! Testando e perfezionando centinaia di regolazioni di precisione per la larghezza e la lunghezza della base, la dimensione delle ruote e la posizione della seduta, abbiamo progettato la base più compatta senza compromettere stabilità o trazione.

Poiché Q300 R è così stabile, può supportare una gamma più ampia di regolazioni del centro di gravità. Per questa ragione, potrete posizionare la seduta più avanti o più indietro per bilanciare meglio il peso e aumentare la trazione e le prestazioni di guida. Inoltre avrete una carrozzina elettronica compatta che performa altrettanto bene anche in interni.



Q300 R



Q300 R MINI

PRESTAZIONI ALL'APERTO

UNA TRAZIONE ANCORA PIU' EFFICACE.

Con una base compatta perfetta per affrontare anche gli spazi aperti, Q300 R è dotata di quelle caratteristiche di aderenza e di prestazioni di guida necessarie per affrontare sia i centri urbani più affollati sia i sentieri meno battuti.



SALICORDOLI

Nessun accesso al marciapiede in vista? Per fortuna Q300 R, con il suo salicordoli boot-style (optional), è in grado di affrontare senza problemi singoli gradini alti fino a 100 mm. Ora potrete smettere di cercare la strada più lunga per poter aggirare l'ostacolo.



RUOTE MOTRICI DA 14"

Siete alla ricerca di prestazioni outdoor allo stato puro? Le ruote posteriori da 14" garantiscono maggiore trazione e stabilità sui terreni più difficili. Inoltre, la vostra Q300 R sarà larga solo 580 mm.



32 km

DI AUTONOMIA

Grazie alle potenti batterie da 64 Ah (opzionali), con un'autonomia fino a 32 Km potrete arrivare ovunque vogliate senza dover tornare indietro.



MANTENETE LA TRAIETTORIA CON IL GYRO CONTROL

Grazie al minor numero di ruote piroettanti che devono riprendere la direzione corretta dopo una svolta, Q300 R procede naturalmente in linea retta a velocità più elevate e copre più rapidamente la strada che si sta percorrendo. Ma in caso di terreni non pianeggianti, il sistema Gyro Control opzionale apporta automaticamente frequenti correzioni allo sterzo per mantenere la traiettoria rettilinea, a tutto vantaggio di chi utilizza comandi speciali o ha una scarsa coordinazione delle mani.

SOSPENSIONI POSTERIORI

Quando si guida su terreni sconnessi o irregolari, grazie a un sistema di ammortizzazioni molto reattivo, le sospensioni posteriori di Q300 R riducono la quantità di vibrazioni che passano attraverso la carrozzina. In questo modo, potrete sedervi e godervi una guida morbida e fluida.



MANOVRABILITA' IN INTERNI

A CASA, DENTRO E FUORI.

Dai corridoi stretti, agli uffici affollati, alle case minuscole, Q300 R, con la sua base larga solo 580 mm, è in grado di affrontare qualsiasi situazione. Grazie all'eccellente maneggevolezza e all'intuitiva trazione posteriore, sarà incredibilmente facile da manovrare.

430 mm

DISTANZA DELLA SEDUTA DA TERRA

Grazie all'altezza da terra minima di **430 mm** Q300 R riesce ad entrare facilmente sotto ai tavoli e nella postazione di guida dei veicoli adattati.



1800 mm

DIAMETRO DEL CERCHIO DI STERZATA

1100 mm

LUNGHEZZA DELLA BASE

Data la lunghezza ridottissima, Q300 R è in grado di entrare e uscire dagli spazi più stretti, per cui non dovrete più preoccuparvi di occupare troppo spazio dietro di voi.

OCCUPERETE ANCORA MENO SPAZIO CON

Q300 R Mini

Cercate una manovrabilità ancora maggiore? Grazie alle ruote motrici da 12" e alla pedana montata centralmente di serie, la base ultra compatta da 550 mm di Q300 R Mini può arrivare dove le altre carrozzine non riescono. Inoltre, è leggera abbastanza (da 124 kg con batterie da 50 Ah) da essere compatibile anche con la maggior parte delle piattaforme elevatrici.

550 mm
BASE WIDTH

1700 mm

DIAMETRO DEL CERCHIO DI STERZATA

1060 mm
LUNGHEZZA DELLA BASE

AVVICINATEVI ANCORA DI PIU' GRAZIE ALLA PEDANA MONTATA CENTRALMENTE

Grazie alla pedana montata centralmente, non solo potrete avvicinarvi di più agli oggetti (come tavoli o scrivanie), ma riuscirete anche a fare le curve più strette!

SEDUTA ELETTRONICA

SEDEO LITE, IL POSTO MIGLIORE DI TUTTA LA CASA PER SEDERSI.

Combinando una seduta regolabile e configurabile con la più ampia scelta di opzioni per il supporto e per il posizionamento, SEDEO LITE è la soluzione per soddisfare molte esigenze di posizionamento.



GUIDE INTEGRATE NELLA SEDUTA

La guida integrata nella seduta offre molteplici possibilità per aggiungere elementi per il posizionamento come i supporti laterali toracici, i supporti per le cosce e per le ginocchia. Tutto quello che dovete fare è inserirli e farli scorrere nella posizione desiderata.



SISTEMA DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER APPOGGIATESTA

Compatibile con gli appoggiatesta **SEDEO** e **WHITMYER**, questo sistema di montaggio contribuirà a soddisfare la maggior parte delle esigenze di supporto per il capo.



PEDANE SWING AWAY CON COMPENSAZIONE DELLA LUNGHEZZA

Regolabili in lunghezza per adattarsi perfettamente alle necessità dell'utente, queste pedane swing away sono ideali per facilitare i trasferimenti. Sono disponibili anche con elevazione elettronica e nella versione con montaggio centrale.

SCHIENALE FLEXIBLE SEDEO PRO

Scegliete di passare a questo schienale unico, che unisce in modo perfetto a un grande livello di immersione, un supporto per la schiena del tutto regolabile completo di supporti laterali per il tronco. L'unico modo per credere che tutto questo sia possibile, è provarlo!

SI MODELLA SULLA VOSTRA COLONNA VERTEBRALE

A differenza degli schienali rigidi, lo schienale Flexible si avvolge e si adatta alla forma della colonna vertebrale per offrire un contatto completo, comfort e stabilità. Poiché vi avvolge completamente, i supporti laterali integrati vi abbracciano e fanno sì che la schiuma si adatti alle vostre curve anatomiche mantenendo il corpo stabile e allineato.



È talmente avvolgente che si adatta perfettamente anche a posture cifotiche e a scoliosi di grado da moderato a grave.




AVETE SPECIFICHE NECESSITA' DI POSIZIONAMENTO?

SEDEO LITE è compatibile anche con lo **Schienale J3**. Adatto ad accogliere problemi di posizionamento da moderati a gravi, lo schienale J3 Back offre la più ampia gamma di misure, forme e opzioni per adattarsi con precisione alla vostra seduta.

OPZIONI ELETTRONICHE

RENDETE ANCORA PIU' ELETTRONICA LA VOSTRA CARROZZINA

Q300 R non solo fornisce prestazioni di solito offerte da GRANDI carrozzine, ma è anche dotata di GRANDI caratteristiche per soddisfare le vostre necessità cliniche e di vita quotidiana.

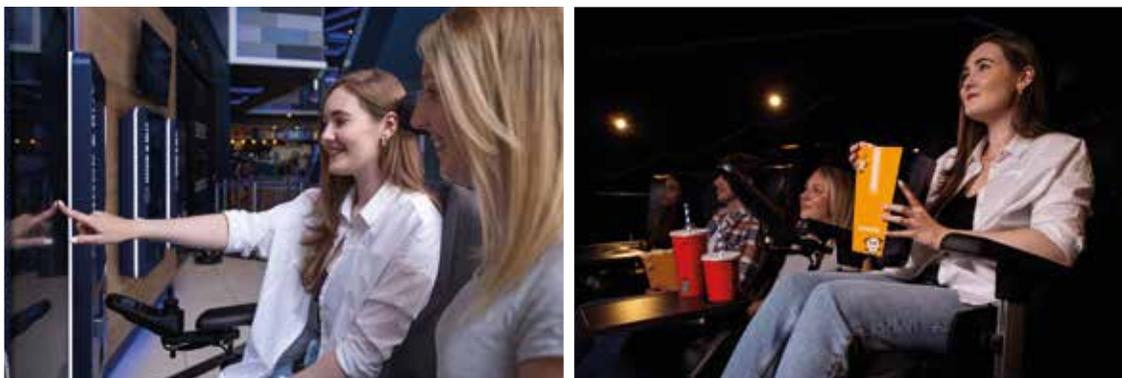

ELEVAZIONE E BASCULAMENTO ELETTRICI


Raggiungete nuove altezze grazie all'elevazione della seduta di **300 mm** e gestite gli oggetti di uso quotidiano che altrimenti sarebbero fuori dalla vostra portata. Anche trasferirvi sarà più facile grazie al fatto che partirete da una posizione più elevata. Inoltre, con un basculamento di **30°**, rilassarvi comodamente e godere di una migliore distribuzione della pressione.





JOYSTICK R-NET ADVANCED

Aggiornate la tecnologia a vostra disposizione con questo ampio display ad alta definizione e con gli interruttori a levetta semplici da usare. La tecnologia Bluetooth incorporata vi consente inoltre di connettervi ai vostri dispositivi smart senza rinunciare al comfort della vostra Q300 R.

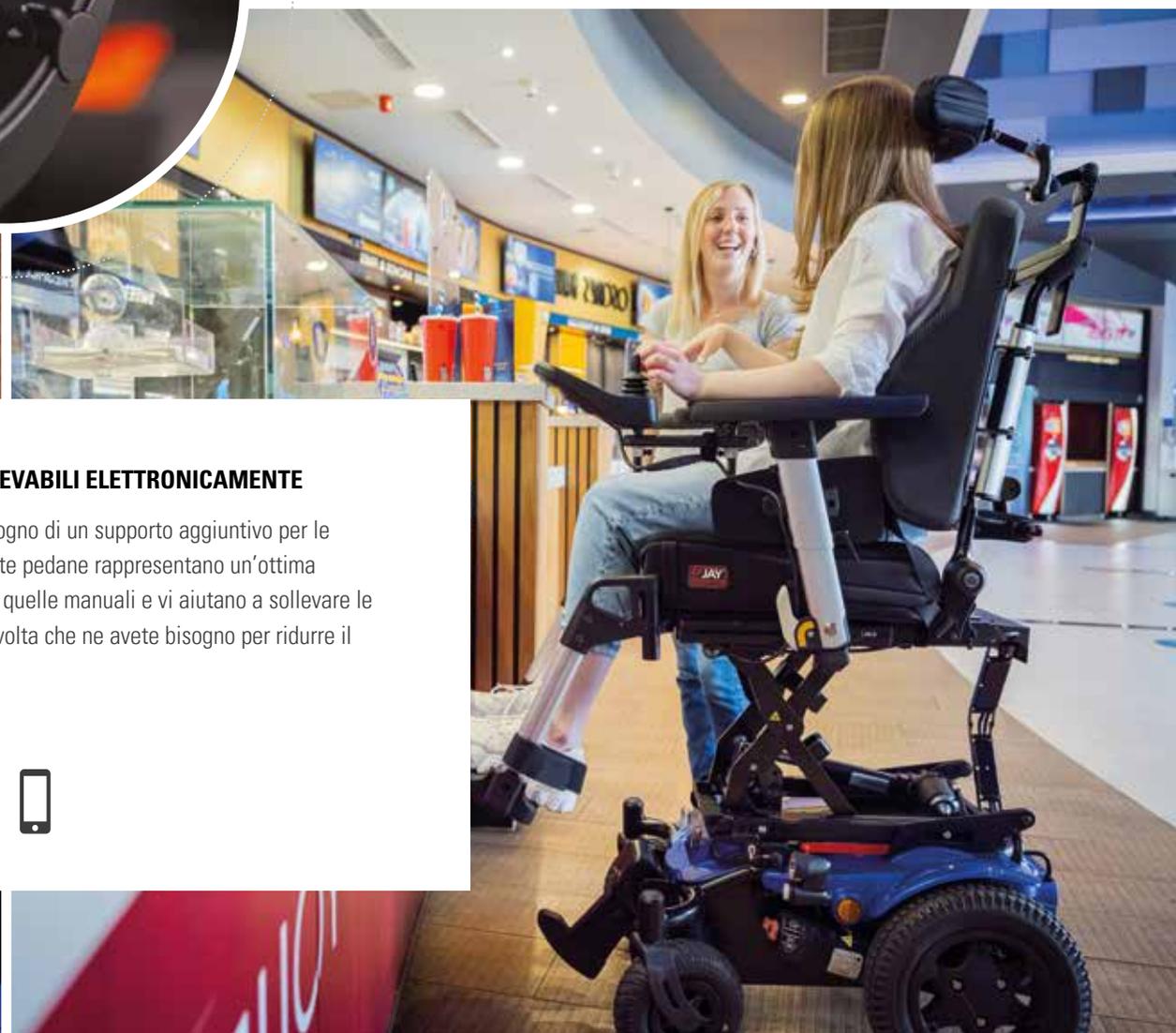

RECLINAZIONE ELETTRONICA DELLO SCHIENALE DI 120°

Avete bisogno di rilassarvi sulla carrozzina durante la giornata? La reclinazione elettronica consente di regolare l'angolo di inclinazione della seduta rispetto allo schienale in modo simile a come si reclina il sedile di un'automobile.



PEDANE ELEVABILI ELETTRONICAMENTE

Se avete bisogno di un supporto aggiuntivo per le gambe, queste pedane rappresentano un'ottima alternativa a quelle manuali e vi aiutano a sollevare le gambe ogni volta che ne avete bisogno per ridurre il gonfiore.





C-ME

ELEVATEVI E GUIDATE CON C-ME

C-Me vi consente di elevare la seduta di 300 mm e allo stesso tempo di guidare a una velocità di 4,8 km/h! Potrete così stare al passo con i vostri amici, continuando a guardarli negli occhi mentre avanzate a velocità di marcia. Raggiungete quelle altezze che prima erano fuori dalla vostra portata.



SOSPENSIONI ATTIVE ANCHE CON LA SEDUTA ELEVATA

Con C-Me, le sospensioni della vostra carrozzina elettronica rimangono attive anche quando la seduta è elevata. In questo modo potrete godere di una guida stabile e fluida indipendentemente dal tipo di terreno e dall'elevazione della seduta.



ELEVATE LA SEDUTA MENTRE GUIDATE GRAZIE AI PULSANTI ASSEGNABILI

Grazie all'esclusiva funzione Assign Button di Sunrise è possibile modificare la funzione dei pulsanti del joystick R-Net, in questo modo potrete attivare l'elevazione senza uscire dalla schermata di guida e muovervi con la carrozzina mentre la seduta si alza.



Scansionate il QR code con il vostro smartphone per guardare il video.

STILE

ESPRIMETE VOI STESSI

Trattate ogni strada come una passerella grazie a Q300 R e ai 5 colori disponibili per la scocca. Potete anche completare il vostro look scegliendo tra le 7 possibilità dei dettagli colorati. Fate la scansione del codice QR per trovare la combinazione perfetta per voi.



BLU

VIOLA

GIALLO

ROSSO

NERO

built4me

State cercando qualcosa di unico? Il nostro team Built-4-Me vi aiuterà a creare una Q300 R completamente personalizzata e spaziale! Contattate il vostro rivenditore per maggiori informazioni.

COLORI DEI DETTAGLI



NERO



BLU



VERDE MELA



ARANCIONE



ROSSO



GRIGIO



BIANCO

DATI TECNICI

	Q300 R	Q300 R Mini
Larghezza della seduta	385 - 510 mm	385 - 510 mm
Profondità della seduta	410 - 510 mm	410 - 510 mm
Altezza della seduta	430 - 490 mm	430 - 490 mm
Altezza dello schienale	460 - 510 mm	460 - 510 mm
Lunghezza delle pedane	305 - 460 mm	305 - 460 mm
Basculamento elettronico	0 -30°	0 -30°
Larghezza totale	580 mm	550 mm
Lunghezza totale	Da 1100 mm	Da 1060 mm
Diametro del cerchio di rotazione	1800 mm	1700 mm
Pendenza massima superabile	6°	6°
Superamento massimo ostacoli	100 mm (con salicordoli)	60 mm
Autonomia massima (ISO 7176-4)	32 km	32 km
Peso del prodotto (con batterie da 50 Ah)	124 kg (con batterie da 50 Ah) 95 kg (senza batterie)	124 kg (con batterie da 50 Ah) 95 kg (senza batterie)
Portata massima	136 kg	136 kg
Ruote motrici	14"	12"
Ruote direzionali	9"	8"
Velocità massima	10 Km/h	10 Km/h
Batterie	50 (standard) / 56 / 64 Ah	50 (standard) / 56 / 64 Ah
Elettronica	VR2 / R-Net	VR2 / R-Net
Crash test	Si - approvato per trasporto su veicolo con posizionamento in senso di marcia (ISO 7176-19). L'ancoraggio va effettuato sui 4 punti di fissaggio della carrozzina con 2 doppie cinghie posteriormente e 2 singole anteriormente. Non è consentito l'uso delle cinture di sicurezza del veicolo. La facilità di accesso e la manovrabilità nel veicolo dipende dalle dimensioni della carrozzina.	
Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)	
Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitata, per utilizzo in interni e in esterni. Carrozzina classe B.	

Ora che sapete tutto di QUICKIE Q300 R, perché non prenotate una prova gratuita e la provate voi stessi?



Scansionate il QR code con il vostro smartphone e prenotate la vostra prova gratuita.

Sunrise Medical ha a cuore la vostra sicurezza. Vi preghiamo di leggere il manuale d'uso per utilizzare il prodotto in sicurezza e di seguire le linee guida per la manutenzione.

In linea con la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, Sunrise Medical si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Per informazioni aggiornate, visitate il sito www.SunriseMedical.it. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it