

Q300[®] SERIES

Kompaktowy rozmiar. Wysoka wydajność.

zippie.
Explore your world!

QUICKIE[®]
Live without limits.

Wózki elektryczne
Serii Q



Q300 M Mini Kids



Q300 M Mini Teens



Q300 M Mini SEDEO LITE




Q300 M Mini SEDEO PRO

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MOC QUICKIE

QUICKIE SERIA Q

Kompletny zakres od podstawowej mobilności do złożonej rehabilitacji. Cokolwiek potrzebujesz - bez kompromisów.

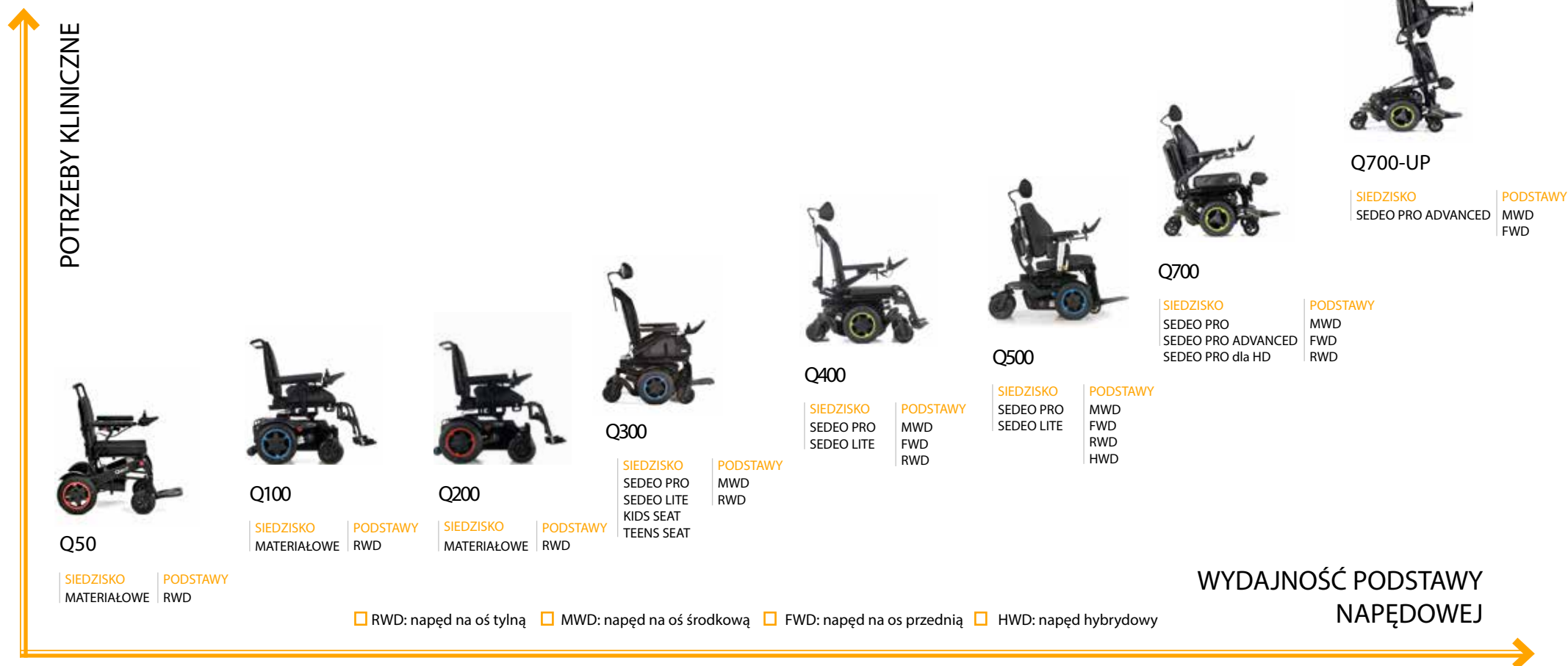

Nie wszystkie siedziska można łączyć ze wszystkimi bazami. Proszę zapoznać się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o możliwych kombinacjach siedziska/podstawy

JEDŹ TAM, GDZIE INNE WÓZKI NIE MOGĄ Z Q300 M MINI.

Niezwykle smukły, mający zaledwie 520 mm szerokości, Q300 M Mini jest jednym z najwęższych wózków z PRAWDZIWYM napędem na środkowe koła. Stworzony z myślą o małych przestrzeniach i ciasnych zakrętach, jego promień skrętu wynoszący zaledwie 1120 mm gwarantuje, że nie tylko dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą, ale także zawrócisz!

Równie zwinny na zewnątrz, jego opatentowane amortyzowane zawieszenie wszystkich kół zapewni Ci bezpieczeństwo i stabilność przez cały czas. Pokonywanie 7 cm krawężników? To pestka z kołami napędowymi 35,5 cm. Zejście z utwardzonej ścieżki? Supermocne 4-biegunowe silniki napędzają tam, gdzie inni zawracają. A dzięki energooszczędnym silnikom wyciskającym do 36 km z akumulatorów 56 Ah, nie zawrócisz w najbliższym czasie.

Dostępny z CZTEREMA różnymi systemami siedzeń — SEDEO LITE (str. 16), SEDEO PRO (str. 17), KIDS SEAT (str. 20) i TEENS SEAT (str. 21) — łączy sprawdzoną podstawę Q300 M Mini z systemami siedzeń dedykowanymi do różnych potrzeb klinicznych i grup wiekowych. A dzięki wielu opcjom elektrycznym, jest to połączenie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczone w tej kategorii wózków.

Dzięki niestandardowym projektom obudowy i akcentującym kolorom, Q300 M Mini jest idealnym wózkiem, który pozwoli Ci odzwierciedlić Twoją osobowość.

Zainteresowana/-y? Dobrze, przejdźmy zatem przez szczegóły.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby obejrzeć wideo.



KOMPAKTOWA PRZESTRZEŃ? POZNAJ ULTRACIENKĄ BAZĘ!

Masz dość słuchania, gdzie nie możesz jechać?
Ultrakompaktowa podstawa Q300 M Mini o
szerokość 520 mm jest tak absurdalnie wąska, że
dotrze tam, gdzie inni nie mogą.

520 mm

1120 mm



ULTRAKOMPAKTOWY PROMIEŃ SKRĘTU 1120 MM

Dzięki technologii PRWADZIWEGO napędu na środkowe koła, Q300 M Mini zawraca w miejscu przy bardzo małym promieniu skrętu wynoszącym zaledwie 1120 mm. Dla porównania, wózki RWD i FWD muszą „obracać się” na przednich lub tylnych kołach napędowych, więc promień skrętu jest większy.



CZYM JEST TECHNOLOGIA PRAWDZIWEGO NAPĘDU NA ŚRODKOWE KOŁA?

Dzieje się tak, gdy koła napędowe wózka są ustawione centralnie względem jego długości. Jeśli natomiast są przesunięte do przodu lub do tyłu, promień skrętu jest większy (ponieważ potrzeba więcej miejsca na obracanie wózka). Mniejsze jest wówczas również dociążenie koła napędowego, co zmniejsza przyczepność. Q300 M Mini zapewnia najbardziej kompaktowy promień skrętu przy zwiększonej przyczepności dzięki PRAWDZIWEMU napędowi na środkowe koła.

WĄSKIE KOŁA NAPĘDOWE 300 MM (12")

Szukasz maksymalnej zwrotności w pomieszczeniach? Te standardowe koła napędowe zapewniają najmniejszą szerokość podstawy 520 mm.





ODCHYLANE DO TYŁU PODŁOKIETNIKI

Masz problem z wsiadaniem i zsiadaniem ze swojego Q300 M Mini? Wystarczy odchylić podłokietniki do tyłu, aby uzyskać więcej miejsca. Są również dostępne w wersji wyjmowanej lub rozkładanej.



410 mm

NISKA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

Dojeżdż wygodnie pod stół lub podczas jazdy pojazdem przystosowanym do wózków dzięki wyjątkowo niskiej wysokości siedziska Q300 M Mini od podłogi, zaczynającej się od 410 mm przy stałym nachyleniu i 430 mm przy elektrycznym podnoszeniu/przechyleniu.

KRÓTKA PODSTAWA 1060 MM

Mając zaledwie 1060 mm długości (z centralnie mocowanym podnóżkiem), Q300 M Mini z łatwością mieści się w najmniejszych windach i ciasnych przestrzeniach. Jest również wystarczająco lekki (od 103 kg), aby był kompatybilny z większością podnośników podłogowych.



1060 mm

Po prostu odchyl kontroler na bok i podejź jeszcze bliżej.



ZBLIŻ SIĘ Z PODNÓŻKIEM MOCOWANYM CENTRALNIE

Szukasz podstawy o najmniejszej długości? Opcjonalny manualnie lub elektrycznie regulowany (na zdjęciu) mocowany centralnie eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych podnóżków z przodu wózka. Siedząc z kolanami zgiętymi pod kątem 90°, nie tylko możesz wieźć w cieńsze miejsca, ale także zbliżyć do przedmiotów, takich jak stoły.

WYBITNY ZAWODNIK

Poznaj PRAWDZIWY kompaktowy wózek z PRAWDZIWYMI rewelacyjnymi osiągnięciami na zewnątrz. Wąski i zwinny w zatłoczonym mieście i DUŻY do jazdy na zewnątrz, wyprzedza konkurencję na ulicach.

TECHNOLOGIA ANTI-PITCH

Tradycyjnie, gdy wózek zatrzymuje się na zboczu przy zjeździe, zatrzymanie powoduje szarpnięcie do przodu. To problem, który wyeliminowaliśmy dzięki technologii Anti-Pitch — dzięki czemu siedzisz bezpiecznie i stabilnie.



NIEZALEŻNE AMORTYZOWANE ZAWIESZENIE WSZYSTKICH KÓŁ

Nasze OPATENTOWANE niezależne amortyzowane zawieszenie wszystkich kół zapewnia, że wszystkie sześć kół pozostaje w kontakcie z ziemią podczas pokonywania przeszkód. Wszelkie wstrząsy i uderzenia są pochłaniane przez amortyzowane koła, zapewniając miękką i płynną jazdę.



NIE MA POTRZEBY SPIESZYĆ SIĘ Z POWROTEM

Zasilany mocnymi akumulatorami 56 Ah, Q300 M Mini zabierze Cię w dowolne miejsce dzięki imponującemu zasięgowi do 36 km.



PRZESUŃ GRANICE Z KOŁAMI NAPĘDOWYMI 355 MM (14 CALI)

Uzyskaj najlepszą przyczepność, stabilność i pokonywanie przeszkód dzięki tym agresywnym kołom terenowym. Co więcej, sprawiają, że Twój Q300 M Mini jest dalej smukły i ma zaledwie 570 mm.



ŚWIATŁA NA BŁOTNIKACH

Teraz dostępne w podstawie Q300 M Mini: subtelne zintegrowane światła oświetlają drogę i zapewniają lepszą widoczność.



SMUKŁA MASZYNA DO POKONYWANIA KRAWĘŻNIKÓW.

Czy nie nienawidzisz tego, gdy w zasięgu wzroku nie ma krawężnika? Na szczęście Q300 M Mini z kołami napędowymi 300 mm (12 cali) radzi sobie z krawężnikami do 50 mm, więc nie trzeba pokonywać dodatkowych długich tras. Potrzebujesz poradzić sobie z czymś nieco trudniejszym? Zmień na koła napędowe 355 mm (14") i pokonuj krawężniki do 70 mm.

SILNIKI 4-BIEGUNOWE QUICKIE

Nasze ponad 40-letnie doświadczenie pozwoliło opracować trwalsze, wysoce wydajne silniki o wydajności, właściwościach jezdnych i zasięgu, którym inni po prostu nie mogą dorównać.



Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie i już dziś zarezerwuj bezpłatną jazdę próbną.

ZACHOWAJ MOC

Podobnie jak samochód na autostradzie czy w mieście, nasze silniki zostały zaprojektowane z myślą o optymalnych osiągnięciach podczas jazdy, dzięki czemu zyskujesz moc wtedy, gdy jej potrzebujesz (i zachowujesz ją, gdy jej nie potrzebujesz).

ZWIĘKSZENIE MOCY

Trudne nachylenie? Nasze kontrolery i silniki współpracują ze sobą, aby zapewnić dodatkowe 10 sekund zwiększonej mocy, gdy najbardziej jej potrzebujesz.

ZREDUKUJ COFANIE SIĘ TEMPERATURY

Większe powierzchnie chłodzące silnika ułatwiają odprowadzanie ciepła, zmniejszając cofanie się temperatury, dzięki czemu utrzymujesz stałą prędkość - nawet na zboczach lub nierównych powierzchniach!

ZAPROJEKTOWANY NA DŁUGI CZAS

W przeciwieństwie do innych wózków, nasze koła zębate są wykonane z polerowanego metalu (nie z tworzywa sztucznego). Zapewniając niższy poziom hałasu i wyższą wydajność, są stworzone do trudnych warunków.

TWÓJ TOWARZYSZ PODRÓŻY

Jedziesz komunikacją miejską? Wyjątkowo wąska szerokość i mały promień skrętu Q300 M Mini pomogą Ci pokonywać nawet najbardziej ruchliwe trasy.

PERFECT FOR HOISTING

Ważący od zaledwie od 103 kg Q300 M Mini można łatwo wnosić i wysuwać z pojazdu. Prawdziwa oszczędność miejsca, opcjonalne dodatki, takie jak składane oparcie, odchylane podnóżki lub wyjmowane podłokietniki z pojedynczym słupkiem, zapewniają jeszcze ciaśniejszy, kompaktowy rozmiar, gdy przestrzeń jest na wagę złota.



ZACHOWAJ PRZYCZEPNOŚĆ NA RAMPACH

Na rampach może dojść do utraty przyczepności, ponieważ przednie koła odrywają koło napędowe od podłoża. Przednie ramiona samonastawne Q300 M Mini poruszają się niezależnie od podstawy, dzięki czemu koło napędowe zachowuje przyczepność.



POJAZDY PRZYSTOSOWANE DO WÓZKÓW

Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości siedziska od podłoża do 410 mm, Q300 M Mini z łatwością mieści się pod kierownicą pojazdu, pozostawiając dużo miejsca nad głową. Wyjątkowo wąski, nie zaczepi się również o panele boczne pojazdu.

DOPOSAŻ SWÓJ Q300 M MINI W OPCJE ELEKTRYCZNE

Q300 M Mini to nie tylko DUŻE osiągi wózka, ale także funkcje DUŻEGO wózka! Od elektrycznego pochylania, podnoszenia, odchyłania lub podnoszenia podnóżków — jest wyposażony w wiele opcji, które spełnią Twoje potrzeby kliniczne i związane ze stylem życia.



PODNOŚZONE ELEKTRYCZNIE

PRZEGUBOWE PODNÓŻKI

Podnosząc i opuszczając nogi, podnóżki pomagają zmniejszyć obrzęk i poprawić krążenie. Regulacja długości pozwala utrzymać stałą pozycję siedzenia, zapobiegając niepożądanemu ruchowi miednicy. Wersja montowana centralnie (na zdjęciu) zapewnia również większą przestrzeń z przodu wózka podczas manewrowania i transferów.

TILT-IN-SPACE

Dostosuj pozycję siedzenia przez cały dzień dzięki sterowanemu przechyleniu do 50°. Pomagając w odciążeniu poprzez redystrybucję ciężaru z poduszki na oparcie, utrzymuj wygodną pozycję siedzącą przy zmniejszonym wysiłku mięśni.



300mm

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE I PRZECHYLENIE SIEDZISKA

Osiągnij nowe wyżyny dzięki podnoszonemu siedzeniu o 300 mm i osiągnij przedmiotów codziennego użytku, które normalnie byłyby poza zasięgiem. Możesz także łatwiej się przesiadać, ponieważ znajdujesz się na wyższej pozycji, z której możesz wstać. Ponadto, dzięki nachyleniu do 50°, możesz usiąść wygodnie i cieszyć się większym relaksem i rozłożeniem nacisku.

ELEKTRYCZNIE ODCHYLANE OPARCIE

Podobnie jak fotel rozkładany w samochodzie, elektryczne odchylenie oparcia pomaga rozłożyć ciężar na większej części oparcia przy zachowaniu stałego kąta siedzenia.



C-Me

JAZDA Z PODNIESIONYM SIEDZISKIEM I AKTYWNYM ZAWIESZENIEM DO 4,5 KM/H


C-Me polega na zobaczeniu siebie i tylko siebie. Podnieś się do 300 mm podczas jazdy z prędkością do 4,5 km/h i poruszaj się ramie w ramie ze wszystkimi wokół. W przeciwieństwie do innych, nasze zawieszenie również się nie blokuje, więc możesz cieszyć się płynną i wygodną jazdą od początku do końca. Możesz nawet podnosić lub opuszczać siedzenie za naciśnięciem jednego przycisku, bez konieczności zatrzymywania się podczas zmiany pozycji!



Kolory pokazane w tej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z zastosowanego procesu drukowania.

AKCESORIA

W korzystnej sytuacji? Będiesz miał 12 ekscytujących wzorów obudowy! Skoordinuj lub skontrastuj je z dodatkowymi 7 kolorami akcentującymi dla kół, aby uzyskać idealną mieszankę.

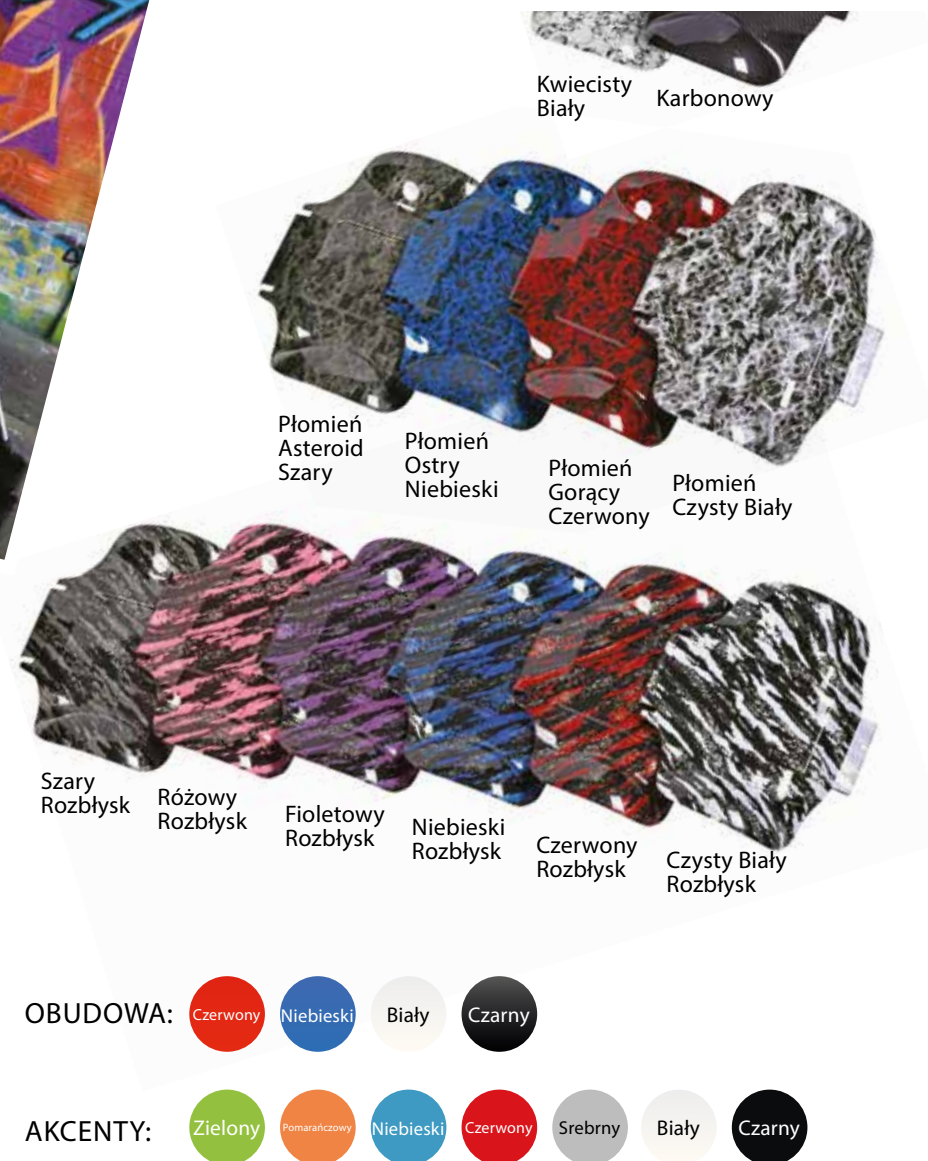

UNIWERSALNY ZAGŁÓWEK

Mocowanie zagłówka dla dorosłych, nastolatków i dzieci jest kompatybilne z zagłówkami SEDEO i WHITMYER, które pomagają zaspokoić szereg potrzeb, od podstawowego wsparcia po wielopunktową kontrolę.

Q300 M MINI JEST DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH!

Q300 M Mini łączy w sobie wysokowydajną podstawę z dedykowanymi systemami siedzisk dla dorosłych, nastolatków i dzieci, które spełniają Twoje potrzeby kliniczne. Teraz każdy może cieszyć się Q300 M Mini!

SIEDZISKO SEDEO LITE

Łącząc regulowaną i konfigurowalną ramę z szerokim zakresem opcji podparcia i pozycjonowania, SEDEO LITE jest idealny dla klientów o łagodnych i umiarkowanych potrzebach wsparcia.

ODCHYLANE DO TYŁU PODŁOKIETNIKI

Po prostu odchyl podłokietniki do tyłu, aby uzyskać więcej miejsca podczas przesiadania się z wózka. Dostępne również w wersji wyjmowanej lub składanej.

KOMPENSUJĄCE DŁUGOŚĆ, ODCHYLANE PODNÓŻKI

Łatwo regulowana długość w celu uzyskania najlepszego możliwego dopasowania, te podnóżki można odchyłać, aby ułatwić przesiadanie się z wózka. Dostępny również elektryczny mocowany centralnie podnóżek.

DLA KLIENTÓW Z
ŁAGODNYMI DO
UMIARKOWANYCH
POTRZEB
KLINICZNYCH

TAPICERKA OPARCIA Z KOMFORTOWĄ PODUSZKĄ

Standardowe oparcie z regulacją wysokości zapewnia oddychającą, miękką tapicerkę z 4 regulowanymi paskami, aby dostosować się do różnych pozycji. Zmień oparcie i poduszkę na SEDEO lub JAY, aby zwiększyć komfort i pozycjonowanie.



Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie, aby dowiedzieć się więcej.



TECHNOLOGIA SZYN SIEDZISKA

Zintegrowana szyna siedziska oferuje wiele możliwości montażu elementów pozycjonujących, takich jak boczne podparcie klatki piersiowej, ud i kolan. Po prostu zamocuj i wsuń na miejsce!



SIEDZISKO SEDEO PRO

DLA KLIENTÓW Z
UMIARKOWANYM
DO SKOMPLIKOWANYCH
POTRZEB KLINICZNYCH

Wysokiej klasy w pełni regulowana i konfigurowalna rama siedziska z najszerszą gamą opcji i akcesoriów do pozycjonowania: SEDEO PRO oferuje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb użytkownika, który ma choroby zwyrodnieniowe lub potrzebuje zabezpieczenia przed wystąpieniem deformacji szkieletu o umiarkowanych lub złożonych potrzebach klinicznych.



50° ELEKTRYCZNE PRZECHYLANIE NAWET W POŁĄCZENIU Z PODNOSZENIEM SIEDZISKA

Pozwala ocenić obszary, które były poza zasięgiem, jednocześnie pomagając zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn, pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy i zapewniając wygodę użytkownika.



ELEKTRYCZNIE ODCHYLANE OPARCIE 90°/150°

Pomaga w oddychaniu i zapobiega odleżynom i powikłaniom trawiennym. Pomaga utrzymać dobrą postawę siedzącą podczas odchylania oparcia.

OPARCIE Z SYSTEMEM ANTI-SHEAR

100 mm ruchu Anti-Shear zapewnia, że nie ma poślizgu między użytkownikiem a poduszką, zapewniając wygodne odchylenie.

POZYCJA RELAKS (DOSTĘPNA WKRÓTCE)

Pozwala na jednoczesną regulację pochylenia siedziska i odchylenia oparcia oraz utrzymuje zagłówek na miejscu podczas zmiany pozycji.



Zeskanuj kod QR aparatem
w telefonie, aby dowiedzieć
się więcej.

ELASTYCZNA PODUSZKA OPARCIA SEDEO PRO

Zmień na tą wyjątkową poduszkę oparcia, która łączy regulowane, pełne tylne i boczne podparcie tułowia z najwyższym poziomem zanurzenia, który trzeba poczuć, aby w to uwierzyć!

DOPASOWUJE SIĘ DO KRĘGOSŁUPA

Zamiast sztywnej podstawy, elastyczna poduszka pod plecy ma 8 regulowanych pasków, które owijają się wokół pleców. Tam, gdzie inne oparcia mają ograniczony kontakt z kręgosłupem, warstwa elastycznej poduszki oparcia z miękkiej pianki dopasowuje się do Ciebie, zapewniając pełny kontakt, wygodę i stabilność.



Jest tak wciągająca, że nawet osoby z umiarkowaną lub ciężką postawą kifotyczną mogą siedzieć znacznie bardziej wyprostowane bez poświęcania komfortu.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby obejrzeć wideo.

OWIJA SIĘ I FORMUJE DO TWOJEGO CIAŁA

Kiedy siadasz, boki oparcia „przytulają” Twoje boki, pozwalając wciągającej piance dopasować się do twoich anatomicznych krzywizn. Ponieważ więcej ciała ma kontakt z poduszką, nacisk rozkłada się lepiej, zapobiegając dyskomfortowi lub zwiększonemu uciskowi.

Stabilność i wyrównanie tułowia zapewniają boczne podpory. Zintegrowane z wewnętrzną częścią oparcia dla uzyskania gładkiego i atrakcyjnego wyglądu, nie przesuwają się ani nie zsuwają z upływem czasu. Niezależnie regulowane podpory mogą być:

1

Umieszczone do wewnątrz lub na zewnątrz



2

Przesuwane w górę lub w dół



3

Zablokowane, aby wspierać postawy takie jak skolioza lub poluzowane dla większej swobody




zippie

Q300 M MINI kids

DZIECIĘCY REGULOWANY SYSTEM SIEDZISKA

Dzieci rosną tak szybko, podobnie jak ich Q300 M Mini Kids! Ten system siedzisk może rosnać na szerokość (280 - 400 mm) i głębokość (260 - 400 mm), więc nie ma konieczności do przesiadki na nowy wózek, gdy Twoje dziecko dorośnie - wystarczy przekonfigurować obecny!

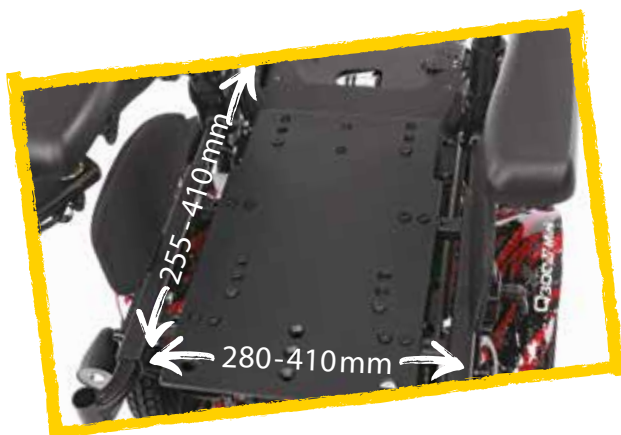

OPARCIE SEDEO LITE

Zaprojektowaliśmy to oparcie tylko dla dzieci. Wyprofilowane dla wygody, zintegrowane boki zapewniają stałą stabilność tułowia. Ponieważ znajdują się wewnątrz oparcia, boki nie będą się z czasem przesuwac ani ślizgać - idealne dla dzieci w ruchu! A osiem regulowanych pasków zapewnia zindywidualizowane wsparcie w każdym miejscu.



DODATKOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

To poręczne urządzenie natychmiast zdalnie zatrzymuje wózek Twojego dziecka, jeśli oddali się trochę za daleko, by zapewnić mu komfort.

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie aby obejrzeć wideo.



Q300 M MINI TEENS

MŁODZIEŻOWY REGULOWANY SYSTEM SIEDZISKA

Wypasany we wszystkie możliwości regulacji wzrostu i funkcje wersji dla dzieci, Q300 M Mini Teens rozciąga się do rozszerzonego zakresu głębokości siedziska 360 - 500 mm. Idealny dla rosnących nastolatków, którzy wymagają małej szerokości siedziska, ale z czasem większej regulacji głębokości siedziska.



MOCOWANIE JOYSTICKA TYPU CAPSULATED

To (opcjonalne) mocowanie joysticka ma 3 pozycje blokowania. Można go zamontować w linii środkowej dla dzieci, które mają ograniczoną ruchomość rąk, a także odchylać do wewnątrz/na zewnątrz, aby pomóc zbliżyć się do stolików.



Połącz się ze swoim światem*
Bezproblemowo przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem za pomocą zintegrowanej funkcji Bluetooth i i-device. Steruj telewizorem, telefonem i innymi systemami rozrywki domowej za pomocą joysticka.



PODNÓŻKI Z SYSTEMEM Z-FINITY

Regulowane od 160 do 480 mm poniżej płyty siedziska, te podnóżki zapewniają wsparcie, którego potrzebują rosnące dzieci. Bezstopniowa regulacja wzdłuż łuku obrotowego, można uzyskać wiele kątów i opcji ułożenia stóp, kostek i kolan.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby obejrzeć wideo.



*Dostępny tylko z R-Net

JAY I WHITMYER

OPCJE POZYCJONOWANIA

Szeroka gama zagłówek WHITMYER oraz poduszek i oparc JAY jest dostępna z SEDEO LITE, SEDEO PRO, a także z siedziskami Kids i Teens, aby sprostać potrzebom klinicznym każdego użytkownika i zapewnić najlepszą możliwą pozycję siedzenia.





ZAGŁÓWKI WHITMYER

Stworzony w celu zaspokojenia szeregu potrzeb użytkowników, od podstawowego po wielopunktowe podparcie. Zagłówki WHITMYER są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach poduszek, co zapewnia doskonałe ułożenie głowy i wygodę.

PODUSZKI I OPARCIA JAY

Zaprojektowane z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i komforcie, poduszki i oparcia JAY są łatwe w utrzymaniu, wysoce konfigurowalne i dostępne w szerokiej gamie, aby spełnić Twoje indywidualne potrzeby.

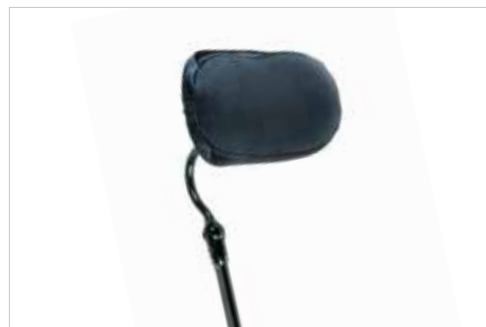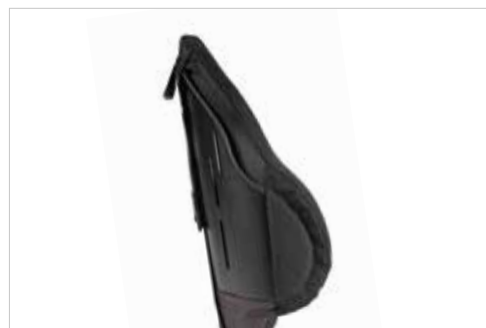

R-NET

JOYSTICK ZAAWANSOWANY

Każdy Q300 M Mini jest opcjonalnie wyposażony w zaawansowany joystick R-Net. Duży, czytelny wyświetlacz HD oraz proste w obsłudze przełączniki łopatkowe pozwalają na intuicyjną obsługę.

ŁĄCZNOŚĆ IR

Bezproblemowo przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem za pomocą zintegrowanej funkcji podczerwieni. Steruj swoim domowym systemem rozrywki, telewizorami, odtwarzaczami DVD, stacjami dokującymi i innymi domowymi systemami rozrywki za pomocą joysticka.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Steruj telefonem, komputerem, tabletem i innymi urządzeniami Bluetooth oraz i-urządzeniami za pomocą tego przydatnego dodatku. Podłącz i steruj maksymalnie czterema urządzeniami.

OPATENTOWANE PRZYCISKI QUICKIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA

Zmień funkcję dowolnego przycisku na joysticku na dowolne polecenie, dzięki OPATENTOWANYM przyciskom programowalnym QUICKIE. Możesz także przypisać drugą funkcję (długie naciśnięcie) do przycisków, zapewniając szybszy, prostszy i płynniejszy dostęp do często używanych funkcji bez konieczności używania joysticka.



SWITCH-IT

INNOWACYJNE STEROWANIE


Wygodny dostęp do 5 programowalnych pozycji za pomocą Ctrl+5 – idealne połączenie z funkcją Memory Seating. Pozwala przejść bezpośrednio do potrzebnej funkcji za naciśnięciem jednego przycisku.

ALTERNATYWNE STEROWANIE NAPĘDEM

Jeśli jazda za pomocą tradycyjnego joysticka nie jest najlepszą opcją, alternatywne sterowanie napędem pozwoli Ci w pełni doświadczyć możliwości i korzyści płynących z prowadzenia Twojego wózka.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby dowiedzieć się więcej.

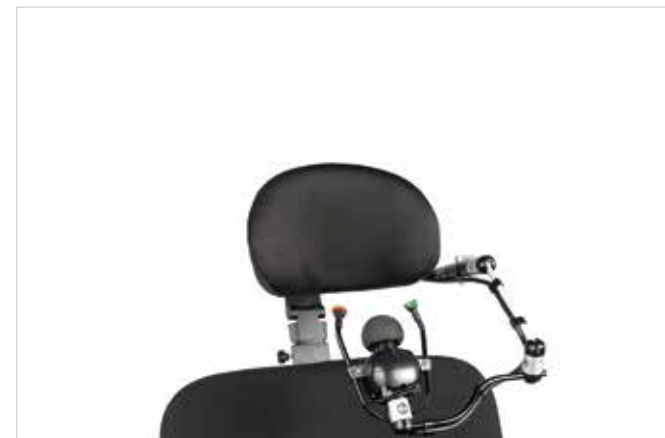

LINK-IT

SYSTEM MOCOWANIA

Potrzebujesz użyć dodatkowych przycisków lub specjalnych elementów sterujących? Żaden problem, z łatwością podłącz je za pomocą uniwersalnego systemu montażowego Link-It.

Korzystając z kombinacji dostępnych modułów i rurek, możesz stworzyć nieskończoną liczbę kombinacji, aby osiągnąć to, czego potrzebujesz. Nie tylko łatwo go ustawić, ale Link-It zapewnia również, że minimalistyczny, projekt wózka nie zostanie naruszony przez dodatkowe elementy sterujące. Niezależnie od tego, czy jest to dodatkowy kontroler na podłokietniku, przycisk na oparciu, czy przełącznik na zagłówku, wystarczy go połączyć.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SPECYFIKACJA SIEDZISK



Q300 M Mini z
SEDEO LITE



Q300 M Mini z
SEDEO PRO

Wymiary

Szerokość siedziska	385 - 510 mm	380 - 560 mm
Głębokość siedziska	410 - 560 mm	400 - 560 mm
Wysokość siedziska od podłoża	410 - 490 mm	410 - 490 mm
Stały kąt nachylenia siedziska	0 - 9°	0 - 9°
Wysokość oparcia	460 - 510 mm	530 - 720 mm
Kąt oparcia	85 - 120°	90° - 150°
Maksymalna waga użytkownika	136 kg	136 kg

Fukcje

Rodzaj siedziska	SEDEO LITE	SEDEO PRO
SEDEO PRO Flexible Back Cushion	●	●
Oparcie dla dorosłych SEDEO LITE	●	-
Oparcie dla dzieci SEDEO LITE	-	-
Elektrycznie odchylane oparcie	●	●
Elektrycznie podnoszone i wydłużane podnóżki	●	●
Zdalny przycisk STOP	●	-
C-Me	●	●
Podnóżek z systemem Z-Finity	-	-

● Dostępne



Q300 M Mini Teens



Q300 M Mini Kids

300 - 400 mm	280 - 400 mm
360 - 500 mm	260 - 400 mm
410 - 490 mm	410 - 490 mm
0 - 9°	0 - 9°
435 - 535 mm	380 - 485 mm
86 - 106°	86 - 120°
120 kg	75 kg
Siedzisko Teens	Siedzisko Kids
-	-
-	-
●	●
-	●
●	-
●	●
●	●
●	●

SPECYFIKACJA PODSTAWY JEZDNEJ

Wymiary	
Szerokość całkowita	od 520 mm
Długość całkowita (z centralnie mocowanym podnóżkiem)	od 1060 mm
Promień skrętu	od 1120 mm
Maksymalny bezpieczny kąt podjazdu	8°
Maksymalna wysokość krawężnika	50 mm (z kołem napędowym 12") 60 mm (z kołem napędowym 13") 70 mm (z kołem napędowym 14")
Maksymalny zasięg (ISO 7176-4)	do 25 km (z akumulatorami 41 Ah) do 36 km (z akumulatorami 56 Ah)
Waga produktu (z akumulatorami)	od 103 kg
Koła napędowe	12" / 13" / 14"
Maksymalna prędkość	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Akumulatory	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Elektronika	VR2, R-NET
Transport bez użytkownika	Zamocuj bezpiecznie wózek w pojeździe (np. samochodzie lub samolocie).
Przeznaczenie i środowisko	Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Typ wózka - klasa B

SZUKASZ CZEGOŚ WYJĄTKOWEGO?



Dział BUILT-4-ME stworzył tysiące wózków na indywidualne zamówienie. Jeśli chcesz przełamać schematy, pomożemy Ci stworzyć naprawdę jedyną w swoim rodzaju wózek. Dowiedz się więcej na:

www.sunrisemedical.eu/built4me

Teraz, gdy przeczytałeś już wszystko o QUICKIE Q300 M Mini, uważamy, że nadszedł czas, abyś sam tego doświadczył.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie i już dziś zarezerwuj bezpłatną jazdę próbną.

Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 36 67
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl



Sunrise Medical dba o Twoje bezpieczeństwo. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia produktów Sunrise Medical zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź stronę www.sunrise-medical.pl. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.