

Q300[®] SERIEN

Lille i størrelse. STOR i ydeevne.



Q300 M Mini Kids



Q300 M Mini Teens



Q300 M Mini med SEDEO LITE



Q300 M Mini med SEDEO PRO

QUICKIE

NY QUICKIE Q-SERIE

En komplet række af el-kørestole fra grundlæggende mobilitet til kompleks genoptræning. Hvad end du har behov for - uden kompromiser.

KLINISK BEHOV



Q50 R

SIDDESYSTEM
SLING

BASER
RWD



Q100

SIDDESYSTEM
SLING

BASER
RWD



Q200

SIDDESYSTEM
SLING

BASER
RWD



Q300

SIDDESYSTEM
SEDEO PRO
SEDEO LITE
KIDS
TEENS

BASER
MWD
RWD



Q400

SIDDESYSTEM
SEDEO PRO
SEDEO LITE

BASER
MWD
FWD
RWD



Q500

SIDDESYSTEM
SEDEO PRO
SEDEO LITE

BASER
MWD
FWD
RWD
HWD



Q700

SIDDESYSTEM
SEDEO PRO
SEDEO PRO ADVANCED
SEDEO PRO TIL HD

BASER
MWD
FWD
RWD



Q700-UP

SIDDESYSTEM
SEDEO PRO ADVANCED

BASER
MWD
FWD

□ RWD: Rear-Wheel Drive □ MWD: Mid-Wheel Drive □ FWD: Front-Wheel Drive □ HWD: Hybrid-Wheel Drive

Ikke alle sæder kan kombineres med alle baser. Se venligst bestillingsformularen for mulige sæde/understel kombinationer.

BASE YDEEVNE

Kom derhen, hvor andre el-kørestole ikke kan - med Q300 M MINI.

Med sit ultraslanke design med en bredde på kun 520 mm, er Q300 M Mini en af de smalleste ÆGTE centerdrevne el-stole. Skabt til små rum og snævre hjørner; dens vendediameter på kun 1100 mm sikrer, at du ikke kun kan komme hen, hvor andre ikke kan, du kan også vende rundt!

Også udendørs er Q300 M Mini el-kørestolen adræt. Den patenterede affjedring på alle 6 hjul holder dig sikker og stabil til enhver tid. Kan du klare en 7 cm høj kantsten? Det er en leg med 35,5 cm drivhjul. Vælger du en anden rute? De superstærke 4-pols-motorer slår igennem, hvor andre vender tilbage. Og med energieffektive motorer, der kører op til **36 km** med 56 Ah-batterier, behøver du ikke at vende hurtigt hjem igen.

Q300 M Mini fås med FIRE forskellige sædesystemer - SEDEO LITE (s.16), SEDEO PRO (s.17), KIDS SEAT (s.20) og TEENS SEAT (s.21) - og kombinerer en præstationsafprøvet base med siddesystemer dedikeret til de kliniske behov hos forskellige aldersgrupper. Og med masser af elektriske muligheder, er dét en kombination, der aldrig er oplevet i denne kategori af el-stole før.

Med brugerdefinerede skjolddesign og farver er Q300 M Mini den perfekte kørestol til at vise din personlighed frem.

Fangede vi din opmærksomhed? Okay, lad os forklare dig detaljerne.



BEGRÆNSET PLADS? MØD DEN ULTRA- SLANKE BASE!

Træt af at få at vide, hvor du ikke kan tage hen? Q300 M Mini's ultrakompakte 520 mm base er så utrolig smal, at den kan komme derhen, hvor andre el-kørestole ikke kan.

520 mm

1100 mm



ULTRAKOMPAKT 1100 MM VENDEDIAMETER

Takket være sin ÆGTE centerdrevne teknologi drejer Q300 M Mini på stedet for en ultra-lille vendediameter på kun 1100 mm. Til sammenligning skal RWD og FWD el-kørestolene 'svinge' rundt på sine for- eller baghjul, så vendecirklen er bredere.



HVAD ER ÆGTE CENTERDREVEN TEKNOLOGI?

Det er, når kørestolens drivhjul er justeret centralt i forhold til dens længde. Hvis det er placeret foran eller bagud, er drejecirklen bredere (da der er mere af kørestolen at svinge rundt). Der er også mindre vægt på drivhjulet, hvilket reducerer trækkræften. Q300 M Mini giver den mest kompakte vendediameter med øget trækraft takket være dens ÆGTE centerhjulstræk.




SMALLE 300 MM (12") DRIVHJUL

Leder du efter den snævraste indendørs manøvrerdygtighed? Disse standard drivhjul giver dig den mest kompakte 520 mm bredde på basen.



FLIP BACK ARMLÆN

Kæmper du med at komme ind og ud af din Q300 M Mini? Bare vip armlænene bagud for ekstra plads. De kan også fås som aftagelige eller opklappelig version.

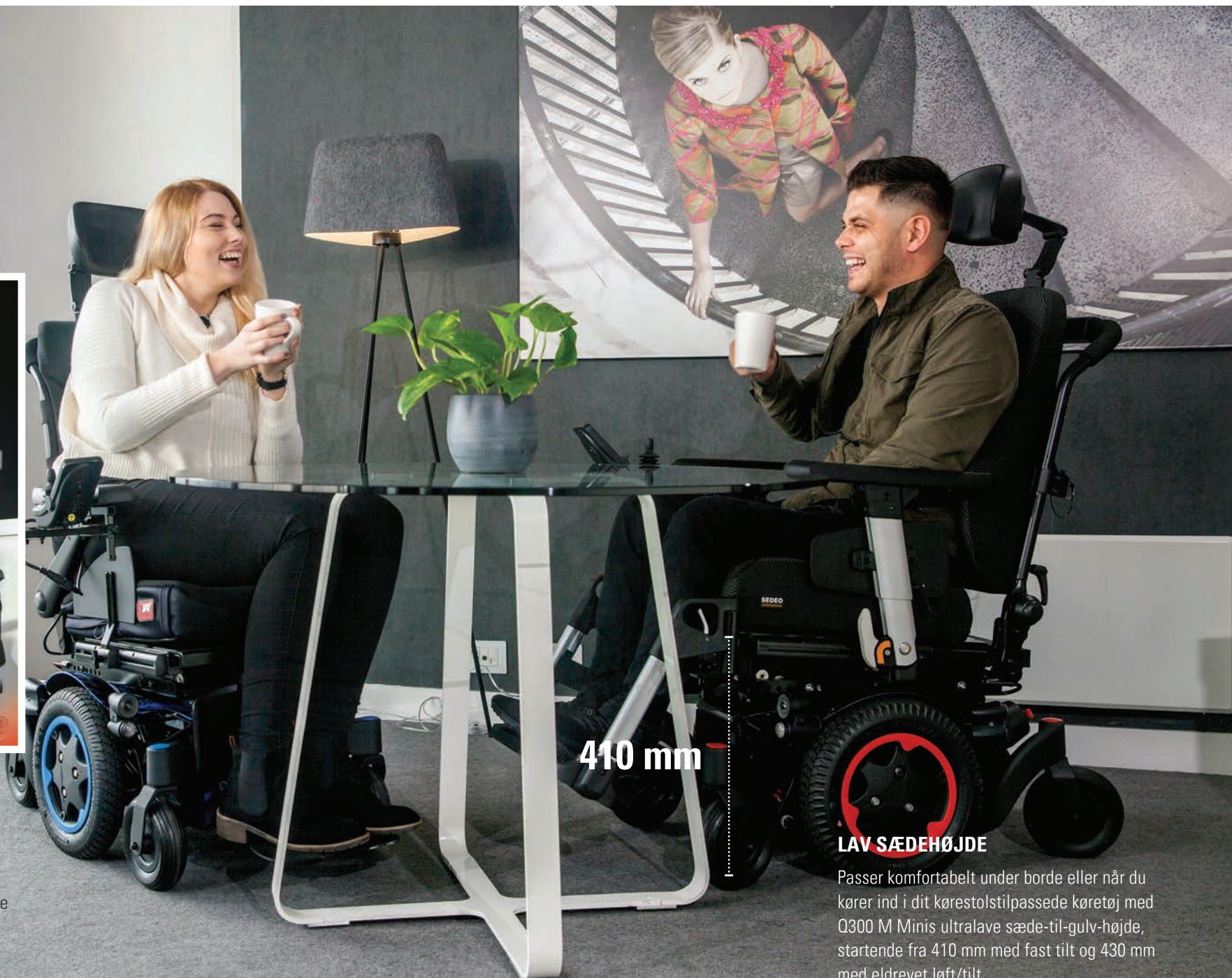

410 mm

LAV SÆDEHØJDE

Passer komfortabelt under borde eller når du kører ind i dit kørestolstilpassede køretøj med Q300 M Minis ultralave sæde-til-gulv-højde, startende fra 410 mm med fast tilt og 430 mm med eldrebet løft/tilt.

KOMPAKT 1060 MM BASE

Med en længde på kun **1060 mm** (inkl.centermonteret benstøtte) kommer Q300 M Mini nemt ind og ud af de mindste elevatorer, løfteplatforme og trange steder. Den er også let nok (fra **103 kg**) til at være kompatibel med de fleste gulvlifte.

1060 mm

Du skal blot svinge joysticket til siden og komme endnu tættere på.

KOM TÆTTERE MED DEN CENTERMONTEREDE BENSTØTTE

Leder du efter det snævreste sving? Den valgfri manuelle eller elektriske (se billede) centermonterede benstøtte, eliminerer behovet for traditionelle benstøtter på din kørestol. Ved at sidde med knæene bøjet i 90°, kan du både dreje mere skarpt OG komme tættere på genstande såsom borde.



UDENDØRS YDEEVNE

Oplev en kompakt kørestol med VIRKELIG sensationel udendørs-ydeevne. Smal og smidig i en overfyldt by og fyldt med en **STOR** el-kørestols udendørs køreegenskaber - den er milevidt foran konkurrenterne.



ANTI-PITCH TEKNOLOGI

Traditionelt når en kørestol stopper på en skråning, vil stopbevægelsen rykke dig fremad. Det er et problem, vi har elimineret med Anti-Pitch-teknologi - så du er sikker og forbliver stabil i dit sæde.



UAFHÆNGIG AFFJEDRING PÅ ALLE HJUL

Vores PATENTEREDE uafhængige individuelle affjedring sikrer, at alle seks hjul forbliver på jorden, mens de klatrer og klarer forhindringer. Eventuelle stød absorberes af hjulets affjedring, hvilket giver en blød og jævn kørsel.



INGEN GRUND TIL AT SKYNDE SIG HJEM

Drevet af kraftfulde 56 Ah-batterier, tager Q300 M Mini dig overalt, hvor du vil hen med en imponerende rækkevidde på op til **36 km**.

SKUB TIL GRÆNSERNE MED 355 MM (14") DRIVHJUL

Få den allerbedste trækraft, stabilitet og forhindringshåndtering med disse aggressive udendørshjul. Derudover holder de din Q300 M Mini slank med en bredde på kun **570 mm**.



Lys på skærme

Nu tilgængelig på Q300 M Mini-basen: De diskrete integrerede lys oplyser vejen og giver mere synlighed.



DEN KLATRENDE MASKINE.

Hader du ikke, når der ikke er nogen opkørsler i sigte? Heldigvis kan Q300 M Mini med sine **300 mm (12")** drivhjul klare kantsten på op til **50 mm**, så der er ingen grund til at tage den lange vej rundt. Har du brug for at håndtere noget lidt højere? Opgrader til 355 mm (14") drivhjul og kør op over kantsten på op til **70 mm**.

A man and a woman are riding Quickie 4-Pols motorized wheelchairs on a city street. The man, on the left, is wearing a dark jacket and a scarf, smiling at the camera. The woman, on the right, is wearing a yellow and white striped coat and a black beanie, looking towards the camera. The background shows a paved sidewalk and other pedestrians in the distance.

QUICKIE 4-POLS MOTORER

Vi har mere end 40 års erfaring med at udvikle holdbare, højeffektive motorer med ydeevne, køreevne og rækkevidde, som andre producenter ikke kan matche.

BEVAR POWER

Ligesom en bil på motorvejen versus i byen er vores motorer designet til optimal køreevne, så du får power, når du har brug for den og sparer på den, når du ikke har.

POWER BOOST

Stejl stigning? Vores joystick og motorer arbejder sammen for at give dig et ekstra 10 sekunders power boost, når du har mest brug for det.

GOD MOTORAFKØLING

De store køleribber hjælper varmen med at slippe lettere ud, hvilket forhindrer motoren i at gå i creep-mode, så du holder en konstant hastighed - selv på stejle skråninger eller ujævne overflader!

DESIGNET TIL AT HOLDE

I modsætning til andre kørestole er vores gear lavet i poleret metal (ikke plastik). Med lavere støj og højere effektivitet er motorerne udformet til hårde forhold.

DIN LEDSAGER PÅ REJSEN

Skal du med offentlig transport? Q300 M Minis ultra smalle bredde og snævre vendediameter hjælper dig med at klare selv de travleste rejser.

PERFEKT TIL TRANSPORT

Med en vægt på kun **103 kg** kan Q300 M Mini nemt liftes ind og ud af forskellige køretøjer. En rigtig pladsbesparer, valgfrit ekstraudstyr, såsom det nedfældelige ryglæn, swing-away benstøtter eller aftagelige armlæn giver en endnu tættere kompakt stol, når pladsen er trang.



BEVAR TRÆKKRAFTEN PÅ RAMPER

Trækraften kan gå tabt på ramper, svinghjulene kan tvinge drivhjulene op fra underlaget. Q300 M Minis svinghjulsophæng bevæger sig uafhængigt af basen, så drivhjulene bevarer deres trækraft.



KØRESTOLSTILPASSEDE KØRETØJER

Med sin ultra lave sædehøjde på 410 mm passer Q300 M Mini let ind under rattet på dit køretøj med masser af overskydende plads til hovedet og ultra smal, så den ikke støder ind i dit køretøjs sidepaneler.

START DIN Q300 M MINI OP

Q300 M Mini har ikke bare **STOR** el-kørestolsdygtighed, den har også en **STOR** el-kørestols funktioner! Den er fyldt med muligheder for at opfylde dine kliniske behov og livsstilsvalg.



ELEKTRISK ELEVATION OG LÆNGDEKOMPENSERENDE BENSTØTTE

Ved at hæve og sænke dine ben hjælper disse benstøtter med at reducere hævelser og forbedre cirkulation. Ved at justere længden holdes din siddende stilling konstant, hvilket forhindrer uønsket bækkenbevægelse. Den centermonterede version (vist på billedet) giver også større plads foran på din stol til manøvrering og forflytninger.

TILT-IN-SPACE

Juster din siddeposition i løbet af dagen med op til **50°** elektrisk tilt. Modvirk trybeflastning ved at omfordele din vægt fra pude til ryglæn og bevar en behagelig siddestilling med reduceret muskelanstrengelse.



300 mm

ELEKTRISK LIFT OG TILT

Nå nye højder med **300 mm** sædeløft og kom tættere på ting, som ellers ville være uden for rækkevidde. Du kan også forflytte dig lettere takket være det højere udgangspunkt. Med op til **50°** tilt kan du også læne dig tilbage og nyde bedre afslapning og trykfordeling.

ELEKTRISK JUSTERBART RYGLÆN

På samme måde som et sæde lænes tilbage i en bil, hjælper den elektriske, justerbare ryg med at omfordele din vægt over mere af ryglænet, samtidig med at den bibeholder en konstant sædevinkel.



C-Me

KØR MED SÆDET HÆVET OG MED AFFJEDRING VED 4,5 KM/T

C-Me handler om at se dig, og kun dig. Hæv op til **300 mm**, mens du kører **4,5 km/t**, og bevæg dig skulder-til-skulder med alle omkring dig. I modsætning til andre stole **låser vores affjedring ikke**, så du får en jævn og behagelig tur fra start til slut. Du kan endda løfte eller sænke stolen med et tryk på en knap uden at skulle stoppe, mens du skifter højde!

TILBEHØR

Sidder du pænt? Det kommer du til med 12 spændende designmønstre! Koordiner dem med yderligere 7 farver til driv- og svinghjulsophæng for at få den perfekte sammensætning.



SKJOLD

Rød

Blå

Hvid

Sort

FARVEVALG

Grøn

Orange

Blå

Rød

Sølv

Hvid

Sort

UNIVERSAL NAKKESTØTTE

Nakkestøttebeslaget på ADULT, TEENAGER og KIDS er kompatibelt med SEDEO og WHITMYER nakkestøtter, som hjælper med at imødekomme en række behov fra grundlæggende støtte til mere avancerede nakkestøtter.

DER ER EN Q300 M MINI TIL ALLE ALDRE

Q300 M Mini kombinerer sin højtydende base med dedikerede siddesystemer for voksne, teenagere og børn, der specifikt imødekommer dine kliniske behov. Nu kan alle nyde Q300 M Mini!

SEDEO LITE SIDDESYSTEM

Ved at kombinere en justerbar og konfigurerbar sidderamme med det bredeste udvalg af støtte- og positioneringsmuligheder er Sedeo ideel for personer med milde til moderate behov.

FLIP-BACK ARMLÆN

Bare vip armlænene bagud for bedre plads, når du bevæger dig ind og ud af din kørestol. Fås også som aftagelig eller nedfældelig version.

LÆNGDEKOMPENSERENDE, SWING-AWAY BENSTØTTE

Disse benstøtter kan let justeres i længden for at opnå den bedst mulige pasform, og de har swing away funktion for lettere forflytning ind og ud af din el-kørestol. Fås også som elektrisk centermonteret fodstøtte.

Til personer med milde
til moderate posturale
behov

LÆN DIG TILBAGE I KOMFORTRYGGEN

En højdejusterbar standardryg giver et åndbart, blødt betræk med 4 spændingsjusterbare stropper, som tager højde for en række forskellige siddestillinger. Opgrader til en SEDEO eller JAY ryg- og siddepude for at øge komfort og positionering.



C-PROFIL SKINNER

Den integrerede C-profilskinne tilbyder mange monteringsmuligheder til placering af lateral thorax-, lår- og knæstøtter. Du skal blot fastgøre og skubbe på plads!

SEDEO PRO SIDDESYSTEM

Til personer med
moderate til
komplekse kliniske
behov

High-end fuldt ud justerbar og konfigurerbar sidderamme med det bredeste udvalg af muligheder og positioneringstilbehør: SEDEO PRO tilbyder stor fleksibilitet til at tilpasse sig den enkelte bruger, der har degenerative sygdomme eller har behov for at sikre sig mod forekomst af skeletdeformiteter med moderate til komplekse behov.



50° TILT I KOMBINATION MED 300 MM LIFT

Giver adgang til områder, der før var uden for rækkevidde, samtidig med at det hjælper med at reducere trykskader, hjælper med at opretholde korrekt kropsholdning og sikrer, at brugeren er komfortabel.



ELEKTRISK RYG 90°/150°

Dette hjælper med at trække vejret og forhindrer trykskader og fordøjelseskomplikationer. Dette hjælper samtidig med at opretholde en god siddestilling, når du er i tilbagelænet stilling og vender tilbage til udgangspunktet.

ANTI-SHEAR RYGLÆN

100 mm Anti-Shear sikrer, at brugeren ikke glider på puden, hvilket giver en behagelig tilbagelænet oplevelse.

RELAX-POSITION (KOMMER SNART)

Giver mulighed for at justere Anti-Shear og tilt på samme tid og holder hovedstøtten på plads under tilbagelægningen.

SEDEO PRO FLEKSIBEL RYGPUDE

Opgrader til denne unikke rygpude, der ubesværet kombinerer justerbare stropper - og sidestøtter. Ryggen er så eftergivende, at den skal opleves!

FORMER SIG EFTER DIN RYG

I stedet for en solid base har den fleksible rygpude 8 justerbare stropper, der svøber sig rundt om ryggen. Hvor andre ryglæn har begrænset kontakt med rygsøjlen, former den fleksible rygpudes lag af blødt skum sig efter dig og giver fuld kontakt, komfort og stabilitet.



Ryggen er så eftergivende, at selv brugere med moderat til svære kyfotiske siddestillinger, kan sidde betydeligt mere oprejst uden at gå på kompromis med komforten.



SLÅR SIG OM OG FORMES EFTER DIN KROP

Når du læner dig tilbage, 'krammer' sidestykkerne dine sider, så det eftergivende skum kan forme sig efter dine anatomiske kurver. Fordi mere af kroppen er i kontakt med støtten, fordeles trykket bedre.

Stabilitet og justering af overkroppen opnås ved hjælp af sidestøtterne. Sidestøtterne er integreret inde i ryglænet for et glat og attraktivt udseende, og bevæger sig eller glider ikke ud over tid. Uafhængigt justerbare, kan disse sidestøtter være:

1

Positioneret indad
eller udad



2

Flyttet op
eller ned



3

Låst for at understøtte
stillinger som skoliose eller
løst for større frihed



zippie

Q300 M MINI kids

JUSTERBART SÆDESYSTEM FOR BØRN

Børn vokser hurtigt, og det kan deres Q300 M Mini Kids også! Dette sædesystem kan vokse i bredden (**280 - 400 mm**) og dybden (**260 - 400 mm**), så der er ingen grund til at skifte til en ny el-kørestol, når dit barn bliver ældre - tilpas blot Q300 M Mini!



SEDEO LITE BACKREST

Vi har designet dette ryglæn kun til børn. Dybt kontureret for komfort, de integrerede sidestøtter giver konstant kropsstabilitet. Da de er inde i ryglænet, vil sidestøtterne ikke bevæge sig eller glide over tid - fantastisk for børn på farten! Og med otte spændingsjusterbare stropper kan en bred række posturale former også understøttes.



YDERLIGERE SIKKERHEDS- FUNKTION

Denne praktiske enhed stopper straks dit barns kørestol på afstand, hvis de kommer lidt for langt væk ift hvad du er tryk ved.



Q300 M MINI TEENS

TEENS JUSTERBART SIDDESYSTEM

Spækket med alle vækstjusteringsmulighederne og funktionerne i Kids-versionen strækker Q300 M Mini Teens sig til et udvidet sædedybdeområde på **360 - 500 mm**. Ideel til voksende teenagere, der kræver en smal sædebredde, men større justeringer af sædedybden over tid.



KAPSULERET JOYSTICK

Dette (valgfri) joystick-beslag har 3 låsepositioner. Det kan monteres centreret til børn, der har begrænset håndbevægelse og kan også svinge indad/udad for at hjælpe med at komme tættere på bord.



Opret forbindelse til din verden*

Tag problemfrit kontrol over dine omgivelser ved hjælp af den integrerede Bluetooth- og i-device funktionalitet. Styr dit tv, din telefon og andre hjemmeunderholdnings-systemer ganske enkelt via dit joystick.



Z-FINITY FODPLADER

Disse fodplader kan justeres til en underbenslængde mellem 160 mm til 480 mm, og giver den støtte, som voksende børn har brug for. Særligt justerbar karrusselfodplade, flere vinkler og placeringsmuligheder for positionering af fødder, ankler og knæ kan opnås.



*Kun med R-Net

JAY & WHITMYER

Positioneringsmuligheder

Et bredt udvalg af WHITMYER nakkestøtter og JAY puder og rygge er tilgængelige med SEDEO LITE, SEDEO PRO og også med Kids og Teens siddesystemer, for at imødekomme enhver brugers kliniske behov og sikre, at vi tilbyder den bedst mulige siddeplads.



WHITMYER NAKKESTØTTER

Skabt til at imødekomme en række brugerbehov fra grundlæggende support til kontrol med flere punkter. WHITMYER nakkestøtter kommer i en række forskellige pudeformer og størrelser for overlegen hovedpositionering og komfort.

JAY PUDER & RYGGE

Designet til bækkenstabilitet, hudbeskyttelse og komfort, har JAY puder og rygge en lav vedligeholdelse, de er meget tilpasselige og fås i et stort udvalg for at opfylde dine behov.



R-NET

AVANCERET JOYSTICK

Q300 M Mini kan leveres med det avancerede R-Net joystick. En stor, letlæselig HD-skærm og let at kontrollere vippe-kontakter giver mulighed for intuitiv betjening.

IR FORBINDELSE

Tag problemfrit kontrol over dit miljø ved hjælp af den integrerede infrarøde funktion. Styr dit tv'er, dvd'er, docking-stationer og andre funktioner via dit joystick.

BLUETOOTH FORBINDELSE

Styr din telefon, computer, tablet og alle andre Bluetooth- og i-enheder med dette nyttige valgfri ekstra-udstyr. Tilslut og kontrollér op til fire enheder.

QUICKIES PATENTEREDE "ASSIGNABLE" KNAPPER

Skift funktionen på en hvilken som helst knap på dit joystick til en hvilken som helst kommando, du ønsker, takket være QUICKIES PATENTEREDE ASSIGNABLE knapper. Du kan også tildele en anden (langt tryk) funktion til knapperne, hvilket giver dig hurtigere, enklere og smidigere adgang til funktioner, som du almindeligvis ville skulle styre via eksterne kontakter.




SWITCH-IT

INNOVATIVE KONTROLLERE

Få nemt adgang til dine 5 programmerbare positioner med Ctrl+5 – en perfekt kombination med Memory Seating. Det giver dig mulighed for at gå direkte til den funktion, du har brug for, med et tryk på en knap.

ALTERNATIVE STYREFORMER

Hvis kørsel med et traditionelt joystick ikke er den bedste mulighed, giver alternative styreformere dig mulighed for fuldt ud at opleve din stols køreegenskaber og fordele.

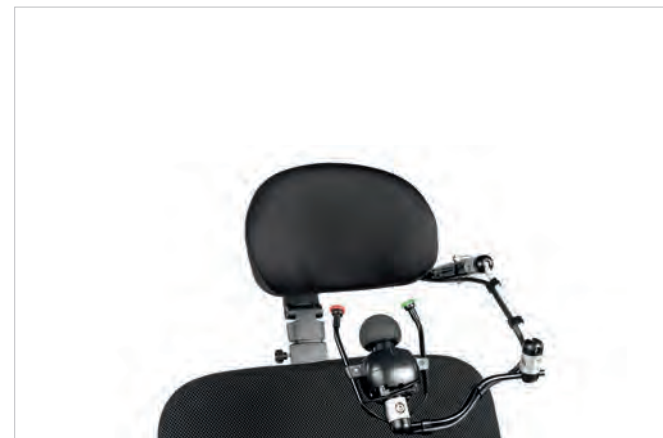

LINK-IT

MONTERINGSSYSTEM

Skal du bruge ekstra kontakter eller specielle joystick? Intet problem, tilslut dem nemt ved hjælp af det universelle Link-It monteringsystem.

Ved at bruge en kombination af tilgængelige moduler og stænger kan du skabe et uendeligt antal kombinationer for at opnå det, du har brug for. Ikke alene er den nem at placere, Link-It sikrer også, at din kørestols minimalistiske og rene design ikke kompromitteres af yderligere betjeningselementer. Så uanset om det er en ekstra specialstyring på armlænet, en trykknop på ryglænet eller en kontakt på nakkestøtten, så skal du blot montere dem med din LINK-IT.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



SÆDESPECIFIKATIONER



**Q300 M Mini med
SEDEO LITE**



**Q300 M Mini med
SEDEO PRO**

Dimensioner

Sædebredde	385 - 510 mm	380 - 560 mm
Sædedybde	410 - 560 mm	400 - 560 mm
Sædehøjde	410 - 490 mm	410 - 490 mm
Fikseret vinkel tilt	0 - 9°	0 - 9°
Ryglænets højde	460 - 510 mm	530 - 720 mm
Ryglænets vinkel	85 - 120°	90° - 150°
Maksimal brugervægt	136 kg	136 kg

Funktioner

Siddesystem	SEDEO LITE	SEDEO PRO
SEDEO PRO Fleksibel Ryg	●	●
SEDEO LITE Voksenstørrelse Ryg	●	-
SEDEO LITE Børnstørrelse Ryg	-	-
Elektrisk Justérbar Ryg	●	●
Elektrisk, Længdekompenserende Benstøtter	●	●
Fjernebetjent stopkontakt	●	-
C-Me	●	●
Z-Finity fodstøtte	-	-

- Tilgængelig



Q300 M Mini Teens



Q300 M Mini Kids

300 - 400 mm	280 - 400 mm
360 - 500 mm	260 - 400 mm
410 - 490 mm	410 - 490 mm
0 - 9°	0 - 9°
435 - 535 mm	380 - 485 mm
86 - 104°	86 - 120°
120 kg	75 kg

Teenager-sæde	Barnesæde
-	-
-	-
●	●
-	●
●	-
●	●
●	●
●	●

BASESPECIFIKATIONER

Dimensions	
Total bredde	Fra 520 mm
Total længde (med centre-montering)	Fra 1060 mm
Vendediameter	Fra 1100 mm
Maksimal sikker hældning	8°
Maksimal kantstenshøjde ved bestigning	50 mm (med 12" drivhjul) 60 mm (med 13" drivhjul) 70 mm (med 14" drivhjul)
Maksimal rækkevidde (ISO 7176-4)	Op til 25 km (med 41 Ah batterier) Op til 36 km (med 56 Ah batterier)
Produktvægt (med batterier)	Fra 103 kg
Drivhjul	12" / 13" / 14"
Maksimal Hastighed	6 km/t / 8 km/t / 10 km/t
Batteristørrelse	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Elektronik	VR2, R-NET
Transport uden bruger	Fastgør kørestolen sikkert i køretøjet (f.eks. i bil eller fly)
Tilsigtet brug og område	Til personer med begrænset mobilitet, indendørs og udendørs brug. Kørestolstype klasse B



LEDER DU EFTER NOGET UNIKT?

BUILT-4-ME har skabt tusindvis af skræddersyede kørestole. Når du vil bryde formen, hjælper vi dig med at skabe en helt unik kørestol. Få mere at vide: info@sunrisemedical.dk



Nu hvor du har læst alt om QUICKIE Q300 M Mini, synes vi, det er på tide, at du selv oplever den. Kontakt os i dag på tlf. 70 22 43 49 eller info@sunrisemedical.dk og book en demonstration.



Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9

2630 Taastrup

Tlf.: +45 70 22 43 49

E-Mail: info@sunrisemedical.dk

www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical bekymrer sig om din sikkerhed. Læs venligst din brugermanual for sikker betjeningsvejledning og vedligeholdelsesvejledninger.

I overensstemmelse med vores politik om løbende produktforbedringer forbeholder Sunrise Medical sig retten til at foretage ændringer til enhver tid og uden varsel. For den seneste information, besøg venligst www.sunrisemedical.dk

Hvis du er svagtseende, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.eu

