

Q300[®] M Mini Teens

Forestil dig mulighederne



QUICKIE

Q300 M MINI TEENS

Uanset om det er at hænge ud med dine venner eller udforske verden, giver Q300 M Mini Teens dig mulighed for at leve dit liv fuldt ud!

Q300 M Mini Teens med sin **520 mm** smalle base og lille vendediameter på **1100 mm** er lavet til nemt at bevæge sig uhindret rundt i trange rum - såsom små huse og klasselokaler - eller opdage afsidesliggende steder udendørs.

Udstyret med en superstærk **4-pols motor** og en rækkevidde på **36 km**, kan du nemt følge med dine venner uden at bekymre dig om at blive efterladt på grund af utilgængelige ruter eller at løbe tør. Og når tingene bliver lidt vilde, sikrer den **individuelle affjedring på alle hjul** en jævn og stabil kørsel.

Og med et siddesystem, der kan justeres, så det **passer til en voksende teenager over tid**, er dette en el-kørestol, som du ikke vokser fra.



FORESTIL DIG ALLE DE STEDER, DU KAN TAGE HEN

Oplev verden på dine præmisser takket være Q300 M Mini Teens og dens centerstyrede teknologi.

Med et drivhjul, der er placeret i midten af basen, er du i stand til at dreje på stedet for fantastisk indendørs manøvredegytighed. Plus, fordi du sidder direkte over drivhjulet, øger placeringen af din vægt trækraften hvilket også at give enestående udendørs ydeevne - perfekt til voksende børn og mindre voksne.

Leder du efter den mest kompakte base for en optimal indendørs manøvredegytighed? Vælg de 12" drivhjul. Hvis du foretrækker bedre udendørs ydeevne, så gå efter 14"!



Centerstyret Teknologi



Uafhængig affjedring på alle hjul Vores PATENTEREDE individuelle affjedring på alle hjul sikrer, at alle seks hjul forbliver på jorden, mens de klatrer og overkommer forhindringer. Eventuelle stød eller bump absorberes af hjulets affjedring, hvilket giver en blød og jævn kørsel.

Anti-Pitch teknologi

Traditionelt når en kørestol stopper på en skråning, vil stopbevægelsen rykke dig fremad. Det er et problem, vi har elimineret med Anti-Pitch-teknologi - så du holder dig sikkert og stabilt i dit sæde.

Henover kantsten

Q300 M Mini Teens med sine 300 mm (12") drivhjul kan klare kantsten på op til 50 mm, så der er ingen grund til at tage den lange vej rundt. Du kan også vælge 355 mm (14") drivhjul, der kører op over kantstene på op til 70 mm.

EN EL-KØRESTOL SOM VOKSER MED DIG

Et siddesystem designet til Teens i voksealderen.

Med Q300 M Mini Teens er der ingen grund til at bekymre sig om omkostningerne eller skiftet til en ny stol, når du bliver ældre. Det er takket være siddesystemet, som er specielt designet til at imødekomme brugere, der har behov for smalle sædebredder med lange sædedybder. Siddesystemet gør det muligt at tilpasse til de skiftende kropsdimensioner og proportioner for teenagere mellem **300 til 400 mm i bredden** og mellem **360 til 500 mm i dybden**.

Vores **Z-Finity** fodplader kan justeres til en underbenslængde mellem 160 mm til 480 mm, og giver den støtte, som voksende børn har brug for. Særligt justerbar karrusselfodplade, flere vinkler og placeringsmuligheder for positionering af fødder, ankler og knæ kan opnås.

Og hvis du har mere specifikke positioneringskrav, er Q300 M Mini Teens også **kompatibel med vores JAY J3 Ryg**.

SEDEO LITE Deep Contour Ryg

SEDEO LITE Deep Contour ryglænet tilbyder 140 mm lateral kontur for at støtte din overkrop med blødt eftergivende skum for komfort og til milde kyfotiske stillinger. Fordi sidestykkerne er integrerede, vil de ikke flytte sig over tid, så du holdes oprejst og støttet i længere tid.



Elektrisk Hejs og Tilt

Nå nye højder med 300 mm sædeløft og nå hverdagsgenstande, som ellers ville være uden for rækkevidde. Du kan også lave lettere forflytninger takket være muligheden for en højere position som udgangspunkt. Plus, med 30 graders hældning kan brugeren også læne sig tilbage og nyde større afslapning og trykfordeling.



Tag kontrollen

Fås med VR2 eller R-Net Advanced Joystick - nyd en stor, letlæselig HD-skærm, let kontrollerbare vippe-kontakter og tilslutning til verden omkring dig.

Patenterede "Assignable" Knapper

Skift en joystick-knap til enhver kommando, du ønsker, takket være vores patenterede knapper, der kan tildeles funktioner. Du kan også tildele en anden (langt tryk) funktion til en knap for hurtigt at få adgang til almindeligt anvendte funktioner uden hjælp af joysticket.



Universel Hovedstøtte

Nakkestøttebeslaget på Q300 M Mini Teens er kompatibelt med SEDEO og WHITMYER nakkestøtter, som hjælper med at imødekomme en række behov fra grundlæggende støtte til multi-point kontrol.

Swing-Away Joystickbeslag

Dette (valgfri) joystickbeslag har 3 låsepositioner. Det kan monteres midtfor til teenagere, der har begrænset håndbevægelse og kan også svinges indad/udad for at hjælpe med at komme tættere på borde.



Få forbindelse til verden*

Tag kontrol over dit miljø ved hjælp af den integrerede Bluetooth- og i-enhedsfunktion. Styr dit tv, din telefon og andre enheder ganske enkelt via dit joystick.

*Only with R-Net

HEJS OG KØR MED C-ME

C-Me handler om at se dig, og kun dig!


Hejs dig selv op til 300 mm, mens du kører 4,5 km/t, og bevæg dig skulder-til-skulder med alle omkring dig.

Nyd din nye frihed!

Vores el-kørestole er designet med stil og til langvarig ydeevne. I modsætning til nogle af vores konkurrenter låser vores affjedring ikke, når du kører med C-Me, hvilket giver dig en jævn og behagelig tur fra start til slut. Du kan endda hæve eller sænke din stol med ét tryk på en knap uden at skulle stoppe, mens du skifter!

Kør skulder mod skulder

Kør i ganghastighed og fuldt ud eleveret - uanset om du er ude med dine venner eller laver mad derhjemme og ønsker at køre hurtigt mellem skiftende overflader, fjerner C-Me frustrerende hastighedsbegrænsninger, så du kan leve uden begrænsninger.

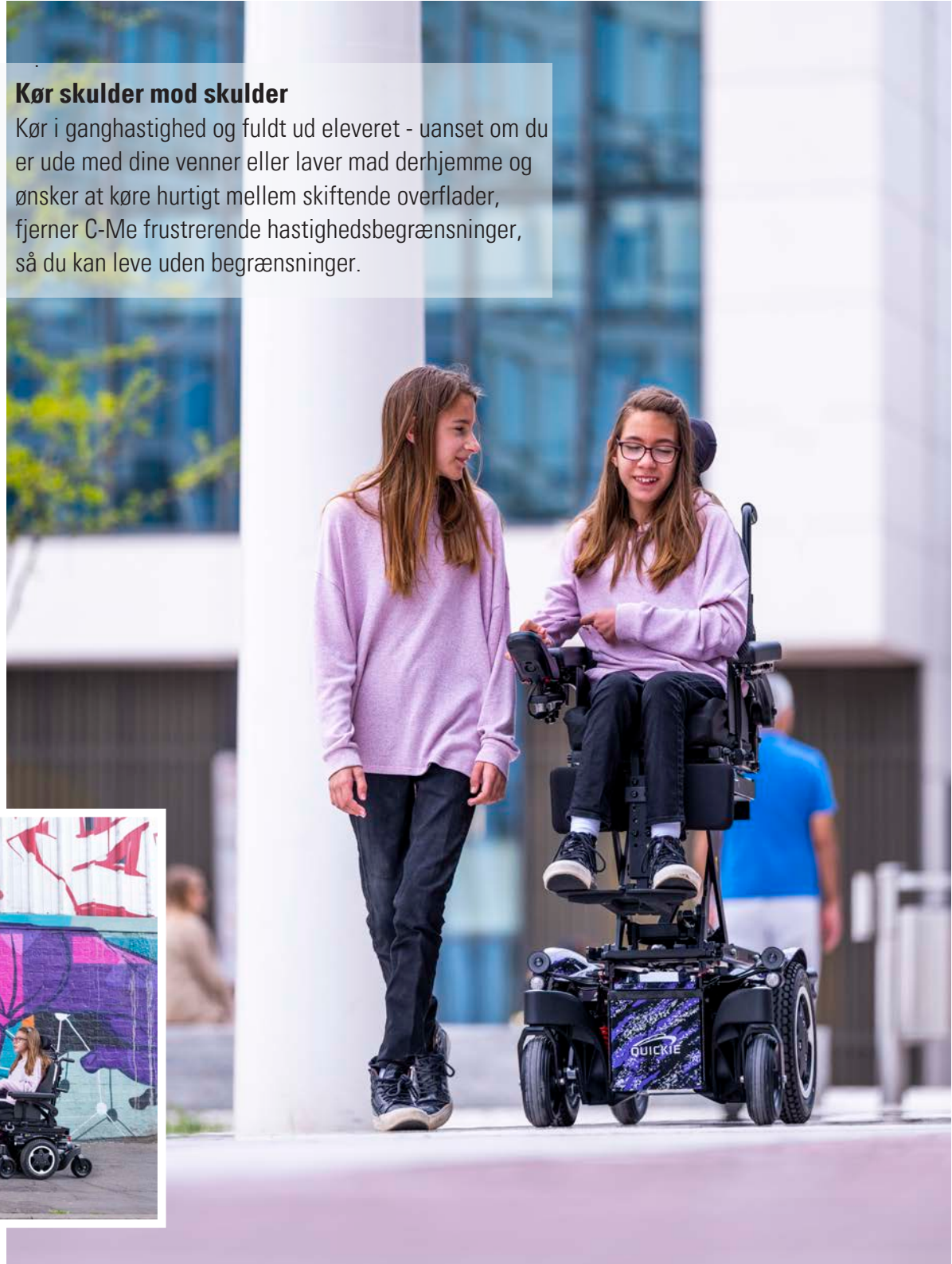

FIND DIN EGEN STIL



built4me

Vil du sidde med god stil?

Sidder du pænt? Det kommer du til med 12 spændende designmønstre! Koordiner dem med yderligere 7 farver til driv- og svinghjulsophæng for at få den perfekte sammensætning.



SKJOLD:



FARVEVALG



Leder du efter noget unikt?

En persons individualitet er lige så unik som deres fingeraftryk. Derfor designer vi også gerne kørestole efter dine personlige ønsker – som en personligt designet folieindpakning. Betydeligt mere detaljeret og alsidigt, og næsten enhver form for design kan printes på folie og fastgøres til din kørestols stel, skærme og endda fodstøtte.

Den eneste begrænsning er din fantasi



Individuel kørestolsramme design-folie

Men der er mere. Vores BUILT-4-ME afdeling har skabt tusindvis af skræddersyede kørestole. Når du vil bryde formen, hjælper vi dig med at skabe en helt unik kørestol.

Find ud af mere her:

www.sunrisemedical.eu/built4me

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Q300 M Mini Teens

Siddesystem	Teens sæde	Underbenslængde	180 - 460 mm (7" - 18")
Elektrisk tilt	0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°	Sædehøjde	410 - 490 mm (16" - 19")
Sædebredde	300 - 400 mm (12" - 16")	Maks. brugervægt	120 kg
Sædedybde	360 - 500 mm (14" - 20")	C-Me	Ja
Ryghøjde	385 - 510 mm (15" - 20")	Maksimal rækkevidde (ISO 7176-4)	Op til 25 km (med 41 Ah batterier) Op til 36 km (med 56 Ah batterier)
Total bredde base	Fra 520 mm (fra 25.5")	Produktvægt (med batteri)	Fra 103 kg
Total længde (med centermonteret base)	1060 mm (41.7")	Drivhjul	12" / 13" / 14"
Vendediameter	1100 mm (44.1")	Maksimal hastighed	6 km/t / 8 km/t / 10 km/t
Maksimal sikker hældning	6°	Batteristørrelse	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Maksimal kantstenshøjde ved bestigning	50 mm (med 12" drivhjul) 60 mm (med 13" drivhjul) 70 mm (med 14" drivhjul)	Transport uden bruger	Fastgør kørestolen sikkert i køretøjet (f.eks. i bil eller fly)
Elektronik	VR2, R-NET	Tilsigtet brug og område	Til personer med begrænset mobilitet, indendørs og udendørs brug. Kørestolstype klasse B



Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup

Tlf.: +45 70 22 43 49
E-Mail: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk



For yderligere information om den fulde specifikation, muligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have. Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.

