



Q300 M Mini kids

Elektrisk rullestol

1.0 Oppdatert mars 2023



Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med midthjulsdrift



Q300M Mini kids DK 21



Q300M Mini kids DK 22



Q300M Mini kids DK 28

Q300 M MINI KIDS

Delkontrakt 21 - Motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk tilt og seteløft - for barn, 2. valg.

Delkontrakt 22 - Motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner - for barn, 4. valg.

Delkontrakt 28- Motorisert styring for innendørs bruk med elektrisk tilt og ryggvinkling - for barn, 3. valg.



Q300 M Mini kids- Delkontrakt 21



Q300 M Mini kids- Delkontrakt 22



Q300 M Mini kids- Delkontrakt 28

SUVEREN KJØREKOMFORT FOR BARN

- Smidig manøvrering der barn og unge ferdes, med lite, smalt understell som er dimensjonert for barn.
- Raske og allsidige tilpassingsmuligheter i seteenheten.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Lite plasskrevende ved transport i bil.
- Komplette tilbehørsprogram.
- Enklere service og vedlikehold med blant annet enklere batteriskift og lys plassert slik at de er beskyttet mot skader.

STANDARD KONFIGURASJON

- Midthjulsdrift
- Elektrisk tilt, seteløft (DK 21)
- Elektrisk tilt, rygg, seteløft, benstøtter (DK22)
- Elektrisk tilt, rygg, seteløft (DK 28)
- Godkjent kollisjonstest (136 kg)
- Hastighet, maks. 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak
- Elektronikk: R-Net (DK22 og DK28), VR2 (DK21)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q300 M MINI KIDS (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 21	DK 22	DK28	Delkontrakt	DK 21	DK 22	DK28
Total lengde	Fra 106 cm	Fra 106 cm	Fra 106 cm	Dynamisk stabilitet	6°	6°	6°
Total bredde	Fra 52 cm	Fra 52 cm	Fra 52 cm	Hindertakning	7 cm	7 cm	7 cm
Setebredde	28-40 cm	28-40 cm	28-40 cm	Snuradius fra	56 cm	56 cm	56 cm
Setedybde	26-50 cm	26-50 cm	26-50 cm	Drivhjul	13"	13"	13"
Setehøyde u/pute	45-79 cm	45-79 cm	45-79 cm	Svinghjul	7"	7"	7"
Setehøyde m/pute	52-86 cm	53-83 cm	53-83 cm	Totalvekt	Fra 142 kg	Fra 149 kg	Fra 130 kg
Rygg høyde	38-53 cm	38-53 cm	38-53 cm	Maks. brukervekt	75 kg	75 kg	75 kg
Ryggvinkel	Man. 86°-106°	El. 85° - 120°	El. 85° - 120°	Maks hastighet	10 km/t	10 km/t	10 km/t
Tilt	El. -0°-50°	El. -0°-50°	El. -0°-50°	Maks kjørelengde	36 km	36 km	
Benstøttevinkling	manuell	elektrisk	manuell	Batteri	56Ah	56Ah	56Ah
Seteløft	30 cm	30 cm	30 cm	Batterilader	Impulse IP65	Impulse IP65	



Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



LEDSAGERSTYRING: Q300 M Mini har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



OMGIVELSESKONTROLL Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåttann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.



SPESIALSTYRINGER: Stort utvalg styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn som enkelt kan monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

JAY sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende.



WHITMYER: Komplette og anerkjente sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



KINETIC BALANCE: posisjoneringsprodukter med unike egenskaper. Brukervennlig utforming for enkel bruk.

ZIPPIE SETESYSTEM

God sitte- og kjørekomfort ute og inne



STABILITET OG KOMFORT FOR DE SOM SITTER LENGE

- Med Zippie er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.
- Godt utslag på tilt og ryggvinkelregulering gir mulighet for god hvilestilling der personen kan legge seg godt bakover og få full strekk i beina. Selv i hvilestilling gir armlenene god og komfortabel støtte.




ENKEL JUSTERING

- Med Zippie setesystem er det kort vei til en god sitte- og kjørestilling. De fleste innstillinger gjøres ved hjelp av ett verktøy - fem millimeter unbrakonøkkel - og kan utføres med personen sittende i stolen.

RYGG

Zippie ryggen er fleksibel og kan justeres etter ulike behov. Sidestøttene kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har borrelåsbånd for innstilling til ulike kurvaturer.

Ryggens utforming og sidestabilitet kan stilles med personen sittende i stolen. Dersom behovene endrer seg er det enkelt å etter-tilpasse ryggen.

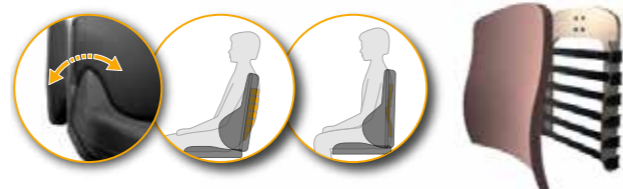

SITTEPUTE

Q300 M Mini kids leveres standard med JAY Easy Visco sittepute. Puten har en anatomisk form som gir stabilitet til sittstillingen gjennom god støtte til sete og lår. Formen, samt bruk av materialer, sørger for gode trykksårforebyggende egenskaper.

HODESTØTTE

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke, avtagbare trekket gir ytterligere komfort. Hodestøttene er tilgjengelig i to ulike utforminger/størrelser.



ARMLENER Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde. Armlenene kan vippe opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade. Andre armlenepads med annen utforming er tilgjengelig som tilbehør.



BENSTØTTER Velg manuell eller elektrisk regulering av benstøttevinkel. Zippie vinkelregulerbare benstøtter er lengdekompenenserende og sikrer god støtte til beina i alle posisjoner.



Write the
Sundr
Fray
Tback



IMPROVING
PEOPLE'S
LIVES[®]

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.