

# Q300R

Den kompakta elrullstolen med  
hög utomhusprestanda.



# VILL DU HA EN KOMPAKT ELRULLSTOL SOM ÄNDÅ HAR HÖG UTOMHUSPRESTANDA?

Vi presenterar Q300 R. Den är smal, smidig och enkel att manövrera inomhus i trånga miljöer samtidigt som den har mycket bra väggrepp och en utomhusprestanda som är jämförbar med en större elrullstol.

Det är bakhjulsdesignen som gör hela skillnaden. En minutiöst testad och förfinad bas som ger den perfekta balansen mellan stabilitet och storlek. Prioriterar du smidig körning inomhus framför utomhusprestanda? Välj då Q300 R Mini och dra fördelarna av en smalare bas (550 mm) och mindre drivhjul (12") för att bättre klara snäva svängar.

Oavsett vilken modell du väljer ger det sofistikerade sättsystemet SEDEO LITE dig det kliniska stöd du behöver. Q300 R finns tillgänglig med en mängd eldrivna sättsalternativ samt färgalternativ för att skapa en design som passar dig.



Scanna QR-koden för att se en video om Q300 R.



**ALLSIDIG PRESTANDA**

---

# TRODDE DU ATT ALLA ELRULLSTOLAR ÄR LIKADANA? DAGS ATT TÄNKA OM.

**Ta en sväng med Q300 R så märker du skillnaden på t.ex väggreppet och manövrerbarheten. Men, hur klarar den det som andra elrullstolar inte gör?**

Det är tack vare den optimerade basen. Genom att vi noggrant testade och förfinade hundratals justeringar av bredd, längd, hjul och sätesposition hittade vi till slut minsta möjliga bas utan att kompromissa med stabilitet eller väggrepp.

Eftersom Q300 R är så stabil klarar den också flera alternativa tyngdpunktsjusteringar. Det betyder att din sittposition kan flyttas framåt eller bakåt för att bättre balansera din vikt, öka väggreppet och körprestandan. Dessutom får du också en kompakt stol som fungerar lika bra inomhus.



**Q300 R**  
med 14" drivhjul och 9" länkhjul



**Q300 R**  
med 12" drivhjul och 8" länkhjul

## UTOMHUSPRESTANDA

# STABIL

Bibehåller stabilitet och riktning på olika underlag samt mycket bra väggrepp tack vare däck och fjädringspaket. Stabil både i stan och på mer varierat underlag.



## 14" DRIVHJUL

Är du ute efter bästa utomhusprestanda? Med 14" drivhjul får du bättre grepp och stabilitet även i tuff terräng. Q300 R håller sig dock fortfarande smal med en bredd på endast **580 mm**.



## KANTKLÄTTRING


Q300 R hanterar smidigt trottoarkanter på upp till **100 mm**. Nu behöver du inte längre ta långa omvägar till andra sidan vägen.



# 32 km

## RÄCKVIDD

Tack vare kraftfulla **63 Ah-batterier** (tillval) behöver du inte oroa dig för att batteriet ska ta slut. Du tar dig upp till **32 km** på en enda laddning.

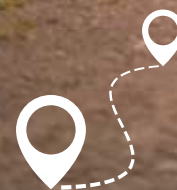



## BAKRE FJÄDRING

Q300 R:s bakre fjädring ger responsiv dämpning när du kör i ojämn terräng och minskar mängden stötar och vibrationer som passerar genom din elrullstol. Du kan bara luta dig tillbaka och njuta av en mjuk och bekväm åktur.

## HÅLL DIG PÅ BANAN MED GYROKONTROLL

Eftersom det finns färre länkhjul som ska vridas till rätt riktning när du svänger, kör Q300 R naturligt i en rak linje i högre hastigheter utan att behöva överstyras. Men, när du stöter på en ojämn yta, kommer gyron (tillval) automatiskt att göra frekventa korrigeringar för att hålla dig i rörelse i en rak linje – mycket fördelaktigt om du använder specialkontroller eller har nedsatt handfunktion.



## MANÖVRERBARHET INOMHUS

# HEMMA, INOMHUS OCH UTOMHUS

I trånga korridorer, i livliga kontor och i kompakta lägenheter, Q300 R:s smala bas på bara 580 mm klarar det mesta. Med sin enkla hantering och intuitiva bakhjulsdrift kommer du att uppleva att den är otroligt smidig att manövrera.

## 450 mm

HÖJD GOLV TILL SÄTE

Q300 R går utmärkt att köra in under bord eller in i din anpassade bil tack vare sin låga sitthöjd från 430 mm.



## 1800 mm

VÄNDCIRKEL

## 1100 mm

LÄNGD

Eftersom Q300 R är kort och inte tar upp så mycket plats bakom dig är den smidig att manövrera även i små utrymmen.

## ÄNNU MER KOMPAKT

Rör du dig i mycket trånga miljöer och behöver en smalare bas? Med 12-tums drivhjul och centermonterat benstöd som standard får Q300 R en mycket smal bas på endast 550 mm. Dessutom, med sin låga vikt (från 124 kg med 50 Ah-batterier) passar den de flesta hissar också.

**550 mm**  
BRED

**1700 mm**  
VÄNDCIRKEL

**1060 mm**  
BASENS LÄNGD

## KOM NÄRMARE MED CENTERMONTERAT BENSTÖD


Med centermonterat benstöd kommer du inte bara närmare föremål (som t.ex. bord), utan du kommer också att kunna ta snävare svängar!



## SITTSYSTEM

# SEDEO LITE

**SEDEO LITE** är ett sittsystem som vänder sig till brukare med medium till höga kliniska behov. Vi har kombinerat en justerbar och konfigurerbar sits med det bredaste urvalet av positioneringsalternativ och resultatet är ett sittsystem som enkelt kan skräddarsys för brukarens behov med bara ett verktyg.

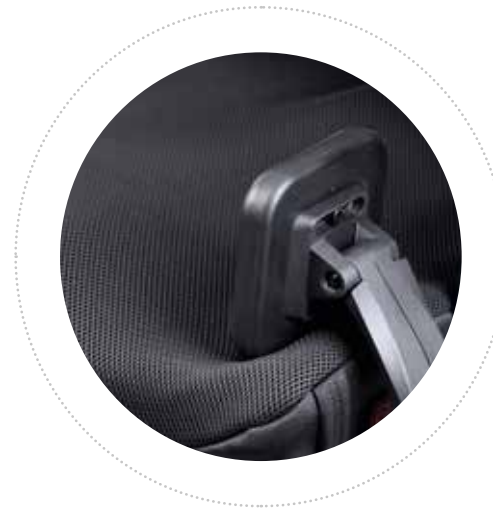

### INTEGRAD SÄTESSKENA

Den integrerade sätesskenan erbjuder många monteringsmöjligheter för positionering av tillbehör som t.ex bålstöd, lårstöd och knästöd. Allt du behöver göra är att fästa och skjuta tillbehöret på plats.



### UNIVERSALT HUVUDSTÖD

Fästet är kompatibelt med huvudstöd från SEDEO och WHITMYER och hjälper till att tillgodose en rad olika behov (från grundläggande till flerpunktskontroll).

### LÄNGDKOMPENSERANDE SWINGAWAY BENSTÖD

Justerbara i längd för att uppnå bästa passform kan man svänga undan dessa benstöd för enklare överförflyttning. Benstöd finns även som eldriven och centermonterad modell.



ELDRIVNA TILLBEHÖR

# UPPGRADERA DIN ELRULLSTOL

Q300 R har inte bara hög prestanda, den har också ett flertal extra funktioner för att möta dina kliniska behov och passa din livsstil.



## FÖRHÖJT LÄGE OCH TILT


Nå nya höjder med **300 mm** sittlyft och få mer tillgång till omgivningen. Överförflyttningar blir också enklare plus att du med **30°** lutning kan vila bekvämt och tryckavlastat.





### R-NET AVANCERAD JOYSTICK

Uppgradera till en stor lättläst HD-skärm och med intuitiv navigering. Tack vare bluetooth och infraröd teknologi kan du också ansluta till andra smarta enheter.

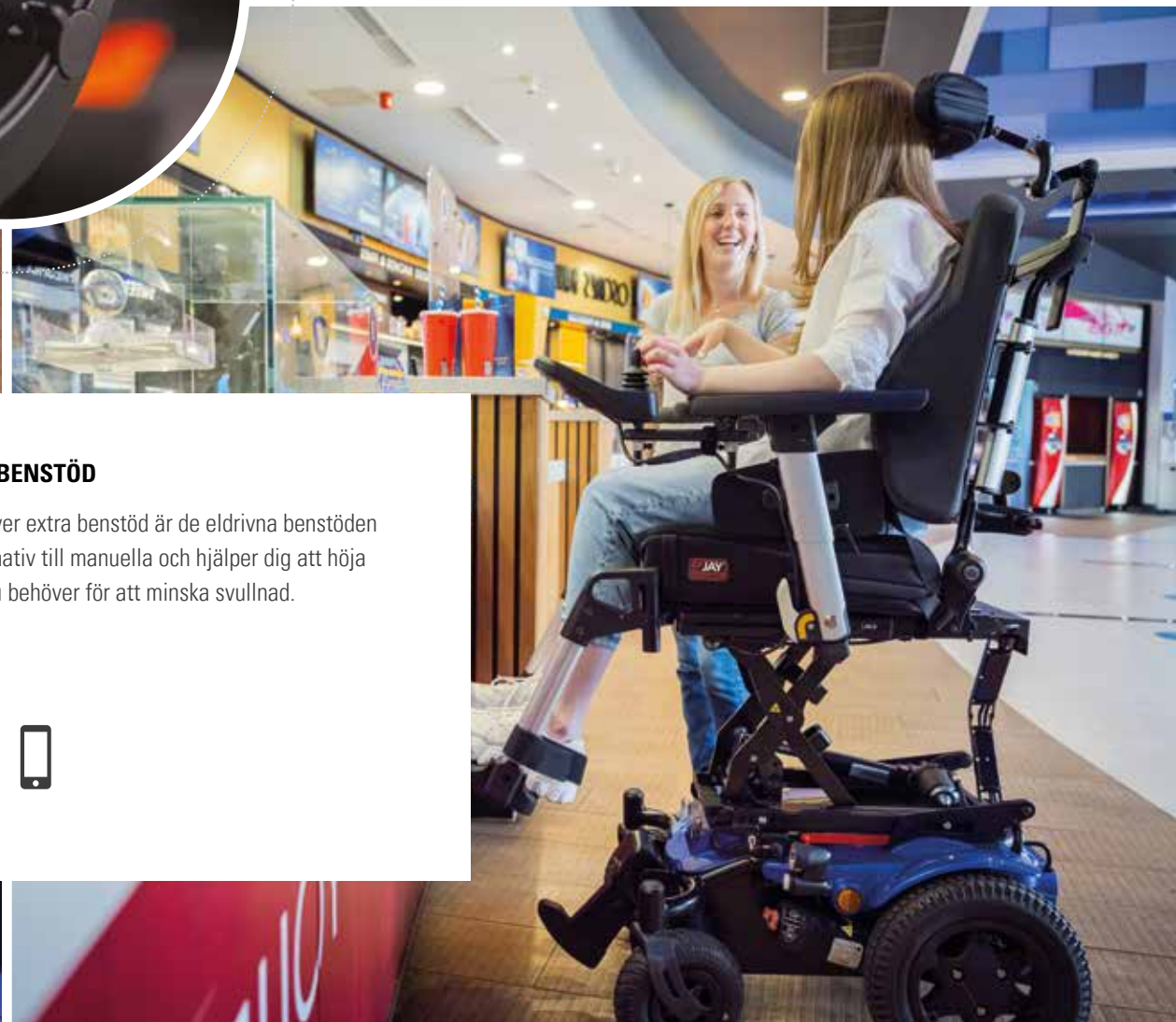

### 120° ELDRIVEN BAKÅTLUTNING

Behöver du omfördela din vikt under dagen? Med eldriven bakåtlutning kan du justera vinkeln mellan säte och rygg på ungefär samma sätt som du lutar ett bilsäte.



### ELDRIVNA BENSTÖD

Om du behöver extra benstöd är de eldrivna benstöden ett bra alternativ till manuella och hjälper dig att höja benen när du behöver för att minska svullnad.





**C-ME**

## **KÖR I UPPHÖJT LÄGE MED C-ME**

**C-Me handlar om att komma upp i höjd och att få mer tillgång till omgivningen. Kör i i 4,5 km/h samtidigt som du sitter i 300 mm förhöjt läge i höjd med dina vänner.**



### **FJÄDRING I FÖRHÖJT LÄGE**

Med C-Me förblir fjädringen på din elrullstol aktiv även när du är i förhöjt läge. Du får samma jämna och stabila åktur oavsett vilken höjd sitsen har.



### **TA DIG TILL FÖRHÖJT LÄGE VIA PROGRAMMERBARA KNAPPAR MEDAN DU KÖR**

Trött på komplexa joystickrörelser eller på att behöva stanna för att använda din sittlyft? Med våra patenterade tilldelningsbara knappar kan du tilldela C-Me till vilken knapp som helst för att höja eller sänka dig med bara en enkel åtgärd. Du kan till och med göra det samtidigt som du kör!



Se en video om C-Me genom att scanna QR-koden.

Färger som visas i den här broschyren eller på hemsidan kan skilja sig från de faktiska färgerna på produkten.

STIL

# VILKEN STIL VÄLJER DU?

Välj mellan 5 olika färger på kåpan och komplettera med någon av de 7 färginläggen på hjul och länkhjul för att få en färgmix som tilltalar dig. På vår hemsida kan du välja olika färgkombinationer och se ungefär hur det kommer att se ut.

BLÅ

LILA

GUL

RÖD

SVART

built4me

Behöver du något unikt? Vår avdelning Built-4-Me kan designa det mesta för att skapa den elrullstol just du behöver.

## FÄRGINLÄGG



SVART



BLÅ



GRÖN



ORANGE



RÖD



SILVER



VIT

# TEKNISK SPECIFIKATION

## Q300 R

<b>Sittbredd</b>	385 - 510 mm
<b>Sittdjup</b>	410 - 510 mm
<b>Sitthöjd</b>	450 - 490 mm
<b>Rygg höjd</b>	460 - 510 mm
<b>Eltilt</b>	0 -30°
<b>Total bredd</b>	580 mm
<b>Total längd</b>	Från 110 mm
<b>Vändcirkel</b>	1800 mm
<b>Max. säker lutning</b>	6°
<b>Max. kantklättring</b>	100 mm (med kantklättrare)
<b>Max. räckvidd (ISO 7176-4)</b>	32 km
<b>Produktens vikt (med 50 Ah batterier)</b>	från 125 kg
<b>Max. brukarvikt</b>	136 kg
<b>Drivhjul</b>	12"/14"
<b>Länkhjul</b>	8" / 9"
<b>Max. hastighet</b>	10 km/h
<b>Batteri</b>	50 / 63 Ah
<b>Elektronik</b>	R-Net

### Krocktestad

Ja – godkänd för framåtriktad transport i ett fordon (ISO 7176- 19). Fäste: 4 fästpunkter med 2 dubbla bälten bak och 2 enkla bälten fram. Inga förankrade bältesfästen tillåtna. Åtkomst och manövrerbarhet i fordon beror på rullstolsstorleken.

### Transport utan brukare

Fäst rullstolen ordentligt i fordonet (t.ex en bil eller flygplan)

### Avsett bruk och miljö

För personer som inte kan gå eller som har begränsad rörlighet, för inomhus och utomhus bruk. Rullstolstyp klass B

Sunrise Medical bryr sig om din säkerhet. Vänligen läs din bruksanvisning för säkra driftsinstruktioner och underhållsriktlinjer.

För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. I linje med vår policy för ständiga produktförbättringar förbehåller sig Sunrise Medical rätten att göra ändringar när som helst och utan föregående meddelande. För den senaste informationen, besök [www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

Om du är synskadad kan detta dokument ses i PDF-format på [www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
031 748 37 00  
[post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)