

Q300[®] M Mini

Ultrakompakt, ultraleistungstark.



Q300 M Mini mit SEDEO LITE



Q300 M Mini mit SEDEO PRO



ENGE RÄUME? ENTDECKEN SIE DIE ULTRA-SCHMALE BASIS!

Haben Sie es satt, dass man Ihnen sagt, wo Sie nicht hingehen können? Die ultrakompakte 520 mm-Basis des Q300 M Mini ist so schmal, dass er auch dorthin kommt, wo andere nicht hinkommen.

520 mm

1120 mm



ULTRA-KOMPAKTER 1120 MM WENDEKREIS

Dank seiner ECHTEN Mittelradantrieb-Technologie wendet der Q300 M Mini auf der Stelle. Die Lenkräder befinden sich nah am Antriebsrad und ermöglichen so einen unglaublich kleinen Wendekreis von nur **1120 mm**. Im Vergleich dazu, müssen Elektrorollstühle mit Heck- und Frontantrieb um ihre Antriebsräder «schwingen» und haben somit einen grösseren Wendekreis.



WAS IST ECHTE MITTELRADANTRIEB-TECHNOLOGIE?

Die Antriebsräder des Q300 M Mini sind mittig auf seine Gesamtlänge ausgerichtet und der Schwerpunkt liegt direkt darüber. Dies ermöglicht einen kleinen Wendekreis und verbessert die Traktion während der Fahrt. Wenn die Antriebsräder weiter nach vorne oder hinten positioniert sind, ist der Wendekreis grösser (und der Elektrorollstuhl schwingt weiter um diese herum). Der Q300 M Mini bietet dank seines ECHTEN Mittelradantriebs so den kompaktesten Wendekreis, mehr Traktion und Stabilität.



SCHMALE 300 MM ANTRIEBSRÄDER

Suchen Sie nach der engsten Manövrierfähigkeit in Innenräumen? Diese Standard-Antriebsräder bieten Ihnen die kompakteste Basisbreite von 520 mm.



NACH HINTEN KLAPPBARE ARMLEHNEN

Schwierigkeiten beim Transfer?
Klappen Sie die Armauflagen einfach
nach hinten, um mehr Platz zu haben.
Es gibt sie auch als abnehmbare oder
verstellbare Versionen.



410 mm

NIEDRIGE SITZHÖHE

Fahren Sie bequem unter Tische oder in Ihr
rollstuhlgerechtes Fahrzeug – mit der niedrigen
Sitzhöhe des Q300 M Mini, ab 410 mm
(mit manueller Sitzneigung) und 430 mm (mit
elektrischer Sitzneigung).

RÜSTEN SIE IHREN Q300 M MINI AUF.

Der Q300 M Mini hat nicht nur die Leistung eines grossen Elektrorollstuhls, er hat auch dessen Eigenschaften! Ob es um elektrische Sitzneigung, Sitzift, elektrische Rückenverstellung oder elektrische Fussrasten geht, der Q300 M Mini ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihre klinischen und Lifestyle-Anforderungen erfüllen.

0° - 50°



ELEKTRISCH HOCHSCHWENKBARE FUSSRASTEN

Durch das Heben und Senken der Beine tragen diese Fussrasten dazu bei, Schwellungen zu reduzieren und die Durchblutung zu verbessern. Durch den Längenausgleich bleibt Ihre Sitzposition konstant und verhindert unerwünschte Beckenverschiebungen.

SITZNEIGUNG MIT SCHWERPUNKTVERLAGERUNG

Passen Sie Ihre Sitzposition während des Tages mit einer elektrischen Sitzneigung von bis zu 50° an. Die Verlagerung des Gewichts trägt zur Druckentlastung bei und sorgt für eine bequeme Sitzposition bei geringerem Muskelaufwand.

DER OUTDOOR-PERFORMER

Erleben Sie einen wirklich kompakten Elektrorollstuhl mit sensationeller Leistung auch im Freien. Schmal genug, um in einer überfüllten Stadt schnell vorwärts zu kommen, aber auch im Freien und auf den Strassen überzeugt der Q300 M Mini mit seiner grossartigen Performance.

ANTI-PITCH TECHNOLOGIE

Wenn ein Elektrorollstuhl am Hang zum Stillstand kommt, lässt Sie die Stoppbewegung normalerweise nach vorne kommen. Dieses Problem haben wir mit der Anti-Pitch Technologie behoben, sodass Sie sicher und stabil in Position bleiben.



ALLRAD-EINZELRADAUFHÄNGUNG

Unsere PATENTIERTE Allrad-Einzelradaufhängung sorgt dafür, dass alle sechs Räder beim Erklimmen und Überwinden von Hindernissen auf dem Boden bleiben. Alle Stöße und Unebenheiten werden von der Radaufhängung absorbiert und sorgen für eine weiche und sanfte Fahrt.



14" ANTRIEBSRÄDER

Wenn Ihnen die Outdoor-Performance am Herzen liegt, dann sind die optionalen 14" Antriebsräder (Gesamtbreite von **570 mm**) genau das Richtige für Sie. Diese bieten die beste Traktion und Stabilität, so können Sie auch Hindernisse (wie Bordsteine) von bis zu 70 mm ohne Probleme überwinden.



ZUVERLÄSSIGE KANTENSTEIGFÄHIGKEIT

Keine Bordsteinabsenkung in Sicht? Zum Glück kann der Q300 M Mini mit seinen **12 Zoll** Antriebsrädern Bordsteine von bis zu **50 mm** bewältigen, sodass Sie jeder Zeit flexibel bleiben. Möchten Sie höhere Kanten bewältigen? Rüsten Sie auf **14 Zoll** Antriebsräder auf und meistern Sie Bordsteine mit bis zu **70 mm**.

KEINE NOTWENDIGKEIT SICH ZU BEEILEN

Mit leistungsstarken 56 Ah Batterien bringt Sie der Q300 M Mini mit seiner beeindruckenden Reichweite von bis zu **36 km** überall hin, auch über Umwege.





300 mm

ELEKTRISCHER SITZLIFT UND SITZNEIGUNG

Mit dem Sitzlift erreichen Sie eine Höhe von bis zu **300 mm** und kommen an Alltagsgegenstände heran, die sonst unerreichbar wären. Die höhere Position erleichtert auch den Transfer. Und mit einer Sitzneigung von bis zu **50°** können Sie sich entspannt zurücklehnen und der Druck wird besser verteilt.

ELEKTRISCHE RÜCKENWINKELVERSTELLUNG

Eine elektrisch verstellbare Rückenlehne ist ideal, wenn Sie Ihre Position selbstständig einstellen möchten, um sich zu entspannen.



C-Me

SITZ HOCH UND FAHREN

C-Me ermöglicht Ihnen, sich mit aktiviertem Sitzlift (**300 mm**) und einer Geschwindigkeit von max. **4,5 km/h** Seite an Seite mit allen um sich herum zu bewegen. Die Sitzhöhe können Sie sogar während der Fahrt, ohne anzuhalten, per Knopfdruck verändern!



HINWEIS: Die Muster der Verkleidungen sind handgefertigt und können von der Abbildung abweichen.

STYLISH UNTERWEGS

Sitzen Sie modisch? Mit den 12 aufregenden Mustern für die Fahrbasisverkleidung werden Sie es sein! Sieben weitere Farbakzente, für Radabdeckungen und Lenkradgabeln, sorgen für den perfekten Stilmix.



Floralmuster Weiss
Carbon



Flammenmuster:
Grau Blau Rot Weiss



Strukturmuster:
Grau Pink Lila Blau Rot Weiss

VERKLEIDUNG:



FARBAKZENTE:



SEDEO LITE SITZSYSTEM

Der SEDEO LITE bietet einen vielfältig einstellbaren Sitzrahmen mit seitlichen Sitzschienen für die Montage von zusätzlichen Unterstützungs- und Positionierungsoptionen. Ideal für Nutzer mit geringen bis mittleren klinischen Bedürfnissen.

HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN

Die einfach zu bedienenden, hochklappbaren Armlehnen bieten freien Raum für Transfers. Sie können zwischen einer abnehmbaren und einer mitlaufenden Variante wählen.

LÄNGENAUSGLEICHENDE, ABSCHWENKBARE FUSSRASTENHALTER

Diese Fussrastenhalter lassen sich leicht in der Länge verstellen, um die bestmögliche Passform zu erzielen und sind abschwenkbar, um den Transfer in und aus Ihrem Elektrorollstuhl zu erleichtern. Auch als hochklappbare Zentralfussraste erhältlich.

FÜR NUTZER
MIT LEICHTEN BIS
MITTLEREN
KLINISCHEN
BEDÜRFNISSEN

ANPASSRÜCKEN MIT KOMFORTPOLSTER

Die höhenverstellbare Standard-Rückenlehne bietet einen atmungsaktiven, weichen Bezug mit vier in der Spannung verstellbaren Velcrobändern, um eine Vielzahl von Körperhaltungen zu ermöglichen. Erhöhen Sie den Komfort und die Positionierung mit einem SEDEO oder JAY Rücken- und Sitzkissen.



SITZSCHIENEN-TECHNOLOGIE

Die integrierte Sitzschiene bietet viele Befestigungsmöglichkeiten für Positionierungselemente wie Seiten- und Oberschenkelgelotten. Einfach anbringen und in Position schieben!



SEDEO PRO SITZSYSTEM

FÜR NUTZER
MIT MITTLEREN
BIS KOMPLEXEN
KLINISCHEN
BEDÜRFNISSEN

Das SEDEO PRO Sitzsystem verbindet einen hochgradig einstellbaren und konfigurierbaren Sitzrahmen mit einer umfassenden Auswahl von Unterstützungs- und Positionierungsoptionen. Ideal zur Anpassung an Nutzer mit degenerativen Erkrankungen oder zur Vorbeugung von Skelettdeformationen.



50° ELEKTRISCHE SITZNEIGUNG

Die elektrische Sitzneigung von 50° ermöglicht viele klinische Vorteile: Eindämmung des Dekubitusrisikos, Unterstützung einer korrekten Körperhaltung sowie ein hoher Sitzkomfort für den Nutzer im Rollstuhl.



90°–150° ELEKTRISCHE RÜCKENWINKEL-VERSTELLUNG

Dies erleichtert die Atmung und beugt Druckverletzungen und Verdauungskomplikationen vor. Beim Übergang von der Liege- in die Sitzposition trägt es dazu bei, eine gute Sitzhaltung zu bewahren.

BIOMECHANISCHER RÜCKEN

Dank dem biomechanischen Rückensystem, welcher einen Längenausgleich bis zu 100 mm ermöglicht, bleiben Kopf- und Kinnsteuerung trotz Verstellung des Rückenwinkels in der gleichen Position.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um weitere Informationen zu erhalten.

SEDEO PRO, FLEXIBLES RÜCKENKISSEN

Entdecken Sie dieses einzigartige Rücken-
kissen. Es ist leicht einstellbar, bietet
eine vollständige Rücken- und seitliche
Rumpfunterstützung sowie ein höchstes
Mass an Anpassbarkeit.

PASST SICH DER FORM IHRER WIRBELSÄULE AN

Anstelle einer festen Basis verfügt das flexible Rückensystem über 8 einstellbare Gurte. Während andere Rückensysteme nur begrenzt Kontakt mit der Wirbelsäule haben, passt sich der weiche Schaumstoff des flexiblen Rückenkissens Ihrer Wirbelsäule an und sorgt für vollständigen Kontakt, Komfort und Stabilität.



Es ist so vielfältig einsetzbar, dass selbst Personen mit mittelschwerer bis schwerer **Kyphose** viel aufrechter sitzen können, ohne dass der Komfort darunter leidet.



UMSCHLIESST DEN KÖRPER UND PASST SICH IHM AN

Beim Zurücklehnen fühlt man sich wie umarmt, da sich der Schaumstoff der Seitenteile an die Körperform anpasst und so ein optimales Einsinken ermöglicht.

Der Druck wird dadurch besser verteilt, so dass Beschwerden vermieden werden.

Für die Stabilität und Ausrichtung des Rumpfes sorgen die lateralen Seitenstützen. Sie sind in die Rückenlehne integriert, verrutschen nicht und können unabhängig voneinander eingestellt werden:

1

Nach innen oder aussen verstellbar



2

Nach oben oder unten verstellbar



3

Enganliegend (z. B. bei Skoliose) oder gelockert für mehr Bewegungsfreiheit



JAY & WHITMYER

POSITIONIERUNGSOPTIONEN

Mit SEDEO LITE und SEDEO PRO sind eine Vielzahl von WHITMYER Kopfstützen, JAY Sitzkissen und Rücken kombinierbar, um unterschiedliche klinische Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen, die bestmögliche Positionierung zu erreichen.



WHITMYER KOPFSTÜTZEN

Um Positionierungsanforderungen von der Basisunterstützung bis hin zur multiplen Punktunterstützung zu erfüllen, hat Whitmyer unterschiedliche Kopfstützen entwickelt. Das Befestigungssystem lässt sich perfekt mit einer Reihe von Polstern kombinieren und bietet eine breite Palette an Lösungen zur Unterstützung und/oder Kontrolle der Halswirbelsäule und des Kopfes.

JAY KISSEN & RÜCKEN

JAY Sitzkissen und Rücken wurden für grösstmögliche Stabilität und Hautschutz entwickelt. Sie sind einfach und individuell anpassbar und können somit unterschiedlichsten Positionierungsanforderungen gerecht werden.



R-NET

ADVANCED JOYSTICK

Jeder Elektrorollstuhl der Q500 Serie erhält standardmässig ein innovatives R-Net Bedienpult. Ein grosses, gut lesbares HD-Display und einfach zu bedienende Tasten ermöglichen eine intuitive Bedienung.

KONNEKTIVITÄT

Neues Bedienpult mit integrierter Infrarot Funktion und erweitertem Multifunktionsdisplay. Dies ermöglicht ein Bedienen von Geräten mit Infrarot Schnittstelle.

BLUETOOTH & IDEVICE

Einfache Steuerung von Mobiltelefon, Computer, Tablet und anderen Geräten (2 Android/Windows und 2 IOS Geräte). Bis zu drei Geräte lassen sich über separate Bluetooth Module ansteuern.

ZUORDENBARE-TASTEN-TECHNOLOGIE

Die optionale Tasten-Technologie bietet vielfältige, softwareintegrierte und benutzerfreundliche Möglichkeiten für die Verbesserung der Lebensqualität




SWITCH-IT

INNOVATIVE EINGABEGERÄTE

Flexibel in jede Position – auf Wunsch können einfach per Knopfdruck die vordefinierten Sitzfunktionen mittels der 5-Tasten Box angesteuert werden. Standardmässig besitzt jede 5-Tasten Box eine USB Ladebuchse für das Laden mobiler Geräte.

ALTERNATIVE SONDERSTEUERUNGEN

Wenn das Fahren mit einem herkömmlichen Joystick nicht die beste Option ist, können Sie mit den Switch-It Sondersteuerungen die Vorteile und das Fahrpotential Ihres Elektrorollstuhls ausschöpfen.

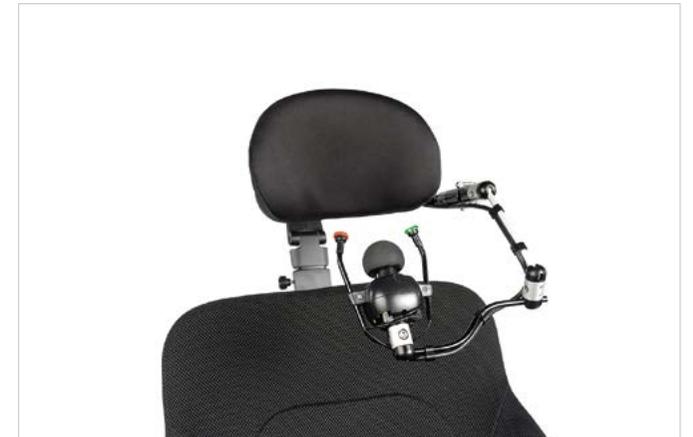

LINK-IT


MONTAGESYSTEM

Sollen zusätzliche Sondersteuerungen oder Taster verwendet werden? Mit Link-It, dem neuen Befestigungssystem im modularen Baukastenformat, ist nichts unmöglich.

Aus den verfügbaren Modulen und Stäben können unendlich viele Kombinationen erstellt werden, um die verschiedenen Anforderungen zu erfüllen. Link-It ist nicht nur leicht und einfach zu positionieren, sondern sorgt auch dafür, dass das minimalistische Design des Rollstuhls bestehen bleibt. Ein zusätzliches Bedienpult, ein Taster am Rücken oder ein Joystick an der Kopfstütze, einfach Link-It.



TECHNISCHE DATEN

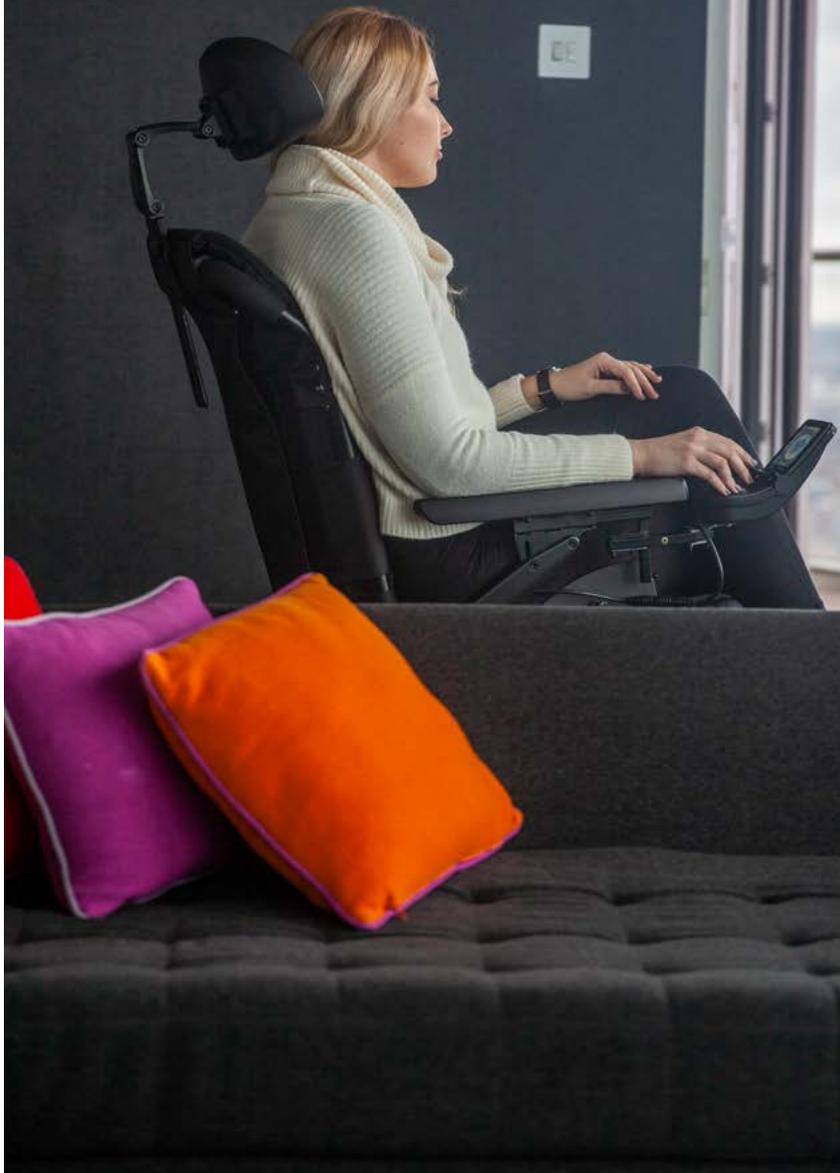

SITZSYSTEM



Q300 M Mini mit SEDEO LITE



Q300 M Mini mit SEDEO PRO

Abmessungen

Sitzbreite	385 - 510 mm	380 - 560 mm
Sitztiefe	410 - 560 mm	400 - 580 mm
Sitzhöhe	410 - 490 mm	415 - 490 mm
Sitzneigung	0 - 9°	0 - 9°
Rückenhöhe	460 - 510 mm	530 - 720 mm
Rückenwinkel	85 - 120°	90° - 150°
Max. Zuladung	136 kg	136 kg

Merkmale

Sitzsystem	SEDEO LITE	SEDEO PRO
SEDEO PRO Rückenissen, flexibel	–	●
Rückenwinkelverstellung, elektrisch	●	●
Elektrische Zentralfussraste	●	●
Funk Stop Schalter (Fernsteuerung zum Anhalten des Rollstuhls)	●	–
C-Me	●	●

- Erhältlich

Gewisse Optionen sind nicht für beide Sitzsysteme erhältlich. Genaue Informationen finden Sie im jeweiligen Bestellblatt.

FAHRBASIS

Abmessungen

Gesamtbreite	ab 520 mm
Gesamtlänge (mit zentral montierter Fussraste)	ab 1060 mm
Wendekreis	ab 1120 mm
Max. Steigfähigkeit	8°
Max. Kantensteigfähigkeit	50 mm (mit 12" Antriebsrädern) 60 mm (mit 13" Antriebsrädern) 70 mm (mit 14" Antriebsrädern)
Max. Reichweite (nach ISO 7176-4)	bis zu 25 km (mit 41 Ah Batterien) bis zu 36 km (mit 56 Ah Batterien)
Rollstuhlgewicht (mit Batterien)	ab 103 kg
Antriebsräder	12" / 13" / 14"
Max. Geschwindigkeit	6 km/h / 10 km/h
Batterien	56 Ah (Version für Selbstzahler optional auch mit 41 Ah)
Steuerung	VR2, R-NET
Transport ohne Nutzer	Elektrorollstuhl sicher im Transportfahrzeug fixieren (z. B. Auto, Flugzeug)
Bestimmungsgemässe Verwendung	Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für den Indoor- und Outdoor-Gebrauch



Nachdem Sie nun alles über den QUICKIE Q300 M Mini gelesen haben, ist es an der Zeit, dass Sie ihn selbst ausprobieren.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und buchen Sie noch heute Ihre kostenlose Probefahrt.



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical ist um Ihre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für sichere Betriebsanweisungen und Wartungsrichtlinien.

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.

Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.