



EASY LIFE T & LIFE RT
PASSEND ZUM AKTIVEN LEBEN

ZWEI ROLLSTÜHLE – EINE MODELL-FAMILIE

Lebe das Leben in vollen Zügen! Treffe deine Freunde für ein Shopping oder einen Ausflug im Park. Was auch immer deine Pläne für den Tag sind, der Sopur Easy Life T oder Life RT begleiten Dich zuverlässig.

Das Festrahmenmodell Easy Life RT ist stabil, zuverlässig und bietet die Unterstützung, welche Du benötigst, um deine coolen Aktivitäten zu genießen.

Oder brauchst Du eine Faltrahmen-Version? Der Easy Life T ist nicht nur leicht zu handhaben, sondern auch der perfekte Allrounder für deinen Alltag!

Unabhängig der Modellwahl: beide Ausführungen sind für die Masse und Bedürfnisse von Jugendlichen konzipiert. Des Weiteren werden beide - der Easy Life T wie auch RT - mit fixem Vorderrahmenteil oder Fusstützen wegnehm- und abschwenkbar angeboten. Optional ist beim Vorderrahmenteil fix der Rahmen auch mit Abduktion oder Rahmenverjüngung erhältlich.

COOL,
STYLISH,
MODERN.

LIFE



LIFE T DER FALTBARE

Faltrahmen
Fixer Vorderrahmen oder
Fussstütze abnehm-/abschwenkbar



LIFE RT DER FIXRAHMEN UND AKTIVE

Festrahmen
Fixer Vorderrahmen oder
Fussstütze abnehm-/abschwenkbar





→ **Abduktionsrahmen für den Life T & Life RT**

Diese Rahmenversion bietet pro Seite eine 2.5 cm Verbreiterung des Vorderrahmenteils. Die Rahmenabduktion beginnt bereits ab der Sitzbespannung.



LIFE T & LIFE RT DER INDIVIDUELLE TOUCH – FÜR TEENAGER VON HEUTE

Lass deinen Rollstuhl nach deinem Geschmack und deinen Wünschen bauen! Definiere deinen Stil über die mehr als 24 Rahmenfarben und drei verschiedene Stilpakete (Farben der Lenkradgabel und Radhalteplatte). Die verfügbaren Speichenschütze geben deinem Rollstuhl eine weitere Designkomponente. Auch Optionen wie der Radschutz, die nötigen Arm- oder Fussauflagen können aus einer breiten Palette frei gewählt werden.




→ **Auswahl des Radsturzes beim Life T & Life RT**

Der Radsturz verbessert die seitliche Stabilität und erhöht die Drehfreudigkeit deines Rollstuhles. Beide Modelle bieten einen Radsturzbereich bis 6°, in 1° Schritten.



**// INNOVATIVE
CARBOTECTURE
VORDERRADGABEL**

Extremes Leichtgewicht.
Aus starrem Hightech-
Material gefertigt.
Erhältlich als Style-Paket
in 3 Farben.

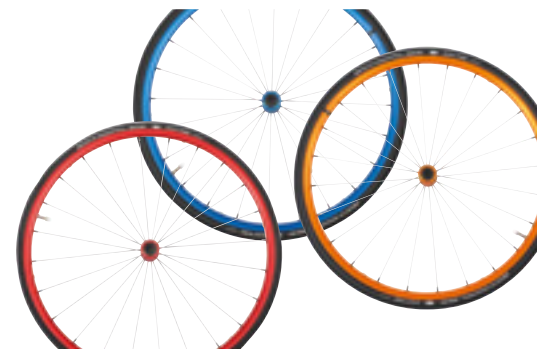

**// ELOXIERTE 24"
HINTERRADFELGEN**

Setze weitere Farbakzente!
Stimme die 24"-Naben
und Felgen der Hinterräder
farblich aufeinander ab.

KARINJAER'S LIFE



→ LIFE RT – le Sportliche



→ LIFE T – der Faltbare

Optionen und Merkmale des LIFE T und LIFE RT – Konfiguriere Deinen Rollstuhl nach Deinen individuellen Wünschen. Weitere Informationen zu den Optionen findest Du in den jeweiligen Bestellformularen.

→ Für Easy LIFE T & LIFE RT



// ABDUKTIONSRAHMEN

Diese Rahmenversion bietet eine Abduktion von je 2.5 cm pro Seite. Die Verbreiterung beginnt bereits ab der Sitzbespannung.



// EINTEILIGE KARBON FUSSAUFLAGE

Leichte und stilvolle Fussauflage aus Karbon. Winkel- und tiefeinstellbar.



// DIE ÜBERZEUGENDE SAFARI BREMSE

Die intuitiven und in die Seitenteile integrierten Safari-Feststellbremsen blockieren die Räder schnell und sicher.



// SIEBEN POSITIONEN BEI DER HINTEREN SITZHÖHENANPASSUNG

Radsturzeinstellungen von 0° bis 6° und 4 Schwerpunkt-Einstellmöglichkeiten (aktive 8.3 cm bis stabile 2.3 cm).

→ Für Easy LIFE RT



// WINKELANPASSBARE RÜCKENLEHNE

Die winkelverstellbare Rückenlehne ermöglicht Einstellungen von -12° bis +8° in 4° Schritten.



// ERGONOMISCHER STOSSBÜGEL FÜR BEGLEITPERSONEN

Der Schiebebügel kann für eine bessere ergonomische Position leicht in Winkel und Höhe angepasst werden.



// SITZTIEFENANPASSUNG ÜBER DIE SITZBESpanNUNG

Die tiefeinstellbare Sitzbespannung wächst mit.

→ Für Easy LIFE T



// RÜCKENLEHNE WINKLEINSTELLBAR

Leichtgewichtig und simpel einzustellen. Erlaubt Rückenwinkel von -12° bis +12° in 4° Schritten.

TECHNISCHE DATEN

	Life T	Life RT
Max. Nutzergewicht	125 kg*	125 kg*
Vorderrahmen mit integrierter Fussraste	75°; 75° mit Abduktion; 85°; 85° mit Kröpfung	75°; 75° mit Abduktion; 85°; 85° mit Kröpfung
Vorderrahmen mit wegschwenkbarer Fussraste	100°	100°
Sitzbreite	280 - 500 mm	280 - 480 mm
Sitztiefe	320 - 460 mm	320 - 460 mm
Vordere Sitzhöhe	400 - 530 mm	360 - 500 mm
Hintere Sitzhöhe	400 - 500 mm	360 - 450 mm
Rückenhöhe	250 - 475 mm	250 - 450 mm
Rückenwinkel	-12° bis +12° in 4° Schritten	-12° bis +8° 4° Schritten
Radsturz	0°/1°/2°/3°/4°/5°/6°	0°/1°/2°/3°/4°/5°/6°
Gesamtbreite / -länge / -höhe	720 mm / 1075 mm / 970 mm	720 mm / 1075 mm / 950 mm
Max. Wendekreis	860 mm	700 mm
Max. sichere Steigung	7° (für die Feststellbremsen)	7° (für die Feststellbremsen)
Lenkräder // Antriebsräder	4"/5"/6"/7" // 22"/24"	4"/5"/6"/7" // 22"/24"
Gesamtgewicht	ab 10,5 kg	ab 10 kg
Transportgewicht	ab 7 kg	ab 8 kg
Gewicht schwerstes Einzelteil	Antriebsrad 1,1 kg	Antriebsrad 1,1 kg
Abnehmbare Teile	Antriebsräder, Fussstützen & Seitenteile (für den Transport)	Antriebsräder, Fussstützen & Seitenteile (für den Transport)
Rahmenfarben	24	24
Crash getestet	Ja – nach ISO 7176-19	
Transport ohne Nutzer	Befestigen Sie den Rollstuhl fest und sicher im Fahrzeug (z. B. Auto)	
Verwendungszweck und Umgebung	Für Menschen mit Gehbehinderung und eingeschränkter Mobilität (Kinder & Erwachsene); drinnen & draussen. Bedienung durch Nutzer oder Begleiter	

* Bei der Auswahl von Protonenrad oder Abduktionsrahmen beträgt das max. Benutzergewicht 100 kg.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.