

JAY J3 BACK

MAMY TWOJE OPARCIE



To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



ZALETY SZTYWNYCH OPARĆ

ZALETY KLINICZNE SZTYWNYCH OPARĆ

- Zapewnia wsparcie posturalne w optymalnym ułożeniu anatomicznym
- Poprawia rozkład nacisku, aby zachować integralność skóry
- Poprawia stabilność
- Poprawia pozycjonowanie
- Poprawia komfort

ZALETY "STYLU ŻYCIA" SZTYWNYCH OPARĆ

- Styl – elegancki wygląd
- Pewność siebie – użytkownik może siedzieć wyprostowany i dumny
- Komfort – oparcie wspiera użytkownika, a nie użytkownik musi się wspierać



ZAKRES KONTURÓW I KSZTAŁTÓW

CZTERY GŁĘBOKOŚCI KONTURU

JAY J3 Back oferuje cztery rodzaje głębokości konturu:

Płytki kontur (SC), który zapewnia głębokość 50 mm, Średni kontur (MC) o głębokości 80 mm, Głęboki kontur (DC) i Średkowy głęboki kontur (MDC) o głębokości 150 mm. Oparcie MDC i DC jest również dostępne w wersji bardzo głębokiej - 180 mm.

Płytki kontur
Umiarkowane wsparcie boczne

50 mm



Średni kontur
Średnie wsparcie boczne

80 mm



Głęboki kontur
Pełne wsparcie boczne

150 mm



Głęboki kontur, Bardzo głębokie
Pełne wsparcie boczne

180 mm



Średkowy głęboki kontur
Pełne wsparcie boczne

150 mm



Średkowy głęboki kontur, Bardzo głębokie,
Pełne wsparcie boczne

180 mm





WYMIARY SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ

ZAKRES OPARCÍ J3 ...

... występuje również w różnych szerokościach i wysokościach, które są dobierane zgodnie z szerokością i wysokością tułowia oraz szerokością wózka, dzięki czemu oparcie będzie pasować zarówno do użytkownika, jak i do jego wózka.



ZAKRES WYSOKOŚCI

CZTERY POZIOMY PODPARCIA

Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy czterema różnymi poziomami podparcia w zależności od swoich potrzeb funkcjonalnych i poziomu stabilności tułowia.

Wysokość ramienia	(SH)	530-610 mm
Wysokość górnej części klatki piersiowej	(UT)	420-500 mm
Wysokość środkowej części klatki piersiowej	(MT)	300-380 mm
Wysokość dolnej części klatki piersiowej	(LT)	170-240 mm

TRZY INDYWIDUALNE WYSOKOŚCI

Dwie osoby mogą wymagać wsparcia w tym samym miejscu kręgosłupa; jednak ze względu na różnice wzrostu nadal wymagają oparcia o różnej wysokości. Dlatego każdy poziom podparcia jest dostępny w trzech różnych wysokościach.




Krótkie (S)



Średnie (M)



Wysokie (T)

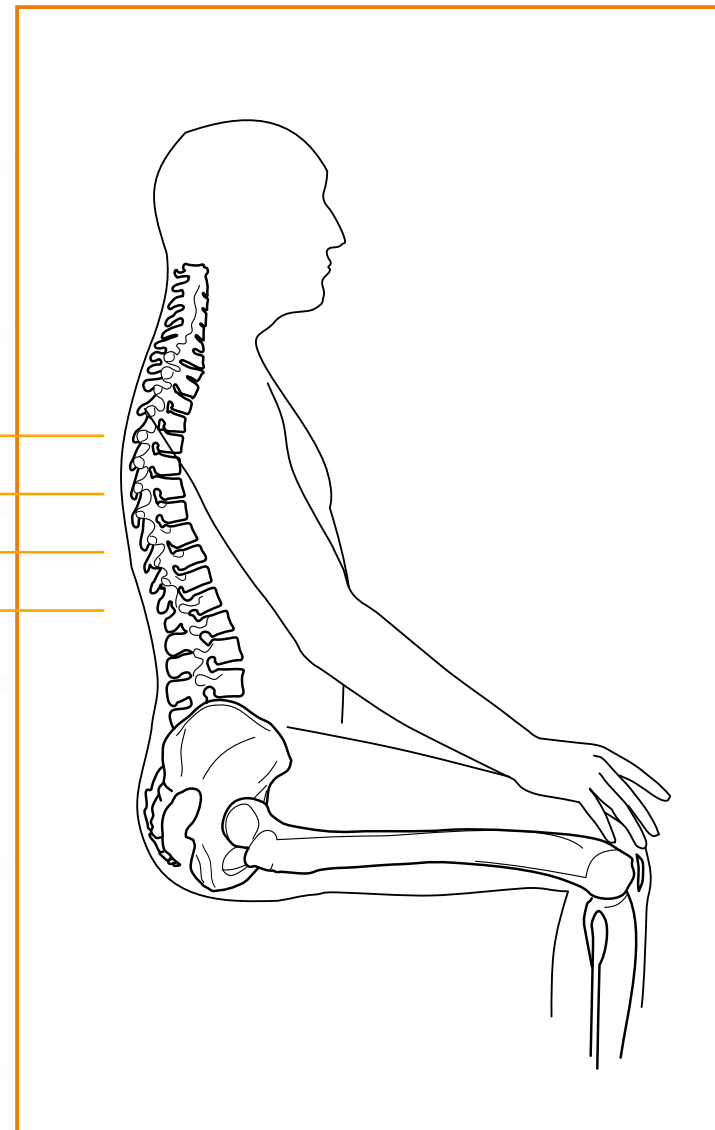

WYRÓWNIANIE KRĘGOSŁUPA SYSTEM

SZTYWNE OPARCIE POWINNO ODZWIERCIEDLAĆ INDYWIDUALNY KSZTAŁT, ZAPEWNIAJĄC MAKSYMALNY ROZKŁAD NACISKU, PRAWIDŁOWE PODPARCIE, OPTYMALNY KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ.

MAJĄC NA UWADZE TEN IDEAŁ, ELEMENTY POZYCJONUJĄCE KRĘGOSŁUP J3 ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE W CELU OKREŚLENIA, DOPASOWANIA I UDOSKONALENIA KSZTAŁTU OPARCIA J3.

ELEMENTY POZYCJONUJĄCE WYRÓWNIANIE KRĘGOSŁUPA

- Zapewniają maksymalny rozkład nacisku w celu zachowania integralności skóry
- Zapewniają optymalne wsparcie i komfort/ tolerancję siedzenia
- Nieskończona liczba niestandardowych kształtów
- Wiele zestawów ewaluacyjnych

Walizka z zestawem do wyrównywania kręgosłupa zawiera wszystkie elementy niezbędne do dopasowania oparcia J3 do kształtu każdej osoby za pomocą ponad 32 różnych elementów z miękkiej pianki. Alternatywnie możemy mieć dostępne dwa mniejsze minizestawy do wyrównywania kręgosłupa.



ZAGŁÓWKI I AKCESORIA

OPARCIE JAY J3 OFERUJE ZAGŁÓWKI WHITMYER I SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ OPTYMALNE UŁOŻENIE UŻYTKOWNIKA W OPARCIU.

ELEMENTY POZYCJONOWANIA UŻYTKOWNIKA

- Zagłówki Whitmyer
- Peloty
- Pasy piersiowe i uprząż

WHITMYER®




Wszystkie oparcia J3, z zagłówkami, zostały przetestowane i zatwierdzone do transportu zgodnie z odpowiednimi normami ISO



Zagłówek potyliczny Whitmyer z mocowaniem Cobra



Zagłówek standardowy Whitmyer z mocowaniem AXYS

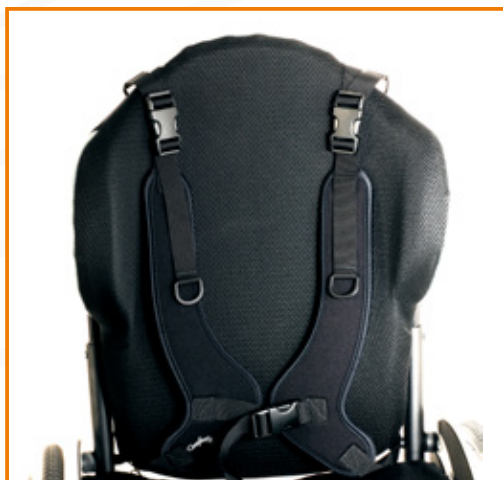

Pas piersiowy i uprząż



Odchylane peloty boczne (lepsze pozycjonowanie i stabilność boczna dzięki lżejszej konstrukcji)



Stałe peloty boczne

ELEMENTY MONTAŻOWE

ELEMENTY MONTAŻOWE JAY SĄ ŁATWE W MONTAŻU I DEMONTAŻU, MAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY I SĄ WYPOSAŻONE W REGULACJE SZEROKOŚCI, WYSOKOŚCI, GŁĘBOKOŚCI I KĄTA. MOŻESZ NAWET REGULOWAĆ OPARCIE, GDY UŻYTKOWNIK SIEDZI NA WÓZKU.

KOMPAKTOWY OSPRZĘT

MONTAŻOWY – dla aktywnych użytkowników, 25% lżejszy od standardowego osprzętu



OSPRZĘT MONTAŻOWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ –

dla użytkowników pasywnych, nastawionych na większą stabilność



KOMPATYBILNOŚĆ Z WIELOMA ŚREDNICAMI RUR

Osprzęt montażowy JAY ma konstrukcję zaciskową, która pasuje do rur typu D 19 mm, rur okrągłych 25 mm i 28 mm. Dzięki tylko jednemu zaciskowi mocującemu, który jest kompatybilny z 90% wózków dostępnych na rynku i bez potrzeby stosowania dodatkowego osprzętu, cały proces zamawiania i montażu jest uproszczony.

MIEJSCE MONTAŻU OSPRZĘTU

Często przeszkody, takie jak rura stabilizująca na ręczniki i mocowania podłokietników, zmuszają lekarzy, sprzedawców i techników do pójścia na kompromis. Aby zmaksymalizować kompatybilność, unikalne mocowanie kompaktowego osprzętu montażowego J3 zajmuje jak najmniej miejsca i umożliwia montaż bez wpływu na dopasowanie użytkownika.



REGULACJA KĄTA

The JAY mounting hardware was designed to minimise loss of seat depth. When the J3 back is reclined the lower back position remains constant, resulting in no loss of seat depth.

REGULACJA SZEROKOŚCI

Często oparcia pasują do wózka, ale nie do użytkownika. Aby rozwiązać ten problem, oparcie zostało zaprojektowane z wbudowaną regulacją szerokości w zakresie 50 mm.

PERFEKCYJNE DOPASOWANIE

ŁATWE W MONTAŻU

Dzięki tylko 2 punktom mocowania, niewiarygodnemu zakresowi regulacji wysokości i regulowanym zaciskom pasującym do wielu średnic rur, można go łatwo zamontować wokół przeszkód i na niekonwencjonalnych rurkach w ciągu kilku sekund.



ŁATWE DO REGULACJI

Precyzyjne regulacje, takie jak szerokość, wysokość, głębokość i kąt oparcia, można wykonać, gdy użytkownik siedzi, zapewniając idealne dopasowanie. Wszystkie regulacje można wykonać za pomocą dwóch narzędzi dołączonych do zestawu.


Regulacja wysokości i szerokości



Regulacja głębokości i kąta



Regulacja kąta

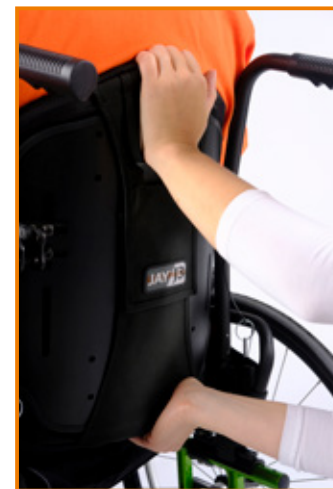

ŁATWO ZAŁOŻYĆ I ZDJAĆ

Zamontowanie oparcia J3 nie może być łatwiejsze. Po prostu wsuń w zaciski, a oparcie automatycznie zamocuje się na swoim miejscu. Demontaż jest równie szybki i prosty. Nawet użytkownicy o ograniczonej mobilności mogą demontować oparcie z łatwością.



OPARCIE JAY J3

OPARCIE J3 CARBON

Włókno węglowe jest lekkie i mocne – dlatego jest idealnym materiałem na oparcie. Oferując taką samą wytrzymałość jak aluminium (jest o 60% lżejsze), oparcie J3 Carbon zmniejsza wagę, jaką osoba na wózku musi codziennie pchać. Zachwyca również wyjątkowym i pięknym wykończeniem. Aktywny i czysty design połączony z eleganckim wyglądem.





Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

Producent:

Sunrise Medical (US) LLC

2842 N Business Park Avenue

Fresno, CA 93727, USA

Tel. 1-800-333-4000

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia na naszej stronie internetowej. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie: www.Sunrise-Medical.pl.

Upoważniony przedstawiciel:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4, Germany

D-69254 Malsch / Heidelberg

Tel. +49 (0)7253 980-0



Rev.B: 04/2021