

improving people's lives

ジノン2処方ガイド



- 独自の 技術 と 素材: ハイドロフォーミング技法、アルミニウム 7000
- 非常に 硬く & 優れたフレーム – しかも折りたたみ式!
 - 3つのフレーム 選択肢を広げる解決策
- 衝撃テスト済み
- 非常に アクティブ、モダンな見た目
- 最大 耐荷重140kgまで 可能 Xenon² ハイブリッドフレーム
- 折りたたみ式機能 新規開発されたクロスブレ





Quickie Xenon² シリーズは、

異なるユーザーのタイプに合わせて選べる3つのフレームがあります。

- ジノン² フロントフレーム固定型: パフォーマンスを最大にするフロントフレーム固定式。
最軽量 - 耐荷重110kgまで。
- ジノン² ハイブリッド フレームオプション: 強化型フレーム。耐荷重140kgまで。
- ジノン² スイングアウェイ型: スイングアウェイ式フットレスト。移乗が楽にできます。
耐荷重125kg。

ジノン² シリーズ ジノン² フロントフレーム固定型

ジノン² フロントフレーム固定型

次のようなことを求めているユーザー

- 効率的な推進力のため、非常に活動的で、とても軽くて、硬い車いすが欲しい方。
- 移乗時に立つ必要がない方。
- とても動かしやすく、持ち上げやすい。たくさん移動する方。



特徴:

- 固定式フロントハンガー。
オープンボックスフレーム設計。
- 92° / 100° フレーム
(オプション: 1 cm インセット)
- スッキリしたモダンなデザイン
- 超軽量でありながら剛性が高い。
折りたたみ性能が改良されている。8.8kgから
- 耐荷重: 110kg

ジノン² ハイブリッド

- 次のようなことを求めているユーザー
 - 効率的な推進力のため、活動的で、軽くて、強い車いすが欲しい方。
 - 立つことが出来ない方(移乗時)
 - とても動かしやすく、持ち上げやすい。たくさん移動する方。
 - 体重 110kg未満…
 - …または アダプタータイプのハンドバイクを使用したい方

特徴:

- 補強された固定式フロントフレーム。耐荷重140kgまで対応可能。
- ジノン² フロントフレーム固定型のオーダーフォームのオプション
- 92° /100° フレーム
- スッキリしたモダンなデザイン、頑丈な作り
- 剛性と軽量化に成功。折りたたみ性能の向上。



ジノン² シリーズ

ジノン² スイングアウェイ型

ジノン² スイングアウェイ

- 次のようなことを求めているユーザー
 - アクティブな方。
 - 立てる方(移乗時)
 - 片まひの方、足を使って車いすを漕ぐ方。
 - 身軽で、たくさん移動する方。

特徴:

- スイングアウェイフレーム。
多様なフットプレート オプション
- ハンガー角度 100° または 110°
- 軽量化を実現したまま、
改良された折りたたみ機構。
- 耐荷重: 125 kg



シート幅 と 奥行き



CLIENT MEASUREMENTS (all measurements in cm without cushion)

SEAT WIDTH SELECTION - measured from outside frame tube to outside frame tube

シート幅

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
									only Dual frame

SEAT DEPTH SELECTION

シート奥行き

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

シート幅の採寸は、フレームチューブの外側から外側まで。

シート奥行きの採寸は、バックポスト前方から座布の端まで。

前座高

● = Standard □ = Cost option □ = No cost option

FRONT SEAT HEIGHT SELECTION: in dependence of front castors, forks and frame versions

Fork (length)		Frame:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	low	□	□	□										
	123 mm					□	□								
	123 mm (1)				□	□	□								
	Frog Leg (1)						□	□							
	One Arm (1)		□	□	□										
	111 mm	high					□	□	□						
	123 mm							□	□	□					
	123 mm (1)							□	□	□					
	Frog Leg (1)										□	□			
	One Arm (1)						□	□	□						
4"	111 mm	low		□	□	□	□								
	123 mm				□	□	□	□							
	123 mm (1)				□	□	□	□							
	Frog Leg (1)						□	□	□						
	One Arm (1)		□	□	□	□	□								
	111 mm	high						□	□	□	□				
	123 mm								□	□	□	□			
	123 mm (1)								□	□	□	□	□		
	Frog Leg (1)										□	□	□	□	
	One Arm (1)							□	□	□	□			□	
111 mm					□	□	□								
123 mm						□	□	□							

前座高とキャスターサイズを選択する時は、この表をお使いください。
生活環境と地形に適したキャスターサイズをお選びください。スライドを参照

必要な座面高が得られるように、

サンライズでは ハイフレーム と ローフレームの両方をご用意しています。

ポイント - 選択したキャスターサイズに応じて、お客様が必要とする調整幅を確保できるフレームの高さを選んでください。



1. - 張り調整式座シート

2. - 張り調整式座シート

- 下に小物入れバッグ
- ポケットサイズ 4" x 8" (約10x20cm)
- 大きなスマートフォン & お財布も収納可能



バックサポート

BACKREST

Back height range

Choose back height factory setting (cm).

Height adjustments of in total 5 cm possible.

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
☐ 25	☐ 30	☐ 35	☐ 40	☐ 45
☐ 27.5	☐ 32.5	☐ 37.5	☐ 42.5	☐ 47.5
☐ 30	☐ 35	☐ 40	☐ 45	

Backrest height, carbon fibre tubes (3)

Fixed height, non height adjustable

☐ 25	☐ 27.5	☐ 30	☐ 32.5
☐ 35	☐ 37.5	☐ 40	☐ 42.5

XFF030010	☐ Backrest, fixed (90°)	
XFF030029	☐ Desk sideguard preparation for later replacement	(4)
XFF030031	☐ Backrest, fold-down (to the front) (6)	(from back height 32.5 cm, fixed back height, not adjustable)
XFF030012	☐ Backrest, angle-adjustable	(75° to 103°)
XFF030029	☐ Desk sideguard preparation for later replacement	(5)
XFF030031	☐ Backrest, fold-down (to the front) (6)	(from back height 32.5 cm, fixed back height, not adjustable)

高さ調整式 または カーボンからお選びください

- カーボンは軽量で強い素材ですが、高さ調整はできません。

固定式 または 背角度調整式からお選びください

- 股関節の柔軟性が少ない方。または姿勢のコントロールのため背角度を開く必要がある方は、角度調整式を選択してください。
- 後からサイドガードを足したい場合は、「preparation (準備中)」を選択してください。

プッシュ ハンドル オプショ ン



プッシュハンドルなし



ロング



折りたたみ式
プッシュハンドル



調整式ハンドル

特徴	後方にフリースペースを作る
このオプションを選ぶ理由	肩周りが自由になるのを好む方
お客様のタイプ	階段や段差を登る際に、まれに補助が必要になることがある方は、プッシュハンドルがあると便利です。

特徴	持ち手部分が長い操作性が向上したシンプルなプッシュハンドル
このオプションを選ぶ理由	車いすの走行を少し補助してもらう必要がある場合
お客様のタイプ	車いす走行の選択に柔軟性を求める幅広いユーザーに対応

特徴	未使用時にはプッシュハンドルをフリップダウンできます。
このオプションを選ぶ理由	ほとんどプッシュハンドルが必要ない方
お客様のタイプ	階段や縁石を登る際、他の人に押してもらう時に、時々プッシュハンドルが必要な方。

特徴	高さ調整式 介助用ハンドル
	JAYバックを使用する場合、「Jayバック用」をお選びください。ブラケットが延長され、Jay 3 バックのスペースが確保されます。
お客様のタイプ	活動的で、車で移動する方。



EXO

- 表面層 ポリエステル/Lycra®(ライクラ)
- 7mm EVA インナーフォーム、硬めのフォーム
- 後ろにポケット
- 選べる 5色

EXO プロ

- 表面層 3DX/3メッシュ
- 13Mm インナーフォーム、より柔らかい
- 通気性が良い
- 後ろにポケット
- 選べる 5色



補強バー 車いすと一緒に折りたたまれるので、取り外す必要はありません



アームレスト付き シングルポスト サイドガード

- 高さ調整式
- 着脱可能



デスクサイドガード アームパッド

- 着脱式フリップアップ サイドガード
- アームパッド 25cm または 31cm
- 高さ調整式 / 着脱式



チューブラーアームレスト

- アルミニウム
- スイングアウェイ / 着脱式
- パッド付き
- 90° & 角度調整式バックサポート用

(前方へ)折りたたみ式バックサポー

ト



(前方へ)折りたたみ式バックサポート

- アルミニウム製 切削ヒンジ
- 最小のパックサイズ

併用不可

- 高さ調整式プッシュハンドル ✕
- ドラムブレーキ ✕
- JAYバックサポート ✕
- バックレスト高 40 cm以上のみ可能
- 高さ固定式、高さ調整なし ✕

バックサポート オプション

補強バー：バックサポートフレームの安定性を高める。体重の重い方、筋緊張がある方に有効。車いすと一緒に折りたたまれる。

ポイント：シート幅 38cm未満 & 高さ固定式バックサポートのみ併用可



J3 バックサポート と アクセサリー

JAY 3 Back - Shallow Contour						
Mid Thoracic:	☐	JAY030010	Medium - 34 cm	☐	JAY030033 Tall - 38 cm	
Upper Thoracic:	☐	JAY030012 Short - 42 cm	☐	JAY030019 Medium - 46 cm	☐	JAY030025 Tall - 50 cm
JAY 3 Back - Mid Contour						
Mid Thoracic:	☐	JAY030011	Medium - 34 cm	☐	JAY030018 Tall - 38 cm	
Upper Thoracic:	☐	JAY030013 Short - 42 cm	☐	JAY030020 Medium - 46 cm	☐	JAY030026 Tall - 50 cm
JAY 3 Carbon Back - Shallow Contour						
Lower Thoracic:	☐	JAY060001 Short - 17 cm	☐	JAY060002 Tall - 24 cm		
Mid Thoracic:	☐	JAY060003 Short - 30 cm	☐	JAY060004 Tall - 38 cm		
Accessories for JAY J3 backs						
JAY030004	☐	JAY Flip Back Headrest (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)			(only with JAY J3 backs)	
JAY030006	☐	JAY Std. Headrest (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)			(only with JAY J3 backs)	
JAY090058	☐	JAY Accessory bag			(only with JAY J3 Carbon backs)	





コンポジット：プラスチック製 着脱式オプションのみ



アルミニウム：標準オプション、
フェンダー（タイヤ上部を覆う）付きもあり



カーボン：標準オプション、スリム、フェンダー付き
カーボン素材が強度を高める。非常に軽量。



フットプレート

- 横に跳ね上がる
- アルミニウム、アルミニウム軽量、カーボン、プラスチック
- 角度 & 奥行き調整式
- パフォーマンスバージョンは、軽量かつ小型
- スイングアウェイ オプション: ハンガーを回転させて、移乗時に邪魔にならないようにできる。



パフォーマンス

オートフォールディング

- 車いすをたたむと、フットプレートも同時に折りたたまれます。
- カーボン (写真) または プラスチック
- 角度 & 奥行き調整式



スイングアウェイ ハンガー スイングアウェイ フレーム

スイングアウェイ ハンガー

- 100° (70) / 110° (80) ハンガー
- エレベーターング (0 - 90°)
- 切断者用下肢サポート





左右独立型

- 角度調整式 & 横にフリップアップ
- アルミニウム フレームと同色
- コンポジット





フットプレート

- 全て奥行き&角度調整式
- アルミニウム フレームと同色
- パフォーマンス、アルミニウム 小型 & 軽量
- プラスチック製
- カーボン製
- ハイマウントも可能 - 下腿長32cm未満



LOWER LEG LENGTH (LLL): LLL has to be 2,5 cm less than front seat height; all measurements are in cm

☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	



- ・ 下腿長の標準的なクリアランスのため、前座高より最低 2.5cm 短くする必要があります。
- ・ シートスリングから フットレスト上部：後部までの長さを測定

固定式フレーム

FRAME VERSIONS		
(max. user weight 110kg)		
XFF010012	■	Frame FF 100 ° (integrated footrest) (UK 80 °)
XFF010101	■	Inset: Slight (1 cm)
XFF010013	■	Frame FF 92 ° (integrated footrest), performance (UK 88 °)
XFF010101	■	Inset: Slight (1 cm)

ハイブリッドフレーム

(max user weight 140kg)		
XFF010020	■	Frame FF 100 ° (integrated footrest), Dual
XFF010021	■	Frame FF 92 ° (integrated footrest), Dual

オープンフレーム

- 100 ° - フレームより長くなる。
膝の屈曲が少ない方。
- 92 ° - より短いフレーム。
足がより体に近い位置に。



デュアルフレーム

- 2本目のフレームチューブを追加
 - 耐荷重の増加
 - 耐久性の向上



FRAME VERSIONS (measured from front of back post in cm)

XES010015




Frame SA (removable footrest)



COG - 重心位置

CENTRE OF GRAVITY (COG) (measured from front of back post in cm)		(4= very passive 13= very active)					
XFF070703	Adapter, standard	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	
	Chair Adj within Range 4 -13	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12		
XFF070701	Adapter, lightweight (1)	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 11	☐ 12	☐ 13
	Chair Adj within Range 7 - 13						

XFF010411	☐	Axle plate, aluminium, long (full adjustment)
XFF010412	☐	Axle plate, aluminium, short (max. adjustment 1 cm)

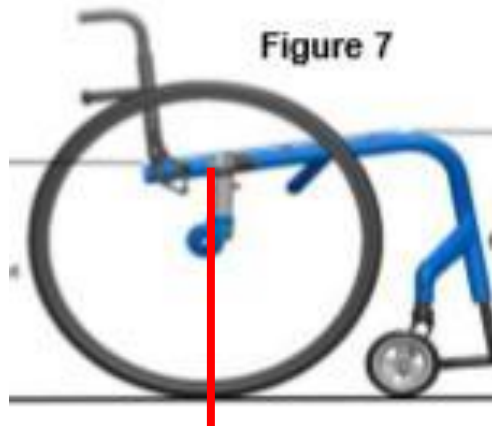

車軸

ロング : 後座高をフルに調整可能
 ショート: 上下1cmのみ 調整可能

ポイント: 機能の変化が見込まれる場合は、ロングを選択



重心位置

バックポスト前方から、
後輪の中央までを測定。

数字が大きくなると＝ひっくり返りやすい

ポイント: 漕ぎやすく、ひっくり返らない適度なバランスにする。

フレーム プロテクション

- ネオプレン素材 – ベルクロで取付




車載時固定用フック

- 全てのフレームに取付可能



標準型 転倒防止

- 左右インサートチューブ

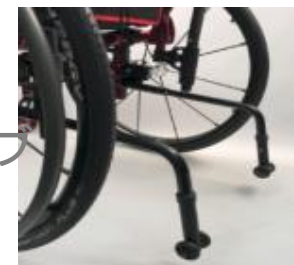

片側スイングアウェイ転倒防止

- 横に跳ね上がる
- 車いすの重量が増え、奥行きが長くなる



ステップチューブ

- 取付け 左側 / 右側



トランジットホイール

- 非常に狭い場所で車いすを動かせる
– お風呂、飛行機



キャスターフォーク

XFF080013	●	Castor fork, Carbotecture®	Colour: Black	Std.
		Colour: ☐ Silver ☐ Orange ☐ Red (2) ☐ Blue (2)		\$ 50.00
XFF080029	●	Castor fork, aluminum 123mm	Colour: Black	Std.
		Colour: ☐ Silver ☐ Orange		\$ 50.00
XFF080008	☐	Castor fork, aluminium, one-arm	Colour: Black	\$ 180.00
		Colour: ☐ Silver ☐ Orange ☐ Red ☐ Blue		\$ 50.00
XFF080007	☐	Castor fork, aluminium, suspension (Frog Legs®), black		\$ 480.00
XFF090093	☐	Fork for power add ons, 123x45 mm	(black)	\$ 60.00



カーボテクチャー:カーボン コンポジット フォーク

- 軽くて強い

アルミニウム

フロッグレッグ サスペンション

- フォークに前後サスペンションを追加
- よりスムーズで、柔らかい乗り心地
- 効率性の低下

電動アダプタータイプ用フォーク

- 電動アダプタータイプのハンドバイクを使用する場合は、このフォークを使用して下さい。



キャスター



ソリッドキャスター ハード

特徴	走行可能距離が長く メンテナンスほぼ不要
このオプションを選ぶ理由	標準、追加費用無し、 メンテナンスほぼ不要
お客様のタイプ	標準的なユーザー



ソリッドキャスター ソフト

特徴	キャスター幅を広げたことで、柔らかい地面にも対応。幅の広いゴムのおかげで乗り心地もより柔らかくなりました。 注意: キャスター内に空気は入っていません	
このオプションを選ぶ理由	メンテナンスほぼ不要、 に良いキャスター	総合的
お客様のタイプ	アクティブ、複数の地形、 長い距離を走行する方	より

マイクロライト(1インチ幅)



特徴	キャスターが回ると光ります
このオプションを選ぶ理由	小さくて幅の狭い、楽しいキャスター
お客様のタイプ	車いすの操作が上手な方

ソリッドキャスター リム:アルミニウム ソフト または ハードからお選び頂けます




特徴	より美しく、より使い心地の良いキャスター アノダイズドカラーが選べます。	
このオプションを選ぶ理由	軽量、メンテナンスほぼ不要	
お客様のタイプ	アクティブ、複数の地形、より長い距離を 走行する方	

キャスターは複数の直径から選択可能: 3-6"
ポイント: オーダーフォーム1ページ目でサイズを選択してください


リアホイール(後輪)

セクション4

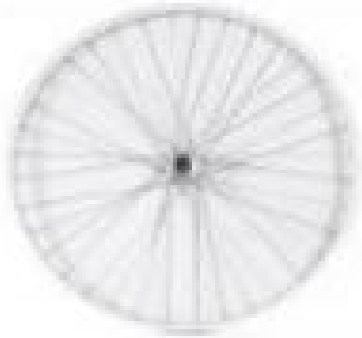

ユニバーサル

メンテナンスほぼ不要を希望する方
クロススポーク

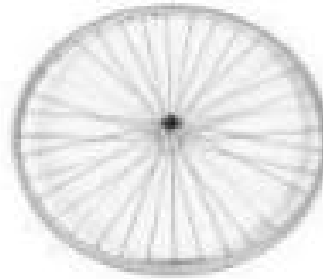

デザイン

丈夫なスポークホイール
ストレートスポーク



軽量スポーク

標準スポークホイール: マグホイールより、サスペンションと回転性が良い
無料オプションで交換している



プロトン

最軽量スポークホイール



Spinergy 18本スポーク
強くて、耐久性に優れている
サスペンションを提供する



Spinergy 12本スポーク
軽量、強い、最も耐久性が高い

リアホイール(後輪) セクション



ドラムブレーキ
減速を制御するのを補助し
ブレーキをロックする



マウンテン
屋外用ホイール
幅広く、大きな直径、溝が多い

タイヤオプション



ライトラン

高圧タイヤ、最小限の溝形、軽量



ダウントウン

高圧タイヤ、より多くの溝形



シュワルベワン

高圧タイヤ、溝の数は少ない
超軽量、パンクしやすい



ノーパンクタイヤ

ソリッド空気なしタイヤ

メンテナンス不要、高耐久性、牽引力の
ための溝。重たいタイヤ。



シュワルベ マラソン プラス
溝のある耐パンク性 高圧タイヤ -
パンクの心配ないパフォーマンス
が必要な方

ハンドリム オプション



ステンレススチール
切り傷に強い



アルミニウム アノダイズド
色付け可能なパーツ
パウダーコーティング、またはパウダーコーティ
ング/ペイント - 色を追加できます！



チタン
強く軽量、傷に強い



スーパーグリップ
すべり止めネオプレンコーティング
グリップ力が増し、耐久性が向上



マックスグリップ
ハンドリムとホイールの間に分厚い
ブリッジがあります。
ポイント: 指の力が弱い人や、握力が
弱い人におすすめです。



ELLIPSE 3R エリプス3R
人間工学に基づいたハンドリムは、より優れた
効率性、溜ぐエネルギー、使いすぎによる
損傷防止に効果的です。



ハンドリム取付け

スーパーナロー(7mm)	ホイールとハンドリムの両方を使用する。狭い環境
ナロー(17 mm)	ホイールとハンドリムの両方を使用する。
ワイド(27mm)	ハンドリムのみを使用

ホイールのリム
とプッシュリム
の間のスペース



ハンドリム カバー

手や指の機能に制限がある方のために、
グリップ力を高めるプラスチックカバー



キャンバー

キャンバー

0、2、4° より選択可能

0° の場合、車いすの幅はとても狭くなります。

4° の場合、車いすの幅は広がります。
しかし非常に回転しやすくなりますが、
出入り口への考慮が必要。

ポイント 2° と 4° は、軽量アダプターと併用

ブレーキオプション



標準
プッシュブレーキ



ニーレバー
押してロック、ブレーキをかけるのが楽



コンパクト
漕ぐ時に邪魔にならない
軽量 指の強さが必要



コンパクト - 軽量
コンパクトと同様だが、フレーム
に直付けなので、さらに重量を削
減。

ポイント: ホイールポジションの
調整機能が少ない

スポークカード



24インチのみ選択可能

アクセサリ



QUICKIE ツールキット
必要な調整を行う工具

ACCESSORIES	
XFF090000	● Tool kit
XFF090025	□ Air pump
XFF090024	□ High pressure pump (0 - 11 bar)
XFF090020	□ Net bag
XFF090030	□ Back pack
XFF090019	□ Caddy, flip-up bracket for bags (not with platform footplates highmounted or auto-folding)
XFF090026	□ Mobile phone pocket

ネットバッグ
フレームの下収納 - ネット素材
ポイント: 重たい物の収納には向きません



QUICKIE バックパック
プッシュハンドル付近にループを通して使用



携帯電話ポケット
フロントフレームに
ベルクロで装着
ポイント: 大きなフリップ型
携帯電話には不向き



キャディ
足の前側にバッグを載せる
不使用時はフリップアップ
ポイント: 軽くて、薄い物への
使用



06 Sonnengelb (RAL 1010)	24 Tutti Frutti Orange	37 Marsrot	21 Rubinrot (RAL 3003)	22 Brillantrot
23 Mattrot	41 Flamingo-Glitzer	33 Pink	19 Brillantviolett	20 Mattviolett
36 Cyanmetallic	14 Blau	15 Brillantmarine	16 Mattmarine	43 Azurblau
35 Himmelblau	40 Kiwi	07 Brillantlimone	08 Mattlimone	
01 Weiss (RAL 9010)	32 Signal Weiß	02 Brillantsilber	03 Mattsilber	04 Silbermetallic
42 Mattanthrazit	39 Cappuccino	34 Dark Chocolate Metallic	28 Platinmetallic	27 Graphitmetallic
26 Hammerschlag	29 Schwarz (RAL 9005)	31 Mattschwarz		

