

# Q50 R carbon

Res smidigare med en av världens  
lättaste hopfällbara elrullstolar i kolfiber.  
Vikt från endast 14,5 kg.







## LÅNGRESA, SOLSEMESTER ELLER DEN DAGLIGA PENDLINGEN.

Oavsett din destination är **Q50 R Carbon** den perfekta respartnern. Den är tillverkad av högkvalitativ kolfiber och med en vikt på bara **14,5 kg** (utan batterier) är den lätt att lyfta. Den fälls ihop på några sekunder och är sedan smidig att förvara även i små utrymmen, du behöver inte ens ta av batteriet.

Med utökad möjlighet att ta med ett extra batteri kan du ta dig upp till **24 km** och med ett val mellan 5 olika accentfärger gör du det dessutom med stil.



Scanna QR-koden för att se en video om **Q50 R Carbon**.



\* Enskilda flygbolag har olika krav på transport av produkter med litiumjonbatterier. Innan du arrangerar en flygresa med rullstolen, vänligen bekräfta med ditt flygbolag eller transportör att de accepterar batteridrivna fordon enligt UN-klassificering: UN3171. Se bruksanvisning för ytterligare information.

## DESIGN

# KOLFIBER. LÄTT OCH OTROLIGT STARKT.

Faktum är att några av de lättaste sakerna i världen är gjorda av kolfiber, inklusive Q50 R Carbon - en av världens lättaste hopfällbara elrullstolar. Med en vikt på bara 14,5 kg flexar kolfiberramen naturligt över ojämna ytor, vilket ger unika stötdämpande egenskaper och levererar en av de smidigaste och mest effektiva åkturerna någonsin.

## 136 KG

**MAXIMAL BRUKARVIKT**

Med bara 14,5 kg väger Q50 R Carbon mindre än andra hopfällbara elrullstolar i kolfiber och tack vare sin otroligt starka kolfiberdesign kan den dessutom klara en användarvikt på upp till **136 kg**.





## TRANSPORT

# TAR LITEN PLATS, LÄTT ATT TA MED, OAVSETT VART DU SKA.

Q50 R Carbon blir mycket kompakt när den är hopfälld och får plats i de flesta utrymmen. Smidig på tåget, flygplanet eller vid förvaring i bilens bagageutrymme – den är perfekt för att utforska nya platser. Med sin låga vikt är den också enkel att hantera.



### ENKEL HOPFÄLLNING

Det finns inga besvärliga mekanismer - (1) fäll bara upp klämman baktill och (2) tryck ryggstödet nedåt för att fälla ihop Q50 R Carbon. Du behöver inte ens ta bort batteriet. **Hur enkelt som helst!**

### TRANSPORTREM SOM STANDARD

För att underlätta när man lyfter Q50 R Carbon är den utrustad med en transportrem som håller elrullstolen tätt ihopvikt hela tiden.



570 mm  
BREDD

370 mm  
LÄNGD

767 mm  
HÖJD



### AVTAGBART LITIJONBATTERI

Med en vikt på bara **1,4 kg**, och med eget laddningsuttag är det enkelt att ta av batteriet och ladda det separat från elrullstolen.

### ELDRIVNA ALTERNATIV

## TA DIG LÄNGRE MED EN UTÖKAD RÄCKVIDD PÅ 24 KM.

Njut av en räckvidd på upp till 12 km med Q50 R Carbons 10Ah litiumjonbatteri. Om du behöver ta dig längre än så låter den extra batteriplatsen dig ta med dig ett andra batteri (tillval) på resan, vilket fördubblar din räckvidd till upp till 24 km!

### GÅR ATT LADDA ÄVEN I HOPFÄLLT LÄGE

Eftersom du inte behöver ta bort batteriet för att fälla ihop din Q50 R Carbon, kan den även bekvämt laddas via uttaget på kontrollenheten i hopfällt läge.







## IATA GODKÄND\* FÖR FLYGTRANSPORTER

Planerar du en flygresa? Q50 R Carbons litiumjonbatteri är IATA-godkänd\* (International Air Transport Association) för transport i flygplan.

\* Enskilda flygbolag har olika krav på transport av produkter med litiumjonbatterier. Innan du arrangerar en flygresa med rullstolen, vänligen bekräfta med ditt flygbolag eller transportör att de accepterar batteridrivna fordon enligt UN-klassificering: UN3171. Se bruksanvisning för ytterligare information.



## SYNLIGHET

Med mycket ljusstark belysning syns du både på dagen och på natten. Belysningen aktiveras när din Q50 R Carbon är i rörelse och ökar din synlighet och gör därmed andra din omgivning medvetna om dig.

## PRESTANDA

# ... KOMPAKT ÄVEN UTFÄLLD.

Kompakt och smidig är Q50 R Carbon redo för de flesta situationer. Oavsett om det är en smal korridor, ett livligt köpcentrum eller att manövrera i kollektivtrafiken, har Q50 R Carbon kraften att hantera vardagen.

## 800 mm

### VÄNDRADIE

Till skillnad från en scooter har Q50 R Carbon en liten svängradie på bara **800 mm**, vilket gör den idealisk för inomhusmiljöer. Sväng enkelt i trånga korridorer, kök och andra begränsade utrymmen utan att behöva göra komplicerade manövrer.

## 570 mm

### SMAL

Med Q50 R behöver du inte oroa dig så mycket för att köra in i saker i ditt hem. Eftersom den bara är 570 mm bred kan du lätt köra genom smala dörröppningar och förflytta dig inomhus.






## BEKVÄMT

Den ultralätta ryggstödsklädseln är inte bara bekväm, den har också ett luftgenomsläppligt överdrag som låter kroppsvärmen passera igenom och därmed håller dig torr och sval på de längre resorna.

Den **300 mm** tjocka skumdynan gör det också extra bekvämt även på de längre åkturerna.

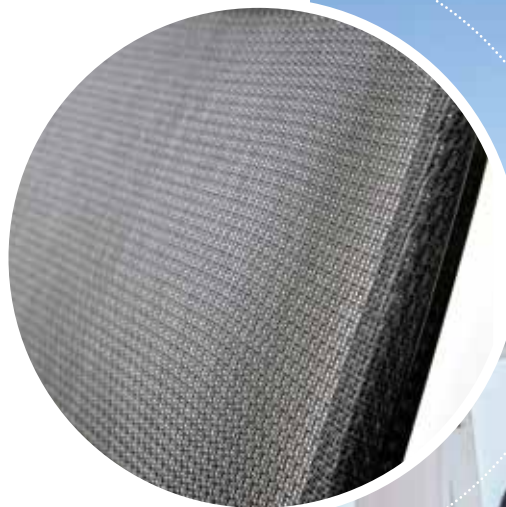

## ENKLA ÖVERFÖRFLYTTNINGAR

Genom att fälla upp armstöden blir det smidigt att göra överförflyttningar in och ut ur din Q50 R Carbon. Föredrar du att göra stående överförflyttningar? Fäll då bara upp det centermonterade fotstödet så får du allt utrymme du behöver.



**PÅLITLIG**

# LÅG VIKT, HÖG TILLFÖRLITLIGHET.

Vi har designat elrullstolar i över 40 år och arbetat tillsammans med tillverkare i världsklass för att leverera gedigna och välbyggda elrullstolar som har de allra bästa köregenskaperna, motorerna, räckvidden och tillförlitligheten som andra helt enkelt inte kan matcha.

## NVR2 BLDC STYRENHET FÖR DEN BORSTLÖSA MOTORN

Den etablerade och pålitliga styrenheten från världsledande Curtiss-Wright Corporation är intuitiv att använda, svarar exakt på dina kommandon och håller även reda på återstående batteritid.



## 250W HÖGEFFKTIVA BORSTLÖSA MOTORER

Dessa högpresterande motorer, som levereras av Linix (en världsledande motortillverkare), ger den kraft och tillförlitlighet du behöver i vardagen (inklusive hindertagning på upp till 40 mm).





STIL

## VÄLJ FÄRG.

Med sin smäckra kolfiberram är Q50 R Carbon en riktigt elegant elrullstol. Välj dessutom mellan 5 olika accentfärger för att få ett mer personligt utseende.



# TEKNISK SPECIFIKATION

<b>Mått (L/B/H)</b>	923 mm / 570 mm / 928 mm
<b>Mått hopfälld (L/B/H)</b>	370 mm / 570 mm / 767 mm
<b>Sittdjup</b>	420 mm
<b>Sittbredd</b>	440 mm
<b>Ryggstödshöjd</b>	464 mm
<b>Max. hindertagning</b>	40 mm
<b>Max. räckvidd (ISO 7176-4)</b>	12 km (24 km med extra batteri)
<b>Rullstolens vikt (utan batteri)</b>	14.5 kg
<b>Batteriets vikt</b>	1.4 kg
<b>Max. brukarvikt</b>	136 kg
<b>Drivhjul</b>	8"
<b>Länkhjul</b>	6.5"
<b>Max. säker lutning</b>	6°
<b>Vändradie</b>	800 mm
<b>Max. hastighet</b>	6 km/h
<b>Batteri</b>	24V, 10Ah Litiumjon
<b>Elektronik</b>	Curtiss Wright nVR2 Borstlös kontroll
<b>Motor</b>	250W Borstlös motor
<b>Transport utan brukare</b>	Fäst rullstolen ordentligt i fordonet (t.ex en bil eller flygplan)
<b>Avsett bruk och miljö</b>	För personer som inte kan gå eller som har begränsad rörlighet, för inomhus och utomhus bruk. Rullstolstyp klass A

Sunrise Medical bryr sig om din säkerhet. Vänligen läs din bruksanvisning för säkra driftsinstruktioner och riktlinjer för underhåll.

Tillverkare: Zhejiang Innuovo Rehabilitation, Devices Co. Ltd, No. 1896 Industry Road, Hengdian Movie Zone, Dongyang, Zhejiang, Kina.

I linje med pågående produktförbättringar förbehåller sig Innuovo rätten att göra ändringar när som helst och utan föregående meddelande. Alla ändringar av information som tillhandahålls för befintliga brukare ska dock tydligt kommuniceras om de är säkerhetskritiska. Alla funktioner och alternativ är inte kompatibla med alla konfigurationer. Alla mått är ungefärliga och kan komma att ändras. Om du är synskadad kan detta dokument ses i PDF-format på [www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

