

PODNOŚNIKI

Sunlift



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.


Sunlift



Linia podnośników SUNLIFT składa się z 4 modeli: MICRO, MINI (G130), MIDI (G150) i MAJOR (G175). Wszystkie modele charakteryzują się wyjątkową sztywnością dzięki zaawansowanej konstrukcji wszystkich ruchomych połączeń, eliminując luz i zapewniając poczucie sztywności przy pełnym obciążeniu podnośnika. Siłowniki wyposażone są w podwójny przycisk zabezpieczający, wskaźnik świetlny poziomu naładowania akumulatora oraz ostrzeżenie akustyczne przed całkowitym rozładowaniem. Pojemność baterii (2,9 Amph) zapewnia czas użytkowania o 50% większy niż zwykle, umożliwiając do 60 podwójnych cykli (w górę i w dół).

Podnośniki Sunlift Range

Wymiary

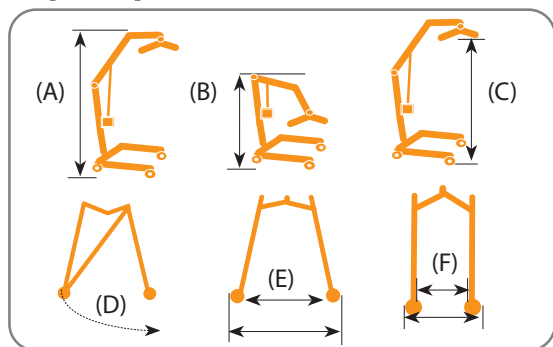

	SUNLIFT Micro	SUNLIFT Mini
Bezpieczna waga użytkownika	130 kg	130 kg
Maks. długość całkowita (z kołami w pozycji rozchylonej)	1.110 mm	1.130 mm
Min długość całkowita (z kołami w pozycji wyjściowej)	970 mm	1.065 mm
Maks. szerokość z podstawą zamkniętą	545 mm	540 mm
Maks. wysokość (bez obciążenia) (A)	1.725 mm	1.870 mm
Min. wysokość (bez obciążenia) (B)	1.130 mm	1.280 mm
Maks. wysokość wysięgnika (bez obciążenia) (C)	1.483 mm	1.628 mm
Min. wysokość wysięgnika (bez obciążenia)	460 mm	513 mm
Promień skrętu z otwartymi nogami (D)	1.130 mm	1.240 mm
Pozycja otwarta: (E) Maks. szerokość (zewnętrzna) Maks. szerokość (wewnętrzna)	870 mm 740 mm	940 mm 810 mm
Pozycja zamknięta: (F) Maks. szerokość (zewnętrzna) Maks. szerokość (wewnętrzna)	545 mm 465 mm	540 mm 470 mm
Całkowita długość podstawy	100 mm	100 mm
Prześwit	20 mm	20 mm
Koła przednie	75 mm	75 mm
Koła tylne	100 mm	100 mm
Waga montażowa masztu, wysięgnika i podzespołów elektrycznych	16,6 kg	17,54 kg
Waga montażowa podstawy	13,34 kg	13,6 kg
Waga akumulatora	2,76 kg	2,76 kg



Właściwości techniczne (wspólne dla 4 modeli)

Akumulatory: 2 x 12v żelowe

Pojemność baterii: 2,9 Amph

Wejście ładowarki: 230 v / 50 Hz 0.12 A

Wyjście ładowarki: 28 v 0.5 Amph

SUNLIFT Midi

150 kg

1.225 mm

1.160 mm

640 mm

1.940 mm

1.285 mm

1.688 mm

555 mm

1.380 mm

1.075 mm

980 mm

640 mm

540 mm

100 mm

20 mm

75 mm

100 mm

17,6 kg

15,1 kg

2,76 kg

SUNLIFT Major

175 kg

1.340 mm

1.275 mm

650 mm

2.006 mm

1.435 mm

1.813 mm

575 mm

1.500 mm

1.185 mm

1.105 mm

650 mm

520 mm

110 mm

15 mm

75 mm

100 mm

22,75 kg

18,1 kg

2,76 kg


Wspólne cechy



Nogi można otwierać i zamykać, naciskając ergonomiczny pedał.



Pilot sklasyfikowany jako IPX4 (wodoodporny) i ergonomiczny kształt.

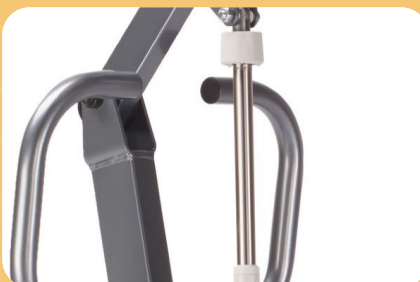

Ergonomiczne uchwyty do pchania umożliwiające ustawienie łuki pod kątem 90° dla łatwiejszej obsługi.



Temblaki

Temblaki



	Temblak Quick fit	Temblak Quick fit deluxe	Temblak Access
Zalecane użycie	Dla 85% pacjentów	Dla 95% pacjentów	Dla łatwiejszego dostępu do toalety
Materiał	Poliester, miękki lub siatkowy	Miękki	Poliester
Rozmiary	Średni lub duży	Średni	Średni
Poziom niezależności *	1 i 2	1 i 2	2 i 3
Inne	-	Z podparciem głowy lub bez	-

Temblak Long seat	
Zalecane użycie	Dla amputantów
Materiał	Poliester
Rozmiary	Średni
Poziom niezależności *	1 i 2
Inne	-



Tabela doboru temblaka

	Toaleta	Z krzesła toaletowego do wanny	Z wózka do wózka	Z wózka do łóżka	Z podłogi do łóżka	Z wózka na krzesło toaletowe
Temblak Quick fit	■	■	■	■	■	
Temblak Quick fit deluxe	■	■	■	■	■	
Temblak Access	■		■			■
Temblak Long seat	■			■	■	

*Poziom niezależności

1 = Pełna zależność

7 = Pełna niezależność



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.