

歴史



1988

グレッグ・イデンとラッセル・シムズによりRGKが設立される (元バスケットボール選手)



2015

RGKがサンライズメディカル傘下に含まれる

セールズポイント/強み

日常とスポーツモデル

**DAILY AND
SPORT RANGES**



完全オーダーメイド


**MADE TO
MEASURE**




顧客体験

**CUSTOMER
EXPERIENCE**



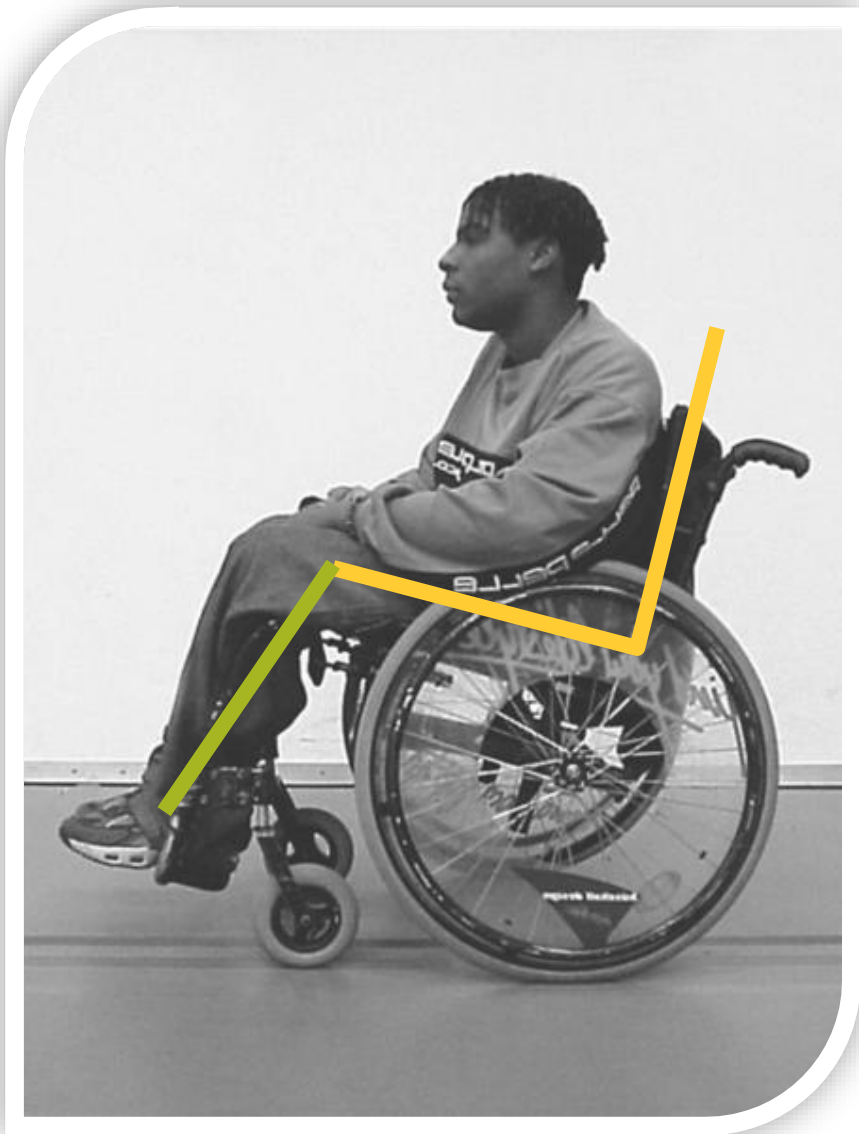

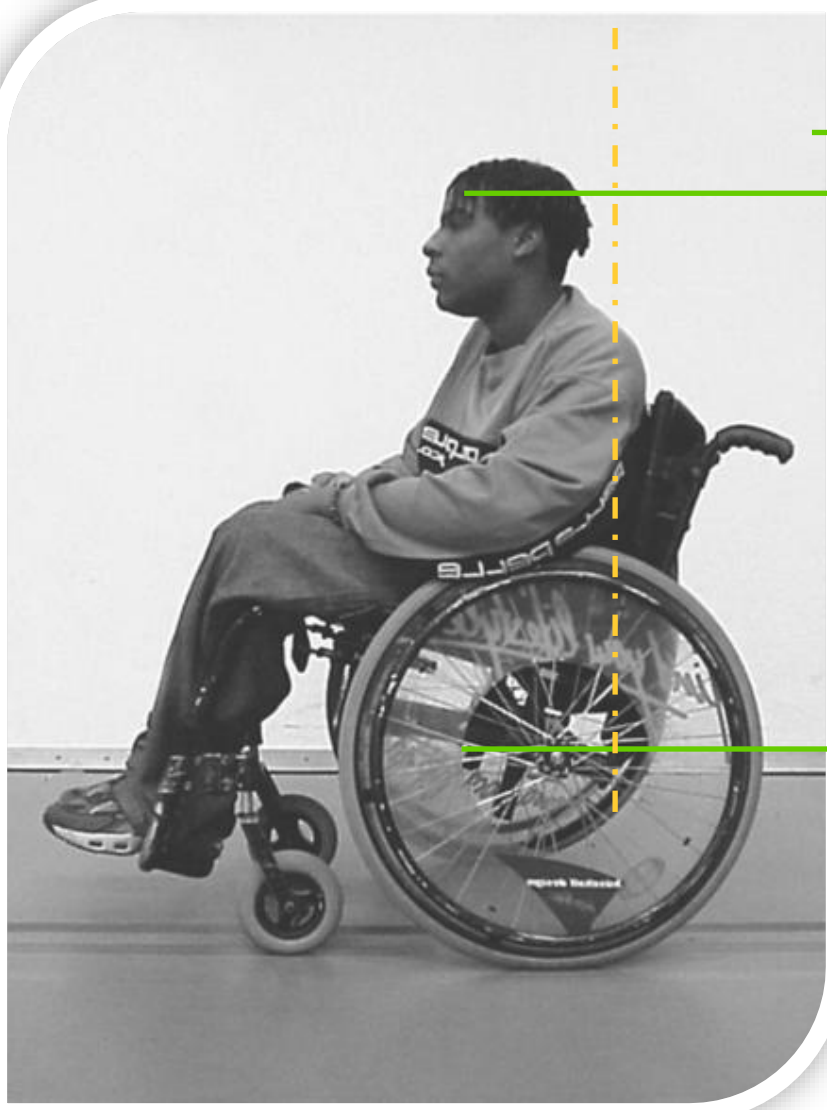

日常使用の商品ライナップ



									
	TIGA	TIGA SLUB	TIGA FX	TIGA jr	Hi-Lite	OCTANE	OCTANE SLUB	OCTANE FX	VEYPR
Material	7020 Series Aluminium	7020 Series Aluminium	7020 Series Aluminium	7020 Series Aluminium	Titanium Grade 5	Titanium Grade 9	Titanium Grade 9	Titanium Grade 9	Carbon fibre
Max User Weight	125kg	110kg	110kg	75kg	125kg	110kg	110kg	110kg	110kg
Product Weight (transport)	7.7kg	<4kg*	8.6kg	7.5kg	8.6kg	7.6kg	<4kg*	5.5kg	3.3kg
Bariatric Upgrade (for users over max weight)	✓				✓	✓			
Key Feature									
	Everyday Aluminium	Ultra-Lightweight	Fully-Folding	Paediatric chair	Everyday Titanium	Lightweight Titanium	Ultra-Lightweight	Fully-Folding	Carbon fibre

truly made to measure
Carbon fibre

Warranty**

DISCLAIMER:

Please be advised that prices will vary depending on your individual measurements and how the chair is customised or modified.

● - Yes
— - No


*Less than 4kg without wheels and cushion

**Frame: 5 years Parts: 1Year


~~Price is a rough estimate based on previous orders

~Base Price is the minimum specification of any given chair

フレームデザインオプション

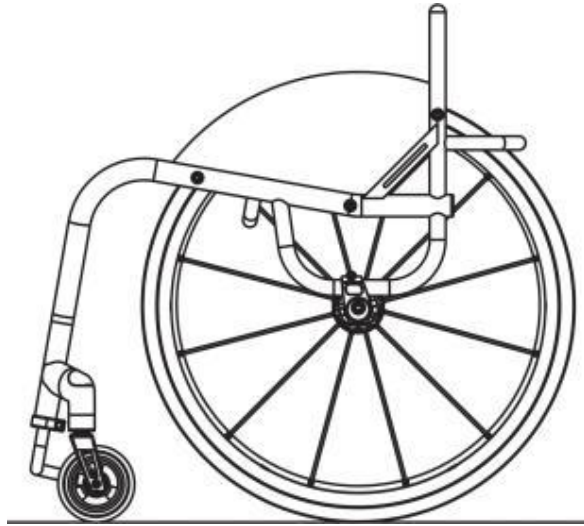

XA070 - オープン フレーム デザイン
下部フレームとキャストアーム間を接続するチューブの無い、シンプルでミニマルなフレーム設計

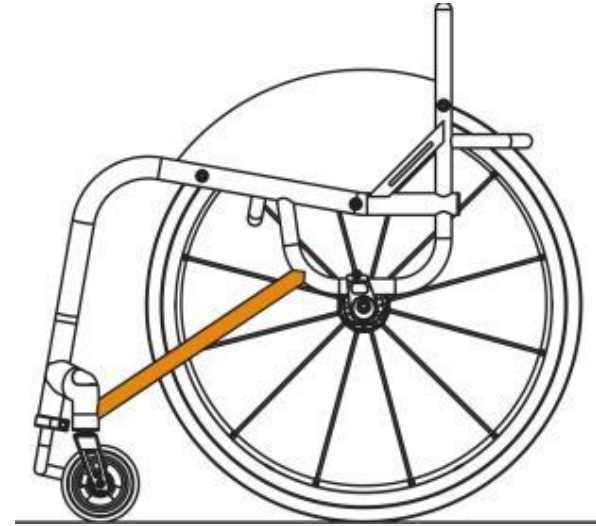


XA080 - クローズ フレーム デザイン
オレンジで表示されている追加チューブのあるフレーム

機能	全体フレーム重量と大きさを最小限に抑えることが可能となる
オプション選択理由	車へ持ち込みの補助や輸送外寸の最小化
利用者	アクティブで自信ある利用者


機能	フレーム強度と安定性を提供
オプション選択理由	車椅子乗車時の安全性や頑丈性を提供し、安心感が持てる
利用者	より固く、強度の高い車椅子を望まれるアクティブな利用者

メインフレーム寸法

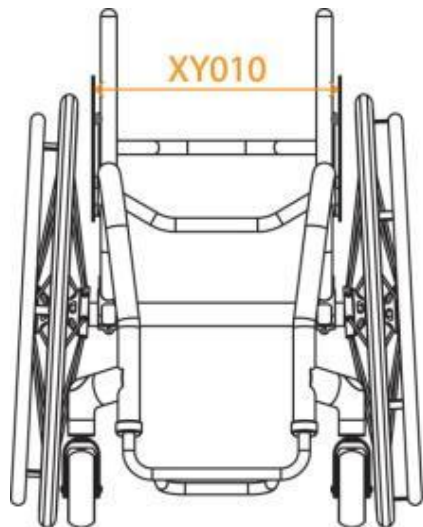


XY010 - シート幅 (サイドガードの内側から内側まで)
左右のサイドガードの内側から内側を測ります。

留意事項: サイドガードのない場合、シートチューブの外側と対側の外側間を測ります。

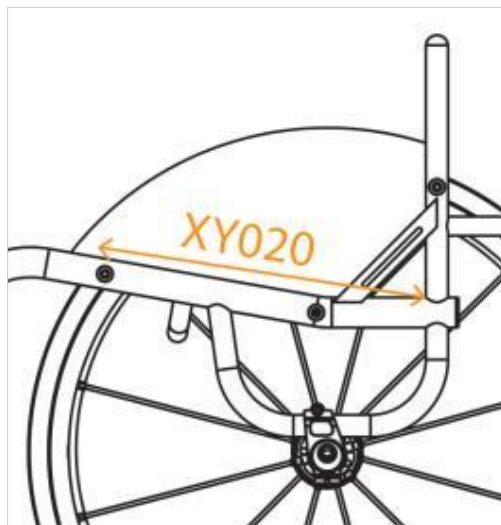

XY020 - シート奥行バックポスト前方からシートスリング前方までを測ります。

ヒント: 通常、クッションの奥行に値する

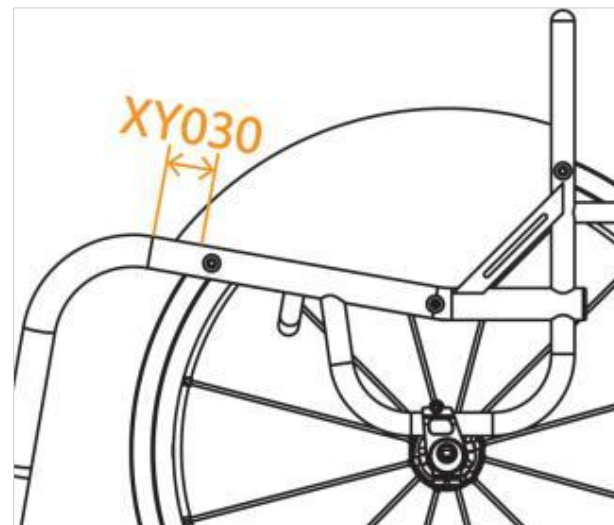

XY030 - 延長シートフレーム(レッグサポートとグリップ感の増加)

シートスリング前方からフレームが下方に曲がり始める位置までを測ります。

留意事項: グリップの為であり、移乗時の安定性やサポートに用いられる。

Seat Width

Measurement to be taken from the inside to inside of sideguard

シート幅

左右のサイドガードの内側から内側を測ります



Seat Length

Measurement to be taken from the front of the backrest tube to the front of the seat sling.

シート奥行き

バックポスト前方からシートスリング前方までを測ります



Extra Seat Length

Measurement to be taken from the front of the seat sling to the point where the frame begins to bend downwards.

シートフレームの延長

シートスリング前方からフレームが下方に曲がり始める位置までを測ります



FEATURE 3 | エルゴノミックシート

臨床ガイドライン11

臨床ガイドラインでは必要なシーティング姿勢とその安定化はバランスとスタビリティと並行して得られることが推奨されている。

エルゴノミックシートとは？

エルゴノミックシートはシート後方で平坦な部分を設けることで利用者の骨盤を配置させることができます（図5参照）。エルゴノミックシートの規定値はシートフレームの平坦な部分の長さを指定します。

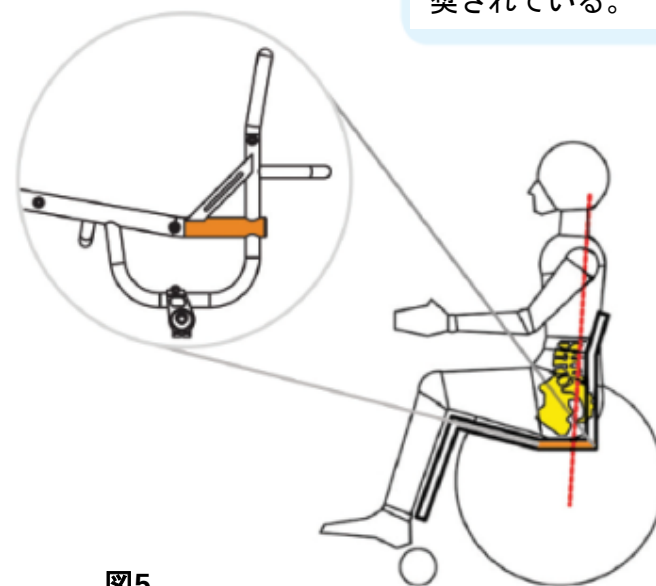


図5

エルゴノミックシートの選択理由とは？

姿勢とバランスの改善が必要な利用者におすすめなオプションです。骨盤を配置させることで必要な快適性だけでなく、バランスと姿勢を提供し、結果としてパフォーマンス向上が得られます。骨盤の最適な配置は圧分散を向上させ、長・短期的な健康被害リスクを軽減します。


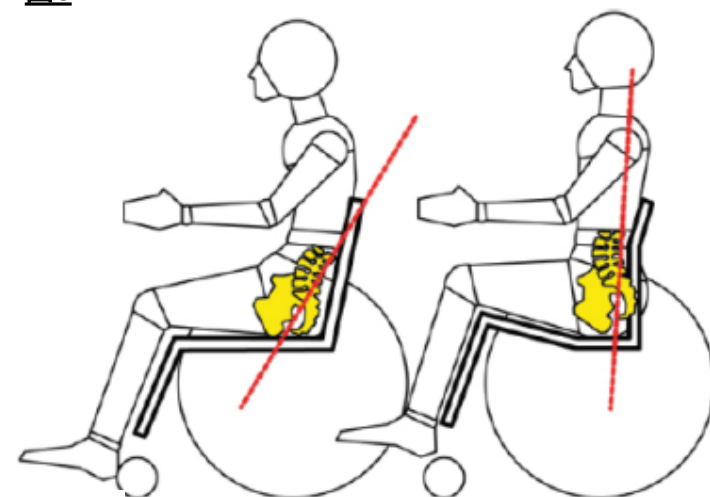



図6

メインフレーム寸法

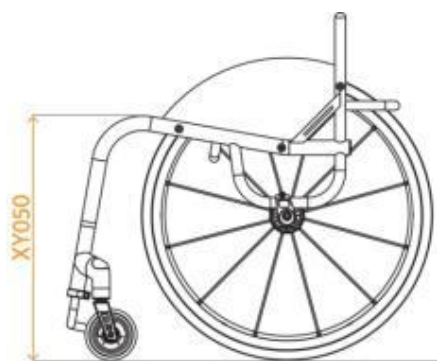


XY050 – 前座高

シートフレーム最高点から床まで
を測ります

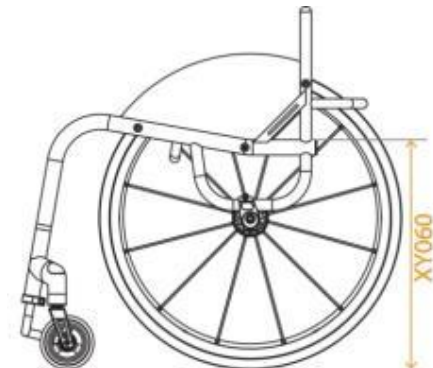

XY060 – 後座高

シート上部から床までを測ります

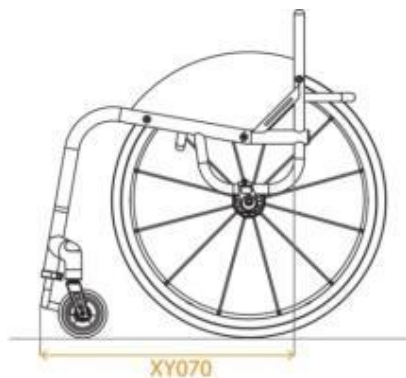

XY070 – フレーム長

フレーム前方からバックポスト前方まで
を測ります



XA020 – エルゴノミック シート


バックポスト前方から曲がり始
める位置まで測ります

Front Frame Height

Measurement to be taken from the top most point of the seat frame to the floor.

前座高

シートフレーム最高点から床までを測ります

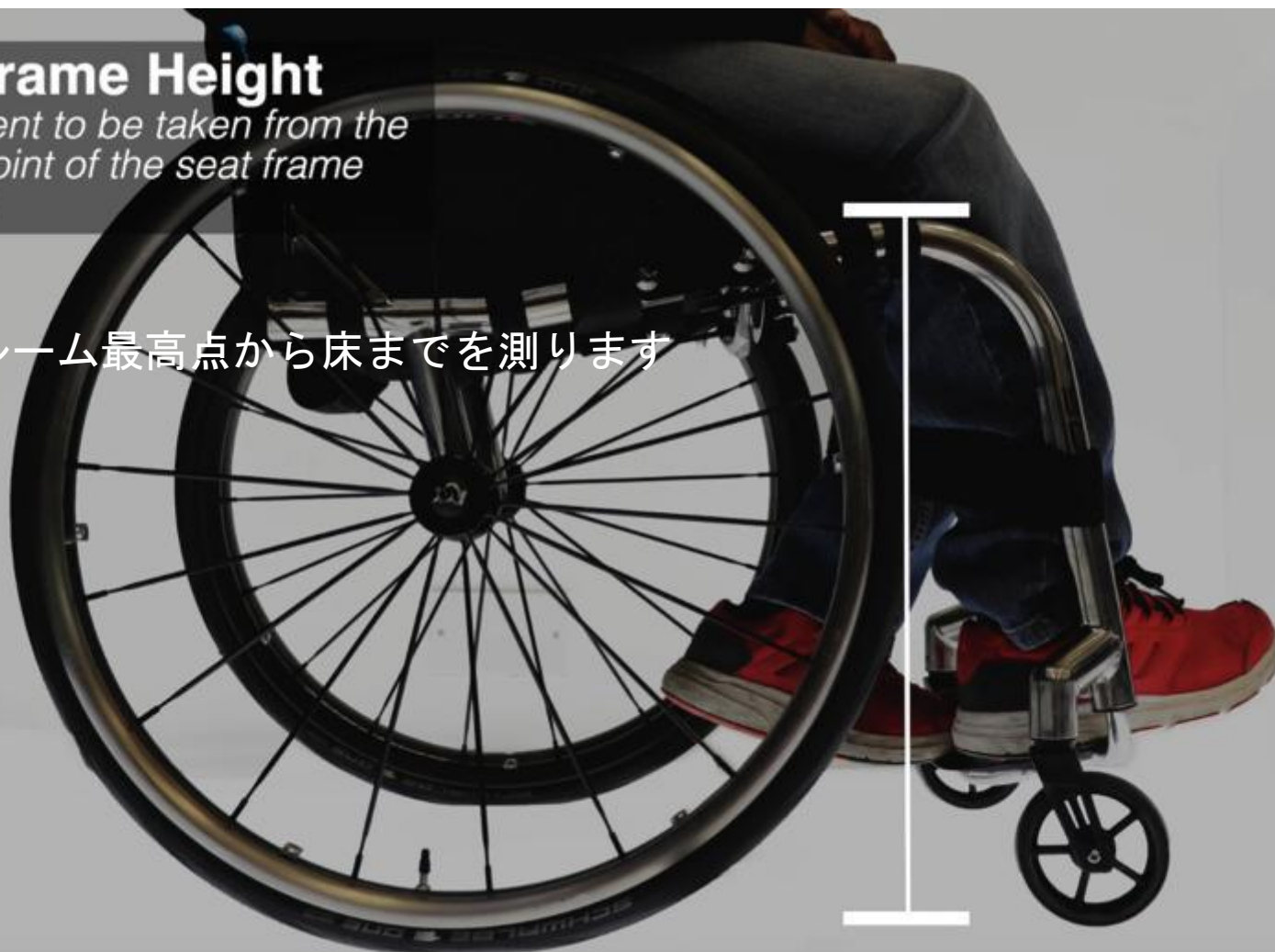

Rear Frame Height

Measurement to be taken from the top of the seat to the floor.

後座高

シート上部から床までを測ります



Frame Length

Measurement to be taken from the front of the frame to the front of the backrest post.

フレーム奥行き
フレーム前方からバックポスト前方
までを測ります



FEATURE 5 | フレーム前方のデザイン

臨床ガイドライン7

臨床ガイドラインでは高い筋力の脊髄損傷でマニュアル車椅子利用者は最大限に最軽量になる材質を用いてカスタム化することが推奨されている。

フロントフレームデザインとは？

フットレストまで続くフロントフレームパイプのポジションと設計であり、下肢と足部の肢位を決定します。（図9参照）。個々の寸法は下肢や足部の配置される空間を決定します。利用者のニーズに合わせて個々に調整することが可能です。


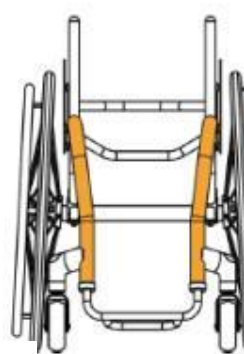


図9

パラレルテーパー

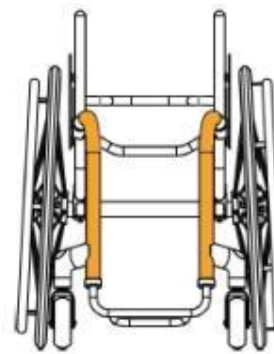

シートテーパー

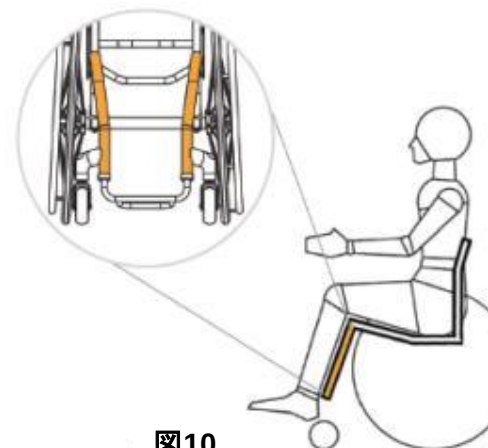


図10

フロントフレームデザインが必要なケースは？

車椅子利用者が下肢のサポートやポジショニング介入されることが望ましいと考えられており、フロントフレームを調整することで最適な下肢位置に配置することができ快適性と安定性を提供します。（図11参照）。快適さを感じて安定することで付随して頻回に見受けられる人体への悪影響や慢性痛の出現を予防することが出来ます。




Fig 11

Legs and feet unsupported




Legs and feet supported

フロント フレーム オプション

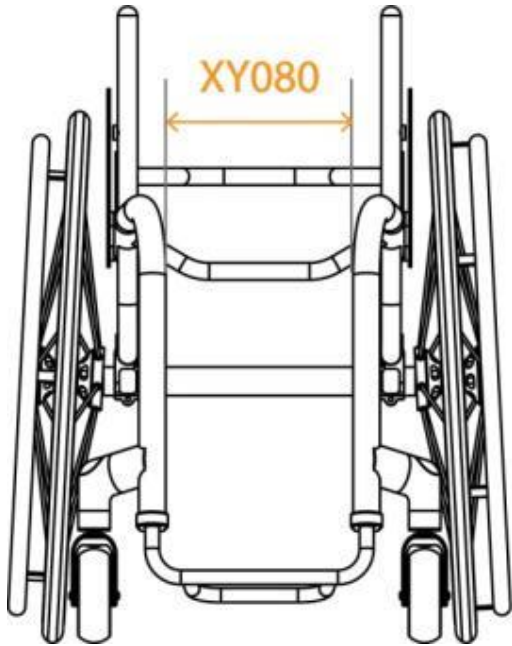


XY080 – フロント フレーム テーパー デザイン

左右のフロントフレームチューブの内側から内側を測ります

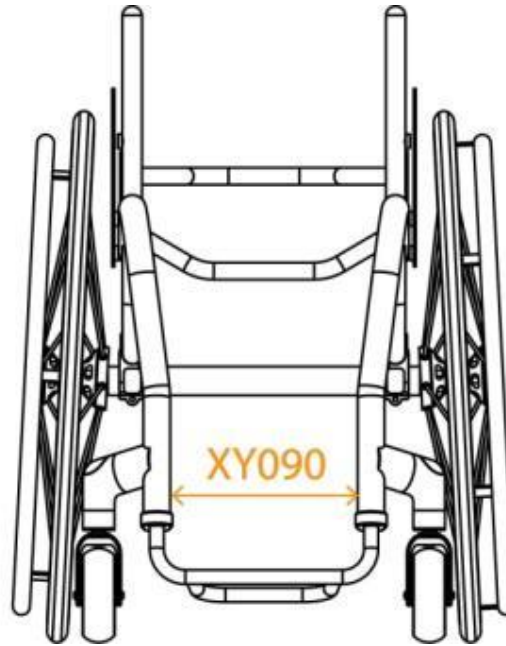


XY090 – パラレル テーパー デザイン

左右のフロントフレーム最下部近くのチューブの内側から内側を測ります

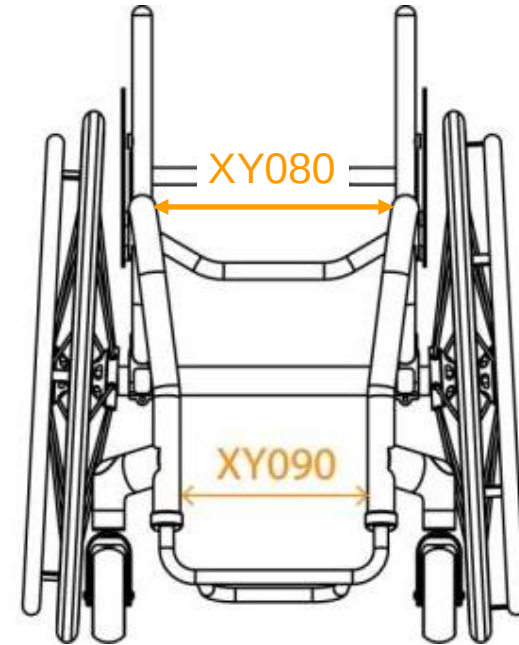

留意: XY080とXY090がそれぞれ選択された場合、シートテーパー寸法はフレームが曲がる箇所の中央の値になります。


フットレスト デザインと測定

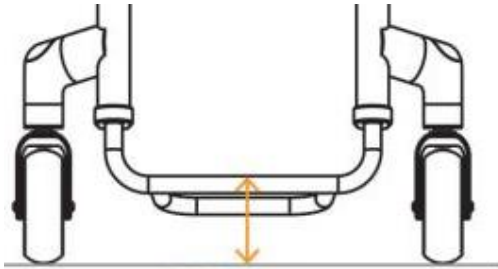

XY100

XY100 – ラウンド デザイン
曲線設計は最大強度が得られる。


フットプレート上部から床までを
測ります

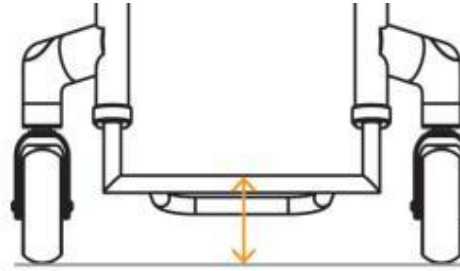

XY105


XY105 – スクエア デザイン
四角の設計は最大幅と上方調整の増
加が得られる

フットプレート上部から床までを
測ります

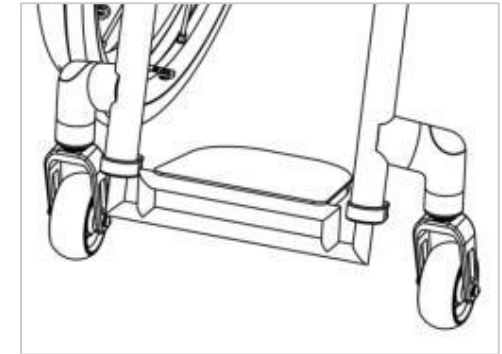

**XB200 – フットプレートライザー
システム(XB010, XB080, XB150のみ)**
より高い位置にフットサポートを置きた
い場合や調整量を増やしたい場合

ヒント: ラウンドもしくはスクエアデ
ザインのいずれかを選択の上値を記入す
る。オーダーフォーム記載の表に示され
た高さよりも高い値を求める場合は
XB200にしるしを入れる。

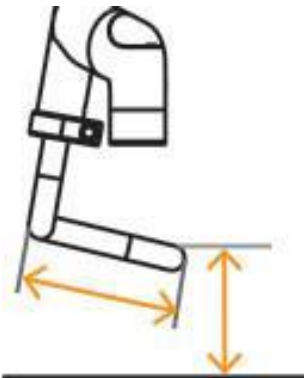

床からフットレスト後方の高さ
フットプレート後方上部から床ま
でを測ります

床からフットレストの高さ
フットプレート前方上部から床ま
でを測ります

フットレストスタイルのオプション

標準仕様



XB010 -高さ調整式 チューブラー
アルミニウム（未選択時標準）

軽量で +/- 25mm の高さ調整可能

留意事項: a 標準フットレストにプレートは取付可能。rivotにより取付される。

フットレスト有料オプション



XB070 -高さ&角度 調整式 アル
ミニウム フットレスト
+/- 25mmの高さと角度調整可能



TGAXB080 フレーム溶接式
チューブラー フットレスト
(高さ調整不可)
調整機能ないが剛性高い
アクティブで経験値の高い利用者



XB030 -高さ&角度調整式 フ
リップアップ (クロスフレームのみ)
高さと角度調整可能で、両側が独立
して開閉可能



XB150 -高さ調整式 高耐久性
チューブラー フットレスト
アタッチメントで耐久性を増加されたア
クティブ利用者向けのフットレスト

フットレスト スタイル のオプション

フットレスト有料オプション



XB030 -高さ&角度調整式
リップアップ (クローズ フレームのみ)
高さ&角度調整可能で、両側が独立
して開閉可能


フットレスト カバー オプション



XB050 – フットレスト カバー カーボンファイバー
(XB070 & XB030併用不可)



XB170 – フットレスト カバー アルミニウム
(XB070 & XB030併用不可)

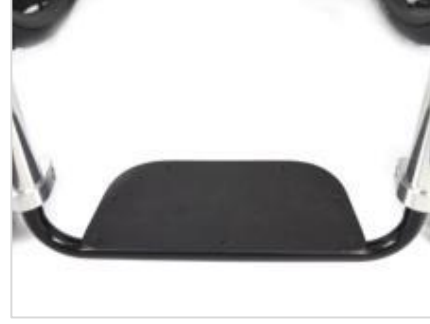

XB040 – フットレスト カバー プラスチック
(XB070 & XB030 併用不可)



XB160 – どのカバーにも適応可能なすべり止めテープ
使用時に滑り落ちるのを予防

キャスターホイール オプション

3" (75mm) 半径の種類:



XC150 - 3"x 1.4" フロッグレッグ キャスター、
アルミニウム ホイール
(シルバーハブ&黒ウレタンタイヤ)

4" (100mm) 半径の種類:



標準キャスター
XC060 - 4"x1.3"キャスター、
ソフトロール黒

XC110 - 4"x1"フロッグレッグ キャスター、
アルミニウム ホイール
(シルバーハブ&黒ウレタンタイヤ)

キャスターホイール オプション

キャスターホイールカラー
オプション:



XC130 - 4"x1.4"フロッグレッグ キャスター、
アルミニウムホイール ウレタンタイヤ
(シルバーハブ&黒タイヤ) (標準)



ゴールドハブ&
黒タイヤ



パープルハブ&
黒タイヤ



レッドハブ&
黒タイヤ



ブルーハブ&
黒タイヤ



グリーンハブ&
黒タイヤ



ブラックハブ&
ブルータイヤ



ブラックハブ&
黒タイヤ



シルバーハブ&
レッドタイヤ



シルバーハブ&
ブルータイヤ



ブラックハブ&
レッドタイヤ

キャスターホイール オプション

5" (125mm) 半径の種類:



標準キャスター
XC070 - 5"x1.3" キャスター、
ソフトロール黒



XC100 - 5"x1" 空気入りキャスター、
アルミニウム ホイール (グレー)



XC120 - 5"x1" フロッグレッグ キャスター、
アルミニウム ホイール
(シルバーハブ&黒ウレタンタイヤ)



XC140 - 5"x1.4" フロッグレッグ キャスター、
アルミニウム ホイール
(シルバーハブ&黒ウレタンタイヤ)

キャスターフォークオプション/キャスター幅

標準キャスターフォーク




XC190低床キャスターフォーク
(未選択時 標準)
(ブラックまたはシルバー)

キャスターフォーク有料オプション




XC210 - フロッグレグ サスペン
ション キャスターフォーク
(ブラックまたはシルバー)

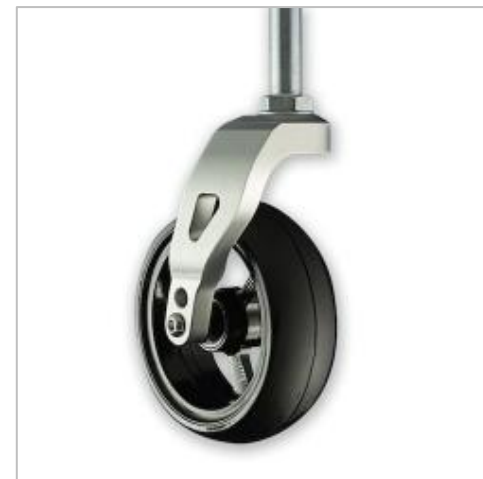

XC220 - フロッグレグ サスペン
ション キャスターフォークシングル
(片側)
(ブラックまたはシルバー)

XY330 - キャスター間の幅

両側のキャスターの中央点を結ぶ距離

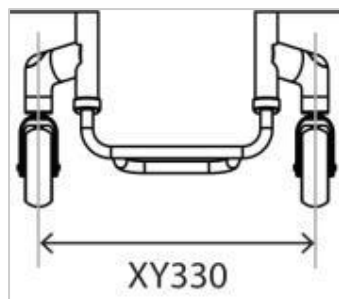

仕様に合わせて適したキャスター間の幅
デザイン設計工程でキャスター間隔は当該使用者
に最適な幅に設定される

ブレーキオプション

標準ブレーキ



XD020 - アンダーシート シザー
ブレーキ



XD050 - プッシュ ブレーキ

有料ブレーキオプション



XD040 - ドリル加工レバーのシ
ザーブレーキ



XD030 - コンパクト シザー
ブレーキ



XD035 - 軽量固定式コンパクトシ
ザーブレーキ (固定式車軸のみ)

SIDEGUARD OPTIONS

サイドガード（フラット）
泥や水からの保護



**フェンダー付き
サイドガード**
移乗時やホイール保護の強化



アルミニウム	カーボンファイバー	ABSプラスチック	アルミニウム	カーボンファイバー
XE030 - ねじ止め	XE050 - ねじ止め	XE070 - ねじ止め	XE040 - ねじ止め	XE060 - ねじ止め
XE080 - 着脱式	XE100 - 着脱式	XE120 - 着脱式	XE090 - 着脱式	XE110 - 着脱式
TGAXE130 - 内側折りたたみ式	TGAXE150 - 内側折りたたみ式	TGAXE170 - 内側折りたたみ式	TGAXE140 - 内側折りたたみ式	TGAXE160 - 内側折りたたみ式
XE180 - 跳ね上げ式	XE200 - 跳ね上げ式		XE190 - 跳ね上げ式	XE210 - 跳ね上げ式
TGAXE220 - 6mm ビーズ溶接				
TGAXE230 - 溶接ス ポーツ(強度増)				

サイドガード オプション



ねじ止めサイドガード



着脱式サイドガード



内側折りたたみ式
サイドガード



跳ね上げ式サイドガード



6mmビーズ溶接
サイドガード



溶接 スポーツ
サイドガード

アームレスト オプション



着脱式アームレスト
(図の様に溶接)




XF010 -アームレスト付着脱式
プラスチックサイドガード
(高さ指定)




XF020 -アームレスト付着脱式
アルミニウムサイドガード
(高さ指定)

サイドガード寸法

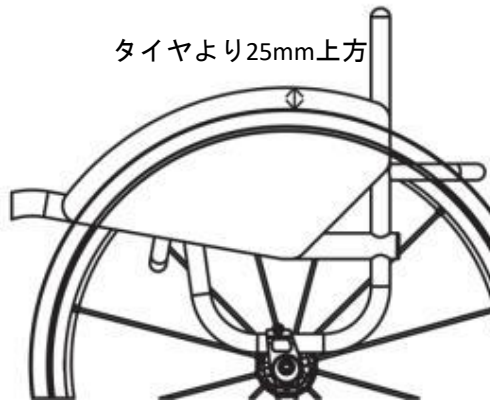


タイヤより25mm上方

タイヤより25mm上
高さ指定も可能

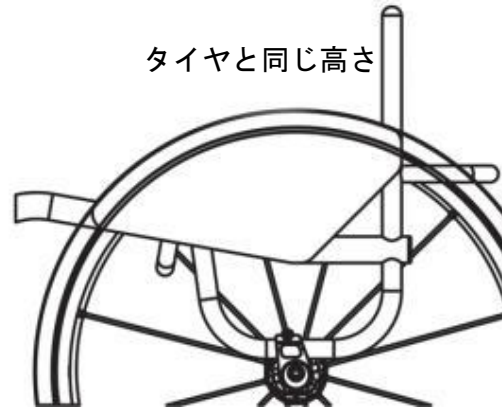


タイヤと同じ高さ

タイヤと同じ高さ
サイドガード上部がタイヤと並んでる

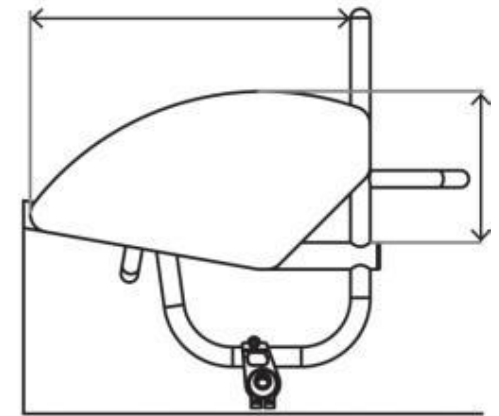


高さ指定（タイヤに沿って）
バックポスト前からサイドガード
前方部の寸法を指定。シート上部
からサイドガード最上部までのサ
イドガードの高さの値を指定する


フェンダー付サイドガードオプション

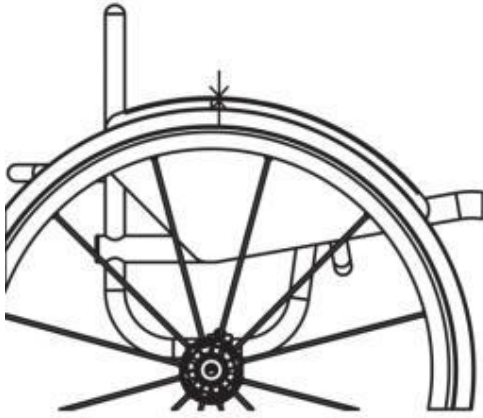

タイヤより10mm上 (標準)
最小値が10mm

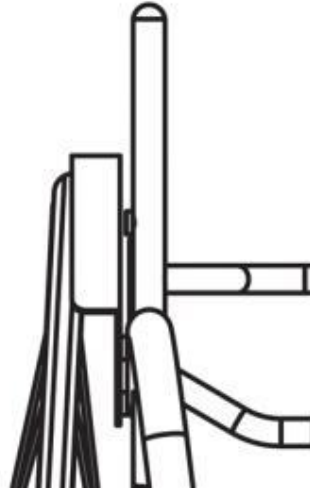


フェンダー幅 タイヤ中央まで

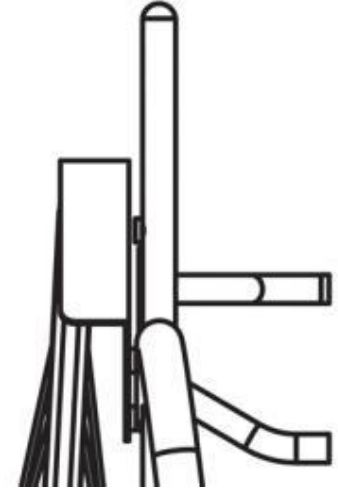


フェンダー幅 タイヤ外まで

バックレスト高さ オプション

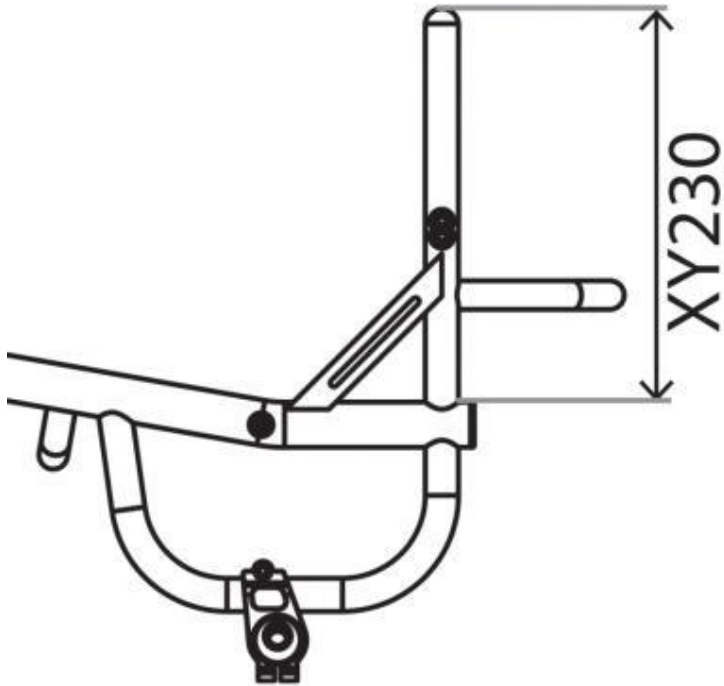

XY230 – 高さ固定式

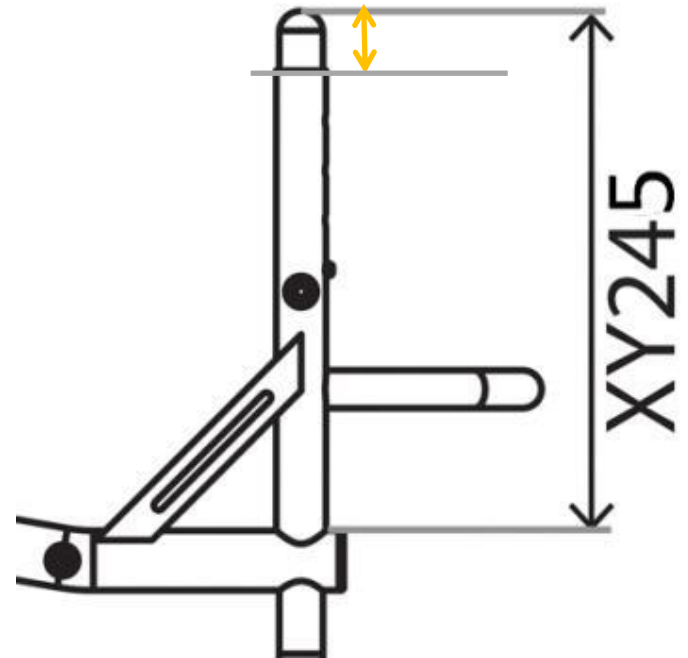

XY245高さ調節式（上方向 調節域 50mm）
(+/-25mm)

バックレスト デザイン オプション




XG010 -固定式バックレスト
(折りたためません)




TGAXG020 -折りたたみ式バックレスト2か所留&
角度調節可能 (±5度)


エルゴノミック バックサポート

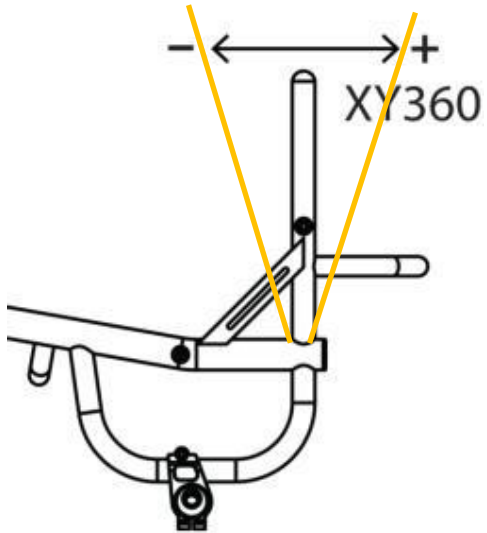


XY360 – バックレスト角度

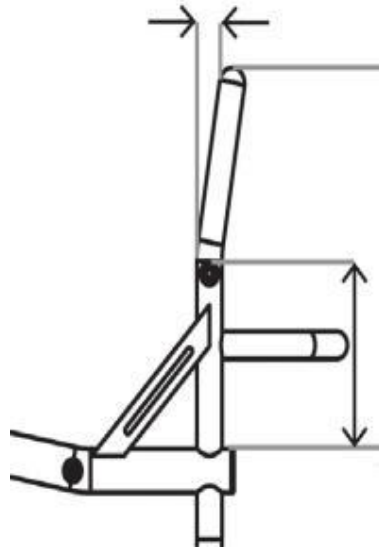

XG100 – エルゴノミック
バックレスト

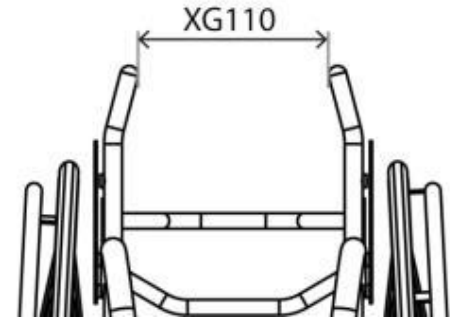

XG110 – バックレスト
内側テーパ

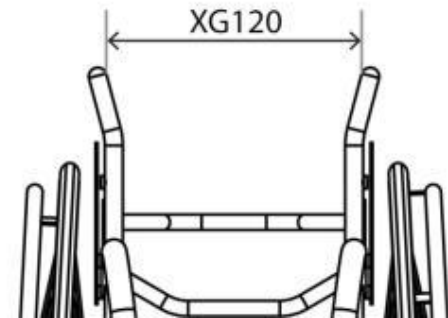

XG120 – バックレスト
外側テーパ

プッシュハンドルオプション



**XG070 –プッシュハンドル
ねじ止め（XY245不可）**



**XG080 –フリップ ダウン
プッシュハンドル
（XY245不可）**



**XG085 –高さ調節式フリップ
ダウン プッシュハンドル
（XY245不可）**



**XG090 –高さ調節式プッシュ
ハンドル**

機能	プッシュハンドルはバックサポート後部にねじ止めされる（取り外し可能）
オプション選択理由	車いすを押す介助が必要な場合やバランスを要して上肢を引っかける必要がある場合
利用者	ある程度の柔軟性や介助される場合がある方

機能	不使用時にはプッシュハンドルは下方へ折れることが可能
オプション選択理由	車いすを押す介助が必要な場合や移動時に畳んでコンパクトになる
利用者	車椅子使用にある程度の柔軟性が求められる幅広い利用者層

機能	不使用時にはプッシュハンドルは下方へ折れることが可能で高さ調整可能
オプション選択理由	車いすを押す介助が必要な場合
利用者	車椅子使用にある程度の柔軟性が求められる幅広い利用者層

機能	プッシュハンドルは必要に際して高さ調整可能
オプション選択理由	状況状況での柔軟対応や快適性 介助が必要な局面がある場合
利用者	車椅子を押す介助が求められる小児利用者


重心位置（COG）のオプション （キャンバー）



車軸調整式-ラウンドバック
(標準)



車軸調整式-スクエアバック
(標準)

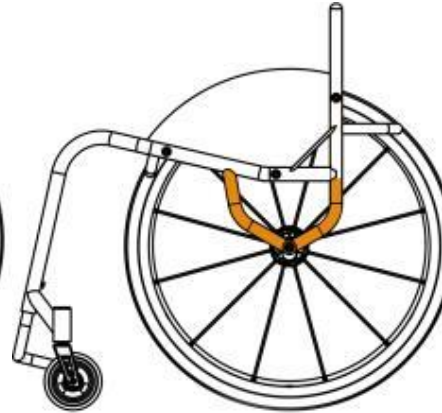

固定式車軸-V-スタイル
(有料オプション)



固定式車軸-シングルポスト
(有料オプション)

機能	重心位置の調整が可能。後部がラウンド型。
オプション選択理由	転倒防止を使用しないで重心位置の調整を望む場合
利用者	追加サポートを必要としないアクティブユーザー

機能	重心位置の調整が可能。後方が鋭角型。
オプション選択理由	転倒防止を希望し、重心位置の調整を望む場合
利用者	追加サポートが必要なアクティブユーザー

機能	重心位置はV字設計に固定されている
オプション選択理由	調整能の無い軽量で固いオプション
利用者	経験値の高い車椅子利用者

機能	重心位置はシングルポスト設計で固定されている
オプション選択理由	調整能の無い超軽量で固いオプション
利用者	非常に経験値の高い車椅子利用者

Centre of Gravity

Measurement to be taken from front of backrest to centre of axle.

重心位置

バックサポート前方から車軸中央
までを測ります



キャンバー角度

0	1	2	3	5
幅の大きな車椅子で幅制限がある場合、もしくは電動ユニット付帯時		最も人気なキャンバー角度であり、良好なサイズと安定性のバランスが得られる		頻回に異なる整地（オフロードなど）で使用するアクティブユーザー向け


安定性低い/ 操作性
悪い

幅が最も狭い

安定性高い/ 操作性
高い

最も幅が広い

注意: キャンバー角
が1度付加される度
に車いす幅が 20mm
広がります

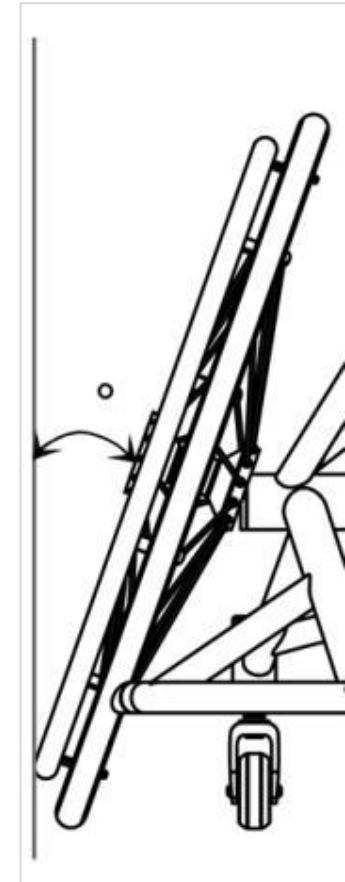

XY390 -キャンバー角度
キャンバーバーによりフレームに対しての
後輪の角度が決定されます。

転倒防止オプション



XJ010 –転倒防止スウィングアウェイ 左
(スクエアバックのみ、XH040不可)

XJ020 –転倒防止スウィングアウェイ 右
(スクエアバックのみ、XH040不可)



XJ100 –転倒防止シングルポスト
(取付中央)

後輪と後輪間隔のオプション

ホイールサイズ:

Outside of
wheel rim to
inside of
wheel rim



XY420 - 24" (540mm)




XY430 - 25" (559mm)




XY440 - 26" (590mm)

XY460


リアホイール間隔:

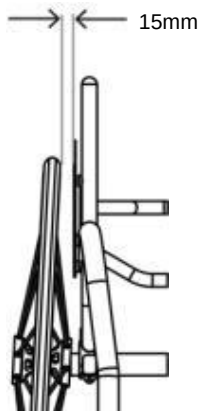

15mm 間隔

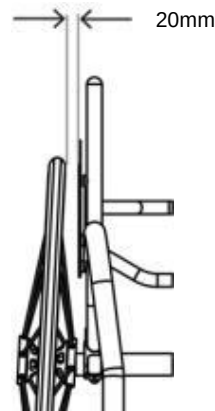

20mm 間隔

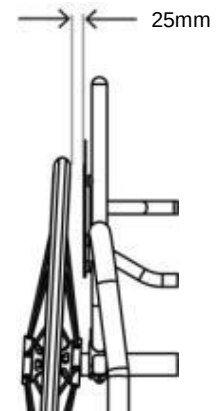

25mm 間隔

ホイールオプション

標準後輪



XK010 -サン フュージョン
日常用16本スポーク(シル
バーハブ、黒スポーク)



XK050 -スピナジーLXホイール
日常用12本スポーク



XK070 -スピナジーBLXL日常用
18本ブレードスポーク



XK320 -スピナジーXLX日常用
12本クロススポーク



XK060 -スピナジーSPOX日常用
18本スポーク



XK150 -スピナジーCLX18本ブ
レードスポーク (黒ハブのみ・
色選択)

ホイールオプション

SPINERGY ホイールハブとスポークのカラーオプション:



XK200 -スピナジー シルバーハブ



XK190 -スピナジー ブラックハブ



ブラックスポーク / シルバーハブ



ピンクスポーク / ブラックハブ



ブルースポーク / ブラックハブ



イエロースポーク / ブラックハブ



オレンジスポーク / ブラックハブ



ホワイトスポーク / ブラックハブ



グリーンスポーク / ブラックハブ




レッドスポーク / ブラックハブ

XK180 - カスタムカラーオプションも可能:




ハンドリムオプション

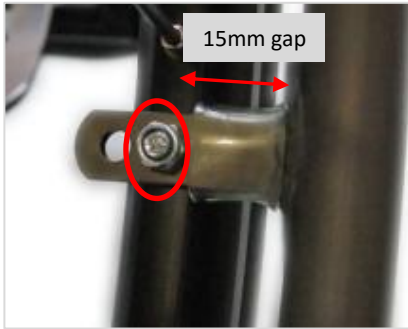

ハンドリム間隔ナロー
(未選択時標準)

ハンドリムとホイール間隔が15mm

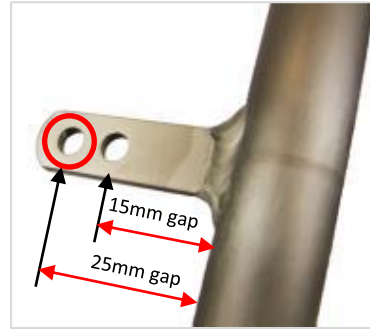

ハンドリム間隔ワイド
ハンドリムとホイール間隔が
25mm(赤枠)



XL030 -ハンドリム
サージLT 6タブ

XL010 -ハンドリムハード
アノダイズド処理 6タブ
(未選択時標準)

XL020 -ハンドリム
テトラグリップ 6タブ

XL100 -ハンドリム
パラグリップ 6タブ

XL040 -ハンドリム
チタン 6タブ

XL050 -ハンドリム
ステンレス 6タブ



タイヤ オプション



XM010 -高圧ケンダ タイヤ
(グレーの他ブルー、レッドに選択可能)



XM130 -ケンダ ブラック



XM020 -シュワルベ マラソン
プラス



XM040 - Shox ソリッド
エアレス 黒のみ
(24"、25"のみ)



XM060シュワルベ ワン
(24"、25"のみ)



XM050 -ケンダ K885
マウンテンバイク タイヤ
(24"、25"のみ)

チューブバルブ オプション



XY500 -米式バルブ (未選択時標準)



XY490 -仏式バルブ

ホイール アクセサリー



XK220 - (一組) チタン130mmク
イック リリースアクスル (XK010
&XK070不可)



XK240 -クアド リリース アクスル
ナット (一組)



XK250 -透明ポリカーボネート
スポークガード (一組)



XK300 -オフロード ホイール 22" ハンドリム、
MTBタイヤ、アクスル付 (XM010 24"ホイ
ールと交換)



XK310 -オフロードホイール24"ハンドリム、
MTBタイヤ、アクスル付 (XM010 25"ホイ
ールと交換)

FRAME & ACCENT FINISH OPTIONS

**XN050 -ポリッシュ 仕上げ フレーム
(Upgrade option)**



**XN030 -ブラッシュ 仕上げ フレーム
(Upgrade option)**



**XN010パウダーコート フレーム
(標準)**



**レッドアクセ
ント**



**シルバーアクセ
ント**



**パープルアクセ
ント**



**ブルーアクセ
ント**



**ブラック アクセ
ント**

部品（フットレスト、キャンバーバー、サイドガード） の仕上げオプション

Finish options available for following chair components:



Footrest

(black powder coated pictured)



Camber bar

(matt grey powder coated pictured)



Sideguards

(Aluminium only)

Component finish options available
in:



XN170 - ポリッシュ仕上げ



XN160 - ブラッシュ仕上げ



XN150 - パウダーコート
range of colours

背布 オプション



XP040 - 張り調整式シートスリング



XR050 - カーボンファイバーシートプレート



XP050 - 張り調整式 エアテクバックレスト



XP070 - サイドウィング角をレザーにアップグレード（フリップダウン
プッシュハンドル不可）
カラーをブラックの他、レッド、グレーに選択可能



XP060 - フルレザーヘアップグレード
カラーをブラックの他、レッド、グレーに選択可能



XP110 - ジッパー付ポケット

背布 ステッチ（縫糸） オプション



Light blue stitching option
pictured

Range of colour stitching options available for backrest
upholstery
(as indicated by red lines in images)



Available stitching colour options

背布 ロゴ オプション

RGK BRANDING OPTIONS:



RGK logo on backrest
(Red option pictured)



RGK logo on calf strap
(Lime green option pictured)



RGK logo on foot strap
(Light blue option pictured)



RGK logo on cushion
(Light blue option pictured)

Choice of embroidery colours:

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.

KEY:

- 1. Grey
- 2. Red
- 3. Royal blue
- 4. Purple
- 5. Silver
- 6. Gold
- 7. Light blue
- 8. Neon pink

- 9. White
- 10. Orange
- 11. Dark green
- 12. Fushia
- 13. Black
- 14. Yellow
- 15. Lime green
- 16. Copper

背布 オリジナル刺繍 オプション

XP170 – オリジナル刺繍

Option to choose personalised embroidery to appear on the back of the backrest – examples pictured.

Examples:

- Club Badges
- Sports teams
- Icons
- Names
- Images
- Characters
- Logos



クッションオプション



XP080 - フォームクッション ナイロンカバー
硬さをソフト、ミディアム、ハードから選択可能
厚さを50mm、75mm、100mmから選択可能





XP090 - クッションカバーアップグレード エアライト (黒)
AirLiteカバーにより、空気循環と冷却を改善




XP100 - クッションカバーアップグレード レザー
カラーをブラックの他、レッド、グレーに選択可能

クッション厚みオプション:

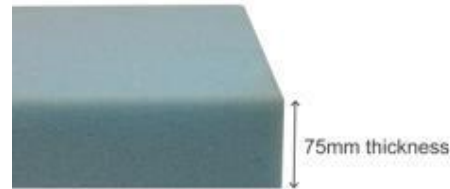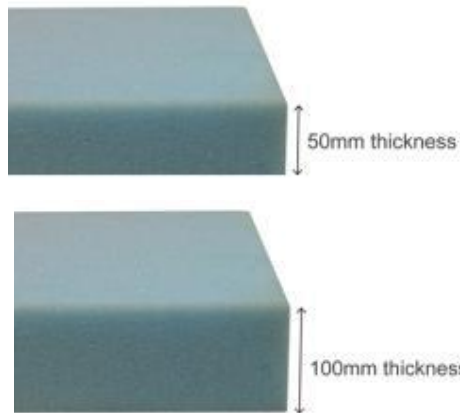

クッション密度オプション:

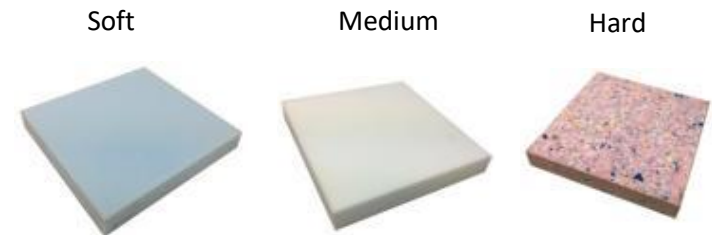

フレーム オプション



XR060-カーフ ストラップ 取付ループ 溶接式 （フロントフレームにカーフストラップを取付けるため）



XR080-フロント ホイール (XB010、TGAXB080、XB150のみ)

アクセサリ



フレーム プロテクター ネオプレン ジッパー TIGAロゴ付き (XR060と併用不可。XP060を選択している方は別途XP420ナイロン製プロテクターをご注文ください)



XR010 -シートポーチベルクロ式 (ブラック)
電話、鍵、その他の貴重品を運ぶのに最適な場所です。簡単に取り外すことができます。



XR020 - RGKロゴ入りバックパック
(黒)
安全な収納スペース。



XR090 - ツールキット



XS060 - カーフ ストラップ

フロント ホイール



- 重量 – 2.6kg
- 耐荷重 – 125kg
- 200x50 振動防止フォーク付ニューマティックタイヤ
- 数秒で簡単に取付・取り外し可能
- 後方ウィーリー時も含めキャストクリアランス確保されている
- フットサポート下部でメインフレームに対して剛性の高い3点で接続
- クランプで取付対応
- フットサポート幅は影響されない
- 取付時に下肢を動かす必要がない
- 使用時と不使用時に上下にロックされる

Sports Chair Range



ELITE

ELITE X

ELITE X








ALLSTAR

CLUB SPORT

GrandSlam

GrandSlam X

PREDATOR

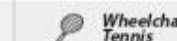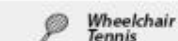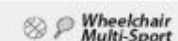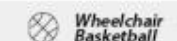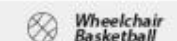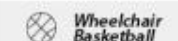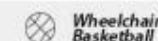

Max User Weight 125kg

Max User Weight 100kg

Max User Weight 125kg

Max User Weight 100kg

Max User Weight 125kg

Max User Weight 125kg

Max User Weight 100kg

Max User Weight 125kg

Product Weight (Minimum) 9.2kg

Product Weight (Minimum) 8.7kg

Product Weight (Minimum) 9.2kg

Product Weight (Minimum) 9.8kg

Product Weight (Minimum) 11.8kg

Product Weight (Minimum) 8.5kg

Product Weight (Minimum) 8.7kg

Product Weight (Minimum) 12kg

Heat Treated Frame —

Heat Treated Frame ●

Heat Treated Frame —

Heat Treated Frame —

Heat Treated Frame —

Heat Treated Frame —

Heat Treated Frame ●

Heat Treated Frame ●

User Level Intermediate to Expert

User Level Expert

User Level Intermediate to Expert

User Level Intermediate

User Level Beginner

User Level Intermediate to Expert

User Level Expert

User Level Intermediate to Expert

Key Feature Unique frame design with straight camber bar

Key Feature Carbon Fibre camber bar and CNC sideguards

Key Feature Carbon Fibre Seating System

Key Feature Adjustable Backrest Centre of Gravity

Key Feature 4 different frame options with a range of adjustability

Key Feature Carbon Fibre Knee Support System

Key Feature Carbon Fibre camber bar and CNC sideguards

Key Feature Y-Frame chassis with individual front picker design

Warranty** ●

Warranty** ●

Warranty** ●

Warranty** ●

Warranty** ●

Warranty** ●

Warranty** ●

Warranty** ●

DISCLAIMER:

Please be advised that prices will vary depending on your individual measurements and how the chair is customised or modified.

● - Yes
— - No

**Frame: 2 years Parts: 1 Year

---Price is a rough estimate based on previous orders

~Base Price is the minimum specification of any given chair some key features may incur an additional charge.