

SEDEO PRO

WYSOCE REGULOWANY I KONFIGUROWALNY
SYSTEM SIEDZISK

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

SEDEO PRO SYSTEM SIEDZISKA

DOBRE MIEJSCE DO SIEDZENIA ZACZYNA SIĘ OD OSOBISTYCH POTRZEB KLIENTA.

ERGONOMICZNE SIEDZENIE JEST PODSTAWĄ OPTIMALNEGO ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI.

Chodzi o stworzenie takiej pozycji siedzenia, która umożliwi realizację indywidualnych celów związanych z podporą fizyczną oraz wyzwań społecznych i praktycznych.

Wszystko to jest w pełni odzwierciedlone w naszym nowym systemie siedzisk SEDEO PRO. W przypadku umiarkowanych i złożonych potrzeb klinicznych system siedziska łączy wysoce regulowaną ramę siedziska z doskonałym wyborem opcji pozycjonowania, w tym szeroką gamą:

- Poduszki oparcia i siedziska
- Podłokietniki, osłony boczne i peloty klatki piersiowej
- Podnóżki i podparcie kolan
- Zagłówki

Po raz pierwszy zarówno JAY™, jak i WHITMYER™ są włączone, aby zaoferować zaawansowane możliwości pozycjonowania. Prawdziwie modułowa konstrukcja SEDEO PRO zapewnia nowy poziom funkcjonalności, komfortu i wzornictwa. Można go łatwo dostosować do indywidualnych wymagań i szybko dostosować do zmieniających się potrzeb użytkownika.



TERAZ Z
Q-SERIES

Q700

M,
F,
R

Q500

M,
F,
R,
H

Q400

M,
F,
R





System siedzisk SEDEO PRO jest wygodny i zwiększa niezależność w życiu codziennym. Zaawansowana, wysokiej klasy rama siedziska jest w pełni regulowana, niezwykle konfigurowalna i pasuje do szerokiej gamy wózków elektrycznych serii Q, niezależnie od preferowanej podstawy napędowej.

A dla profesjonalisty specjalizującego się w wózach: znajomość jednego oznacza, że znasz je wszystkie.



SEDEO PRO

SZYBKA I ŁATWA REGULACJA

TWORZĄC ODPOWIEDNIĄ POZYCJĘ SIEDZENIA DLA CIEBIE –
ŁATWE DO WYKONANIA DLA PRACOWNIKA


- Całkowita elastyczność / pełna regulacja
- Intuicyjne regulacje. Regulacja jednym narzędziem (klucz imbusowy 5 mm) / jedna prosta procedura robocza / czytelne skale pomiarowe / żadne dodatkowe części nie są wymagane
- Części można bezstopniowo regulować, przesuwać, poszerzać i obracać, aby uzyskać jak najlepsze wsparcie
- Zabezpieczenia przed wypadnięciem sprawiają, że jest to łatwe dla każdego
- Regulacji można dokonać, gdy użytkownik siedzi na wózku, łatwo dostępne z boku.



- 1 = Szerokość siedziska: 38 - 56 cm
- 2 = Dodatkowa regulacja za pomocą podłokietnika: + 2 cm do - 2 cm z każdej strony
- 3 = Głębokość siedziska: 40 - 56 cm
- 4 = Wysokość oparcia: 44 - 62 cm

SEDEO PRO RAMA SIEDZISKA

SZEROKI ZAKRES REGULACJI SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA SPRAWIA, ŻE SEDEO PRO IDEALNIE NADAJE SIĘ DO RENOWACJI. ZAWSZE ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE, NIE MOŻNA ZAMÓWIĆ ŹŁE.

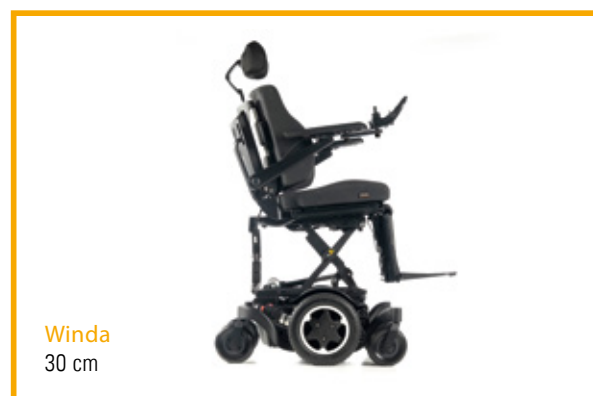

WYSOCE KONFIGUROWALNA RAMA SIEDZISKA

CZTERY OPCJE OPARCIA



Regulacja kąta za pomocą narzędzi, 90°-120°.
Bezstopniowa, łatwa regulacja z użytkownikiem na wózku.



Obsługiwana przez użytkownika, manualna regulacja kąta, 90°-130°
łatwe przenoszenie ciężaru ciała sprężyna gazowa. Dźwignia obsługiwana przez użytkownika



Elektryczna regulacja kąta, 90°-130°
Wygodna i łatwa do zmiany pozycja za naciśnięciem przycisku.



Elektryczna regulacja kąta z 100 mm systemem Anti-Shear, 90°-150°
Opatentowany unikalny mechanizm zwiększa ochronę skóry i umożliwia utrzymanie elementów pozycjonowania a nawet sterowników podbródka, na miejscu podczas zmiany pozycji.




CZTERY TYPY PODŁOKIETNIKÓW Z KILKOMA OPCJAMI PODUSZEK PODŁOKIETNIKÓW I OSŁON BOCZNYCH



Podłokietniki, jednoślupkowe, odchylane do tyłu



Podłokietniki, oschylane, mocowane do ramy oparcia

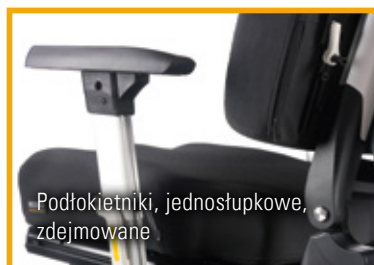

Podłokietniki, jednoślupkowe, zdejmowane



Podłokietniki, jednoślupkowe, SEDEO LITE

SKONFIGURUJ SEDEO PRO TAK, ABY IDEALNIE PASOWAŁ DO UŻYTKOWNIKA, WYBIERAJĄC KOMPONENTY Z SZEROKIEJ GAMY OPCJI. BEZ KOMPROMISÓW – ZAWSZE IDEALNIE DOPASOWANE.



DWA CENTRALNIE MOCOWANE PODNÓŻKI Z OPCJONALNYM PODPARCIEM POD ŁYDKI



Elektryczny centralnie mocowany podnóżek



Regulowany za pomocą narzędzi centralnie mocowany podnóżek.

TRZY ODCHYLANE PODNÓŻKI Z OPCJONALNYM PODPARCIEM POD ŁYDKI



SEDEO PRO, Podnóżki odchylane, 70°



SEDEO PRO, Podnóżki z manualną regulacją kąta, odchylane



SEDEO PRO, Podnóżki z elektryczną regulacją kąta, odchylane

OPCJE SIEDZISKA:

SEDEO PRO PODUSZKI SIEDZISKA I OPARCIA

PODUSZKI OPARCIA		PROFILOWANA	PROFILOWANA Z REGULACJĄ	PASYWNA	ELSTYCZNA PASYWNA	ELSTYCZNA AKTYWNA	ELSTYCZNA AKTYWNA XD
WYMAGANIA WSPARCIA POZYCJONOWANIA	CEL						
	Zwiększona swoboda ruchu	● ● ●	● ●	●	●	● ●	●
	Zapobieganie garbieniu się	●	● ●	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	Zwiększona stabilność boczna	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

PODUSZKI SIEDZISKA		PROFILOWANA	SUPPORT	SUPPORT MEMORY	STABILIZER	MEMORY	FORM
WYMAGANIA WSPARCIA POZYCJONOWANIA	CEL						
	Zwiększona swoboda ruchu	● ●	●	●	● ●	●	●
	Zapobieganie garbieniu się	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
	Zwiększona stabilność boczna	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●
RYZIKO DEZINTEGRACJI SKÓRY	Zapewnia rozkład ciśnienia	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●
	Ogranicza ryzyko sił ścinających	●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
	Pomaga zapobiegać deformacji tkanki miękkiej	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

OPCJE SIEDZISKA: PODUSZKI I OPARCIA JAY

Dostępna jest szeroka gama poduszek JAY, które są kompatybilne z ramą SEDEO PRO, aby sprostać wyższym potrzebom klinicznym i zapewnić najlepszą możliwą pozycję siedzenia.

Zaprojektowane z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i komforcie, poduszki i oparcia JAY są łatwe w utrzymaniu, wysoce konfigurowalne i dostępne w szerokiej gamie, aby sprostać Twoim potrzebą.



Xtreme-Active



Balance Fluid i Air



J2



J2 Deep Contour



Oparcie J3, Głęboki kontur
(DC)



J3 Back, Głęboki środkowy
kontur (MDC)

IDEALNIE DOPASOWANIE ZAGŁÓWKI



PODUSZKA ZAGŁÓWKA SEDEO,
MAŁA

240 x 150 mm, Opcjonalny pokrowiec

PODUSZKA ZAGŁÓWKA SEDEO,
ELASTYCZNA

400 x 110 mm

MOCOWANIE ZAGŁÓWKA SEDEO


Bardzo mocne i łatwy do regulacji w różnych pozycjach

Szybki powrót do ustawień
pozycji dzięki funkcji pamięci


SEDEO PRO

≡ WHITMYER®

SZEROKA GAMA ZAGŁÓWKÓW WHITMYER JEST
DOSTĘPNA Z SYSTEMAMI SIEDZISK SEDEO PRO, ABY
SPEŁNIĆ POTRZEBY KLINICZNE KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA
I ZAPEWNIĆ NAJLEPSZĄ MOŻLIWĄ POZYCJĘ SIEDZENIA.

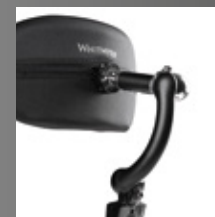


LINX

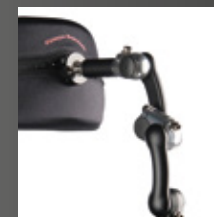


LINX2



AXYS

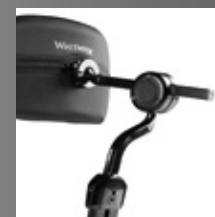

AXYS Offset

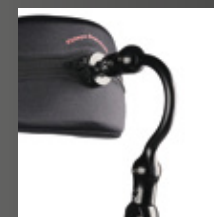

Cobra XTRA odchylany

PLUSH




ADJUST-A-PLUS



SEDEO PRO

ELEMENTY WSPOMAGAJĄCE POZYCJONOWANIE

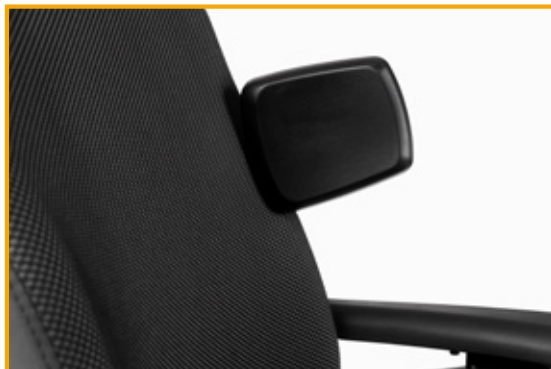

PELOTY PIERSIOWE

- Zalecane z wyprofilowanym oparciem lub wyprofilowanym regulowanym oparciem
- Regulowana głębokość, szerokość, wysokość i kąt
- Zintegrowany mechanizm odchylania

Wymiary poduszek:

Krótkie: 90 x 120 mm

Długie: 150 x 130 mm



KLIN ODWODZĄCY

- Regulacja głębokości i wysokości
- Mechanizm odchylania

Wymiar poduszki:

Poduszka (szer. x gł. x wys.): 70 x 190 x 100 mm

PELOTY UDOWE




- Regulowana głębokość, szerokość i wysokość
- Wyjmowane

Wymiary poduszek:

Małe: 120 x 120 mm

Duże: 180 x 120 mm


PELOTY KOLANOWE

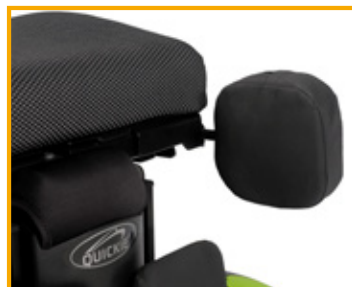

- Regulowana głębokość, szerokość i wysokość
- Mechanizm odchylania

Wymiary poduszki:

Małe: 120 x 120 mm

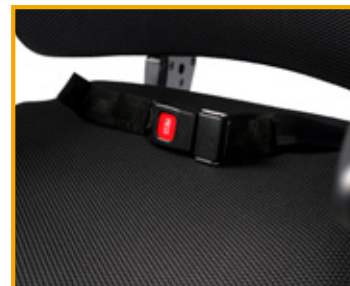

PASY POZYCJONUJĄCE

- Sprzączka samochodowa
- Krótki: 50 x 1700 mm
- Długi: 50 x 2700 mm



PAŁĄK DO TRANSFERU

DANE TECHNICZNE

SEDEO PRO // System siedzisk

Efektywna głębokość siedziska	400 - 560 mm
Efektywna szerokość siedziska	380 - 560 mm
Wysokość siedziska od podłoża	415 - 490 mm
Kąt oparcia	- Regulacja kąta za pomocą narzędzi: 90° - 120° - Elektryczna regulacja kąta: 90° - 130° - Elektryczna regulacja kąta z systemem anti shear: 90° - 150°
Wysokość oparcia	440 - 620 mm
Wysokość podłokietników	250 - 400 mm
Długość podudzi	305 - 540 mm (od płyty siedziska)



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl



Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF pod adresem www.Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0