



QUICKIE

CHASSIN Q300[®] SERIEN

Kraftfull prestanda i kompakt storlek


Explore your world!


Live without limits.



Q300 M Mini Kids



Q300 M Mini Teens



Q300 M Mini SEDEO LITE

Q300M Mini

En av de smalaste elrullstolarna med VERKLIG mitthjulsdrift.

GODKÄND FÖR MOTORFORDON
ISO-7176

MYCKET PÅLITLIGA 4-POLIGA
MOTORER MED HÖGT VRID-
MOMENT
HASTIGHET UPP TILL 10 KM/H



FJÄDRING PÅ ALLA 6 HJUL

CHASSI I MASSIV PLÅT

HINDERTAGNING PÅ
UPP TILL 70 MM

PÅLITLIG

Med ett solidt plåtkhassi, branschens bästa motorer och noggrann testning, byggs varje Q300 M Mini för att hålla dig i rörelse, länge.

LITEN VÄNDCIRKEL

Tack vare teknologin bakom VERKLIG mitthjulsdrift teknologi vänder Q300 M Mini på stället och har en mycket liten vändcirkel på bara 1120 mm. Detta är en stor fördel jämfört med andra kompakta mitthjulsdrivna elrullstolar.

ULTRASMAL

Nästan omöjligt smal på bara 520 mm kan Q300 M Mini ta dig dit andra inte kan. Oavsett om det är i ett komplicerat vardagsrum, ett rörigt kök eller en trång dörröppning, får Q300 M Mini plats.

KÖR I FÖRHÖJT LÄGE MED C-ME®

C-Me gör att du kan höja din position upp till 300 mm även när du färdas upp till 4,5 km/h! Du kan också byta läge med en knapptryckning utan att behöva stanna och får därmed en bekväm åktur. Till skillnad från andra elrullstolar med denna funktion behåller elrullstolen sin fjädring även i detta läge och du får samma smidiga körning från början till slut.






SEDEO® LITE™

Detta sittsystem har en verkligt modulär design och ger en ny nivå av funktionalitet och stöd för milda till måttliga posturala behov. Den integrerade säteskenan erbjuder många alternativ för montering av andra positioneringselement för ytterligare posturala behov.



KIDS

Detta sittsystem ger en elrullstol med en sittbredd på 280 - 400 mm och ett sittedjup på 260 - 400 mm och kan därmed hålla jämna steg med växande barn. Det konturformade SEDEO LITE-ryggstödet ger komfort och stabilitet och eftersom bälstödet är placerat inuti ryggstödet kommer det inte att förskjutas över tid.

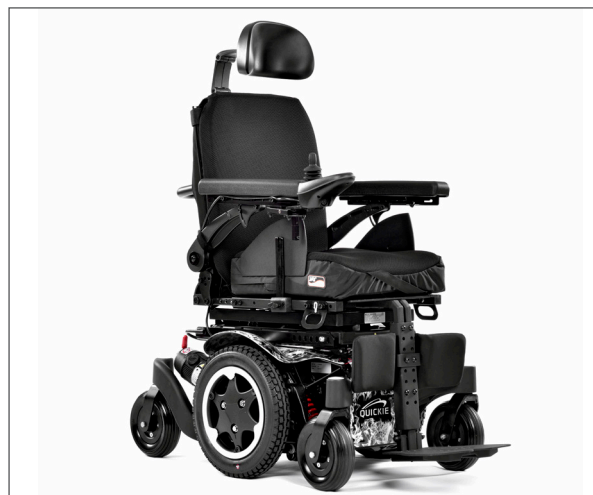

TEENS

Q300 M Mini Teens är fullspäckad med samma justeringsmöjligheter och funktioner som i Kids-versionen men har ett utökat sittedjup på 360 - 500 mm. Idealiskt för växande tonåringar som kräver en smal sitsbredd men större justeringar av sittedjup över tid.

Q300 M MINI JÄMFÖRELSE SITTSYSTEM

	SEDEO LITE	KIDS SEAT	TEENS SEAT
Sittbredd (mm)	385 - 510	280 - 400	300 - 400
Sittedjup (mm)	410 - 560	260 - 400	360 - 500
Sitthöjd (mm)	430 - 490	440 - 490	440 - 490
Ryggstöds- höjd (mm)	460 - 510	380 - 485	460 - 510
Ryggstöds- vinkel	85 - 120°	86° - 120°	90 - 120°
Max. brukavikt	136 kg	76 kg	120 kg
JAY & WHITMYER	●	●	●

Q300 M Mini

Se beställningsunderlaget eftersom specifikationer kan variera beroende på konfiguration

Total bredd	Från 520 mm
Total längd (m. centermont. benstöd)	Från 1060 mm
Vändcirkel	1120 mm
Max. säker lutning	8°
Max. hindertagning	50 mm (med 12" drivhjul) / 60 mm (med 13" drivhjul) / 70 mm (med 14" drivhjul)
Maximal räckvidd (ISO 7176-4)	Upp till 25 km (med 41 Ah batterier) / Upp till 36 km (med 56 Ah batterier)
Produktens vikt (inkl. batterier)	Från 103 kg
Drivhjul	12" / 13" / 14"
Max. hastighet	6 km/h / 8 km/h
Batteri	41 Ah / 56 Ah
Elektronik	R-NET
Transport utan brukare	Fäst rullstolen ordentligt i fordonet (t.ex en bil eller flygplan)
Avsett bruk & miljö	För personer som inte kan gå eller som har begränsad rörlighet, för inomhus och utomhus bruk. Rullstolstyp klass B
Transportfäste	ISO 7176-19:2008 Godkänd

Exakta mått kan variera beroende på konfiguration.

FÄRGER

TILLGÄNGLIGA MÖSTER
OCH FÄRGER PÅ KÅPAN



TILLGÄNGLIGA FÄRGINLÄGG



OBS!
Färgåtergivning
i tryckt material
eller på en skärm
kan avvika från
färg på aktuell
produkt.



Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se



Sunrise Medical bryr sig om din säkerhet. Vänligen läs din bruksanvisning för säkra driftsinstruktioner och riktlinjer om underhåll.

I linje med vår policy för ständiga produktförbättringar förbehåller sig Sunrise Medical rätten att göra ändringar när som helst och utan föregående meddelande. För den senaste informationen, besök www.sunrisemedical.se
Om du är synskadad kan detta dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.se