

ROZWIŃ SWOJĄ WOLNOŚĆ

QS 5 X



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć
QS5 X Wizualizator 3D online

Próba wykonania czynności pokazanej na obrazku może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. Zalecamy stosowanie kółek antywywrotnych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**



PISZEMY NOWY ROZDZIAŁ.

5 DOBRYCH POWODÓW, ABY WYPRÓBOWAĆ QS5 X®.

1 FREEFOLD - PONAD 40% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII PRZY KAŻDYM ZŁOŻENIU -

Superprecyzyjna konstrukcja FreeFold zapewnia składanie, które wymaga o ponad 40% mniej siły niż najbliższy konkurent. Opcjonalne mocowanie Fold-N-Lock zapewnia, że QS5 X jest ciasno złożony, zapobiegając niezamierzonemu otwarciu.

2 PODNOSZENIE Z LEKKOŚCIĄ - Przy wyjątkowo niskiej wadze transportowej wynoszącej od 7,3 kg

w przypadku ramy z zamkniętym przodem i 7,5 kg w przypadku ramy z odchylanymi podnóżkami, jest to najlżejszy wózek z aluminiową ramą zamkniętą na rynku, który wyznacza nowy standard.

3 JEDŹ DALEJ I NAPĘDZAJ WÓZEK BEZ WYSIŁKU - Szczycąca się nie tylko najlżejszą, ale także

jedną z najsztwniejszych ram na rynku, dzięki zastrzeżonym procesom produkcyjnym i technologiom charakterystycznym dla wysokiej jakości produktów Sunrise Medical - takich jak specjalnie poddane obróbce cieplnej aluminium serii 7000, owalne rurki i kute części - rama QS5 X przenosi wrażenia z jazdy na wyższy poziom.

4 STYLOWY, ALE SOLIDNY - Dzięki solidnej konstrukcji ramy i owalnemu 4-ramiennemu krzyżakowi

możesz mieć pewność, że Twój wózek poradzi sobie ze wszystkim, co stanie na Twojej drodze. Eleganckie, nowoczesne linie nadają mu stylowy i wyrafinowany wygląd.

5 MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB - Dwie wersje ramy, różne

kąty giecia ramy i dopasowany pakiet komponentów o krytycznym znaczeniu klinicznym zapewniają możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, bez względu na to, czy mogą się one zmieniać w czasie - od początkującego do doświadczonego użytkownika wózka.



Zeskanuj kod QR, aby
zobaczyć poruszający
się QS5 X!

WYDAJNOŚĆ SKŁADANIA

FREEFOLD - PONAD 40% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII PRZY KAŻDYM ZŁOŻENIU

ŁATWY DO ZŁOŻENIA I POZOSTAJE ZŁOŻONY - dzięki innowacyjnej funkcji FREEFOLD. FreeFold oznacza wyrafinowaną i precyzyjną inżynierię geometrii składania, co skutkuje szczególnie **małą siłą** podczas składania i rozkładania. Podczas składania pochylenie kół nie zmienia się, a złożony wózek stoi stabilnie na ziemi - prawdziwa zaleta, jeśli często składasz i transportujesz QS5 X.



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć file ze
składania



Opcjonalna blokada Fold-N-Lock zapewnia bezpieczne złożenie wózka. Za pomocą prostego „kliknięcia” wózek może teraz pozostać w zwartej pozycji. Nie trzeba trzymać zamkniętego podczas podnoszenia lub przechowywania!



OWALNE RURY (ta sama technologia premium z Nitrum i Xenon²) 4-ramiennego krzyżaka QS5 X są sztywniejsze, mocniejsze i lżejsze niż konwencjonalne okrągłe rury. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wyginania się pod naciskiem, zapewniając **wyjątkową sztywność i zmniejszoną elastyczność** podczas jazdy oraz łatwe składanie. Wygrana-wygrana!







Eleganckie i nowoczesne linie - QS5 X ma minimalistyczny design z ukrytymi regulacjami i zintegrowanymi rurkami łączącymi kółka. Niewiele jest widocznych śrub lub otworów pogarszających estetykę — to nadaje QS5 X stylowy i wyrafinowany wygląd.



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć film z jazdy

LEKKI

ŁATWE PROWADZANIE I PODNOSZENIE Z NISKĄ WAGĄ QS5 X

NIEZRÓWNANA LEKKOŚĆ - Wyjątkowo niska waga transportowa od 7,3 kg dla ramy z zamkniętym przodem i 7,5 kg dla ramy z odchylanymi podnóżkami! QS5 X jako najlżejsza aluminiowa składana rama zamknięta na rynku jest nie tylko wygodny do podnoszenia, transportu, ale także do bez wysiłkowego prouszania, aby zwiększyć efektywność energetyczną użytkownika. Materiał i konstrukcja robią różnicę – mocny nie zawsze musi oznaczać ciężki. Rama QS5 X jest wykonana z wysokiej jakości aluminium serii 7000, zaprojektowanego z myślą o wyjątkowo wysokim stosunku wytrzymałości do masy i jest używana w wielu zastosowaniach lotniczych, gdzie wytrzymałość, trwałość i waga są kluczowymi czynnikami.

DOSKONAŁA SZTYWNOŚĆ - Obróbka cieplna aluminiowej ramy przy użyciu naszego zastrzeżonego procesu produkcyjnego sprawia, że rama jest cieńsza i lżejsza, bez utraty wytrzymałości. Rezultatem jest wózek, który jest zaskakująco łatwy do podniesienia i przenosi większy nacisk na koła..



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć film z jazdy



Łatwy do podnoszenia i ładowania - dla użytkownika lub dla opiekunów.





INTELIĞENTNE OPCJE

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

ERGONOMICZNE PUNKTY UCHWYTU

QS5 X posiada punkty uchwytu na łączniku kółka, zgięciu kolan i tylnej części ramy, które zapewniają **wygodny chwyt** i zapobiegają ślizganiu się podczas przenoszenia lub transportu. Opinia użytkowników sprawia, że te punkty uchwytu są jedną z wielu innowacji kierowanych przez konsumentów. Pozwala to na łatwe podnoszenie, zmniejszając obciążenie nadgarstków, szczególnie podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo chronią one ramę wózka przed zarysowaniami.

OPATENTOWANY ŁĄCZNIK KÓŁKA - ZAWSZE PROSTE PROWADZENIE

Dzięki naszym 3-kierunkowo regulowanym, opatentowanym łącznikom kół, możliwe jest ustawienie prostego toru jazdy QS5 X. Proste prowadzenie oznacza mniej energii traconej na kontrowanie!

WŁAŚCIWA RAMA

Różne wersje ramy ułatwiają wybór najlepszego dopasowania! Długość ramy jest specyficzna dla prawie każdej głębokości siedziska, aby upewnić się, że QS5 X pozostaje tak **kompaktowy, jak to tylko możliwe**.

NOWA ALUMINIOWA PŁYTA PODNÓŻKA

Nowa aluminiowa płyta podnóżka (dzielona i pojedyncza platforma) została przeprojektowana w celu uzyskania **mniej wagi i lepszej regulacji**.





NOWY HAMULEC Z DŹWIGNIĄ NA WYSOKOŚCI KOLAN

Nowa blokada koła z dźwignią kolanową wymaga mniejszej siły do zatrzaśnięcia, zapewniając jednocześnie mocną blokadę.



JASNE ZDEJMOWANE ŚWIATŁA LED

W wielu sytuacjach dobrze jest mieć własne oświetlenie - jeśli musisz wyjść w nocy do łazienki i nie chcesz oświetlać całego mieszkania, lub gdy wieczorem wracasz do domu i musisz zobaczyć przeszkody które mogą stanąć Ci na drodze. Światła LED QS5 X to świetne rozwiązanie! Dyskretnie zintegrowane z ogólną konstrukcją Twojego QS5 X i wyjmowane do ładowania, diody LED zapewniają świetną funkcję, która oświetla Ci drogę, gdy ich potrzebujesz!



NOWOŚĆ OPATENTOWANA STOPKA DO PRZECHYLANIA

Opatentowana stopka podniesie się, gdy uderzy w krawężnik lub stopień, zapobiegając w ten sposób zaczepieniu i przewróceniu się wózka.





Idealny towarzysz dla elektrycznych urządzeń wspomagających - Rama przednia składa się z wysokiej jakości kutych części - zaprojektowanych tak, aby wytrzymać duże obciążenie wywierane przez urządzenia wspomagające, które zapina się na ramę aby najwyższą wydajność. Wykonana z precyzją, gwarantuje, że przednia rama pozostaje mocna, zapewniając stabilną jazdę i długą żywotność, a jej unikalna konstrukcja oferuje stylowy wygląd dla świadomego użytkownika.



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE

UWOLNIJ SWOJĄ INDYWIDUALNOŚĆ Z CAŁYM SPEKTRUM OPCJI

Jeśli masz określone wymagania dotyczące siedzenia, możesz łatwo ulepszyć swój QS5 X za pomocą różnych poduszek i oparć JAY®. Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejrzeć wszystkie opcje dostępne w formularzu zamówienia.




Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej.

Wybierz spośród 24 żywych kolorów ramy i 4 kolorów widelca i obręczy kółka, aby stworzyć idealny wygląd swojego QS5 X! Niezależnie od tego, czy wolisz subtelność, czy dzikość, oferta kolorów sprawi, że Twój styl będzie się wyróżniał! Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejrzeć broszurę kolorów i znaleźć idealną kombinację dla Ciebie.



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej.

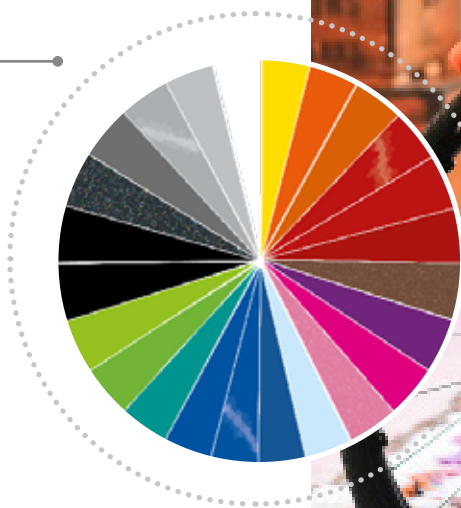



WERSJE RAMY

ZAMKNIĘTY PRZÓD LUB ODCHYLNE PODNÓŻKI - 1 KONCEPT, 2 RAMY

QS5 X jest dostępny z dwiema różnymi wersjami ramy — z Zamkniętym Przodem i z Odchylanymi Podnóżkami.

Wersja z Zamkniętym Przodem ma podnóżki, które są na stałe przymocowane do ramy wózka, zapewniając dodatkową stabilność i wsparcie. Ta cecha może być szczególnie korzystna dla osób o wyższych wymaganiach dotyczących pozycji, ponieważ pomaga utrzymać nogi w idealnie na swoim miejscu.

Wersja z Odchylanymi Podnóżkami posiada odchylane na bok podnóżki, co umożliwi bezpieczne i wygodne przesiadanie się na wózek, zwłaszcza z pozycji stojącej. Zdejmując podnóżek, można ustawić wózek bliżej obiektu, na którym chcesz się przesiadać, a ponadto rozmiar wózka po spakowaniu zostanie zminimalizowany.



OPCJE

STWÓRZ SWÓJ QS5 X

Chcesz zobaczyć, co QS5 X ma do zaoferowania, jak będzie wyglądał Twój QS5 X i ile będzie ważył? Zeskanuj kod QR i zbuduj swój własny QS5 X w nowym wizualizatorze 3D.



Zeskanuj kod QR, aby
dowiedzieć się więcej.

QS5 X jest dostarczany z dopasowanym pakietem komponentów o krytycznym znaczeniu klinicznym, dzięki którym jest idealnym towarzyszem dla wszystkich potrzeb związanych z mobilnością i odpowiedni dla prawie każdego. Aby uzyskać bardzo szczegółowy przegląd WSZYSTKICH dostępnych opcji, zapoznaj się z naszym nowym **Katalogiem opcji i akcesoriów**.



Zeskanuj kod QR, aby
dowiedzieć się więcej.

Chcesz coś wyjątkowego? Nasz zespół **Built-4-Me** może pomóc Ci stworzyć naprawdę indywidualny QS5 X, który jest nie z tego świata! Poproś sprzedawcę o więcej informacji.

built4me



KIM



U Kim zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA), gdy miała dwa lata i od około 20 lat porusza się na wózku. Mimo to jest zapałą podróżniczką, która uwielbia zwiedzać świat na czterech kółkach. Jej blog podróżniczy, *Wheeliewanderlust*, daje wgląd w jej ekscytujące doświadczenia z wakacji i zawiera pomocne wskazówki dla osób zainteresowanych podróżowaniem bez barier.

TAREK



Życie Tarka toczyło się wokół rowerów – od dzieciństwa, aż po teraźniejszość. Wyrobił sobie markę w świecie kolarstwa górskiego, jako były niemiecki BMX i zawodowy freerider na rowerach górskich, aż do wypadku, w wyniku którego doszło do paraplegii, który zatrzymał jego karierę w 2002 roku. Niezależnie od tego, Tarek nadal pozostawał na scenie. Założył swoją firmę *Rasolution* i nadal jest wpływową postacią w kształtowaniu i rozwijaniu świata rowerowego. W 2022 roku Tarek został wprowadzony do *Mountain Bike Hall of Fame*.

JOSH



Josh, weteran USMC, doznał urazu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym w 2009 roku podczas służby w Afganistanie. Josh z dumą służył jako członek Operacji Uderzenie Miecza, zdobywając Purpurowe Serce po eksplozji IED, która go sparaliżowała. Z pomocą majora Tammy'ego Phippsa Josh osiągnął swój główny cel, jakim była niezależność, czyli prowadzenie samochodu. Rozumiejąc przytłaczającą potrzebę szkolenia w zakresie rehabilitacji kierowców, Josh i Tammy wspólnie założyli *Driver Rehabilitation Center of Excellence, LLC*.

DANE TECHNICZNE	QS5 X
Maks. waga użytkownika	140 kg
Szerokość siedziska	340 - 540 mm (co 20 mm)
Głębokość siedziska	340 - 500 mm
Wysokość siedziska z przodu	360 - 540 mm
Wysokość siedziska z tyłu	350 - 520 mm
Wysokość oparcia	250 - 500 mm
Kąt oparcia	od -15° do +15°
Szerokość całkowita	SS +180/240/270 mm przy pochyleniu kół 0°, 2°, 4° i kołach 25". Całk. szer. w niektórych konfiguracjach może przekroczyć 800 mm.
Długość całkowita	1113 mm
Wysokość całkowita	1020 mm
Maks. szerokość zawracania	840 mm
Maks. bezpieczne nachylenie do użycia hamulców postojowych	7°
Wersje ramy	Z odchylanymi podnóżkami lub z zamkniętym przodem
Kąt giecia ramy	Odchylane podnóżki: 70° / 80° / 90°, Zamknięty przód: 75° / 85°
Przednie kółka	4", 5", 6", 7"
Koła tylne	22", 24", 25", 26"
Waga wózka	Odchylane podnóżki: od 10,1 kg, Zamknięty przód: od 9,9 kg
Waga po demontażu	Odchylane podnóżki: od 7,5 kg, Zamknięty przód: od 7,3 kg
Waga najcięższego elementu	2,2 kg
Zdemontowalne części	Koła tylne (na czas transportu)
Kolor ramy	24 kolory
Crash test	Tak (dopuszczony do transportu w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19:2022)
Transport bez użytkownika	Mocno i bezpiecznie zamocuj wózek w pojeździe (np. samochodzie)
Przeznaczenie i środowisko	Dla osób niezdolnych do chodzenia i o ograniczonej sprawności ruchowej; wewnątrz i na zewnątrz. Obsługa przez użytkownika lub asystenta.



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl



Rev. A © 06.2023

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów znajduje się w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.



Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



www.Sunrise-Medical.pl

Producent:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD, Germany



QUICKIE