

ABRA AS SUAS ASAS PARA A LIBERDADE

QS5 X



Siga o código QR para ver o
visualizador 3D online da QS5 X



ESCREVENDO UM NOVO CAPÍTULO.

5 MOTIVOS PARA EXPERIMENTAR A QS5 X[®].

1 TECNOLOGIA FREEFOLD - POUPE MAIS DE 40% DE ENERGIA EM CADA ENCARTE -

Imagine a liberdade de poder encartar facilmente a sua cadeira de rodas em segundos e com um mínimo de esforço. O inovador mecanismo de encarte FreeFold tornou-o possível, poupando mais de 40% de energia em cada encarte! O bloqueio automático de encarte Fold-N-Lock opcional é garantia de que a QS5 X se mantém bem dobrada, evitando aberturas involuntárias.

2 MUITO FÁCIL DE LEVANTAR – Com um peso de transporte extraordinariamente baixo, apenas 7,3 kg na versão com apoios de pés fixos e 7,5 kg na versão com apoios de pés desmontáveis, é a cadeira de rodas com armação em alumínio mais leve da sua categoria.

3 CONDUZA DURANTE MAIS TEMPO E SEM ESFORÇO – Com uma das armações mais leves e rígidas do seu segmento, graças aos inovadores processos de fabrico e às tecnologias exclusivas dos produtos de alta qualidade da Sunrise Medical, como o alumínio série 700 com um tratamento térmico especial, os tubos ovalados e as peças forjadas, o desenho da armação da QS5 X eleva a experiência de condução ao nível seguinte.

4 ELEGANTE E RESISTENTE – Com uma robusta armação fechada e a cruzeta ovalada de 4 braços, pode relaxar na certeza de que a sua cadeira está pronta a enfrentar quaisquer desafios que se lhe apresentem. As suas linhas elegantes e modernas conferem-lhe um desenho distinto e atraente.

5 ADAPTÁVEL ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS – Duas versões de armação, diferentes ângulos e uma ampla gama de opções, garantem a sua adaptabilidade às necessidades individuais, para o utilizador iniciante ao mais experimentado.



Siga o código QR para assistir
ao vídeo da QS5 X

FREEFOLD - POUPE MAIS DE 40% DE ENERGIA EM CADA ENCARTE

FÁCIL DE ENCARTAR E DE TRANSPORTAR graças ao inovador mecanismo de encarte **FREEFOLD**, sinónimo de engenharia e precisão da geometria de encarte. O resultado: **esforço mínimo para encartar e montar a sua cadeira** de rodas. Durante o encarte, o ângulo das rodas altera-se e a cadeira de rodas encartada mantém-se firme no solo com as rodas paralelas - uma verdadeira vantagem se encarta e transporta a sua QS5 X frequentemente.



Siga o código QR para assistir ao vídeo sobre o encarte.

A opção de bloqueio automático em encarte **FOLD-N-LOCK** mantém a cadeira dobrada de forma segura. Com um simples "clique", **a sua cadeira de rodas permanecerá na sua posição encartada mais compacta**, fazendo com que o seu transporte seja realmente simples.



Os **TUBOS OVALADOS DE ALUMÍNIO*** da cruzeta de 4 braços da QS5 X são mais rígidos, resistentes e leves que os tubos redondos convencionais. Isto faz com que seja **menos provável que sofram flexão sob pressão, proporcionando rigidez excepcional**, redução da flexão durante a condução e um encarte sem esforço.



*A mesma tecnologia premium aplicada aos modelos Nitrum e Xenon².





Desenho distinto e elegante -
a QS5 X apresenta um desenho minimalista com ajustes ocultos e uniões da forqueta perfeitamente integradas. Com apenas parafusos ou furos à vista que comprometam a estética - isto dá à sua QS5 X uma aparência elegante e sofisticada.



Siga o código QR para assistir à QS5 X em movimento.

LEVE

IMPULSO E LEVANTAR SEM ESFORÇO

LEVE - Com um peso de transporte especialmente reduzido de 7,3 kg na versão com apoios de pés fixos e 7,5 kg na versão com apoios de pés desmontáveis, a QS5 X é a cadeira encartável em alumínio mais leve do seu segmento. Não só é confortável de levantar e transportar, como também requer pouco esforço de impulso, aumentando assim a eficiência energética do utilizador. O material e a construção marcam a diferença - resistente não é sinónimo de pesado. A armação da QS5 X é fabricado em alumínio da série 7000 da mais elevada qualidade, oferecendo uma relação entre resistência e peso excepcional, com muitas aplicações na indústria aeroespacial onde a resistência, durabilidade e peso são fatores essenciais.


RIGIDEZ SUPERIOR - O tratamento térmico do alumínio utilizado no processo de fabrico da armação permite que este seja mais estreito e leve, sem diminuir a sua resistência. O resultado é uma cadeira de rodas surpreendentemente fácil de levantar e que transfere de forma eficaz a sua energia diretamente às rodas.



 Siga o código QR para assistir ao vídeo.



Fácil de levantar e transportar, tanto pelo próprio como pelos acompanhantes.

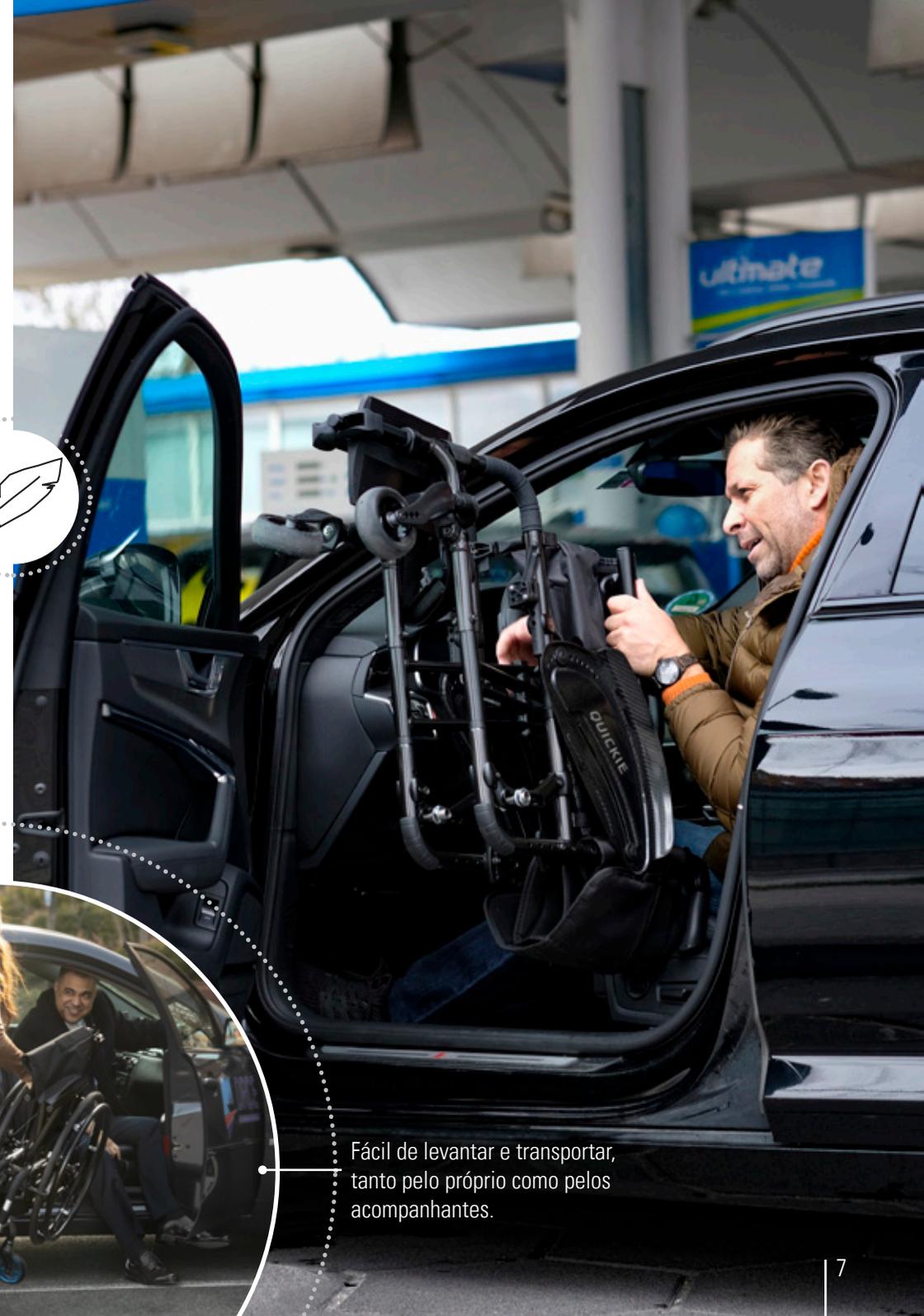



OPÇÕES SMART

CONFORTO E FUNCIONALIDADE

PONTOS DE CONTACTO

A QS5 X conta com proteções nos pontos de contacto chave como no suporte da forqueta, os cabides e a armação traseira que proporcionam um agarrar confortável e sem deslizamentos, facilitando as transferências ou o transporte da cadeira. Estes pontos de contacto são uma das muitas inovações desenvolvidas graças ao feedback dos utilizadores. Permitem levantar a cadeira de rodas com facilidade, reduzindo a tensão nos pulsos. Além disso, protegem a armação de arranhões.

SUPORTE DE FORQUETA PATENTEADO - DESEMPENHO INCRÍVEL EM LINHA RETA

Com o sistema patenteado ajustável em 3 direções da forqueta, a sua condução torna-se notavelmente eficiente. Isto significa **menos esforço para se manter em linha reta**.

ARMAÇÃO IDEAL

Várias versões da armação facilitam a escolha da mais adequada. O comprimento da armação adapta-se especificamente à profundidade de assento selecionada, otimizando a experiência em sedestação do utilizador, **com uma armação muito compacta**.


NOVOS APOIOS DE PÉS EM ALUMÍNIO

Os novos apoios de pés em alumínio (plataforma única ou dividida) foram desenhados para **diminuir o peso e otimizar os ajustes**.



TRAVÃO ERGONÓMICO REDESENHADO

O eficiente travão de joelho com formato ergonómico **requer menos força** para o seu acionamento ao mesmo tempo que proporciona um **forte bloqueio das rodas**.

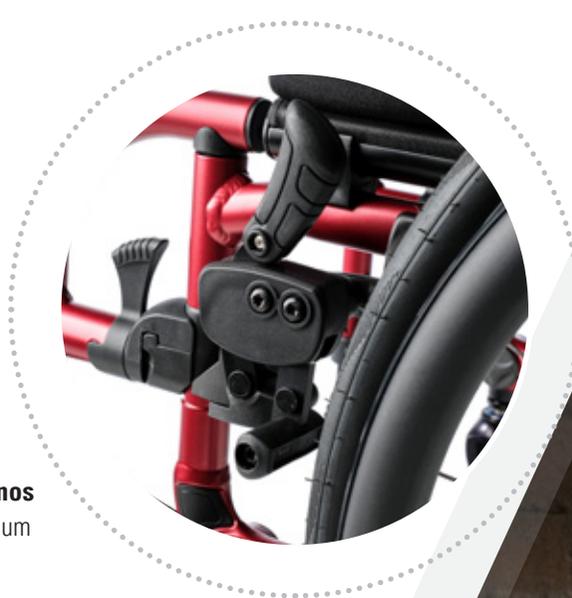

LUZES LED POTENTES

Em muitas situações, é bom poder contar com a sua própria iluminação integrada na cadeira: se precisar ir à casa de banho durante a noite e não pretender iluminar toda a casa ou no caminho para casa durante a noite e precisar de ver obstáculos que o poderiam desequilibrar. As luzes LED opcionais da QS5 X são uma excelente solução. Integradas de forma discreta no design da sua QS5 X, são removíveis para o seu carregamento, proporcionando uma excelente função para iluminar o seu caminho.



Siga o código QR para assistir ao vídeo.

TUBO TRASEIRO PATENTEADO

O novo tubo traseiro incorpora uma articulação de segurança que facilita a sua dobragem em caso de choque contra um passeio ou escada, **evitando que a cadeira vire para a frente e garantindo a segurança do utilizador**.





A companheira perfeita para dispositivos de ajuda elétricos - A parte frontal da armação apresenta peças forjadas de elevada qualidade, desenhadas para aguentar a carga dos dispositivos de assistência elétrica quando estes são acoplados à cadeira. Desta forma, é garantido que a parte frontal se mantém forte para uma condução estável e de elevada durabilidade.



Siga o código QR com o seu telemóvel.


OPÇÕES

DÊ ASAS À SUA INDIVIDUALIDADE COM ESTA INCRÍVEL GAMA DE OPÇÕES

Se tem requisitos específicos de sedestação, pode combinar facilmente a sua QS5 X com as **almofadas e encostos JAY®**. Siga o código QR seguinte para conhecer todas as opções disponíveis na folha de pedido.



Escolha entre mais de 20 espetaculares cores para a armação e 4 cores para as forquetas de alumínio e jantes das rodas dianteiras, e crie a imagem perfeita para a sua QS5 X. Tanto se preferir um estilo subtil como um selvagem, a variedade de cores fará com que se destaque!

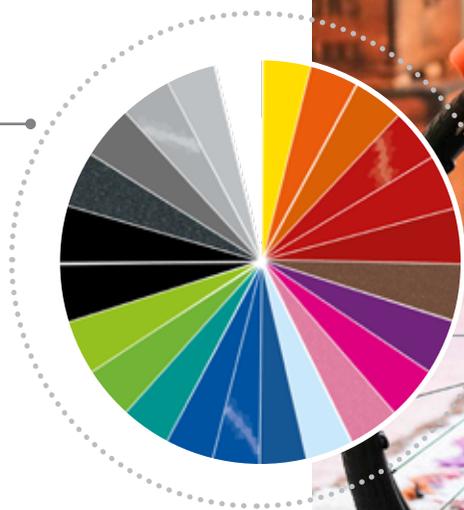



TIPOS DE ARMAÇÃO

APOIOS DE PÉS FIXOS OU DESMONTÁVEIS -

1 CONCEITO

2 TIPOS DE ARMAÇÃO

A QS5 X está disponível em duas versões diferentes de armação: com apoios de pés fixos ou desmontáveis.

A versão com **apoios de pés fixos** tem apoios de pés soldados à armação da cadeira, proporcionando estabilidade e apoio adicionais. Esta característica pode ser especialmente interessante para as pessoas com maiores exigências de posicionamento, pois ajuda a manter as pernas numa posição ideal.

Na versão com **apoios de pés desmontáveis** estes podem ser rebatidos para o lado, permitindo uma transferência segura e confortável, especialmente desde uma posição em pé. Ao retirar o apoio de pés, é possível colocar a cadeira de rodas mais próxima do lugar de onde se pretende realizar a transferência. Além disso, o tamanho de transporte da cadeira reduz-se substancialmente.



OPÇÕES

DESENHE A SUA QS5 X

Quer conhecer o que oferece a QS5 X, como será e quanto pesará?
Siga o código QR e desenhe a sua cadeira no **visualizador 3D online**.




Siga o código QR para aceder ao visualizador 3D online.

A QS5 X oferece uma longa lista de opções e componentes clínicos que a convertem na companheira perfeita para todas as necessidades de mobilidade e adaptabilidade para quase todos os utilizadores. Para conhecer uma descrição detalhada de TODAS as opções disponíveis, consulte o nosso novo catálogo de opções e acessórios.



Siga o código QR para ver o catálogo de acessórios.

Quer algo único? A nossa equipa **Built-4-Me** pode ajudar na criação de uma QS5 X verdadeiramente individual e fora de série. Solicite mais informação na sua ortopedia.



OS NOSSOS MODELOS

KIM LUMELIUS



A Kim foi diagnosticada com atrofia muscular espinal (AME) quando tinha dois anos e precisa de uma cadeira de rodas há aproximadamente 20 anos. A Kim é uma viajante apaixonada que adora explorar o mundo sobre quatro rodas. O seu blog de viagens, Wheeliewanderlust, oferece uma visão das suas emocionantes experiências de férias e oferece conselhos úteis para os interessados em viajar sem barreiras.



wheeliewanderlust

TAREK RASOULI



A vida de Tarek sempre esteve ligada ao mundo das bicicletas, desde a sua infância até ao presente. Tornou-se num nome do ciclismo de montanha como profissional de BMX e freerider de bicicleta de montanha, até que um acidente em 2002 lhe provocou uma paraplegia que terminou com a sua carreira. Apesar disso, Tarek continuou envolvido com o desporto. Fundou a sua própria empresa, Rasolution, e continuou a ser uma figura influente na configuração e desenvolvimento do mundo do ciclismo. Em 2022, Tarek foi incluído no Salão da Fama das Bicicletas de Montanha.



tarekrasouli

JOSH HIMAN



Josh, um veterano do Corpo de Marines dos estados Unidos, sofreu uma lesão na medula espinal cervical em 2009 durante uma missão no Afeganistão. Josh serviu com orgulho na Operação Strike of the Sword e recebeu a Medalha de Mérito Púrpura depois da explosão de um artefacto que o deixou paralisado. Com a ajuda da Mayor Tammy Phipps, conseguiu o seu objetivo principal para atingir a independência: poder conduzir. Estando conscientes da absoluta necessidade de formação para condutores em reabilitação, Josh e Tammy juntaram-se para fundar o Centro de Excelência para condutores em Reabilitação, LLC.



josh_himan

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QS5 X
Peso máximo do utilizador	140 kg
Largura de assento	34 - 54 cm (em incrementos de 2 cm)
Profundidade do assento	34 - 50 cm (em incrementos de 2 cm)
Altura dianteira do assento	36 - 54 cm
Altura traseira do assento	35 - 52 cm
Altura do encosto	25 - 50 cm
Ângulo do encosto	De -15° to +15° (opcional)
Largura total:	Largura de assento +18/23/26 cm com camber de 0°, 2°, 4° e rodas de 24". A largura total pode superar os 80 cm em determinadas configurações.
Comprimento total	111,3 cm
Altura total	102 cm
Declive máximo de segurança para o uso dos travões de estacionamento	7°
Tipos de armação	Com apoios de pés fixos ou desmontáveis
Ângulo da armação	Com apoios pés desmontáveis: 70° / 80° / 90°, Com fixos: 75° / 85°
Rodas dianteiras	4", 5", 6", 7"
Rodas traseiras	22", 24", 25", 26"
Peso de transporte	Com apoios pés desmontáveis: desde 7,5 kg, Com fixos: desde 7,3 kg
Peso da cadeira	Com apoios pés desmontáveis: desde 10,1 kg, Com fixos: desde 9,9 kg
Peso da parte mais pesada	2,2 kg
Cor da armação	24 cores
Crash tested	Sim. Aprovada para o transporte em veículos segundo a ISO 7176-19:2022)



Rev. 2 Agosto 2023



Sunrise Medical S.L
 Polígono Bakiola, 41
 48498 Arrankudiaga
 Vizcaya, Espanha
 Tel: +34 (0) 902 14 24 34
 Fax: +34 (0) 94 648 15 75
 www.SunriseMedical.pt

Tolerância de fábrica: +/- 10 mm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva o direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

