

# Q300<sup>®</sup> M Mini

Wyobraź sobie możliwości



Wózki elektryczne  
Serii Q



Q300 M Mini

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



## KOMPAKTOWA PRZESTRZEŃ? POZNAJ ULTRAWĄSKĄ BAZĘ!

Masz dość słuchania, gdzie nie możesz iść?  
Ultrakompaktowa podstawa Q300 M Mini o  
szerokości 520 mm jest tak absurdalnie wąska,  
że dotrze tam, gdzie inni nie mogą.

520 mm

1120 mm



## ULTRAKOMPAKTOWA ŚREDNICA SKRĘTU 1120 MM

Dzięki technologii TRUE napędu na środkowe koła, Q300 M Mini zawraca w miejscu przy bardzo małej średnicy skrętu wynoszącej zaledwie 1120 mm. Dla porównania, wózki RWD i FWD muszą „obracać się” na przednich lub tylnych kołach napędowych, więc średnica skrętu jest większa.



## CZYM JEST PRAWDZIWA TECHNOLOGIA NAPĘDU NA ŚRODKOWE KOŁA?

Dzieje się tak, gdy koła napędowe wózka są ustawione centralnie względem jego długości. Jeśli wózek jest ustawiony do przodu lub do tyłu, średnica skrętu jest większa (ponieważ potrzeba więcej miejsca na obracanie wózka). Mniejszy jest również ciężar przenoszony na koła napędowe, co zmniejsza przyczepność. Q300 M Mini zapewnia najbardziej kompaktową średnicę skrętu przy zwiększonej przyczepności dzięki PRAWDZIWEMU napędowi na środkowe koła.

## WĄSKIE KOŁA NAPĘDOWE 300 MM (12")

Szukasz maksymalnej zwrotności w pomieszczeniach? Te standardowe koła napędowe zapewniają najbardziej kompaktową szerokość podstawy 520 mm.





#### ODCHYLANE PODŁOKIETNIKI

Masz problem z włożeniem i wyjęciem swojego Q300 M Mini? Wystarczy odchylić podłokietniki do tyłu, aby uzyskać więcej miejsca. Są również dostępne w wersji wyjmowanej lub rozkładanej.

410 mm

#### NISKA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

Dopasuj się wygodnie pod stołami lub podczas jazdy pojazdem przystosowanym do wózków dzięki wyjątkowo niskiej wysokości siedziska do podłogi Q300 M Mini, zaczynającej się od 410 mm przy stałym nachyleniu i 430 mm przy elektrycznym podnoszeniu/przechylaniu siedziska.

# DODAJ OPCJE ELEKTRYCZNE DO SWOJEGO Q300 M MINI

Q300 M Mini to nie tylko DUŻE osiągi wózka, ale także funkcje DUŻEGO wózka! Od elektrycznego przechylanie siedziska, podnoszenia, odchylenia oparcia lub podnoszenia podnóżków — jest wyposażony w wiele opcji, które spełnią Twoje potrzeby kliniczne oraz związane ze stylem życia.



## ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE PODNÓŻKI Z KOMPENSACJĄ DŁUGOŚCI

Podnosząc i opuszczając nogi, te podnóżki pomagają zmniejszyć obrzęk i poprawić krążenie. Regulacja długości pozwala utrzymać stałą pozycję siedzenia, zapobiegając niepożądanemu ruchowi miednicy. Wersja montowana centralnie (na zdjęciu) zapewnia również większą przestrzeń z przodu wózka do manewrowania i przesiadania.

## TILT-IN-SPACE

Dostosuj pozycję siedzenia przez cały dzień dzięki sterowanemu przechyleniu siedziska do 50°. Pomagając w odciążeniu poprzez redystrybucję ciężaru z poduszki na oparcie, utrzymuj wygodną pozycję siedzenia przy zmniejszonym wysiłku mięśni.

0°- 50°

# WYBITNY ZAWODNIK

Poznaj PRAWDZIWY kompaktowy wózek z PRAWDZIWYMI rewelacyjnymi osiągnięciami w terenie. Wąski i zwinny w zatłoczonym mieście i z DUŻYMI osiągnięciami do jazdy na świeżym powietrzu, wyprzedza konkurencję.

## TECHNOLOGIA ANTI-PITCH

Tradycyjnie, gdy wózek zatrzymuje się na zboczu, zatrzymanie powoduje szarpnięcie do przodu. To problem, który wyeliminowaliśmy dzięki technologii Anti-Pitch — dzięki czemu siedzisz bezpiecznie i stabilnie.



## NIEZALEŻNE AMORTYZOWANE ZAWIESZENIE WSZYSTKICH KÓŁ

Nasze OPATENTOWANE niezależne amortyzowane zawieszenie wszystkich kół zapewnia, że wszystkie sześć kół pozostaje na ziemi podczas pokonywania przeszkód. Wszelkie wstrząsy i uderzenia są pochłaniane przez zawieszenie, zapewniając miękką i płynną jazdę.



## PRZESUWAJ GRANICE Z KOŁAMI NAPĘDOWYMI 355 MM (14 CALI).

Uzyskaj najlepszą przyczepność, stabilność i pokonywanie przeszkód dzięki tym agresywnym kołom terenowym. Co więcej, sprawiają, że Twój Q300 M Mini jest smukły i ma zaledwie 570 mm



## SMUKŁA MASZYNA DO POKONYWANIA KRAWĘŻNIKÓW.

Czy nienawidzisz tego, gdy w zasięgu wzroku nie ma krawężnika? Na szczęście Q300 M Mini z kołami napędowymi 300 mm (12 cali) radzi sobie z krawężnikami do 50 mm, więc nie trzeba pokonywać długich tras. Potrzebujesz poradzić sobie z czymś nieco trudniejszym? Zmień na koła napędowe 355 mm (14") i pokonuj krawężniki do 70 mm.

## NIE MA POTRZEBY SPIESZYĆ SIĘ Z POWROTEM

Zasilany mocnymi akumulatorami 56 Ah, Q300 M Mini zabierze Cię w dowolne miejsce dzięki imponującemu zasięgowi do 36 km.





## ELEKTRYCZNIE ODCHYLANE OPARCIE

Podobnie jak fotel rozkładany w samochodzie, elektryczne odchylenie oparcia pomaga rozłożyć ciężar na większej części oparcia przy zachowaniu stałego kąta siedzenia.



300mm

## ELEKTRYCZNE PRZECHYLENIE SIDZIESKA I WINDA

Osiągnij nowe wyżyny dzięki podniesieniu siedzenia o 300 mm i dosięgnij przedmiotów codziennego użytku, które w przeciwnym razie byłyby poza zasięgiem. Możesz także łatwiej się przesiadać, ponieważ znajdujesz się na wyższej pozycji, z której możesz stać. Ponadto, dzięki przechyleniu siedziska do 50°, możesz usiąść wygodnie i cieszyć się większym relaksem i rozłożeniem nacisku.

## C-Me

JEDŹ Z PODNIESIONYM SIEDZISKIEM I AKTYWNYM ZAWIESZENIEM DO 4,5 KM/H

C-Me polega na zobaczeniu siebie i tylko siebie. Podnieś siedzisko do 300 mm podczas jazdy z prędkością 4,5 km/h i poruszaj się ramieniem w ramieniu ze wszystkimi wokół. W przeciwieństwie do innych, nasze zawieszenie również się nie blokuje, więc możesz cieszyć się płynną i wygodną jazdą od początku do końca. Możesz nawet podnosić lub opuszczać siedzisko za naciśnięciem jednego przycisku, bez konieczności zatrzymywania się podczas zmiany pozycji!






Kolory przedstawione w tej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z zastosowanego procesu drukowania.



# AKCESORIA

Będziesz miał 12 ekscytujących wzorów obudowy do wyboru! Połącz lub skontrastuj je z dodatkowymi siedmioma kolorami akcentującymi koło i kółka aby osiągnąć idealne połączenie.

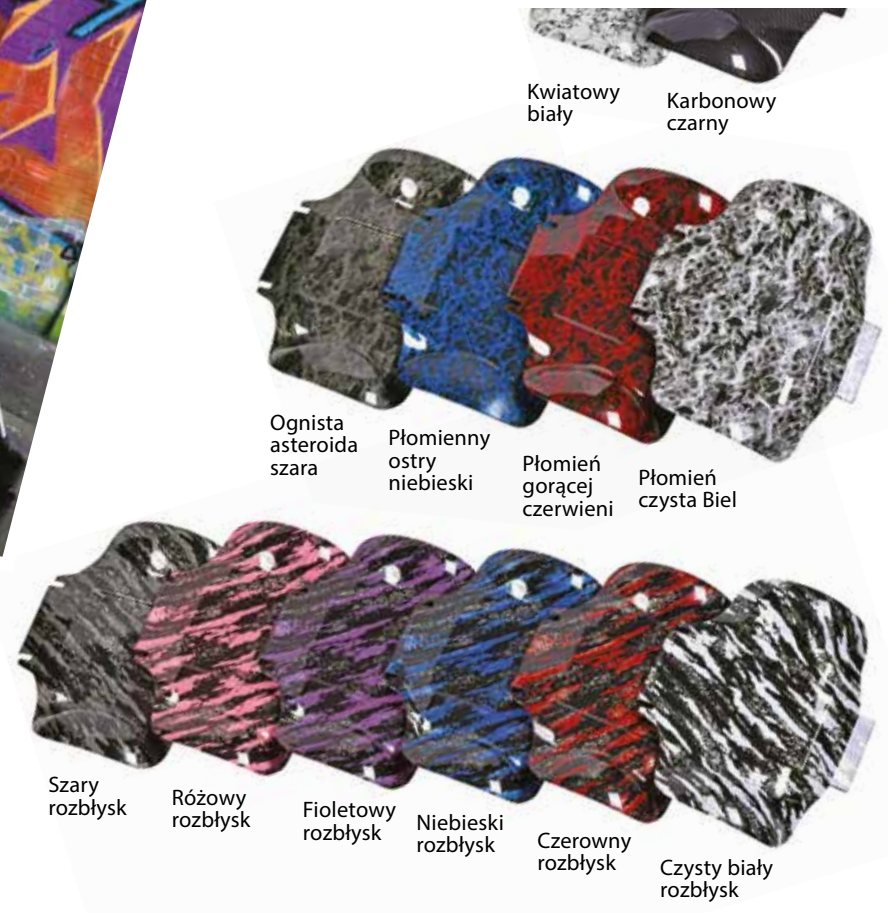

- OBUDOWA:** Czerwony Niebieski Biały Czarny
- AKCENT:** Zielony Pomarańczowy Niebieski Czerwony Silver Biały Czarny

# PRZEJMIJ KONTROLĘ

Dostępne z VR2 w standardzie, zmień na R-Net Advanced Joystick i ciesz się dużym, czytelnym wyświetlaczem HD, prostymi w obsłudze przełącznikami łopatkowymi i łącznością z otaczającym Cię światem.

## POŁĄCZ SIĘ ZE SWOIM ŚWIATEM

Bezproblemowo przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem za pomocą zintegrowanych funkcji podczerwieni, Bluetooth i i-device. Steruj telewizorem, telefonem i innymi systemami rozrywki domowej za pomocą joysticka.

## OPATENTOWANE PRZYCISKI PROGRAMOWALNE

Zmień przycisk joysticka na dowolne polecenie dzięki naszym opatentowanym przyciskom z możliwością programowania. Możesz także przypisać drugą funkcję (długie naciśnięcie) do przycisku, aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji bez użycia joysticka.



## ALTERNATYWNE STEROWANIE SWITCH-IT

Jeśli jazda za pomocą tradycyjnego joysticka nie jest dla Ciebie, alternatywne sterowanie napędem SWITCH-IT pozwoli Ci w pełni kontrolować Q300 M Mini za pomocą różnych inteligentnych sposobów, w tym sterowania głową.



Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie, aby uzyskać więcej informacji.

## SYSTEM MOCOWANIA LINK-IT

Moduły i rurki Link-it (sprzedawane oddzielnie) można łatwo łączyć ze sobą, aby zamontować specjalny element sterujący na Q300 M Mini. Łatwy do pozycjonowania, minimalistyczny i prosty w użyciu, następnym razem, gdy będziesz musiał zamontować specjalny element sterujący, po prostu połącz go!



# SEDEO LITE ELASTYCZNA PODUSZKA OPARCIA

Wybierz tą wyjątkową poduszkę oparcia, która bez wysiłku łączy regulowane, pełne tylne i boczne podparcie tułowia z najwyższym poziomem zanurzenia, który trzeba poczuć, aby w to uwierzyć!

## DOPASOWUJE SIĘ DO KRĘGOSŁUPA

Zamiast sztywnej podstawy, elastyczna poduszka oparcia ma 8 regulowanych pasków, które owijają się wokół pleców. Tam, gdzie inne oparcia mają ograniczony kontakt z kręgosłupem, warstwa elastycznej poduszki oparcia z miękkiej pianki dopasowuje się do Ciebie, zapewniając pełny kontakt, wygodę i stabilność.

Jest tak wciągająca, że nawet osoby z umiarkowaną lub ciężką postawą kifotyczną mogą siedzieć znacznie bardziej wyprostowane bez poświęcania komfortu.



Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie, aby uzyskać więcej informacji.

# DANE TECHNICZNE



Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie,  
aby uzyskać więcej informacji.

## Q300 M Mini

System siedziska	SEDEO LITE / SEDEO PRO	Długość podudzia	180 - 460 mm (7" - 18")
El. przech. siedziska	0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°	Wysokość siedziska	415 - 490mm (16" - 19")
Szerokość siedziska	385 - 510 mm (15" - 20")	Maks. waga użytkownika	136 kg
Głębokość siedziska	410 - 560 mm (16" - 22")	C-Me	Tak
Wysokość oparcia	460 - 510 mm (18" - 20")	Maks. zasięg (ISO 7176-4)	Do 25 km (z akumulatorami 41 Ah) Do 36 km (z akumulatorami 56 Ah)
Całk. szerokość	Od 520 mm (od 25.5")	Waga wózka (bez akumulatorów)	Od 103 kg
Długość całkowita (z podn. centralnym)	1060 mm (41.7")	Koła napędowe	12" / 13" / 14"
Średnica zawracania	1120 mm (44.1")	Maks. prędkość	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Maks. bezpieczny kąt podjazdu	6°	Akumulatory	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Maksymalna wysokość krawężnika	50 mm (z kołami napędowymi 12") 60 mm (z kołami napędowymi 13") 70 mm (z kołami napędowymi 14")	Transport bez użytkownika	Zamocuj bezpiecznie wózek w pojeździe (np. samochodzie lub samolocie)
Elektronika	VR2, R-NET	Przeznaczenie i środowisko	Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Typ wózka - klasa B



### Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6  
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38  
Fax: +48 42 209 36 67  
E-Mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)



Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie [www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl).

Producent:  
Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4, Germany  
D-69254 Malsch / Heidelberg  
Tel. +49 (0)7253 980-0

