

UNFOLD YOUR FREEDOM

QS 5 X





STIAMO SCRIVENDO UN NUOVO CAPITOLO.

5 BUONE RAGIONI PER PROVARE QS5 X®.

1 FREEFOLD - PIÙ DEL 40% DI ENERGIA RISPARMIATA A OGNI CHIUSURA - Il design superpreciso FreeFold garantisce una forza di chiusura che richiede oltre il 40% di forza in meno rispetto alle altre carrozzine della sua fascia. Il fissaggio Fold-N-Lock opzionale garantisce che QS5 X rimanga ben chiusa, evitando aperture involontarie.

2 SOLLEVARLA È UN GIOCO DA RAGAZZI - Con un peso di trasporto straordinariamente basso, da 7,3 kg per il telaio Fixed Front e 7,5 kg per il telaio Swing Away, è la carrozzina in alluminio più leggera sul mercato e stabilisce un nuovo standard.

3 SPINGERE PIÙ A LUNGO E CON MENO SFORZO - Il telaio della QS5 X non solo è il più leggero, ma è anche uno dei più rigidi sul mercato grazie ai processi di produzione e alle tecnologie esclusive che caratterizzano i prodotti di alta qualità di Sunrise Medical, come l'alluminio serie 7000 appositamente trattato termicamente, i tubi ovalizzati e le parti forgiate: l'esperienza di guida raggiunge livelli superiori.

4 ELEGANTE MA ROBUSTA - Grazie alla robusta struttura a telaio chiuso e alla crociera a 4 bracci con tubi ovalizzati, potrete stare tranquilli sapendo che la vostra carrozzina sarà in grado di gestire qualsiasi cosa vi troviate di fronte. Le sue linee eleganti e moderne le conferiscono un aspetto elegante e sofisticato.

5 ADATTABILE ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI - Due versioni di telaio, diversi angoli anteriori del telaio e un pacchetto personalizzato di accessori garantiscono l'adattamento alle esigenze individuali, indipendentemente dal fatto che queste possano cambiare nel tempo, dall'utente alle prime armi all'utente esperto.



PERFORMANCE IN CHIUSURA

FREEFOLD - PIÙ DEL 40% DI ENERGIA RISPARMIATA A OGNI CHIUSURA

SI PIEGA FACILMENTE E RIMANE PIEGATA grazie all'innovativo sistema **FREEFOLD**. FreeFold è il risultato di una sofisticata e precisa ingegnerizzazione della geometria di chiusura della carrozzina, che si traduce nella possibilità di applicare **una forza particolarmente ridotta** durante le operazioni di chiusura e di apertura della carrozzina. Durante la chiusura la campanatura delle ruote non cambia e la carrozzina piegata rimane ben dritta sulle ruote, una soluzione molto utile se dovete chiudere e trasportare spesso la vostra QS5 X.



L'opzione **FOLD-N-LOCK** mantiene la carrozzina ben chiusa. Con un semplice "click", la vostra carrozzina rimarrà piegata e compatta. **Non dovete fare attenzione a tenerla chiusa** mentre la solleverete per riporla!



I **TUBI OVALIZZATI** (la stessa tecnologia premium di Nitrum e Xenon²) della crociera a 4 bracci di QS5 X sono più rigidi, più resistenti e più leggeri dei tubi a sezione circolare. In questo modo è meno probabile che si fletta sotto pressione, garantendo **un'eccezionale rigidità e una flessione ridotta** durante la guida e una chiusura senza sforzo. Un successo assicurato!







Linee eleganti e moderne - QS5



X è dotata di un design minimalista con regolazioni nascoste e tubi dei supporti per le forcelle perfettamente integrati. Poche viti o fori visibili che compromettono l'estetica: questo conferisce alla vostra QS5 X un aspetto elegante e sofisticato.

SUPERLEGGERA

FACILE DA SPINGERE E SOLLEVARE GRAZIE AL PESO PIUMA DI QS5 X

LEGGEREZZA SENZA PARI - Un peso di trasporto notevolmente ridotto, da 7,3 kg per il telaio Fixed Front e 7,5 kg per il telaio Swing Away! QS5 X, grazie al telaio chiuso pieghevole in alluminio più leggero sul mercato, non solo è comoda da sollevare e trasportare, ma è anche facile da spingere per aumentare **l'efficacia di spinta dell'utente**. Il materiale e la costruzione fanno la differenza: forte non significa sempre pesante. Il telaio di QS5 X è realizzato in **alluminio della serie 7000 di alta qualità, progettato per un rapporto resistenza/peso eccezionalmente elevato** e utilizzato in molte applicazioni aerospaziali dove resistenza, durata e peso sono fattori essenziali.

RIGIDITA' SUPERIORE - Il **trattamento termico** del telaio in alluminio, effettuato con un processo di produzione brevettato, consente di ottenere un telaio più sottile e leggero, senza sacrificare la resistenza. Il risultato è una carrozzina sorprendentemente facile da sollevare e che trasferisce una **maggiore quantità di spinta alle ruote**.

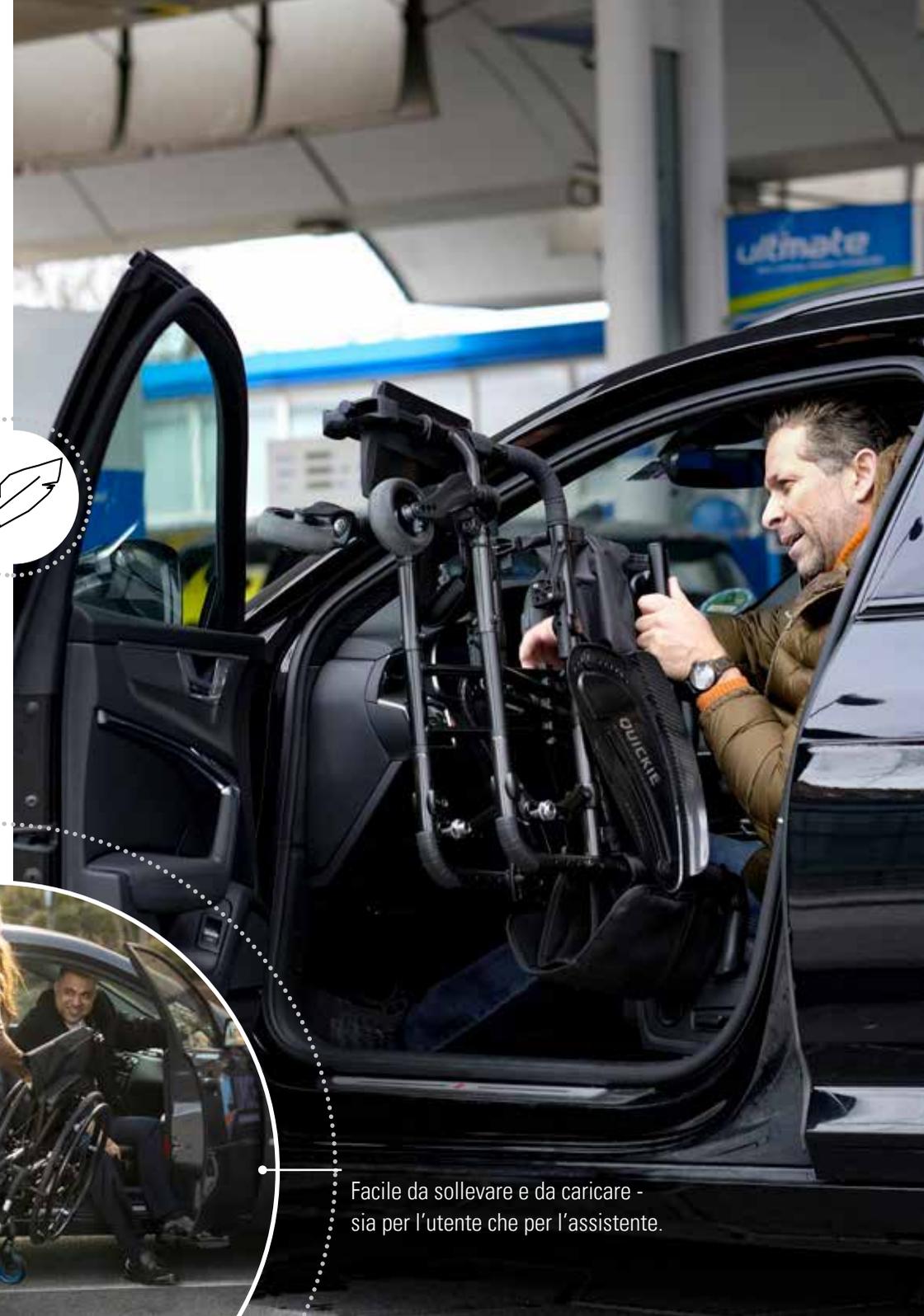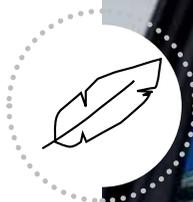

Facile da sollevare e da caricare -
sia per l'utente che per l'assistente.



OPZIONI SMART

COMFORT E FUNZIONALITA'

PUNTI DI PRESA ERGONOMICI

QS5 X è dotata di protezioni sui punti di presa delle forcelle, dell'angolo delle pedane e del telaio dello schienale che offrono una **presa confortevole** per evitare che la carrozzina scivoli dalle mani durante i trasferimenti e i sollevamenti. Questi punti di presa sono una delle tante innovazioni rese possibili grazie al contributo degli utenti e degli assistenti, permettono di sollevare facilmente la carrozzina, di ridurre lo sforzo dei polsi, specialmente durante l'utilizzo quotidiano. Inoltre proteggono la carrozzina dai graffi.

SUPPORTI PER LE FORCELLE BREVETTATI: GUIDA SEMPRE PERFETTAMENTE RETTILINEA

Grazie al meccanismo brevettato per regolare in 3 direzioni i supporti per le forcelle, è possibile regolare la traiettoria rettilinea di QS5 X. Traiettoria rettilinea significa **meno energia persa per controsterzare!**

IL TELAIO GIUSTO

Le varie versioni di telaio vi consentono di scegliere quello più adatto a voi! La lunghezza del telaio è specifica per quasi tutte le lunghezze della seduta per essere sicuri che QS5 X rimanga **il più compatta possibile.**


NUOVA PEDANA IN ALLUMINIO

La nuova pedana in alluminio (sia unica che separata) è stata ridisegnata per **essere più leggera e più regolabile.**



NUOVI FRENI

I nuovi freni richiedono **meno forza** per essere azionati e sono ancora **più sicuri**.

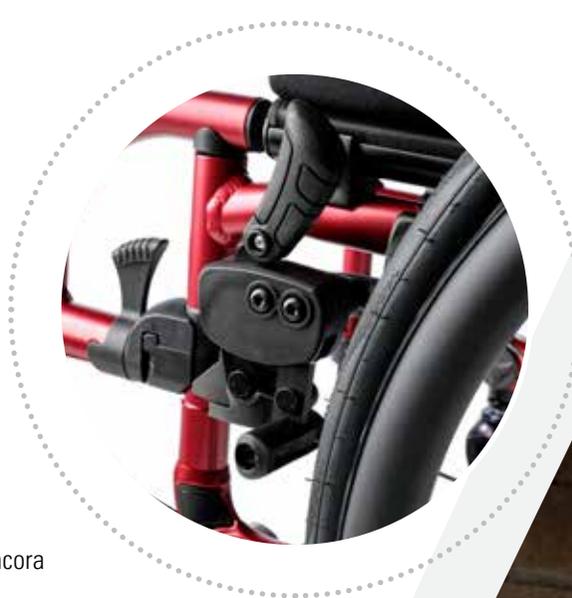

LUMINOSE LUCI A LED RIMOVIBILI

In molte situazioni è utile che la carrozzina sia dotata di una sua luce propria: se dovete andare in bagno di notte e non volete illuminare tutto l'appartamento, o se state tornando a casa la sera e dovete vedere gli ostacoli che potrebbero farvi perdere l'equilibrio. Le luci a LED di QS5 X sono un'ottima soluzione! Discretamente **integrate nel design di QS5 X** e **rimovibili per la ricarica**, le luci a LED sono ottime per illuminare il vostro cammino quando ne avete bisogno!



NUOVE PEDANE PER IL RIBALTAMENTO BREVETTATE

La pedana per il ribaltamento brevettata si piega verso l'alto qualora dovesse urtare un marciapiede o un gradino **evitando così che la carrozzina rimanga incastrata e possa ribaltarsi**.






La compagna perfetta per un propulsore elettronico anteriore - Il telaio anteriore è dotato di parti forgiate di alta qualità, progettate per resistere all'elevato carico che i propulsori elettronici anteriori applicano al telaio e per offrire prestazioni di alto livello. Realizzati con precisione, garantiscono grande solidità al telaio anteriore per una guida stabile e una lunga durata, mentre il loro design unico offre un look elegante per chi ama lo stile.

OPZIONI

LIBERATE LA VOSTRA PERSONALITÀ UNICA GRAZIE A TANTE OPZIONI

Se avete esigenze specifiche di seduta, potete facilmente completare la vostra QS5 X con **i cuscini e gli schienali JAY®**. Scansionate il codice QR qui sotto per esaminare tutte le opzioni disponibili nel modulo d'ordine.

Scegliete tra 24 vivaci colori per il telaio e 4 colori per le forcelle e per i cerchi per creare il look perfetto della vostra QS5 X! Preferite un look delicato o selvaggio? L'offerta di colori farà sì che il vostro stile si distingua comunque! Scansionate il codice QR qui sotto per esaminare la brochure dei colori e trovare la vostra combinazione perfetta.

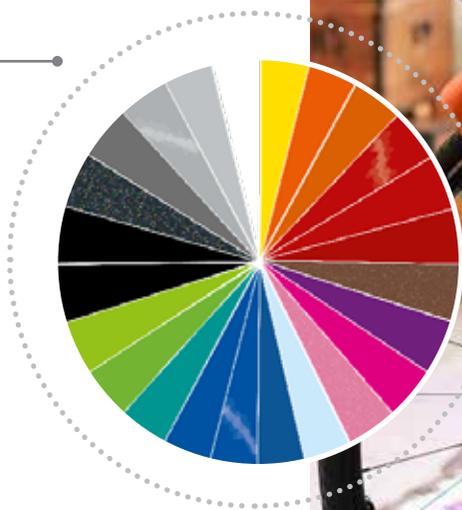



VERSIONI TELAIO

FIXED-FRONT 0 SWING-AWAY: 1 CONCETTO, 2 TELAI

QS5 X è disponibile con due diverse versioni di telaio, Fixed-Front and Swing-Away.

La versione **Fixed-Front** ha le pedane integrate nel telaio della carrozzina, offrendo così ancora più supporto e stabilità. Questa caratteristica è particolarmente utile per coloro che hanno maggiori esigenze posturali poiché consente di mantenere le gambe in una posizione ideale.

Nella versione **Swing-Away** invece le pedane sono estraibili e possono essere ruotate verso l'esterno in modo tale da consentire trasferimenti facili e sicuri, specialmente partendo dalla posizione eretta. Rimuovendo le pedane è possibile posizionare la carrozzina vicino al supporto dove desiderate trasferirvi e inoltre l'ingombro della carrozzina può essere ridotto al minimo.



OPZIONI

CREATE LA VOSTRA QS5 X

Desiderate vedere che cosa vi può offrire QS5 X, come apparirà e quanto peserà? Scansionate il codice QR code e create la vostra QS5 X nel nuovo **Visualizzatore 3D**.

QS5 X è dotata di un pacchetto personalizzato di componenti molto utili da un punto di vista clinico che la rendono la compagna perfetta per tutte le esigenze di mobilità e adatta a quasi tutti gli utenti. Per una panoramica dettagliata di TUTTE le opzioni disponibili, consultate il nostro nuovissimo **Catalogo Opzioni e Accessori**.

Desiderate qualcosa di unico? Il nostro team **Built-4-Me** potrà aiutarvi a costruire una QS5 X solamente vostra, diversa da qualunque altra! Contattate il vostro Rivenditore per maggiori informazioni.

built4me



I NOSTRI AMBASSADOR

KIM



A Kim fu diagnosticata l'atrofia muscolare spinale (SMA) quando aveva due anni e da circa 20 anni utilizza una carrozzina. Tuttavia, è un'appassionata viaggiatrice che ama esplorare il mondo su quattro ruote. Il suo blog di viaggi, Wheeliewanderlust, offre uno sguardo sulle sue emozionanti vacanze e fornisce consigli utili a chi è interessato a viaggiare senza barriere.

TAREK



La bicicletta è sempre stata al centro della vita di Tarek, a partire dalla sua infanzia fino ad oggi. Si è fatto un nome nel mondo della mountain bike, come ex freerider professionista di BMX German e mountain bike, fino a quando un incidente con conseguente paraplegia interruppe la sua carriera nel 2002. Nonostante ciò, Tarek ha continuato a rimanere sulla scena. Ha fondato una sua azienda, la Rasolution, ed è tuttora una figura di grande influenza nel mondo della bicicletta. Nel 2022, Tarek è stato inserito nella Mountain Bike Hall of Fame.

JOSH



Josh, veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, subì una lesione del midollo spinale a livello cervicale nel 2009 mentre prestava servizio in Afghanistan. Fu decorato con il Purple Heart in seguito all'esplosione di un ordigno improvvisato che lo lasciò paralizzato mentre stava operando durante la Operation Strike of the Sword. Con l'aiuto del maggiore Tammy Phipps, Josh ha raggiunto il suo obiettivo primario di indipendenza, guidare. Comprendendo l'enorme bisogno di formazione per chi deve ricominciare a guidare, Josh e Tammy hanno fondato il Driver Rehabilitation Center of Excellence, LLC.

DATI TECNICI	QS5 X
Portata massima	140 kg
Larghezza seduta	340 - 540 mm (con incrementi di 20 mm)
Profondità seduta	340 - 500 mm
Altezza seduta anteriore	360 - 540 mm
Altezza seduta posteriore	350 - 520 mm
Altezza schienale	250 - 500 mm
Angolo schienale	da -15° a +15°
Larghezza totale	LS +180/240/270 mm con campanatura di 0°, 2°, 4° e ruote posteriori da 25". In certe configurazioni la larghezza totale può superare 800 mm.
Lunghezza totale	1113 mm
Altezza totale	1020 mm
Massimo raggio di sterzata	840 mm
Pendenza massima superabile	7° (per l'utilizzo del freno di stazionamento)
Versioni telaio	SA (Swing Away) o FF (Fixed Front)
Angolo del telaio anteriore	Swing Away: 70° / 80° / 90°, Fixed Front: 75° / 85°
Ruote anteriori	4", 5", 6", 7"
Ruote posteriori	22", 24", 25", 26"
Peso carrozzina	Swing Away: da 10,1 kg, Fixed Front: da 9,9 kg
Peso carrozzina smontata	Swing Away: da 7,5 kg, Fixed Front: da 7,3 kg
Peso della parte più pesante	2,2 kg
Parti rimovibili	Ruote posteriori (per il trasporto)
Colori	24 colori
Crash test	Sì (approvato per il trasporto su un veicolo a motore secondo ISO 7176-19:2022)
Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
Destinazione e condizioni d'uso	Per persone non in grado di camminare autonomamente o con mobilità limitata; utilizzo in interni e in esterni. Per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.



Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it