

FOLD DIN FRIHED UD

QS 5 x





VI SKRIVER ET NYT KAPITEL.

5 GODE GRUNDE TIL AT PRØVE QS5 X[®].

1 FREEFOLD - OVER 40% ENERGI SPARET, VED HVER FOLDNING - Det super-præcise FreeFold design tilbyder en kørestol, der kan foldes sammen med 40% mindre energiforbrug end vores konkurrenters. Fold-N-Lock (tilvalg) sikrer, at QS5 X forbliver stramt sammenklappet og forhindrer uønsket udfoldning.

2 LET AT LØFTE - Med en fantastisk vægt fra 7,3 kg for modellen med fast forramme og 7,5 kg Swing-Away rammen, sætter QS5 X en ny standard og er den letteste aluminiumsramme-kørestol på markedet.

3 KØR LÆNGERE OG UBESVÆRET - QS5 X har ikke kun den letteste, men også en af de mest faste rammer på markedet, takket være proprietære produktionsprocesser og teknologi, som er kendetegnet for Sunrise Medicals høj kvalitetsprodukter - såsom specielt varmebehandlet 7000-serie aluminium, ovale rør og smedede dele - QS5 X rammedesign tager køreoplevelsen til næste niveau.

4 STILFULD OG ROBUST - Med en stabil boksramme-konstruktion og det ovale 4-arms kryds, kan du roligt nyde turen velvidende, at din stol kan klare enhver forhindring. Dens slanke og moderne design giver den et stilfuldt og sofistikeret udseende.

5 TILPASSER SIG TIL INDIVIDUELLE BEHOV - To rammeversioner, forskellige rammevinkler og en skræddersyet pakke med vigtige klinisk-kritiske komponente, der sikrer at stolen kan tilpasse sig brugerens behov, også når de ændrer sig over tid - fra førstegangsbbrugere til øvede kørestolsbrugere.



FOLDEEGENS KABER

FREEFOLD - OVER 40% ENERGI SPARET VED HVER FOLDNING

NEM AT FOLDE & FORBLIVER SAMMENFOLDET - takket være den innovative **FREEFOLD** funktion. FreeFold kendetegnes ved en sofistikeret og præcis konstruktion, hvilket resulterer i **lavt energiforbrug** ved sammen- og udfoldning. Under sammenfoldning ændres cambringen ikke, og den sammenklappede stol står solidt på jorden - en reel fordel, hvis du ofte folder og transporterer QS5 X.



Den valgfri **FOLD-N-LOCK** funktion, holder stolen sikkert og bekvemt sammenfoldet. Med et enkelt "klik". Der er ingen grund til selv at holde den lukket, mens du løfter eller opbevarer kørestolen!



De **OVALE RØR** (samme førsteklases teknologi som Nitrum og Xenon²) i QS5 X's 4-arms kryds er stivere, stærkere og lettere end konventionelle runde rør. Dette gør den mindre tilbøjelig til at bøje under pres, hvilket giver **enestående fasthed og reduceret slør** under kørsel og ubesværet sammen- og udfoldning.







Slankt og moderne design - QS5 X har et minimalistisk design med skjulte justeringer og sømløst integrerede svinghjulsophæng. Kun få synlige skruer eller huller for ikke at kompromittere stolens æstetik - dette giver din QS5 X et stilfuldt og sofistikeret udseende.

LET I VÆGT

LET FREMDRIFT OG LØFT MED DEN FJERLETTE QS5 X

LETTEST I VÆGT - En bemærkelsesværdig lav transportvægt fra 7,3 kg med fast forramme og 7,5 kg med swing Away-rammen! QS5 X er som den letteste aluminium krydsrammestol på markedet ikke kun behagelig at løfte, transportere, men også **ubesværet at køre selv for at øge brugerens energieffektivitet**. Materialet og konstruktionen gør hele forskellen - stærk behøver ikke altid at betyde tung. Rammen på QS5 X er lavet af **højkvalitets 7000-serie aluminium**, designet til et usædvanligt højt styrke-til-vægt-forhold og bruges i mange rumfartsdesign, hvor styrke, holdbarhed og vægt er væsentlige faktorer.

OVERLEGEN STIVHED - **Varmebehandling** af aluminiumsrammen, ved at anvende vores proprietære fremstillingsproces, gør det muligt for rammen at være tyndere og lettere uden at miste styrke. Resultatet er en kørestol, der er overraskende nem at løfte, og som **overfører mere af din kraft til hjulene**.



Nem at løfte og transportere - enten for dig selv eller for pårørende og hjælpere.



SMARTE MULIGHEDER

KOMFORT & FUNKTION

ERGONOMISKE TOUCH POINTS

QS5 X har Touch Points på svinghjulophænget og på rundingerne for- og bagtil, der giver et behageligt greb for at forhindre glidning i forflytnings- eller transportsituationer. Brugerinput gør disse Touch Points til en af mange brugerdrevne innovationer. Dette giver mulighed for lette løft, hvilket reducerer belastningen på dine håndled, især under daglig brug. Derudover beskytter de kørestolsrammen mod ridser.

PATENTERET DRIVHJULSOPHÆNG

Takket være vores 3-vejs justerbare, patenterede drivhjulsophæng er det muligt at justere sporingen på QS5 X. Sporing betyder **mindre energitab ved modstyring!**

DEN RIGTIGE RAMME OG PASFORM

Forskellige versioner af rammen gør det nemt at vælge den bedste pasform! Rammelængden er specifik for næsten alle sædedybder for at sikre, at **QS5 X forbliver så kompakt som muligt.**

NY ALUMINIUM FODSTØTTE/FODPLADE

Den nye aluminiumsfodstøtte (delte og hel fodplade) er redesignet for **lettere vægt** og forbedret **justerbarhed.**



NY KNÆLEDSBREMSE

Den nye knæledsbremse kræver **mindre kraft** at bruge uden at der går på kompromis med dens **stærke bremsegenskaber**.



KLARE OG AFTAGELIGE LED-LYS

I mange situationer er det godt at have sit eget lys – hvis man skal på toilettet om natten og ikke vil lyse hele lejligheden op, eller hvis man er på vej hjem om aftenen og skal se forhindringer. QS5 X's LED-lys er en fantastisk løsning! Diskret **integreret i det overordnede design** af din QS5 X og **aftagelige til opladning** - LED-lysene tilfører en fantastisk egenskab til din kørestol, når du har brug for at lyse din vej op!



NY PATENTERET TRÆDEPEDAL

Det patenterede trædepedal vipper op, når det rammer en kantsten eller et trin og **forhindrer kørestolen i at blive fanget og vælte**.






Perfekt ledsager til hjælpemotorer - Forrammen har smedede dele af høj kvalitet - designet til at modstå den høje belastning, som hjælpemotorer påfører rammer, og leverer førsteklases ydeevne. Fremstillet med præcision sikrer de, at frontrammen forbliver stærk for en stabil køreevne og lang holdbarhed, mens deres unikke design giver et stilfuldt look til den stilbevidste bruger.

MULIGHEDER

SLIP DIN INDIVIDUALITET FRI MED ET SPEKTRUM AF MULIGHEDER

Hvis du har specifikke behov, kan du nemt opgradere din QS5 X med forskellige **JAY®-puder og rygge**. Scan QR-koden nedenfor, for at se alle de tilgængelige muligheder i bestillingsformularen.

Vælg mellem **24 livlige rammefarver og 6 forgaffel- og fælgfarver** for at skabe det perfekte look til din QS5 X! Uanset om du foretrækker en diskret eller vild stil, vil farveudbudet sørge for, at din stil skiller sig ud! Scan QR-koden nedenfor, for at gennemse farvebrochuren find din perfekte farvekombination.

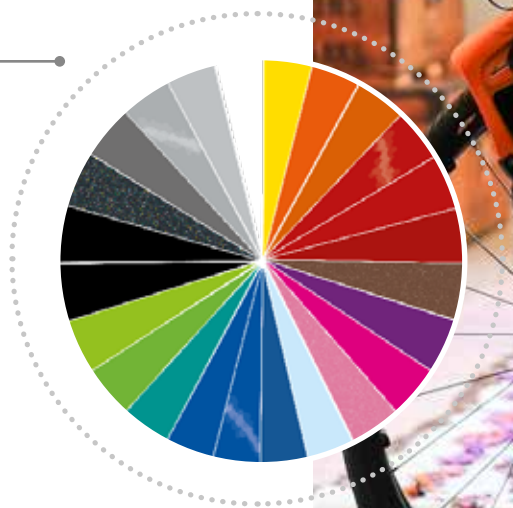



RAMMEVERSIONER

FAST FORRAMME ELLER SWING-AWAY - 1 KONCEPT, 2 RAMMER

QS5 X fås med to forskellige rammeversioner - Fast Forramme og Swing-Away.

Fast Forramme versionen har fodstøtter, der er permanent fastgjort til stolens ramme, hvilket giver ekstra stabilitet og støtte. Denne funktion kan være særlig gavnlig for personer med højere krav til positionering, da det hjælper med at holde benene i en ideel position.

Swing-Away versionen har fodstøtter, der kan svinges væk (til siden), hvilket muliggør en sikker og komfortabel forflytning ind i stolen, især fra stående stilling. Ved at fjerne fodstøtten er det muligt at placere kørestolen tættere på den genstand, du ønsker at forflytte på, desuden vil kørestolen sammenfoldet blive mindre.



VALGMULIGHEDER

DESIGN DIN QS5 X

Vil du se hvad QS5 X har at byde på, hvordan din QS5 X vil komme til at se ud og hvor meget den vejer? Scan QR-koden og design din egen QS5 X i den nye **3D Visualizer**.

QS5 X kommer med en skræddersyet pakke af klinisk-kritiske komponenter, der gør den til den perfekte til de fleste mobilitetsbehov og egnet til næsten alle. Få en meget detaljeret oversigt over ALLE tilgængelige muligheder i vores helt nye **Options & Accessories katalog**.

Ønsker du noget unikt? Vores **Built-4-Me**-team kan hjælpe dig med at skabe en virkelig individuel QS5 X! Spørg Sunrise Medical for mere information.

built4me



VORES MODELLER

KIM



Kim blev diagnosticeret med spinal muskeltrofi (SMA), da hun var to år gammel og har nu siddet i kørestol i omkring 20 år. Ikke desto mindre er hun en passioneret rejsende, der elsker at udforske verden på fire hjul. Hendes rejseblog, Wheeliewanderlust, giver et indblik i hendes spændende ferieoplevelser og giver nyttige tips til dem, der er interesseret i at rejse uden barrierer.

TAREK



Tareks liv har været centreret omkring cykler - fra hans barndom, hele vejen frem til hans nutid. Han skabte sig et navn i mountainbikeverdenen, som en tidligere tysk BMX- og mountainbike-professionel freerider, indtil en ulykke, der resulterede i paraplegi, stoppede hans karriere i 2002. På trods af ulykken, fortsatte Tarek med at være aktiv i cykelverdenen. Han grundlagde sit firma, Rasolution, og har fortsat været en indflydelsesrig figur i at forme og fremme cykelverdenen. I 2022 blev Tarek optaget i Mountain Bike Hall of Fame.

JOSH



Josh, en USMC-veteran, fik en cervikal rygmærskade i 2009, mens han tjente i Afghanistan. Josh tjente stolt som en del af Operation Strike of the Sword og modtog et Purple Heart efter IED-eksplosionen, der gjorde ham lam. Med hjælp fra major Tammy Phipps nåede Josh sit primære mål for uafhængighed, nemlig at køre bil. Josh og Tammy forstod det overvældende behov for genoptræning af chauffører og fortsatte med at grundlægge Driver Rehabilitation Center of Excellence, LLC.

TEKNISK DATA	QS5 X
Maks. brugervægt	140 kg
Sædebredde	340 - 540 mm (i trin på 20 mm)
Sædedybde	340 - 500 mm
Sædehøjde fortil	360 - 540 mm
Sædehøjde bagtil	350 - 520 mm
Ryglænets højde	250 - 500 mm
Ryglænets vinkel	fra -15° to +15°
Total bredde	SB +180/240/270 mm ved 0°, 2°, 4° camber og 25" hjul Den totale bredde kan overstige 800 mm i visse konfigurationer.
Total længde	1113 mm
Total højde	1020 mm
Maks. vendediameter	840 mm
Maks. sikker hældning ved brug af parkeringsbremser	7°
Rammeversioner	Swing Away eller Fast Forramme
Ramnevinkel	Swing Away: 70° / 80° / 90°, Fast Forramme 75° / 85°
Svinghjul	4", 5", 6", 7"
Drivhjul	22", 24", 25", 26"
Kørestolens vægt	Swing Away: fra 10,1 kg, Fast Forramme fra 9,9 kg
Transportvægt	Swing Away: fra 7,5 kg, Fast Forramme fra 7,3 kg
Vægt af den tungeste del	2,2 kg
Aftagelige dele	Drivhjul (under transport)
Rammefarver	24 farver
Crash tested	Ja (godkendt til transport i et køretøj i henhold til ISO 7176-19:2022)
Transport uden bruger	Fastgør kørestolen solidt og sikkert i køretøjet (fx bil eller fly)
Tilsluttet brug og miljø	For personer, der ikke kan gå og med begrænset mobilitet; inde og ude. Betjenes af bruger eller hjælper



Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70 22 43 49
E-Mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om den fulde specifikation, valgmuligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have.



Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.