

ROZVÍJEJTE SVOJI SVOBODU

QS5 X

Naskenujte QR kód a sestavte si
svůj vozík QS5 X pomocí
online **3D vizualizéru**





DALŠÍ KROK VE VÝVOJI INVALIDNÍCH VOZÍKŮ. **5** HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ VYZKOUŠET QS5 X®.

1 FREEFOLD – VÍCE NEŽ 40% ÚSPORA ENERGIE PŘI KAŽDÉM SKLÁDÁNÍ – Velmi přesná konstrukce technologie FreeFold zajišťuje skládání, které vyžaduje o více než 40 % méně síly než u podobných vozíků. Fixace Fold-N-Lock zajišťuje, že QS5 X zůstane pevně složený a zabraňuje tak nechtěnému otevření při přesunech.

2 SNADNÉ PŘESUNY – S pozoruhodně nízkou přepravní hmotností od 7,3 kg u rámu Fixed Front a 7,5 kg u rámu Swing Away se jedná o nejlehčí invalidní vozík s hliníkovým uzavřeným rámem na trhu.

3 POHYBUJTE SE DÉLE A S MENŠÍ NÁMAHOU – Konstrukce rámu QS5 X se může pochlubit nejen nejlehčím, ale také jedním z nejužších rámu na trhu díky patentovaným výrobním postupům a technologiím, které jsou charakteristické pro vysoce kvalitní výrobky společnosti Sunrise Medical. Například speciálně tepelně zpracovaný hliník řady 7000, oválné trubky a kované díly – posouvají zážitek z pohybu na novou úroveň.

4 STYLOVÝ A ROBUSTNÍ – Díky robustní konstrukci uzavřeného rámu a oválnému čtyřramennému křížní můžete být klidní, protože víte, že váš vozík vydrží vše, co vás potká. Elegantní, moderní linie mu dodávají stylový a sofistikovaný vzhled.

5 PŘÍSTUPNÝ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM – Dvě verze konstrukce rámu, různé úhly sklonu rámu a na míru šitý balíček klinicky důležitých komponent zajišťují, že se váš vozík dokáže přizpůsobit všem vašim individuálním potřebám, a to i v průběhu užívání.



Naskenujte QR kód a podívejte se na QS5 X v pohybu!

SNADNÉ SKLÁDÁNÍ

FREEFOLD – VÍCE NEŽ 40% ÚSPORA ENERGIE PŘI KAŽDÉM SKLÁDÁNÍ

SNADNO SE SKLÁDÁ a ZŮSTÁVÁ SLOŽENÝ – nová inovativní funkce **FREEFOLD** představuje důmyslnou a přesnou konstrukci geometrie skládání, díky níž je při **skládání a rozkládání** vyvíjena mimořádně malá síla. Při skládání se nemění sklon kol a složený vozík stojí pevně na zemi – to je skutečná výhoda, pokud vozík QS5 X často skládáte a převážíte.



Naskenujte QR kód a podívejte se na video se skládáním.



Kříž vozíku QS5 X je vyroben pomocí stejné prémiové technologie, jakou používáme u vozíků nejvyšší třídy Nitrum a Xenon². Tato technologie využívá **OVÁLNÉ TVAROVANÉ TRUBKY**, které jsou pevnější a zároveň lehčí než trubky kulaté. To zaručuje **excelentní pevnost vozíku při pohybu a jednoduché skládání při přepravě**.



Automatický systém **FOLD-N-LOCK** udržuje po složení rám vozíku bezpečně složený v kompaktním stavu a tím zjednodušuje přesuny, zvedání a přepravu. **Vozík není třeba při této činnosti ve složeném stavu držet.**





Minimalistický design se skrytým nastavením a plynule integrovanými nosníky předních koleček propůjčují vozíku **QS5 X** stylový a sofistikovaný vzhled. Elegantní a moderní linie jsou podpořeny minimem viditelného spojovacího materiálu nebo otvorů, které by narušovaly estetický dojem.



Naskenujte QR kód a podívejte se na video zachycující vozík v pohybu.

NÍZKÁ HMOTNOST

SNADNÉ ZVEDÁNÍ A PŘESUNY DÍKY NÍZKÉ HMOTNOSTI QS5 X

Vozík QS5 X nabízí **BEZKONKURENČNĚ NEJNIŽŠÍ HMOTNOST** v kategorii uzavřených rámu – od 7,3 kg u rámu s pevnou přední částí a 7,5 kg u rámu s odklopnou přední částí! Díky nízké hmotnosti se nejen pohodlně zvedá a přepravuje, ale hlavně **se bez námahy jednoduše ovládá a zvyšuje tak efektivitu pohybu klienta**. Na materiálu a konstrukci záleží – silný nemusí vždy znamenat těžký. Rám QS5 X je vyroben z **vysoce kvalitního hliníku řady 7000**, který je navržen pro mimořádně vysoký poměr pevnosti a nosnosti a používá se v mnoha aplikacích v leteckém průmyslu, kde pevnost, odolnost a hmotnost patří mezi zásadní faktory.

DOKONALÁ TUHOST – díky **tepelně** zpracovanému hliníkovému rámu s použitím našeho patentovaného výrobního procesu je rám tenčí a lehčí, aniž by byla snížena jeho pevnost. Výsledkem je invalidní vozík, který se překvapivě snadno ovládá a tím zvyšuje efektivitu vašeho pohybu.



Naskenováním kódu QR se zobrazí video s nakládáním vozíku.



Snadno se zvedá a nakládá – jak vám, tak doprovodu.





CHYTRÉ MOŽNOSTI

KOMFORT A FUNKČNOST

ERGONOMICKÉ KONTAKTNÍ BODY

Pro lepší manipulaci s vozíkem QS5 X najdete na nosnících předních koleček, v oblasti kolen a zadní části rámu **dotykové body**, které umožňují pohodlné uchopení a zabraňují tak vyklouznutí vozíku při přenášení nebo přepravě. Tyto dotykové body jsme implementovali na základě podnětů vozíčkářů a jsou jednou z mnoha inovací, které byly vyvinuty na přání našich zákazníků. Umožňují snadné zvedání, čímž snižují zátěž zápěstí, zejména při každodenním používání. Navíc chrání rám invalidního vozíku před poškrábáním.

PATENTOVANÉ UCHYČENÍ KOLEČEK – VŽDY PŘÍMÝ SMĚR POHYBU


Díky našim patentovaným třícestně nastavitelným nosníkům koleček je možné vždy nastavit přímý směr jízdy vozíku QS5 X. Přímý směr jízdy znamená nižší ztrátu energie, ke které dochází při vyrovnávání traktce!

SPRÁVNÝ RÁM PŘESNĚ PRO VÁS

Díky různým verzím rámu si snadno vyberete ten nevhodnější! Délka rámu se mění v závislosti na hloubce sedu tak, aby vozík QS5 X zůstal co nejkompaktnější.

NOVÉ HLINÍKOVÉ STUPAČKY

Nové hliníkové stupačky (dělené a spojené) byly přepracovány tak, aby byly **lehčí a lépe nastavitelné**.

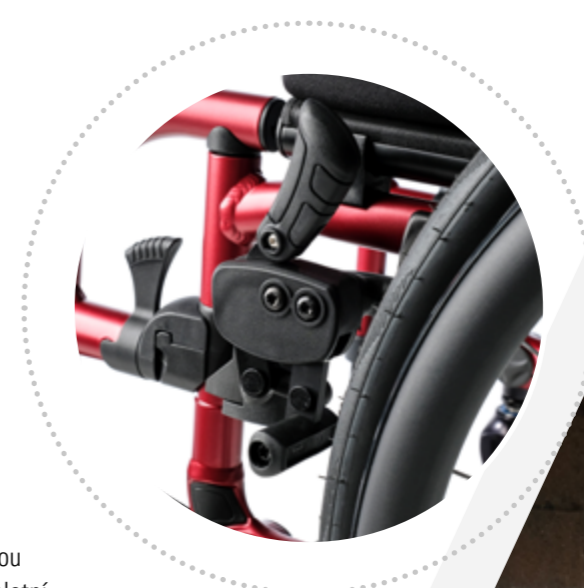

NOVÉ BRZDY S KRÁTKÝM CHODEM

Ergonomicky tvarované brzdy byly navrženy pro klienty se sníženou svalovou schopností horních končetin. Jejich design prošel kompletní změnou tak, aby se **minimalizovala síla potřebná k jejich použití a zároveň byla zachována pevnost zajištění zadních kol**.

JASNÁ ODNÍMATELNÁ LED SVĚTLA

V mnoha situacích je dobré použít vlastní světlo – pokud potřebujete jít v noci na toaletu a nechcete osvětlovat celý byt, nebo pokud jste večer na cestě domů a potřebujete vidět na překážky, které by vás mohly vyvést z rovnováhy. **LED světla QS5 X vám poslouží jako skvělé řešení!** LED světla jsou diskrétně integrována do celkového designu vozíku QS5 X a pro účely nabíjení je možné je vyjmout. Díky tomu vám skvěle posvítl na cestu, kdykoli je budete potřebovat!



NOVÁ PATENTOVANÁ PATKA NA PŘEKLOPENÍ

Patentovaná vyklápěcí patka se při nárazu na obrubník nebo schodek vykllopí a zabrání tak zachycení a převrácení vozíku.





Dokonalý společník pro přídavné pohony – Přední rám vozíku je vybaven vysoce kvalitními kovanými díly, které jsou navrženy tak, aby vydržely vysoké zatížení, které na rám vyvíjejí přídavné pohony. Díky precizní výrobě zajišťují, že přední rám zůstane pevný a zajistí stabilní jízdní vlastnosti a dlouhou životnost.




Pro více informací
naskenujte QR kód.

MOŽNOSTI

PROJEVTE SVOU INDIVIDUALITU DÍKY ŠIROKÉMU SPEKTRU MOŽNOSTÍ

V případě specifických požadavků na stabilizaci sedu můžete svůj QS5 X snadno rozšířit o různé **sedací polštáře a zádové opěrky JAY®**. Naskenujte QR kód níže a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.

Vyberte si z **24 zářivých barev rámu a 6 barev vidlic a obručí a vytvořte si dokonalý vzhled svého vozíku QS5 X!** Ať už dáváte přednost decentnímu nebo divokému stylu, nabídka barev zajistí, že váš styl vynikne!

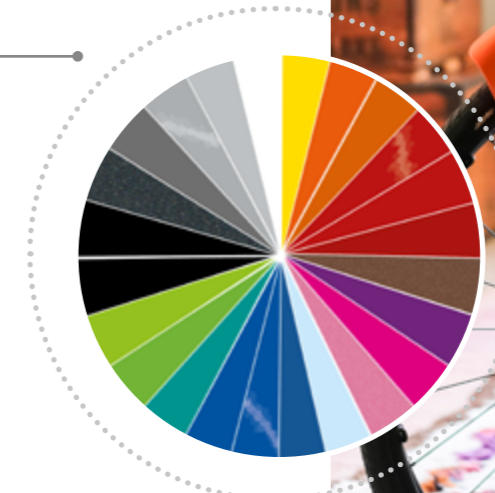

Pro více informací
naskenujte QR kód.





VERZE RÁMU

PEVNÁ NEBO ODKLOPNÁ PŘEDNÍ ČÁSTÍ RÁMU JEDEN KONCEPT – DVA TYPY RÁMU

Model QS5 X je k dispozici ve dvou různých verzích rámu – s pevnou přední částí a s odklopnou přední částí.

Verze Fixed-Front je vybavena podnožkami, které jsou součástí rámu vozíku a poskytují tak vozíku dodatečnou stabilitu a oporu. Tato funkce může být výhodná zejména pro osoby s vyššími nároky na polohu dolních končetin.


Verze Swing-Away disponuje podnožkami, které lze odklopit do strany, což umožňuje bezpečný a pohodlný přesun na vozík. Odstraněním podnožky je možné vozík umístit blíže k objektu, na který chcete přesednout. Tato verze je kompaktnější pro přesuny.



MOŽNOSTI


VYTVOŘTE SI SVŮJ QS5 X

Chcete se podívat, co vše QS5 X nabízí, jak bude váš vozík QS5 X vypadat a kolik bude vážit? Naskenujte QR kód a sestavte si vlastní QS5 X v novém 3D vizualizéru.

 Pro více informací naskenujte QR kód.

Vozík QS5 X je vybaven na míru šitým balíčkem klinicky důležitých komponent, které z něj dělají dokonalého společníka pro všechny potřeby vaší mobility a jsou vhodné téměř pro každého. Velmi podrobný přehled VŠECH dostupných možností naleznete v našem zbrusu novém **katalogu možností a příslušenství**.



 Pro více informací naskenujte QR kód.

Chcete něco jedinečného? Náš tým Built-4-Me vám pomůže vytvořit skutečně individuální QS5 X, který je jako z jiného světa! Více informací získáte u svého prodejce.

built4me



NAŠI AMBASADOŘI

KIM



Kim byla diagnostikována spinální svalová atrofie (SMA), když jí byly dva roky, a již 20 let se pohybuje na invalidním vozíku. Přesto je vášnivou cestovatelkou, která ráda poznává svět na čtyřech kolech. Její cestovatelský blog Wheeliewanderlust nabízí pohled na její vzrušující zážitky z dovolených a poskytuje užitečné tipy pro zájemce o bezbariérové cestování.

TAREK



Tarekův život se od dětství až po současnost točí kolem kol. Ve světě horských kol se proslavil jako bývalý německý profesionální freerider na kolech BMX a horských kolech, dokud jeho kariéru v roce 2002 nepřerušila nehoda, po které ochrnl. Bez ohledu na to Tarek nadále zůstává na scéně. Založil společnost Rasoulution a i nadále je vlivnou osobností, která se podílí na formování a rozvoji světa cyklistiky. V roce 2022 byl Tarek uveden do Síně slávy jezdců na horských kolech.

JOSH



Josh, veterán americké námořní pěchoty, utrpěl v roce 2009 během služby v Afghánistánu poranění krční míchy. Josh hrdě sloužil v rámci operace Úder mečem a po výbuchu IED, po kterém ochrnl, získal Purpurové srdce. S pomocí majora Tammy Phippsové dosáhl Josh svého hlavního cíle, kterým bylo získání nezávislosti, a to řízení automobilu. Josh a Tammy pochopili obrovskou potřebu rehabilitace pro řidiče, a tak se stali spoluzakladateli centra Driver Rehabilitation Center of Excellence, LLC.

TECHNICKÁ DATA	QS5 X
Maximální hmotnost uživatele	140 kg
Šířka sedu	340–540 mm (krok po 20 mm)
Hloubka sedu	340–500 mm
Výška sedu vpředu	360–540 mm
Výška sedu vzadu	350–520 mm
Výška zádové opěrky	250–500 mm
Úhel zádové opěrky	od –15° do +15°
Celková šířka	SW +180/240/270 mm při sklonu 0°, 2°, 4° a 24" kolech Celková šířka může v určitých konfiguracích přesáhnout 800 mm.
Celková délka	1 113 mm
Celková výška	1 020 mm
Maximální šířka otočení	840 mm
Maximální bezpečný sklon pro parkování	7°
Verze rámu	Pevná přední část nebo odklopná přední část rámu
Úhel rámu	Odklopný: 70° / 80° / 90°, pevný: 75° / 85°
Přední kolečka	4", 5", 6", 7"
Zadní kola	22", 24", 25", 26"
Hmotnost vozíku	Odklopný rám od (SA) 10,1 kg, pevný rám FF od 9,9 kg
Hmotnost v demontovaném stavu	Odklopný rám od (SA) 7,5 kg, Fixed Front: od 7,3 kg
Hmotnost nejtěžší části	2,2 kg
Odnímatelné části	Zadní kola (pro přepravu)
Barvy rámu	24 barev
Crash test	Ano (schváleno pro přepravu ve vozidle podle ISO 7176-19:2022)
Přeprava bez uživatele	Pevně a bezpečně upevněte invalidní vozík ve vozidle.
Zamýšlené použití a prostředí	Pro osoby neschopné chůze a s omezenou pohyblivostí; uvnitř i venku. Obsluha uživatelem nebo asistentem.



MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic

800 900 809
info@medicco.cz



Rev. A © 07 .2023



Pokud jste zrakově postižení, můžete si tento dokument prohlédnout ve formátu PDF na adrese www.medicco.cz.



www.medicco.cz

Produkty uvedené v této brožuře patří mezi zdravotnické prostředky třídy I a jsou určeny ke kompenzaci pohybového zdravotního postižení. Před použitím se prosím seznamte s návodem k použití. Součástí prodeje našich produktů je odborná instruktáž před uvedením do provozu. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte.



QUICKIE