

FloorBed[®]2

For effektiv hindring av fallskader



Accora

Kombinerer gulvnivå-funksjonaliteten med økt arbeidshøyde for pleiepersonell

Færre fall og skader.

Med senking til kun 7 cm, forebygger FloorBed 2 fall og følgeskader ved fall.




En tryggere arbeidshøyde.

En pleiehøyde på 80 cm kombinert med lave hode- og fotgavler gir en gunstig arbeidshøyde for helsepersonell og enklere tilgang til pleieoppgaver og stillingsendring.

Gulvnivå reduserer fallhastighet og skader på pasienten


Sengens høyde er en betydelig faktor knyttet til skader relatert til fall.^{1,2} Forskning tyder på at en seng på gulvnivå med en høyde på 100 mm eller mindre fra gulvet* er optimal for å redusere risikoen for skader forbundet med fall fra sengen.

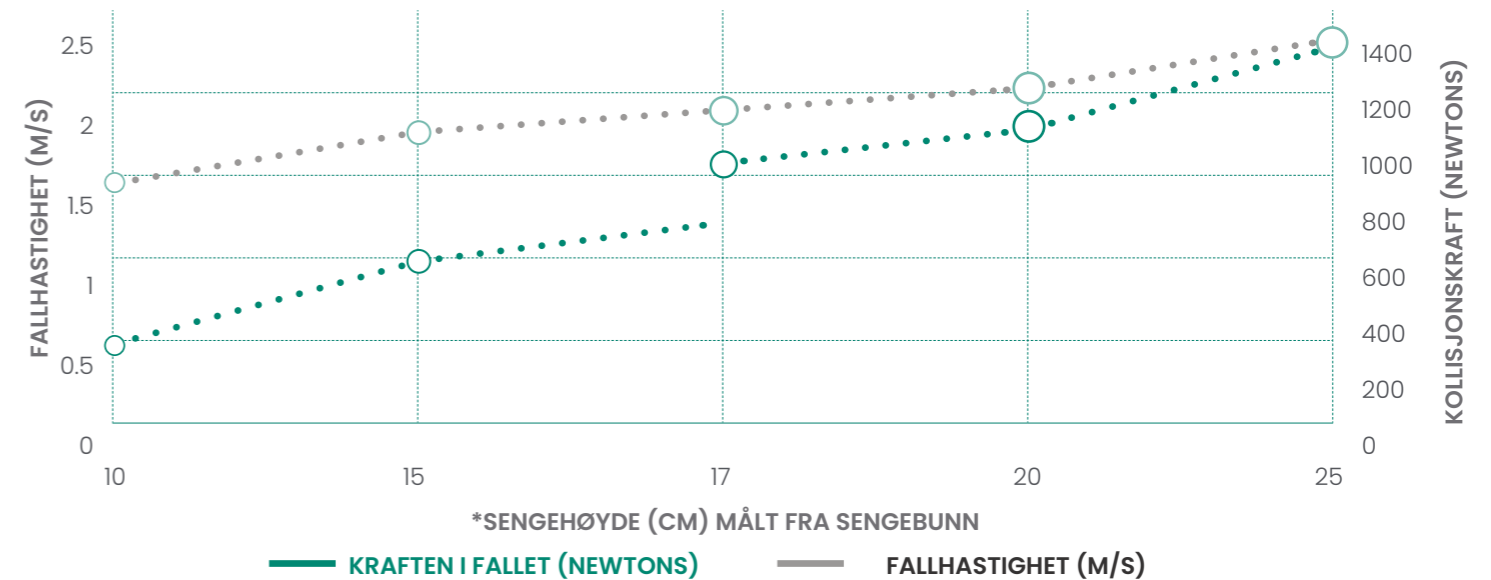


1. Bowers, B., Lloyd, J., Lee, W., Powell-Cope, G. and Baptiste, A. (2008) Biomechanical evaluation of injury severity associated with patient falls from bed. Rehabil Nurs. 33 (6), 253-9. Available from: doi: 10.1002/j.2048-7940.2008.tb00237.x.

2. Zaphir, J. (2014) Lowest heights of floor level beds: fall velocity and impact force analysis and resulting injuries. Available from: https://vital.net.au/sites/default/files/zaphir_study_2014_-_bed_height_impact.pdf [Accessed 5th May 2021].

“Den ble svært populær innenfor helseinstitusjonen. Hver gang noen kom i risikogruppen for fallskader, skaffet vi en **Accora FloorBed** til dem for å **redusere faren for fall.**”

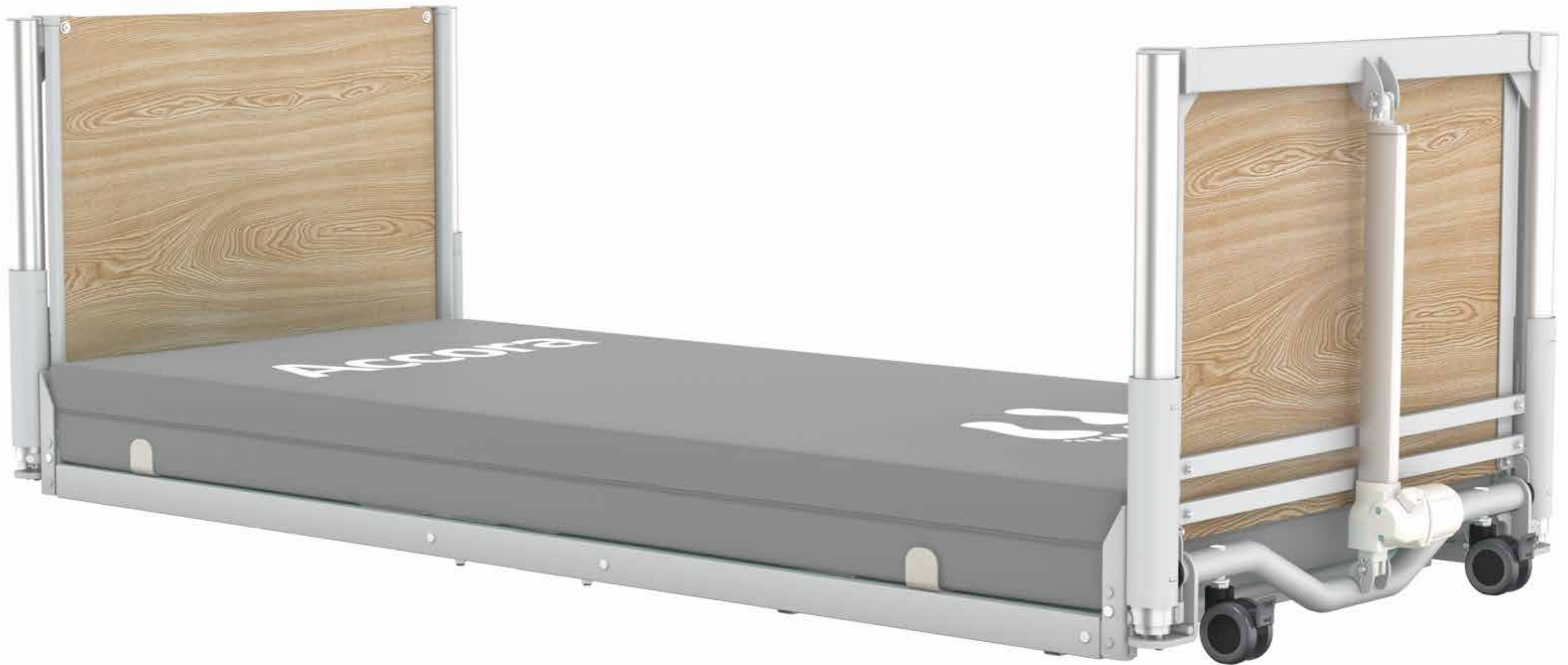

Tilbehør til FloorBed²

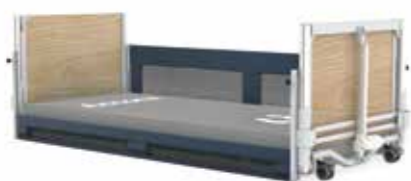

Integrerte polstrede sidegrinder

Myke sidegrinder i tekstil for ytterligere beskyttelse.



Hode- og fotgavelbeskyttelse

Myk beskyttelse for å dempe støt.



2200 mm høy trygghetsmatte

Samme høyde som madrassen – et fall blir til en rulling.



Sikkerhetstrekk

Reduserer klemfare ettersom mekanismen er beskyttet.



Oppreisingsstøtte

Muliggjør selvstendig bevegelse.



Løftebøyle

Hjelp ved stillingsendring og forflytning.



Madrassutfylling

Reduserer gapet mellom madrassen og sidegrindene.



Sengeforlenger kit

Øker lengden på madrass- og sengebunn til 2200 mm.



Junior Kit

Kompatibel med FloorBed 1 & 2.

Tilleggsfunksjoner




Kompatibel med Junior Kit

Tilbehørssettet som gjør alle Accora-senger egnet for barn.



Kompatibel med de fleste madrasssystemer

Standard sengebunn er 2000 x 900 mm og er kompatibel med et bredt spekter av madrassstørrelser.

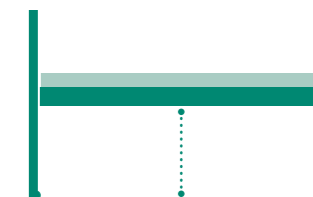

Kompakt motorsystem

De kompakte motorene og ledningene er montert innenfor sengens ramme, noe som gir enklere tilgang til løfteinnretningen.

Technical specification

Totalstørrelse	935 x 2285 mm
Madrassstørrelse	900 x 2000 mm
Sikker arbeidsbelastning	185 kg
Pasientvekt	150 kg
Høyderegulering	71 - 800 mm (eksklusiv madrass)
Funksjoner	Ryggstøtte med automatisk regresjon, knebøy, anti-Trendelenburg, Trendelenburg.
Minimum høyde for pasient	1460 mm
Artikkelnummer	NSB-0-FL2-200

Accora

® and ™ are trademarks of Accora Limited.

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

All information is correct at time of printing and is subject to change.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.