

DEUX FAUTEUILS ROULANTS – UNE FAMILLE MODÈLE

Vis pleinement ta vie! Fais du shopping avec tes amis ou une ballade au parc. Quel que soit ton programme du jour, le Sopur Easy Life T ou Life RT est ton fidèle compagnon.

Le fauteuil à châssis fixe Easy Life RT est stable, fiable et offre un maintien adéquate afin que tu puisses profiter pleinement de tes activités de détente.

A moins que tu ne préfères un fauteuil à châssis pliable? Facile à manœuvrer, le Easy Life T est le fauteuil polyvalent parfait pour le quotidien.

Quel que soit le modèle choisi, les deux versions ont été conçues pour répondre aux mensurations et aux besoins des jeunes. Les modèles — Easy Life T et RT — existent également avec châssis avant fixe ou repose-pieds amovibles ou escamotables. En option : pour le fauteuil avec châssis avant fixe, le châssis existe aussi avec abduction ou rétrécissement.







LIFE RT LE FAUTEUIL ACTIF





→ Châssis à abduction du Life T & du Life RT

Sur ces modèles, la partie avant du châssis peut s'élargir de 25 mm de chaque côté. Le châssis commence à s'élargir au niveau de la housse du siège.



LIFE T & LIFE RT LA TOUCHE PERSONNELLE – POUR LES ADOS D'AUJOURD'HUI

Personnalise ton fauteuil selon tes goûts et tes souhaits! Définis ton style parmi les 22 coloris de châssis et les trois styles proposés (coloris de la fourche avant et de la plaque de fixation de la roue). Les protège-rayons proposés apportent à ton fauteuil un élément de design supplémentaire.

Tu disposes également d'un large choix d'options pour le garde-boue, les accoudoirs ou les repose-pieds.



→ Choix du carrossage du Life T & du Life RT


Le carrossage améliore la stabilité latérale et la maniabilité de ton fauteuil. Les deux modèles permettent un carrossage de 6°, en palier de 1°.





// FOURCHE INNOVANTE CARBOTECTURE

Extrêmement légère. Fabriquée à partir de matériaux de pointe rigides. Existe en 3 coloris.

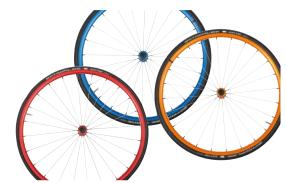

// ROUES ARRIÈRE ANODISÉES DE 24"

Harmonise ou apporte une note de contraste! Trois coloris disponibles pour les moyeux et jantes de tes roues arrières.

ROBBERS.





Options et caractéristiques du LIFE T et du LIFE RT — Configure ton fauteuil selon tes propres souhaits. Pour de plus amples renseignements sur les options, consulte le bon de commande du produit concerné.

→ Pour Easy LIFE T & LIFE RT



// CHÂSSIS À ABDUCTION

Ce modèle de châssis permet une abduction de 25 mm de chaque côté. L'élargissement commence au niveau de la housse du siège.



// PALETTE MONOBLOC EN CARBONE

Palette légère et élégante en carbone. Réglable en angle et en profondeur.



// FREINS SAFARI

Intégrés dans les parties latérales, les freins de stationnement Safari sont intuitifs et bloquent les roues rapidement et sûrement.



// SEPT POSITIONS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ARRIÈRE DU SIÈGE

Réglage du carrossage de 0° à 6° et 4 possibilités de réglage du centre de gravité (d'actif 83 mm à stable 23 mm).

→ Pour Easy LIFE RT



// DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE

L'angle du dossier est réglable de -12° à +8° en paliers de 4°.



// BARRE DE POUSSÉE ERGONOMIQUE POUR ACCOMPAGNATEUR

La barre de poussée se règle facilement en hauteur et en angle pour obtenir une position ergonomique.



// PROFONDEUR DU SIÈGE RÉGLABLE

La housse de l'assise est réglable et s'adapte à la profondeur du siège.

→ Pour Easy LIFE T



// DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE

Réglage simple et rapide du dossier. Permet un angle de -12° à +12° en paliers de 4°.

DONNÉES TECHNIQUES	Life T	Life RT
Poids max. utilisateur	125 kg*	125 kg*
	*Lorsque vous choisissez une roue à protons ou le cadre d'abduction, le poids maximal est de 100 kg	
Châssis avant avec potence intégrée	75°; 75° avec abduction; 85°; 85° avec rétrécissement	75°; 75° avec abduction; 85°; 85° avec rétrécissement
Châssis avant avec potence escamotable	100°	100°
Largeur d'assise	280 - 500 mm	280 - 480 mm
Profondeur d'assise	320 - 460 mm	320 - 460 mm
Hauteur d'assise avant	400 - 530 mm	360 - 500 mm
Hauteur d'assise arrière	400 - 500 mm	360 - 450 mm
Hauteur du dossier	250 - 475 mm	250 - 450 mm
Inclinaison du dossier	de -12° à +12° en paliers de 4°	de -12° à +8° en paliers de 4°
Carrossage	0°/1°/2°/3°/4°/5°/6°	0°/1°/2°/3°/4°/5°/6°
Largeur / longueur / hauteur hors-tout	720 mm / 1075 mm / 970 mm	720 mm / 1075 mm / 950 mm
Rayon de braquage max.	860 mm	700 mm
Pente max. en toute sécurité	7° (pour freins de stationnement)	7° (pour freins de stationnement)
Roues avants // roues arrières	4"/5"/6"/7" // 22"/24"	4"/5"/6"/7" // 22"/24"
Poids du fauteuil	à partir de 10,5 kg	à partir de 10 kg
Poids de transport	à partir de 7 kg	à partir de 8 kg
Poids de la pièce la plus lourde	roues arrières 1,1 kg	roues arrières 1,1 kg
Pièces amovibles	roues arrières, repose-pieds & protections latérales (pour le transport)	roues arrières, repose-pieds & protections latérales (pour le transport)
Couleurs des châssis	22	22
Crash test	oui – selon la norme ISO 7176-19	
Transport sans usager	accrochez solidement le fauteuil roulant dans le véhicule (par ex. une voiture)	
Conformité et contexte d'utilisation	pour personnes avec handicap moteur et mobilité réduite (enfants & adultes); intérieur et extérieur. Utilisation par l'usager ou son accompagnateur	
A		



ATTENTION

En raison d'une récente actualisation, les couleurs représentées ne sont peut-être plus disponibles. Vous pouvez retrouver notre gamme la plus actuelle sur le dernier bon de commande ou chez votre distributeur Sunrise Medical.

Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17 3110 Münsingen 031 958 38 38 info@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. S'il-vous-plait, lisez le mode d'emploi pour prendre connaissance d'instructions d'utilisation et de directives de maintenance sûres. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise Medical.



Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.









