



LA FAMILLE
EASY LIFE

À CHAQUE STYLE DE VIE
SON FAUTEUIL ROULANT

FAMILLE EASY LIFE

PROFITEZ DE LA VIE.
LA FAMILLE EASY LIFE Y APORTE DE LA LIBERTÉ.

EASY LIFE

CHASSIS PLIABLE AVEC
CADRE AVANT FIXE



EASY LIFE SA

CHASSIS PLIABLE
AVEC REPOSE-PIEDS
SWING AWAY



La famille EASY LIFE convainc avec ses fauteuils légers, robustes, modernes et extrêmement adaptables.

Vous avez le choix entre un châssis rigide pour la performance ou bien pliable pour faciliter les transferts : rien de plus facile que de trouver un fauteuil EASY LIFE à votre convenance.



EASY LIFE R

CHASSIS RIGIDE
AVEC CADRE
AVANT FIXE



EASY LIFE R SA

CHASSIS RIGIDE
AVEC REPOSE-PIEDS
SWING AWAY



EASY LIFE

UNE VIE ACTIVE



L'EASY LIFE

Vivez pleinement votre vie. Sortez et découvrez le monde. Quels que soient vos projets, votre EASY LIFE est prêt.

Le SOPUR Easy Life est disponible avec des repose-pieds intégrés ou amovibles et répond ainsi à toute une série de besoins et d'exigences que vous attendez d'un fauteuil roulant pliable.

Le SOPUR Easy Life est basé sur un design qui s'est imposé depuis longtemps comme fauteuil roulant robuste et économe en énergie pouvant supporter un poids maximal d'utilisateur de 140 kg.

Qui plus est, vous pouvez faire votre choix dans une large gamme de protections latérales, accoudoirs, repose-pieds, palettes, roues et mains courantes, ou alors définir votre propre style grâce aux 24 couleurs de châssis et pièces anodisées.



EASY LIFE

L'ALL-ROUNDER

Châssis pliable, repose-pieds fixe ou Swing-Away (comme sur la photo)



Options et caractéristiques de l'EASY LIFE – configurez ce fauteuil roulant pliable selon vos besoins individuels. Vous trouverez des informations complémentaires sur les options dans le bon de commande EASY LIFE.



// HAUTEUR D'ASSISE RÉGLABLE EN SEPT POSITIONS

Carrossage de 0° à 4°. Quatre réglages du centre de gravité, de très actif 83 mm à stable 23 mm.



// PETITES DIMENSIONS

Le dossier rabattable et le repose-pieds amovible et escamotable Swing- Away permettent un pliage très compact.



// PROTÈGE VÊTEMENTS DESK

Plus de stabilité et un design élégant.



// PROTÈGE VÊTEMENTS AU DESIGN MODERNE

Protection latérale alu de la couleur du châssis.



// CADRE AVANT SWING-AWAY

Disponible également avec un cadre compact (angle de repose-pieds 90°).



// SYSTÈME DE PLIAGE

S'actionne avec une seule main. Maintient le fauteuil en position pliée.



// PALETTE MONOBLOC RELEVABLE

Léger et réglable en angle et en profondeur.



// TOUCHE PERSONNELLE

Plaque de fixation et fourche de roue avant en trois couleurs anodisées.

EASY LIFE R

LA PERFORMANCE POUR LES
MOMENTS PARTICULIERS DE LA VIE.

L'ACTIF EASY LIFE R

L' EASY LIFE R est rigide, résistant, robuste et conçu pour améliorer votre vie. Indépendamment de ce que la journée vous réserve, le design peu gourmand en énergie de l' EASY LIFE R vous permet de vous concentrer sur ce qui est important pour vous.

Le nouveau EASY LIFE R est disponible avec un cadre avant fixe ou pivotable et possède un design modulable. Cela signifie que la partie avant du châssis peut être modifiée pour augmenter la hauteur d' assise ou changer de type de cadre.

Le cadre avant fixe est disponible avec des angles différents (75°, 85°, 85° avec 20 mm de rétrécissement) et quatre longueurs de châssis. Le cadre avant Swing-Away est disponible en trois angles (70°, 80° et 90°) avec un choix de repose-pieds et trois longueurs de cadre.



EASY LIFE R

LE SPORTIF

Châssis rigide,
repose-pieds fixe
(comme sur la photo)
et Swing-Away



Options et caractéristiques de l'EASY LIFE R – configurez ce fauteuil roulant à châssis rigide selon vos besoins individuels. Vous trouverez des informations complémentaires sur les options dans le bon de commande EASY LIFE R.



// HAUTEUR D'ASSISE RÉGLABLE EN SEPT POSITIONS

Carrossage de 0° à 4°. Quatre réglages du centre de gravité, de très actif 83 mm à stable 23 mm.




// FREINS À DÉBATTEMENT

Freins d'utilisation simple avec un levier amovible pour faciliter les transferts.



// ANGLE DU DOSSIER RÉGLABLE (EN OPTION)

Dossier léger facile à ajuster. Plage de réglage de 20°, de -12° à +8° par palier de 4°.

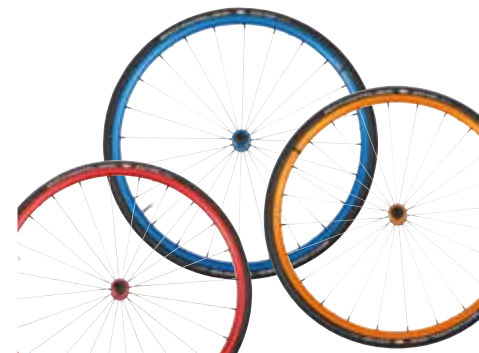

// ROUES À RAYONS LÉGERS 24"

3 couleurs anodisées sont disponibles pour la jante et le moyeu de la roue arrière de 24".



// TOUCHE PERSONNELLE

Plaque de fixation et fourche de roue avant en trois couleurs anodisées.



// MAINS COURANTES ELLIPSE 3R

La bande en caoutchouc Gripton recouvrant la main courante ovale de forme ergonomique assure une prise parfaite.



// VERROU PALETTE MONOBLOC

Grâce à ce verrou, la palette reste toujours en place même lorsque vous roulez sur des sols irréguliers.



// REPOSE-PIEDS SWING-AWAY

Pour un look moderne & actif. Disponible en 70°, 80° et 90°.

DONNÉES TECHNIQUES

	Life	Life R
Charge max.	140 kg	125 kg
Angle du châssis avant	version cadre avant fixe : 75° / 85° / 85° avec rétrécissement 20 mm version Swing-Away : 90° / 80° / 70°	version cadre avant fixe : 75° / 85° / 85° avec rétrécissement 20 mm version Swing-Away : 90° / 80° / 70°
Largeur du siège	360 - 540 mm	340 - 480 mm
Profondeur du siège	360 - 500 mm	360 - 500 mm
Hauteur avant de l'assise	400 - 540 mm	390 - 500 mm
Hauteur arrière de l'assise	400 - 510 mm	360 - 470 mm
Hauteur du dossier	250 - 500 mm	250 - 450 mm
Angle du dossier	-12° - +12°	-12° - +12°
Carrossage	0°/1°/2°/3°/4°	0°/1°/2°/3°/4°
Largeur // logeur // hauteur hors-tout	760 mm // 1075 mm // 995 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Rayon de braquage max.	700 mm	700 mm
Pente max. en toute sécurité	7° (pour pouvoir utiliser le frein de stationnement)	7° (pour pouvoir utiliser le frein de stationnement)
Roues avants // roues arrières	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"
Poids du fauteuil	à partir de 11 kg	à partir de 11 kg
Poids de transport	à partir de 6,7 kg	à partir de 6,7 kg
Poids de la pièce la plus lourde	2,1 kg	2,1 kg
Pièces amovibles	roues arrières & repose-pieds (pour le transport)	roues arrières & repose-pieds (pour le transport)
Couleurs des châssis	24	9
Crash test	oui (autorisé pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19)	
Transport sans usager	accrochez solidement le fauteuil roulant dans le véhicule (par ex. voiture ou avion).	
Conformité et contexte d'utilisation	pour personnes avec handicap moteur et mobilité réduite (enfants et adultes); intérieur et extérieur. Utilisation par l'utilisateur ou son accompagnateur.	



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise medical. Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.