

Q300[®] M Mini

Ultra compact, ultra performant.



Q300 M Mini avec SEDEO LITE



Q300 M Mini avec SEDEO PRO



DES PIÈCES EXIGÜES? DÉCOUVREZ LA BASE ULTRA-ÉTROITE!

En avez-vous assez que l'on vous dise là où vous ne pouvez pas aller ? Avec ses 520 mm, la base ultra compacte du Q300 M Mini est si étroite qu'il passe là où d'autres ne passent pas.

520 mm

1120 mm



ULTRA COMPACT, RAYON DE BRAQUAGE DE 1120 MM

Grâce à sa VÉRITABLE technologie de traction centrale, le Q300 M Mini tourne sur place. Les roues directrices sont proches des roues motrices et permettent un rayon de braquage incroyablement petit de seulement **1120 mm**. En comparaison, les fauteuils roulants électriques avec traction avant ou arrière doivent «osciller» autour de leurs roues motrices et ont ainsi un rayon de braquage beaucoup plus important.



QUE SIGNIFIE VÉRITABLE TECHNOLOGIE DE TRACTION CENTRALE ?

Les roues motrices du Q300 M Mini sont installées au milieu de la longueur totale, donc le centre de gravité du fauteuil se trouve juste au dessus d'elles. Cela permet un petit rayon de braquage et améliore la traction pendant les trajets. Lorsque les roues motrices sont placées plus en avant ou en arrière, le rayon de braquage est plus grand (et le fauteuil continue d'osciller autour d'elles). Grâce à sa VÉRITABLE traction centrale, le Q300 M Mini offre le plus compact des rayons de braquage et aussi plus de traction et de stabilité.



DES ROUES MOTRICES DE 300 MM

Recherchez-vous la manœuvrabilité la plus resserrée en intérieur? Ces roues motrices standard vous offrent la plus compacte des largeurs de base avec seulement 520 mm.





DES ACCOUDOIRS RELEVABLES VERS L'ARRIÈRE

Des difficultés lors des transferts ?
Relevez simplement les accoudoirs vers
l'arrière pour avoir plus de place. Ils
existent aussi en version amovible ou
réglable.



410 mm

PETITE HAUTEUR D'ASSISE

Installez-vous confortablement à une table ou
dans le véhicule adapté à votre transport – avec la
hauteur d'assise réduite du Q300 M Mini : à partir
de 410 mm (avec inclinaison d'assise manuelle) et
430 mm (avec inclinaison d'assise électrique).

ÉQUIPEZ VOTRE Q300 M MINI.

Le Q300 M Mini possède non seulement les performances d'un grand fauteuil électrique, il en a aussi les spécificités ! Qu'il s'agisse d'inclinaison d'assise électrique, d'élévation d'assise, de réglage électrique du dossier ou de repose-pied électrique, le Q300 M Mini dispose des fonctions qui répondent à vos exigences cliniques et à votre style de vie.



REPOSE-PIEDS RELEVABLES ÉLECTRIQUEMENT

En faisant lever et baisser vos jambes, ces repose-pieds contribuent à réduire les enflures et à améliorer l'irrigation sanguine. Grâce à la compensation de longueur, la position assise reste constante et empêche des déplacements de bassin indésirables.

INCLINAISON D'ASSISE AVEC DÉPLACEMENT DU CENTRE DE GRAVITÉ

Adaptez votre position au cours de la journée avec l'inclinaison d'assise électrique pouvant aller jusqu'à **50°**. Le déplacement du poids contribue à la diminution des pressions et à assurer une position assise confortable tout en réduisant l'effort musculaire.

0° - 50°

L'OUTDOOR-PERFORMER

Expérimentez un fauteuil roulant électrique vraiment compact avec des performances sensationnelles même en plein air. Suffisamment étroit pour avancer rapidement dans une ville encombrée mais aussi en plein air et sur la route, le Q300 M Mini convainc par ses remarquables performances.

TECHNOLOGIE ANTI-TANGAGE

Lorsqu'un fauteuil roulant électrique s'arrête dans une pente, le mouvement d'arrêt le fait normalement basculer vers l'avant. Nous avons résolu ce problème grâce à la technologie anti-tangage de sorte que vous restez en position de manière sûre et stable.



SUSPENSION INDÉPENDANTE POUR CHAQUE ROUE

Notre suspension BREVETÉE indépendante pour chaque roue leur permet de rester au sol tout en grimpant et en franchissant les obstacles. Les chocs et les bosses sont absorbés par les suspensions, ce qui assure un trajet doux et sans heurts.



ROUES MOTRICES 14"

Si la performance en plein air vous tient à cœur, alors les roues 14" en option sont ce qu'il vous faut (largeur totale de **570 mm**). Celles-ci offrent ce qu'il y a de mieux en traction et stabilité, vous pouvez ainsi franchir des obstacles (comme les trottoirs) jusqu'à 70 mm sans problème.

AUCUNE NÉCESSITÉ DE SE PRESSER

Avec des batteries de 56 Ah, le Q300 M Mini vous amène partout grâce à son impressionnante autonomie de **36 km**, même avec des détours.



CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT FIABLE

Pas de bord de trottoir en vue ? Par chance le Q300 M Mini peut maîtriser des bordures jusqu'à 50 mm grâce à ses roues motrices **12 pouces**, si bien que vous restez flexible en permanence. Vous voulez franchir des bordures encore plus hautes ? Équipez-vous de roues motrices de **14 pouces** et franchissez des trottoirs hauts de **70 mm**.



300 mm

ÉLÉVATION ET INCLINAISON D'ASSISE ÉLECTRIQUE

L'élévation d'assise vous élève de **300 mm**. Vous pouvez ainsi vous approcher de tous les objets du quotidien qui sinon seraient inaccessibles. La position supérieure facilite aussi le transfert. Et grâce à l'inclinaison d'assise de **50°**, vous pouvez vous détendre et aussi mieux répartir les pressions.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE L'ANGLE DE DOSSIER

Un dossier à réglage électrique est idéal si vous voulez régler vous-mêmes votre position pour vous détendre.



C-Me

AVANCER AVEC LE SIÈGE ÉLEVÉ

C-Me vous permet d'avancer à une vitesse max. de **4,5 km/h** avec le siège élevé (**300 mm**), côte à côte avec ceux qui vous entourent. Vous pouvez même modifier la hauteur d'assise sans vous arrêter, rien qu'en pressant un bouton!



ATTENTION : les motifs de l'habillement sont réalisés à la main et peuvent différer de l'image.

ROULER AVEC STYLE

Suivez-vous la mode? Avec les 12 motifs toniques à votre disposition pour habiller la base motrice, c'est possible! La combinaison de styles est parfaite avec les sept touches de couleur supplémentaires du garde-boue et de la fourche de roue directrice.

Motif floral blanc

Carbone

Motif flammé :
gris

bleu

rouge

blanc

Motif structuré :
gris

pink

violet

bleu

rouge

blanc

CARÉNAGES :

Rouge

Bleu

Blanc

Noir

TOUCHES DE COULEUR :

Vert

Orange

Bleu

Rouge

Argent

Blanc

Noir

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO LITE

Le SEDEO LITE propose un cadre d'assise aux réglages multiples avec des rails latéraux pour le montage d'options de soutien et de positionnement supplémentaires. Idéal pour des utilisateurs ayant des besoins cliniques de légers à moyens.

ACCOUDOIRS RELEVABLES

Les accoudoirs relevables sont faciles à utiliser et laissent un espace libre pour les transferts. Il est possible de choisir entre une variante amovible ou bien solidaire du dossier.

SUPPORTS POUR REPOSE-PIEDS PIVOTABLES AVEC COMPENSATION DE LONGUEUR

Ces supports de repose-pieds sont faciles à régler en longueur pour obtenir le meilleur ajustement possible et aussi pivotables pour faciliter le transfert de et dans votre fauteuil électrique. Ils sont aussi disponibles en version repose-pieds central relevable.

POUR DES
UTILISATEURS
AYANT DES
BESOINS CLINIQUES
DE LÉGERS À
MOYENS

DOSSIER RÉGLABLE AVEC REMBOURRAGE CONFORT

Le dossier standard réglable en hauteur dispose d'une housse douce et respirante avec quatre bandes velcro à tension réglable afin de permettre un grand nombre de postures corporelles. Vous pouvez augmenter votre confort et votre positionnement avec des coussins de dossier et d'assise JAY ou SEDEO.



TECHNOLOGIE DES RAILS D'ASSISE

Les rails d'assise intégrés permettent de fixer de nombreux éléments de positionnement comme des pelotes latérales ou de cuisse. Faciles à installer et à positionner !



SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO

POUR DES
UTILISATEURS
AYANT DES
BESOINS CLINIQUES
DE MOYENS À
COMPLEXES

Le système d'assise SEDEO PRO associe un cadre d'assise extrêmement réglable et configurable avec un choix complet d'options de soutien et de positionnement. S'adapte de manière idéale aux utilisateurs avec maladies dégénératives ou bien prévient les déformations du squelette.



INCLINAISON D'ASSISE 50°

L'inclinaison d'assise électrique de 50° possède de grands avantages cliniques : maîtrise du risque d'escarres, soutien d'une posture corporelle correcte de même qu'un confort d'assise élevé pour l'utilisateur en fauteuil roulant.



RÉGLAGE DE L'ANGLE DE DOSSIER DE 90° À 150°

Cette fonction facilite la respiration, prévient les lésions dues à la pression et les complications de digestion. Elle contribue aussi à garder une bonne posture d'assise en passant de la position couchée à la position assise.

DOSSIER BIOMÉCANIQUE

Grâce au système de dossier biomécanique qui permet de compenser la longueur jusqu'à 100 mm, les commandes de tête et de menton restent dans la même position malgré le réglage de l'angle de dossier.



Photographiez le code QR avec votre smartphone pour des plus informations.

SEDEO LITE, UN COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE

Découvrez ce coussin de dossier unique.
Facile à régler, il apporte un soutien complet
du dos et de chaque côté du torse ainsi qu'un
degré supérieur d'ajustabilité.

LA FORME S'AJUSTE À VOTRE COLONNE VERTÉBRALE

À la place d'une base fixe, ce système flexible de
dossier dispose de 8 sangles ajustables. Alors
que d'autres systèmes n'ont qu'un contact limité
avec la colonne vertébrale, la mousse souple
de ce coussin s'adapte à votre colonne vertébrale
et favorise un contact intégral, ainsi que confort
et stabilité.

Il est si polyvalent que même les personnes
souffrant de **cyphose** modérée à sévère
peuvent se tenir beaucoup plus droites sans
perdre en confort.



ENVELOPPE LE CORPS ET S'Y ADAPTE

En s'adossant dans le fauteuil, on se sent comme enveloppé car la mousse des parties latérales s'adapte à la forme du corps et permet ainsi de s'enfoncer de manière optimale.

La pression est ainsi mieux répartie de sorte que les lésions peuvent être évitées.

La stabilité et l'alignement du tronc sont assurés par les appuis latéraux. Ils sont intégrés dans le dossier, ne glissent pas et peuvent être réglés indépendamment les uns des autres.

1

Réglable vers l'intérieur ou l'extérieur

2

Réglable vers le haut ou le bas

3

Resserré (par ex. en cas de scoliose) ou relâché pour plus de liberté de mouvement



JAY & WHITMYER

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Vous pouvez choisir entre de nombreux appui-têtes WHITMYER, des coussins d'assise et de dossier JAY à combiner avec les cadres SEDEO LITE et SEDEO PRO pour répondre à vos différents besoins cliniques et ainsi être sûr de trouver la position qui vous convient.



APPUI-TÊTES WHITMYER

Afin de répondre aux exigences de positionnement, du soutien basique jusqu'aux multiples points de soutien, Whitmyer a développé différents appui-têtes. Le système de fixation se combine parfaitement avec une série de coussinets et propose une large palette de solutions pour le soutien et/ou le contrôle de la colonne cervicale et de la tête.

COUSSINS & DOSSIERS JAY

Les coussins d'assise et de dossier JAY ont été développés pour une stabilité et une protection cutanée maximales. Ils s'adaptent facilement et séparément et peuvent ainsi répondre aux exigences de positionnement les plus diverses.



R-NET

ADVANCED JOYSTICK

Chaque fauteuil roulant de la série Q500 (équipement de base dépendant du système d'assise) dispose d'un module de commande innovant R-Net. Un grand écran HD très lisible et des touches faciles à utiliser permettent une utilisation intuitive.

CONNECTIVITÉ

Nouveau module de commande avec fonction infrarouge intégrée et écran multifonctions élargi. Ceci permet l'utilisation d'appareils équipés d'une interface infrarouge.

BLUETOOTH & IDEVICE

Commande facile du portable, de l'ordinateur, de la tablette et d'autres appareils (2 appareils Android/Windows et 2 IOS). Jusqu'à trois appareils peuvent être contrôlés par des modules Bluetooth séparés.

TECHNOLOGIE DE TOUCHES D'ATTRIBUTION

La technologie de touches d'attribution par Sunrise Medical offre de multiples possibilités de software intégré faciles à utiliser pour améliorer la vie quotidienne.




SWITCH-IT

COMMANDES INNOVANTES

Flexible dans chaque position – à la demande, les fonctions d'assise prédéfinies peuvent être commandées par simple pression d'un bouton grâce à la Ctrl+5 Switch Box. Celle-ci dispose en version standard d'une prise USB pour le chargement des appareils mobiles.

COMMANDES SPÉCIALES ALTERNATIVES

Si la conduite avec un joystick conventionnel n'est pas pour vous la meilleure option, vous pouvez bénéficier des avantages des périphériques d'entrée Switch-it et de l'entier potentiel de conduite de votre fauteuil électrique.

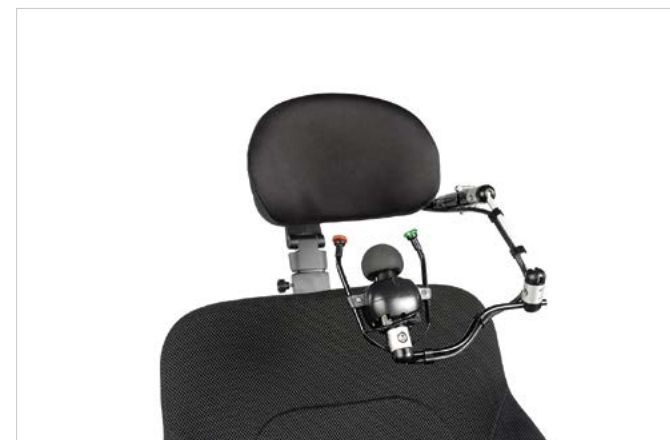

LINK-IT


SYSTÈME DE MONTAGE

Vous avez besoin d'interrupteurs ou de commandes spéciales supplémentaires ? Avec Link-it, le nouveau système de fixation de construction modulaire, rien n'est impossible.

D'innombrables combinaisons peuvent être réalisées avec les modules et les barres pour répondre aux différentes exigences. Link-it est non seulement très facile à positionner mais veille aussi à ce que le design minimaliste du fauteuil soit préservé. S'il faut un module de commandes supplémentaire, une touche sur le dossier ou un interrupteur sur l'appui-tête, Link-it, tout simplement !



DONNÉES TECHNIQUES

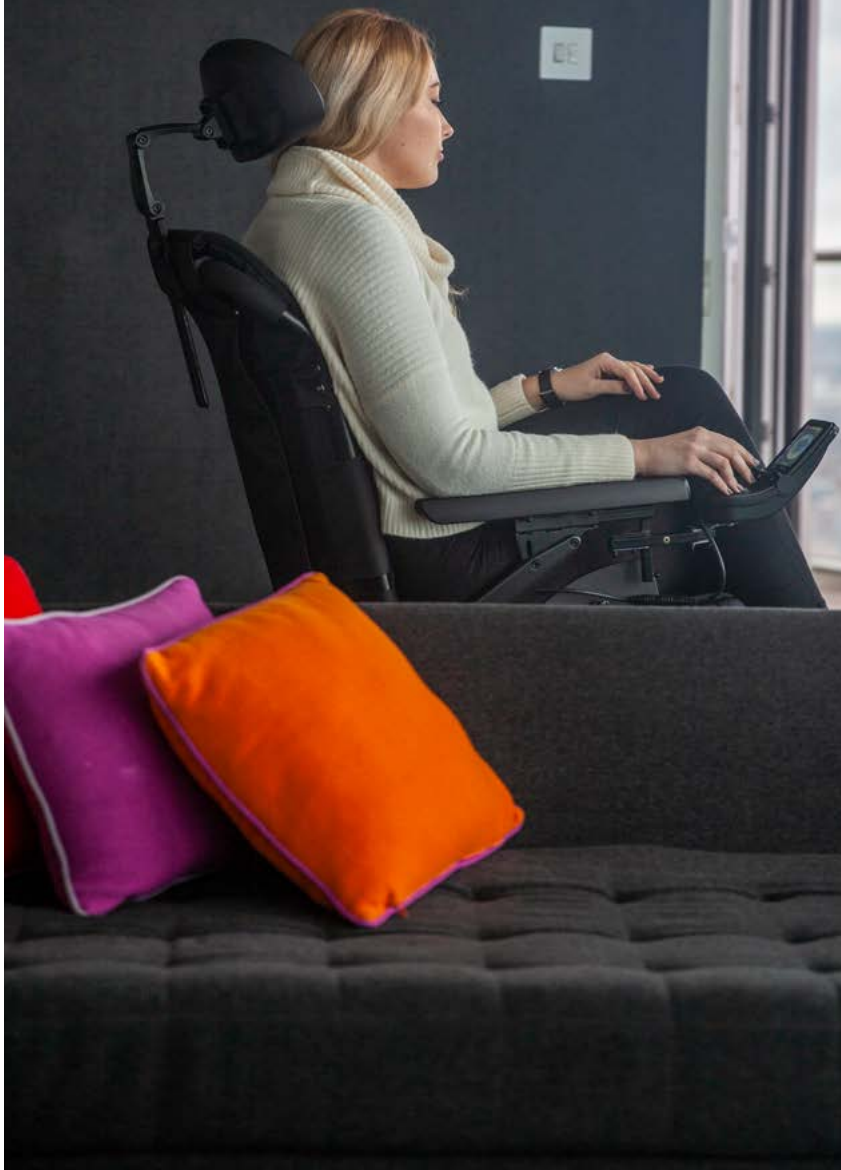

SYSTÈME D'ASSISE



**Q300 M Mini avec
SEDEO LITE**



**Q300 M Mini avec
SEDEO PRO**

Dimensions

Largeur du siège	385 - 510 mm	380 - 560 mm
Profondeur du siège	410 - 560 mm	400 - 580 mm
Hauteur du siège	410 - 490 mm	415 - 490 mm
Inclinaison d'assise	0 - 9°	0 - 9°
Hauteur du dossier	460 - 510 mm	530 - 720 mm
Angle du dossier	85 - 120°	90° - 150°
Poids max. utilisateur	136 kg	136 kg

Caractéristiques

Système d'assise	SEDEO LITE	SEDEO PRO
SEDEO PRO coussin dossier, flexible	—	●
Réglage de l'angle du dossier, électrique	●	●
Repose-pied central électrique	●	●
Bouton Stop par radio (télécommande pour stopper le fauteuil)	●	—
C-Me	●	●

- Disponible

Certaines options ne sont pas disponibles pour les deux systèmes d'assise. Vous trouverez des informations plus précises dans le bon de commande correspondant.

BASE MOTRICE

Dimensions	
Largeur hors-tout	dès 520 mm
Longueur hors-tout (avec repose-pied central)	dès 1060 mm
Rayon de braquage	dès 1120 mm
Stabilité dynamique max.	8°
Capacité de franchissement max.	50 mm (avec roues motrices 12") 60 mm (avec roues motrices 13") 70 mm (avec roues motrices 14")
Autonomie max. (selon ISO 7176-4)	25 km (avec des batteries 41 Ah) 36 km (avec des batteries 56 Ah)
Poids du fauteuil (avec des batteries)	dès 103 kg
Roues motrices	12" / 13" / 14"
Vitesse maximale	6 km/h / 10 km/h
Batteries	56 Ah (version pour payeur direct disponible aussi avec 41 Ah en option)
Boîtier de commande	VR2, R-NET
Transport sans usager	fixer solidement le fauteuil roulant dans le véhicule de transport (par ex. auto, avion)
Conformité d'utilisation	pour les personnes à mobilité réduite à l'intérieur et à l'extérieur



Maintenant que vous savez tout sur
le QUICKIE Q300 M Mini, il est temps
d'aller l'essayer par vous-même.



Photographiez le code QR avec votre
smartphone et réservez aujourd'hui encore
votre essai de conduite gratuit.



Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. S'il-vous-plait, lisez le mode d'emploi pour prendre connaissance d'instructions d'utilisation et de directives de maintenance sûres.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise medical. Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.