



# ATTITUDE JUNIOR

DÉCOUVRE TON MONDE

# POUR PETITS EXPLORATEURS

EXPLORE TON MONDE,  
VIS DES AVENTURES, SAVOURE LA  
LIBERTÉ D'ÊTRE AUTONOME.

Aller au terrain de jeu avec des amis,  
aller seul à l'école ou faire des  
excursions en famille.

L'ATTITUDE Junior permet  
aux enfants et adolescents  
de répondre à leur désir  
d'activité physique et de  
liberté.

// Empulse Attitude Junior  
avec Zippie Youngster 3

*ATTITUDE*  
*Junior*

# FAIRE DU VÉLO EST IDÉAL POUR LES ENFANTS

- Cela fait partie du développement naturel en grandissant
- Plus de confiance en soi grâce à la participation et à l'indépendance
- Favorise le développement de la coordination et de la conscience du corps
- Renforce le système cardio-vasculaire




# À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ...

Simplement autonome. Grâce au mécanisme d'attache simple, l'ATTITUDE s'attache et se détache du fauteuil roulant en quelques secondes. Idéal pour les explorateurs désireux de conquérir le monde à toute vitesse.

Le mécanisme d'attache est simple, il s'enclenche facilement et en toute sécurité à l'avant du fauteuil roulant – sans éléments supplémentaires ou câbles gênants, limitant la place pour les jambes.

Seules deux petites broches (170 g) restent dans le fauteuil après avoir enlevé l'ATTITUDE.

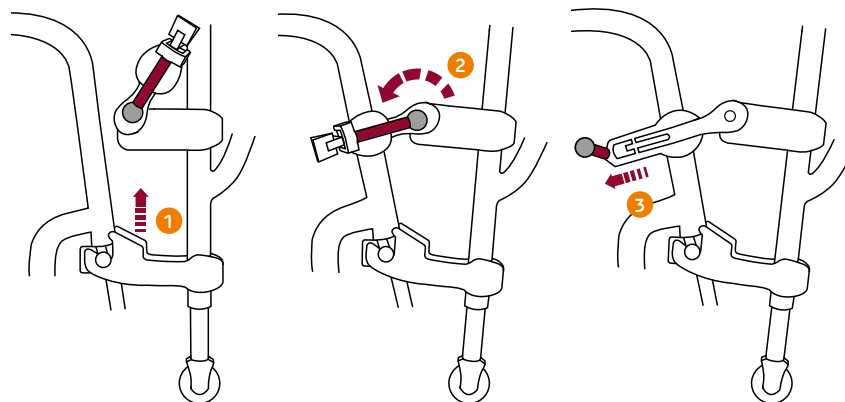

- 1 Enclencher l'attache inférieure dans les broches.
- 2 Repousser légèrement l'Attitude à l'aide de la poignée et faire pivoter les attaches supérieures vers le bas.
- 3 Bloquer la liaison en tirant sur le levier.

# UNE ÉQUIPE QUI GRANDIT ENSEMBLE

Se déplacer ensemble – grandir ensemble. Un handbike attachable qui grandit avec son utilisateur et s'adapte aux besoins individuels. L'ATTITUDE Junior est le membre le plus jeune de notre famille de handbikes et il convient aux enfants à partir d'une taille de 120 cm. Aussi bien la position de la manivelle que sa longueur se règlent en quelques gestes – indispensable pour un maniement ergonomique de la manivelle et pour avoir du plaisir en faisant du handbike.



# SIMPLEMENT ADAPTÉ AUX ENFANTS

Les poignées horizontales assurent une position ergonomique des mains. Le maniement du moyeu à 8 vitesses intégrées avec changement de vitesses par poignée tournante est intuitif et offre un maximum de sécurité.



# ATTITUDE

## Junior



### // MOYEU À VITESSES INTÉGRÉES

8 vitesses, maniement intuitif grâce au changement de vitesses par poignée tournante et frein à rétropédalage.



### // POIGNÉES HORIZONTALES

La position horizontale assure une position optimale, ergonomique des mains.



### // MANIVELLE RÉGLABLE EN LONGUEUR

En deux positions – ajustable à différentes longueurs de bras.



### // FREIN DE STATIONNEMENT

Facile à manier avec fonction enclenchement fait partie de l'équipement standard de tous les modèles Attitude.

## DONNÉES TECHNIQUES

### ATTITUDE JUNIOR // Vélo à attacher pour enfants

Poids d'utilisateur max.	100 kg	Largeur de la manivelle en V	240 mm
Largeur de cadre avant (réglable +20 mm)	260 - 460 mm	Longueur de la manivelle	110 mm / 130 mm / 150 mm
Poids des pièces d'attelage sur le fauteuil	170 g	Réglage en profondeur position de manivelle	100 mm
Poids total du bike	14,5 kg	Réglage de l'angle position de manivelle	28°
Taille de la roue	16"	Frein	frein à rétropédalage
Poignée de vitesse	poignée tournante	Frein de stationnement	oui (frein sur jante)
Dérailleur	moyeu à 8 vitesses	Couleur du cadre	31



#### Sunrise Medical SA

Erlenuweg 17  
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 38 38  
info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise Medical.

Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch).

