

improving people's lives

SOPUR EASY LIFE R



SOPUR EASY LIFE R[®] - le fauteuil à châssis fixe
bon marché, léger et moderne
assorti d'un large choix d'options pour utilisateur actif

- Concept de châssis modulable (USP)
- Léger
- Qualité solide (durable)
- Performance
- Esthétique/design
- Adaptabilité & options pour utilisateur actif
- Transport facile
- Pièces identiques (Gamme Easy Life)



Concept de châssis modulable



Le nouveau concept de châssis moderne du Easy Life R permet de choisir différents modèles de châssis potences:

- Potences fixes (FF):
75° / 85° / 85° avec coude
- Potences escamotables (Swing Away):
Repose-pieds à 70° / 80°

Et utilise les mêmes pièces que:

- Easy Life
- Neon / Xenon
- Easy 200/300



• 3 types de châssis avant

A) 75°



-> pour utilisateur avec amplitude du genou limitée.
Patient de grande taille (longueur des jambes).




B) 85°



-> meilleur équilibre assis, réduction des spasmes, base courte et active, franchissement plus facile des obstacles et meilleure manœuvrabilité

C) 85° avec
coude de 2 cm

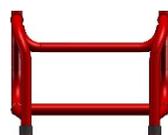


-> pour para-/tétraplégiques complets (meilleure tenue des jambes et allure active)


• 4 longueurs de châssis

Croissance des adolescents, réutilisation facile, pour utilisateur avec amplitude du genou limitée (par ex. châssis long)

1. Court: 36 – 40 cm
2. Moyen: 42 – 44 cm
3. Long: 46 – 48 cm
4. Extra long: 50 cm

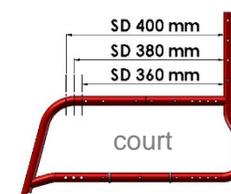


court

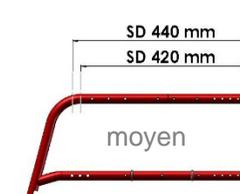


moyen

EASY Life R – Avant fixe

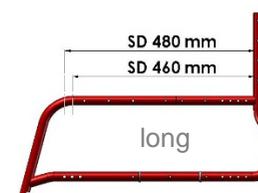

long

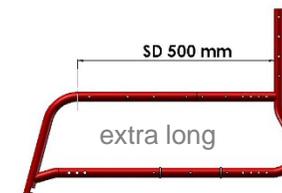

extra long



Concept de châssis modulable – Swing-Away



Le Easy Life R existe en version Swing-Away pour utilisateur avec fonctions résiduelles au niveau des jambes (par ex. patients para-/tétraplégiques incomplets, hémiparétiques et atteints de scléroses multiples...)

- **Repose-pieds Swing-Away**

en aluminium de haute qualité (Xenon Style)



- **2 angles**

A) 70°  -> pour utilisateur avec amplitude du genou limitée ou ayant besoin d'une position d'assise stable

B) 80°  -> châssis plus court pour une meilleure manoeuvrabilité, allure active


- **3 longueurs de châssis**

Croissance des adolescents, réutilisation facile, pour utilisateur avec amplitude du genou limitée (par ex. châssis long)


1. Court: 36 – 40 cm

2. Moyen: 42 – 44 cm


3. Long: 46 – 50 cm

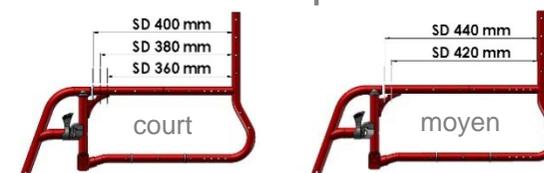

EASY Life R – Swing-Away

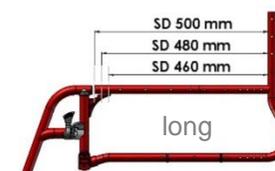

Concept de châssis modulable – Exemple: Plus grande profondeur d'assise

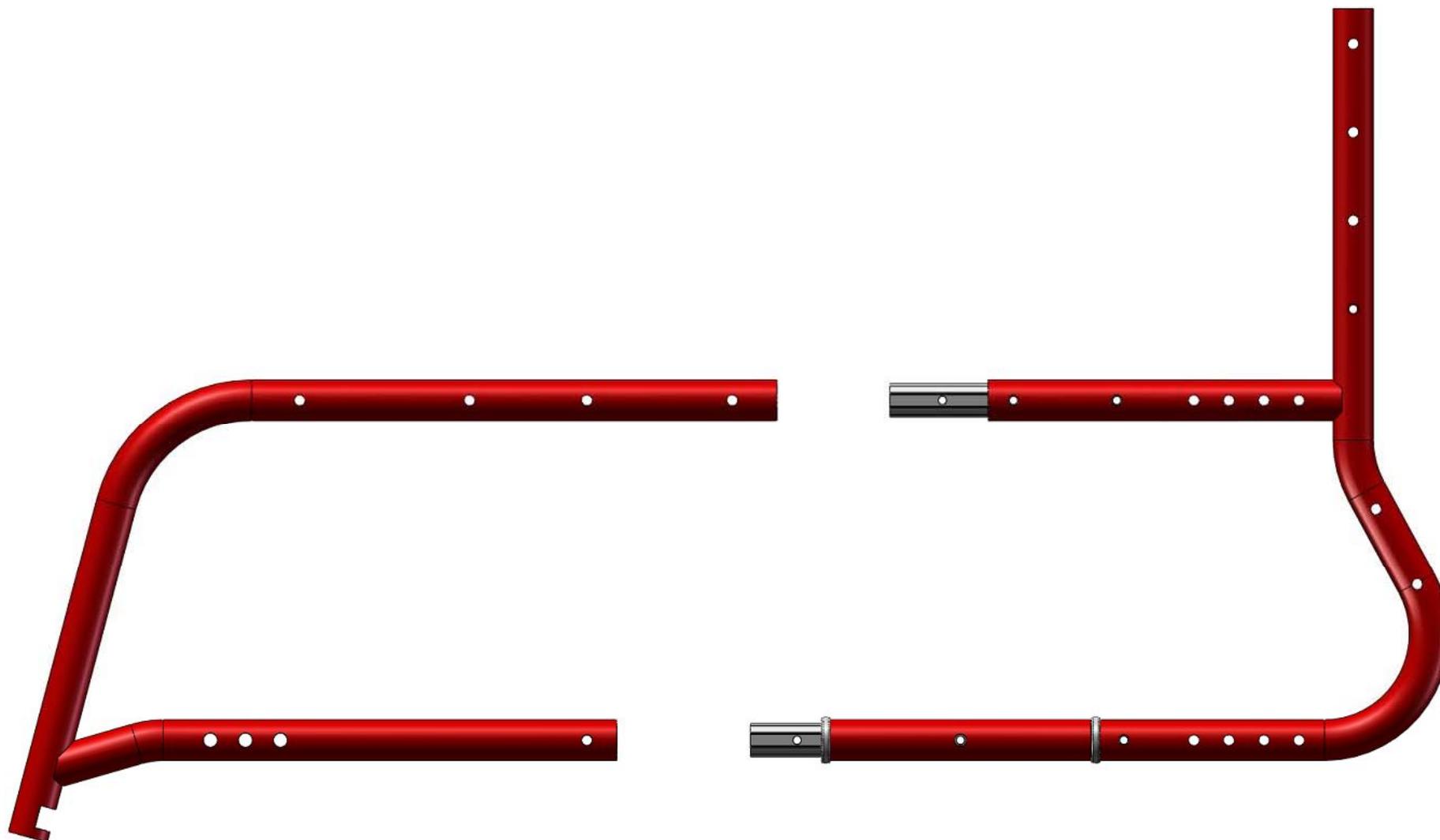

Le fauteuil Easy Life R a été conçu pour vous simplifier la vie pendant de nombreuses années

- 3 barres de renfort transversales
- «Châssis en caisson»
- Approuvé par crash test (Option Crash Test)



rigide, solide & durable



Un design moderne, actif & élégant :

- Châssis au design moderne et élégant
Le châssis potences à 85° avec avancée de 2 cm coudée vers l'intérieur donne au fauteuil une allure particulièrement active, sportive et robuste.
- Parties latérales en aluminium et revêtement moderne du dossier
- 3 barres de renfort transversales pour un design aéré et minimal



- 10 coloris au choix & sets stylés pour pièces de fixation anodisées



Easy Life R – Esthétique/Design



...de nombreuses possibilités de personnalisation:

- 10 coloris au choix



(En option: fourche, main courante & moyeu/jante également dans le coloris du châssis)

- Pièces anodisées (fourche et plaque de fixation)
 - Noir
 - Orange
 - Argent



Châssis potences fixes

Fixation emboîtée sur la tubulure du châssis et bloquée par un boulon pour éviter les torsions

-> permet de régler l'orientation idéale de la roue directrice

Châssis potences avec repose-pieds SA

Fixation intégrée dans la partie avant du châssis

-> fauteuil plus stable et léger

Positionnement le plus en avant possible (meilleure répartition du poids):

-> meilleure stabilité à l'avant

meilleure performance de conduite

Plus grande plage de réglage : peut également être monté en sens inverse

-> plus grande plage de réglage


plus grande manœuvrabilité



Easy Life R – Support de l'axe


Le système de support de l'axe du Easy Life R est identique à celui du Easy Life:

- Hauteur du siège réglable (7 positions)
pour une adaptation optimale du fauteuil à l'utilisateur
(par ex: angle d'assise pour une position d'assise stable)
- Ecartement flexible des axes grâce à des pièces d'écartement
pour maintenir une largeur totale aussi étroite que possible
- Carrossage réglable de 0° à 4° grâce à des pièces d'écartement:
meilleure stabilité latérale, protection des doigts pour le passage des portes étroites, allure sportive
- Centre de gravité réglable (4 positions)
par ex. 8.3 cm pour une bonne performance de conduite
ou 2.3 cm pour plus de sécurité & de stabilité

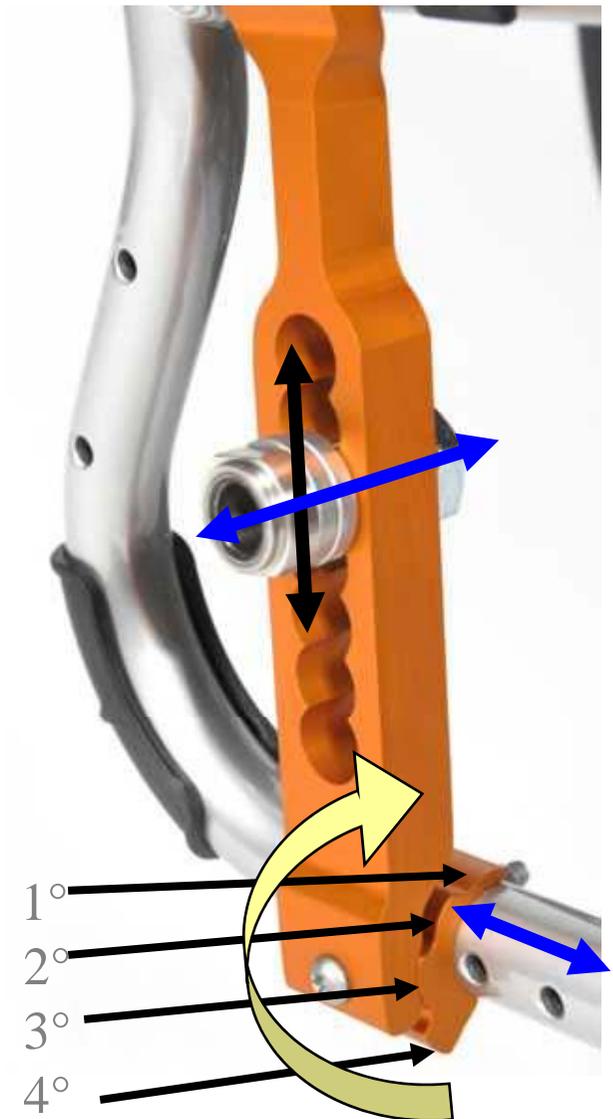

Easy Life R – Angle du dossier réglable

- Réglage de l'angle du dossier de 20°, de -12° à +8° (par palier de 4°) pour répondre aux divers besoins des utilisateurs (par ex. équilibre assis ou confort)
- Léger et facile à régler
enlever simplement la vis et repositionner
-> manipulation facile
- Point d'équilibre ~ 6 cm au dessus de l'assise
afin d'ajuster l'angle de manière optimale et obtenir un encombrement minimal
- Verrouillage en position rabattue
pour faciliter le transport -> le dossier reste rabattu

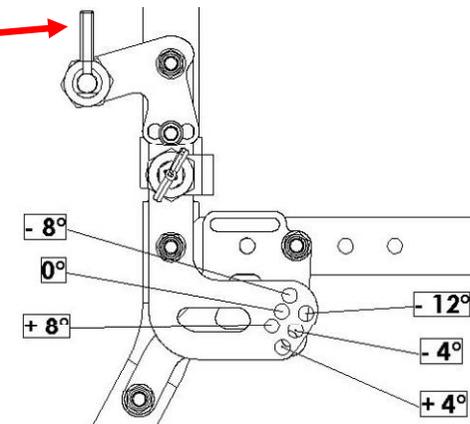

Easy Life R – Toile de dossier



La toile adaptable du dossier est identique à celle de l'Helium (plusieurs velcros et housse en trois parties). Permet de positionner plus facilement l'utilisateur lorsqu'il est assis dans le fauteuil.



Existe en:

- Toile standard noire, en nylon
- Toile noire, circulation d'air

Les deux versions existent avec une pochette à l'arrière



La toile de siège permet

- d'optimiser le confort (ferme ou moelleux)
- de régler la profondeur (36 - 50 cm)

afin de réutiliser facilement le fauteuil ou de l'agrandir avec un châssis long



Easy Life R – larg./prof. d'assise (SA/FF)



Largeur d'assise: 34 – 48 par palier de 2 cm

Profondeur d'assise: 36 – 50 par palier de 2 cm

Points de fixation

-> fixation facile du fauteuil pour le transport de son utilisateur à bord d'un véhicule



NB: L'utilisation du fauteuil pour le transport de son utilisateur à bord d'un véhicule n'est possible que si les points de fixation ont été fixés en conformité avec la réglementation.

Châssis pliable



Easy Life SA
70° / 80°



Easy Life FF
75° / 85° /
85° avec coude

Composants / Options	Châssis pliable		Châssis rigide	
	Easy Life SA	Easy Life FF	Easy Life R SA	Easy Life R FF
Châssis à l'avant 75°		•		•
Châssis à l'avant 85°		•		•
Châssis à l'avant 85° avec coude de 2 cm		•		•
Châssis à l'avant SwingAway Easy Life	•			
Châssis à l'avant SwingAway Easy Life R			•	
Toile de siège Easy Life	•	•		
Toile de siège Easy Life R			•	•
Toile de dossier adaptable	•	•	•	•
Toile de dossier adaptable, circulation d'air	•	•	•	•
Poignées	•	•	•	•
Repose-pieds 70°			•	
Repose-pieds 80°			•	
Repose-pieds régl. en hauteur	•	•	•	•
Palettes	•	•	•	•
Protège vêtements	•	•	•	•
Protège vêtements régl. en haut. par outil	•	•	•	•
Prot. vêtements régl. en haut. Quickie Style	•	•	•	•
Protège vêtements Desk	•	•	•	•
Freins	•	•	•	•
Rallonges des freins	•	•	•	•
Roues avant	•	•	•	•
Fourche	•	•	•	•
Roues arrières	•	•	•	•
Support de l'axe	•	•	•	•
Protège rayons	•	•	•	•
Levier de basculement	•	•	•	•
Roulette de sécurité	•	•	•	•

Châssis rigide



Easy Life R SA
70° / 80°



Easy Life R FF
75° / 85° /
85° avec coude

Easy Life – Nouvelles options – Résumé

Nouvelles options		
Large choix de coloris		10 coloris (dito Easy Life R) contre 6 antérieurement Rouge Mars remplace TuttiFrutti Orange
Angle du dossier réglable		Depuis juin 2013 De -12° à +12° (4° positions) contre de -9° à +9° (3° positions)
Châssis avant fixe: 85° 85° avec coude de 2 cm		Meilleur équilibre assis, réduction des spasmes, base courte et active, franchissement plus facile des obstacles
Palette monobloc construction légère		Uniquement pour châssis avant fixe (dito Xenon) Légèreté
Plus grand choix de hauteurs avant du siège		Réglage de la hauteur avant du siège de 40 cm à 52 cm (y compris les versions pour patients hémiplegiques)
Protège-vêtement simple, réglable par outil		Légèreté, design moderne (dito Easy Life R)
Roulette de sécurité, poids léger		Légèreté (disponibles par paire uniquement) (dito Easy Life R)
Système de pliage		Déjà commercialisé Enclenchement automatique, réalisable avec une seule main
Protège-vêtements Desk		Meilleure stabilité, réduction du jeu, plus de rigidité Meilleur positionnement du rembourrage (déjà commercialisé)
Repose-pieds en aluminum (Xenon-Style)		Léger, solide et durable (déjà commercialisé)

Easy Life – Nouvelles options (détails)



- **Nouveaux coloris**



Rouge Mars



Cyan métallisé



Anthracite mat



Dark Chocolate



Limon brillant

Précision: Rouge Mars remplace TuttiFrutti Orange

- **Coloris actuels du Easy Life**



Argent brillant



Rouge mat



Marine mat



Noir



Blanc
(RAL 9010)

Easy Life &
Easy Life R =
palette de coloris
identique

- **Nouvel angle de dossier: de -12° à +12° (par palier de 4°)**

-> Plus de possibilités de réglage (version actuelle de -9° à +9° par palier de 3°)

-> Nouvelles configurations possibles (actuellement uniquement +6° ou -6°)

NB:

Le nouveau système de réglage de l'angle du dossier remplace le dossier réglable actuellement commercialisé.

Commercialisation prévue: à partir de juin 2013



Easy Life R – Réglage de l'angle du dossier (détails)

