

GelZone

- Coussin constitué de 2 couches de mousse avec cuvette pré-formée
- Poche de gel bi-compartmentée incluse - pas de migration du gel
- Protection modérée de la peau et soutien postural léger
- Version Contour disponible pour des besoins modérés en positionnement



Coussin avec gel intégré dans la base mousse à deux couches et cuvette ischiatique pour la protection des zones à risque et une couche de mousse supplémentaire pour le confort. Poche de gel à mouvement lent pour l'immersion du bassin et pour éviter la migration.

Housse:

Housse Aérée (noir) : textile extensible dans les deux sens pour favoriser la circulation de l'air et réduire l'effet isolant.




Mousse :

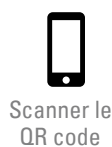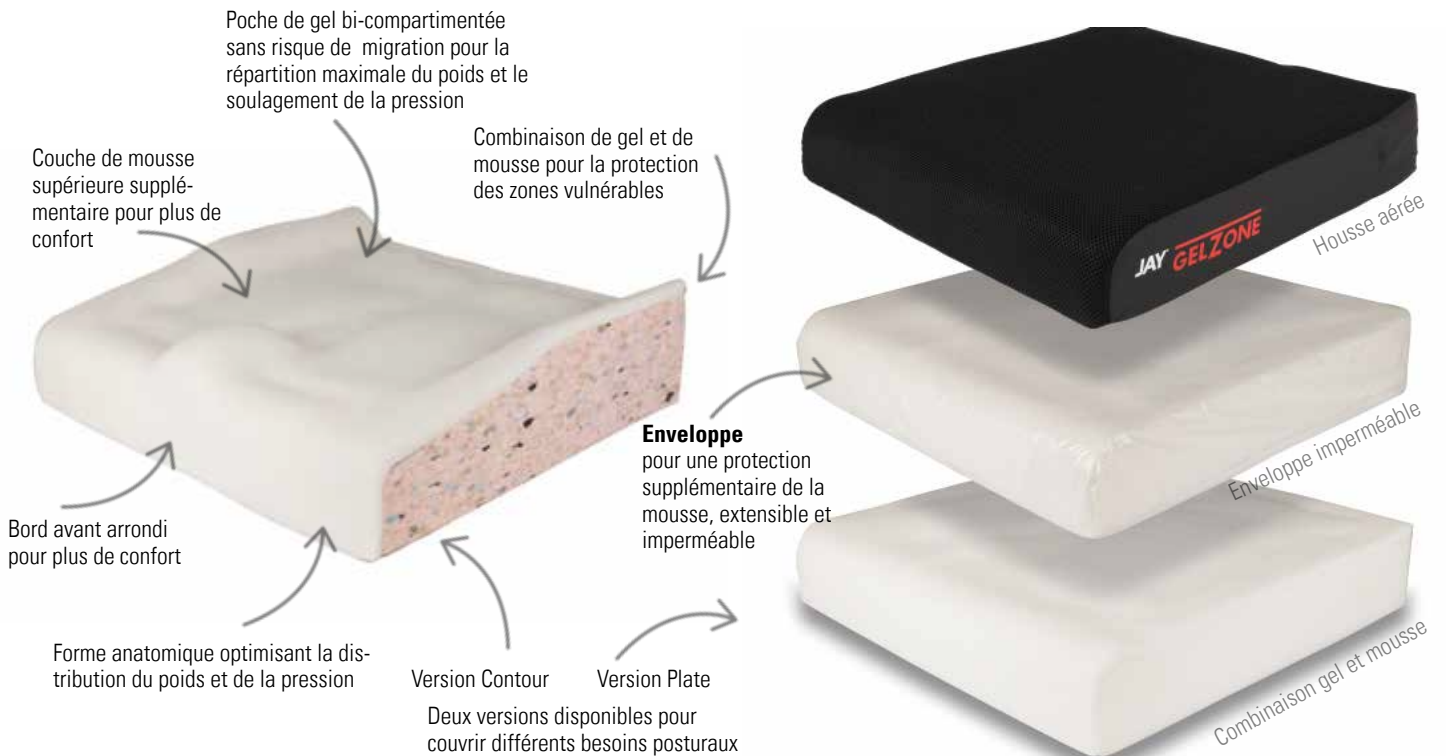

Poids coussin (selon taille)	mini : 2,50 kg
Poids max. Utilisateur	158 kg
Hauteur	50 mm et 80 mm
Largeur	300 - 600 mm
Profondeur	340 - 600 mm

Gamme coussins JAY

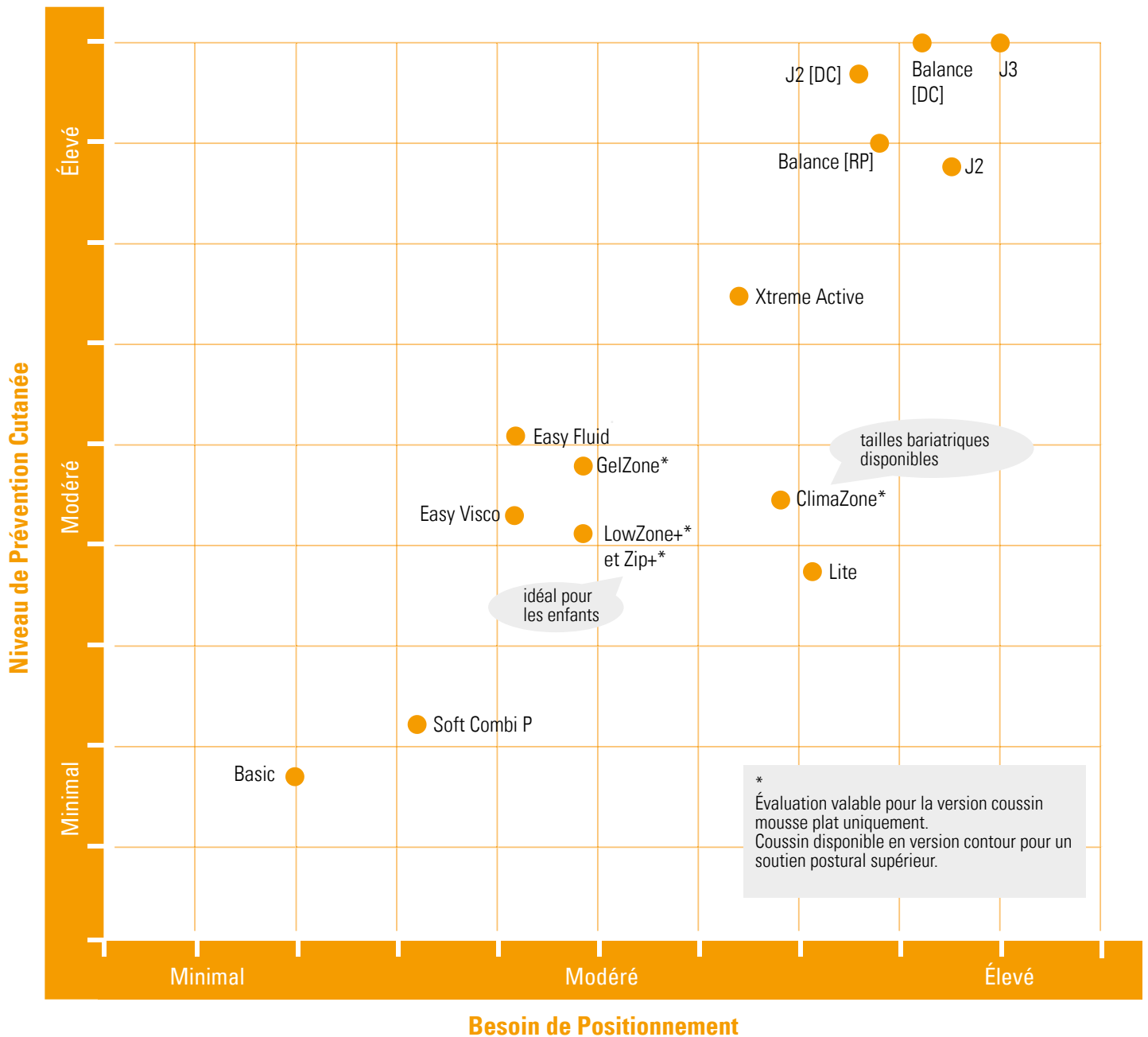

Les exigences relatives à un coussin d'assise sont aussi différentes que les personnes sont individuelles et les compromis en matière d'utilisation clinique ne sont pas acceptables. C'est pourquoi notre gamme JAY offre des solutions d'assise qui couvrent le large éventail des besoins cliniques, tout en maintenant l'efficacité clinique. Tous nos coussins JAY associent la protection de la peau à un soutien postural efficace et à une grande facilité d'utilisation.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : A USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Sunrise Medical recommande vivement qu'un professionnel de santé, tel qu'un médecin ou un thérapeute expérimenté en matière d'assise et de positionnement, soit consulté pour déterminer le coussin et/ou le dossier approprié aux besoins spécifiques de l'utilisateur afin d'éviter toute blessure. Les coussins, les dossiers et les supports de positionnement ne doivent être installés que par un prestataire de santé formé par Sunrise Medical.

Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37100 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr



www.SunriseMedical.fr