

Zip+

- Base constituée de deux couches de mousse avec cuvette anatomique pour optimiser le confort de l'enfant
- Régulation de la température avec la housse CoolOver
- Version plate ou contour pour couvrir des besoins de positionnement différents
- Protection modérée de la peau et soutien postural léger

Coussin pour fauteuil roulant enfant constitué de deux couches de mousse avec cuvette ischiatique pour réduire les points de pression sur les zones vulnérables et répartir le poids sur l'ensemble de l'assise. La housse extérieure aérée ou CoolOver aide à réguler la température.

Housse:

1. Housse CoolOver (bleu nuit) : régule la température de la peau pour prévenir les lésions cutanées, évacue l'excès de chaleur de la peau, facilite la rétention de la chaleur en cas de besoin, maintient la température optimale de la peau.

2. Housse Aérée (noir) : textile extensible dans les deux sens pour favoriser la circulation de l'air et réduire l'effet isolant.



Mousse:

Excellente redistribution de la pression sur l'ensemble de la surface d'assise


Immersion et enveloppement. Réduction de la pression sur les zones à risque

Bord avant arrondi pour plus de confort

Couche supérieure en mousse viscoélastique à mémoire de forme sensible à la température


Enveloppe pour une protection supplémentaire de la mousse, extensible et imperméable

Version Contour Version Plate
Deux versions disponibles pour couvrir différents besoins posturaux

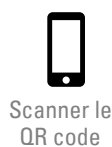

Poids coussin (selon taille)	mini : 0,55 kg
Poids max. Utilisateur	158 kg
Hauteur	50 mm
Largeur	200 - 340 mm
Profondeur	200 - 460 mm

Gamme coussins JAY

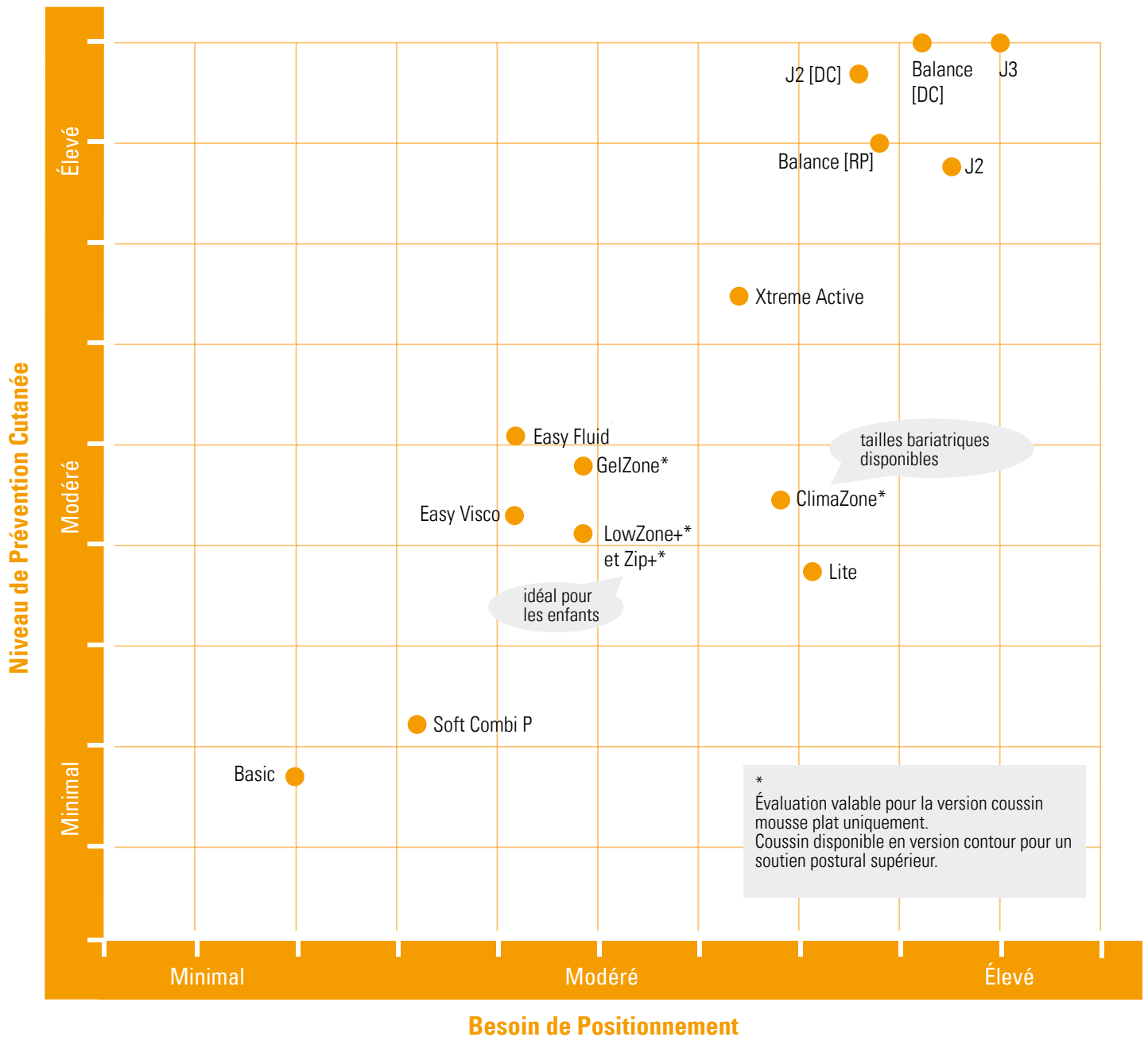

Les exigences relatives à un coussin d'assise sont aussi différentes que les personnes sont individuelles et les compromis en matière d'utilisation clinique ne sont pas acceptables. C'est pourquoi notre gamme JAY offre des solutions d'assise qui couvrent le large éventail des besoins cliniques, tout en maintenant l'efficacité clinique. Tous nos coussins JAY associent la protection de la peau à un soutien postural efficace et à une grande facilité d'utilisation.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : A USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Sunrise Medical recommande vivement qu'un professionnel de santé, tel qu'un médecin ou un thérapeute expérimenté en matière d'assise et de positionnement, soit consulté pour déterminer le coussin et/ou le dossier approprié aux besoins spécifiques de l'utilisateur afin d'éviter toute blessure. Les coussins, les dossiers et les supports de positionnement ne doivent être installés que par un prestataire de santé formé par Sunrise Medical.

Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37100 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr



www.SunriseMedical.fr