

Zip+

Das Rollstuhlsitzkissen für Kinder mit zweilagiger Schaumstoffbasis, mit geformter Sitzmulde und optionaler Beinführung zur verbesserten Gewichtsverteilung und Stabilität des Beckens. Der Druck auf empfindliche Stellen wird verringert und das Gewicht über die gesamte Sitzfläche verteilt.

Die obere, viskoelastische Schaumstofflage in Kombination mit der abgerundeten vorderen Kante bietet das Kissen höchsten Komfort. In zwei unterschiedlichen Konturen erhältlich, die konturierte Version für eine höhere Positionierung. Das Sitzkissen ist für mässigen Hautschutz gedacht.

Bezug:

- CoolOver Bezug** zur Regulierung der Hauttemperatur, um Dekubitus zu verhindern. Leitet überschüssige Wärme von der Haut ab, erleichtert die Wärmespeicherung bei Bedarf und hält die optimale Hauttemperatur aufrecht.
- Mikroklimatischer Bezug:** 2-Wege-Stretch-Abstandsgewebe zur Förderung der Durchblutung und dem Hautschutz.



Schaumstoff:

Bietet eine hervorragende Druckentlastung über die gesamte Sitzfläche

Die obere Schaumstofflage aus viskoelastischem Memory-Schaumstoff

Abgerundete vordere Kissenkante

Schutzfolie für zusätzlichen Schutz des Schaumstoffes, dehnbar, atmungsaktiv und spritzwassergeschützt

Konturiert Flach
Erhältlich in flacher und konturierter Ausführung für unterschiedliche Haltungsanforderungen



QR-Code scannen



Website




Bestellblatt

Erhältliche Größen. Änderungen oder Sondergrößen entnehmen Sie bitte Ihrem Bestellblatt.

Gewicht	0,55 kg
Max. Nutzergewicht	158 kg
Höhe	50 mm
Breite	200 - 340 mm
Tiefe	200 - 460 mm

JAY Sitzkissen-Sortiment

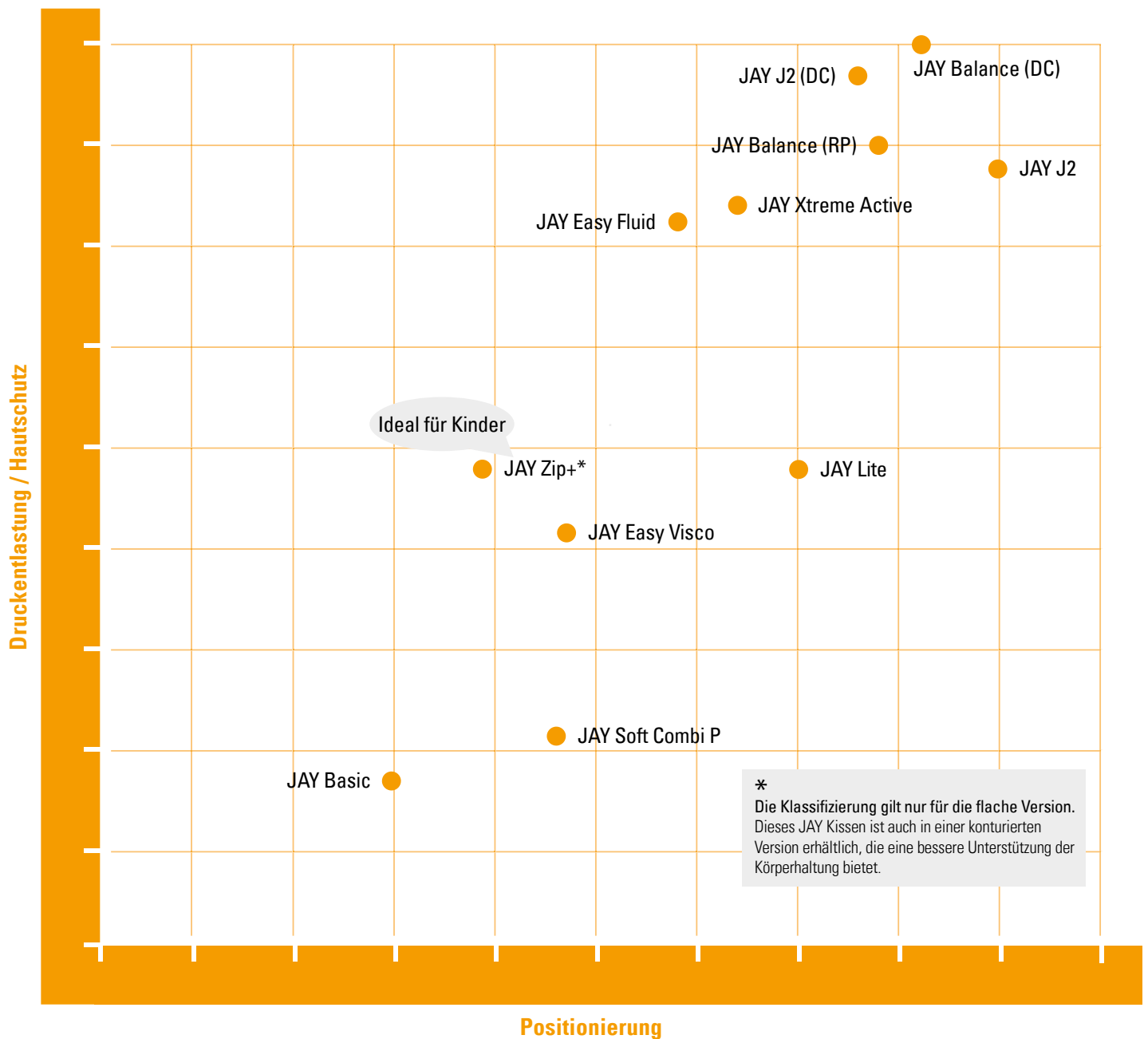

Die Anforderungen an ein Sitzkissen sind so unterschiedlich wie die Menschen und Kompromisse im klinischen Einsatz sind nicht akzeptabel. Aus diesem Grund bietet unser JAY-Portfolio massgeschneiderte Sitzlösungen, die das breite Spektrum der klinischen Anforderungen abdecken und gleichzeitig die klinische Wirksamkeit gewährleisten. Alle unsere JAY-Kissen verbinden in höchstem Masse Hautschutz mit effektiver Unterstützung der Körperhaltung und Benutzerfreundlichkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Sunrise Medical empfiehlt dringend einen Arzt oder Therapeuten mit Erfahrung im Bereich Sitzen und Positionieren zu konsultieren, um festzustellen, welches Sitzkissen und/oder welche Rückenlehne für die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers geeignet ist und um Verletzungen zu vermeiden. Sitzkissen, Rückenlehnen und Lagerungshilfen sollten nur von einem autorisierten Fachhändler montiert werden.

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de © 04/2024



www.SunriseMedical.de