

GelZone

- Base in schiuma a 2 strati con lieve avvallamento pelvico.
- Sacca in gel ad elevata viscosità, divisa in due sezioni, posizionata tra gli strati di schiuma.
- Cuscino pensato per utenti con bisogno di protezione cutanea e di supporto posturale da lieve a moderato.

Cuscino in gel di facile utilizzo con base in schiuma a 2 strati e avvallamento pelvico per proteggere le zone più vulnerabili e uno strato superiore in schiuma per un comfort ancora maggiore. E' dotato di una sacca in gel ad alta viscosità perfettamente integrata per evitare la migrazione del gel.

Fodera:

Fodera Microclimatica in tessuto traspirante che consente di disperdere il calore e l'umidità.



Schiuma:

Sacca in gel non migrante per la massima distribuzione del peso e il massimo sollievo dalla pressione

Strato superiore in schiuma morbida per facilitare il posizionamento del bacino

Combinazione di gel e schiuma per proteggere le zone più vulnerabili

Parte anteriore sagomata per maggior comfort

La sagomatura massimizza la distribuzione del peso e la riduzione della pressione

Fodera interna per offrire protezione extra, estensibile, traspirante e resistente agli spruzzi.

Contour Flat


Disponibile in versione flat e contour per necessità posturali differenti



Qui è indicata la gamma delle misure disponibili, per il dettaglio vedere la scheda d'ordine.

Peso	2,50 kg
Portata massima	158 kg
Altezza	50 mm e 80 mm
Larghezza	300 - 600 mm
Profondità	340 - 600 mm

Range Cuscini Jay

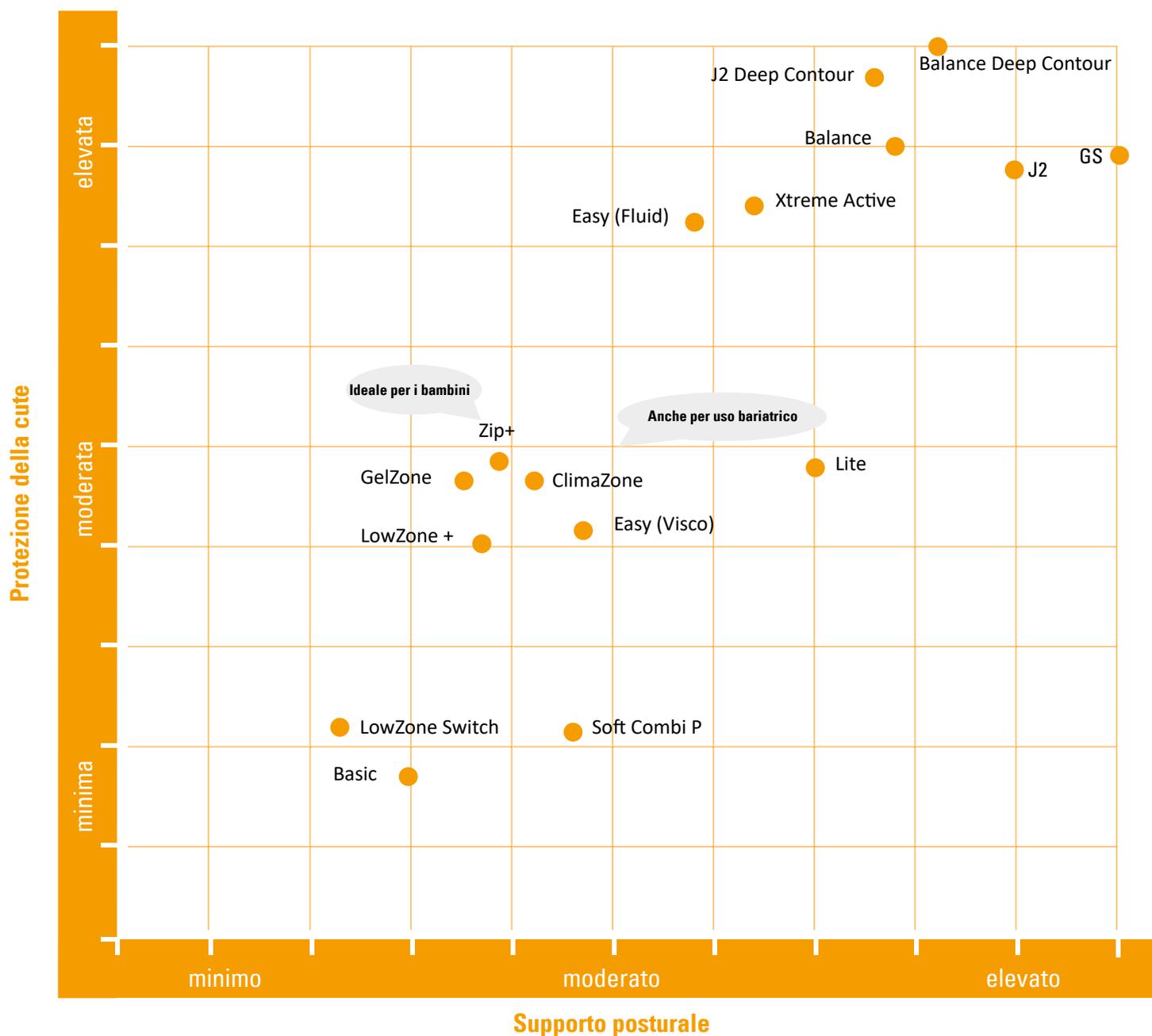

Le problematiche che richiedono l'utilizzo di un cuscino antidecubito sono sempre diverse poichè le persone sono uniche e i compromessi nella pratica clinica non sono accettabili. Per questo motivo, i nostri cuscini JAY offrono soluzioni di seduta che possano adattarsi alle varie esigenze in continuo mutamento mantenendo l'efficacia clinica. Tutti i nostri cuscini JAY combinano la protezione della pelle con un efficace supporto posturale e con la massima facilità d'uso.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Sunrise Medical raccomanda vivamente di consultare un medico o un terapeuta esperto in sistemi di postura per determinare il cuscino e/o lo schienale più adatto alle necessità dell'utente, al fine di evitare lesioni.