

LowZone Switch

- Il design e la conformazione del cuscino ne permettono sempre il corretto utilizzo nel verso giusto.
- Strato in memory foam sia sulla superficie superiore che su quella inferiore.
- Per necessità di protezione della cute da minima a lieve.

Cuscino entry level in memory foam estremamente facile da utilizzare con una originale struttura a sandwich che consente di posizionare questo cuscino in qualsiasi modo. Gli strati in memory foam consentono di mantenere il comfort a lungo.

Fodera:


1. Fodera per incontinenza: fodera idrorepellente in poliuretano elasticizzato in 4 direzioni.

2. Fodera Microclimatica (disponibile solo come ricambio): in tessuto traspirante che consente di disperdere il calore e l'umidità.



Schiuma:


Strato in memory foam sensibile al calore sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore per ridurre la pressione

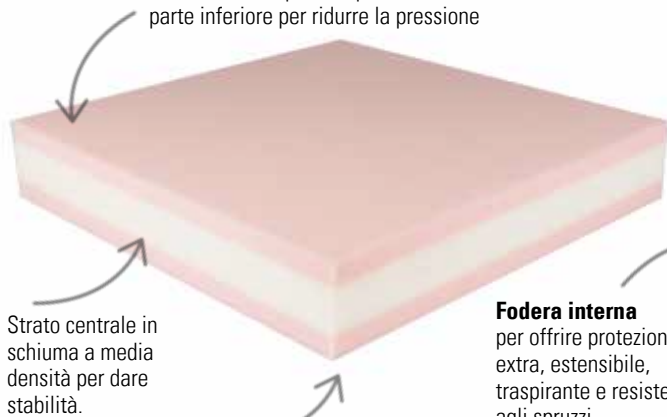

Strato centrale in schiuma a media densità per dare stabilità.

I due strati, superiore ed inferiore, racchiudono il cuore del cuscino per offrire comfort a lungo


Fodera interna per offrire protezione extra, estensibile, traspirante e resistente agli spruzzi.

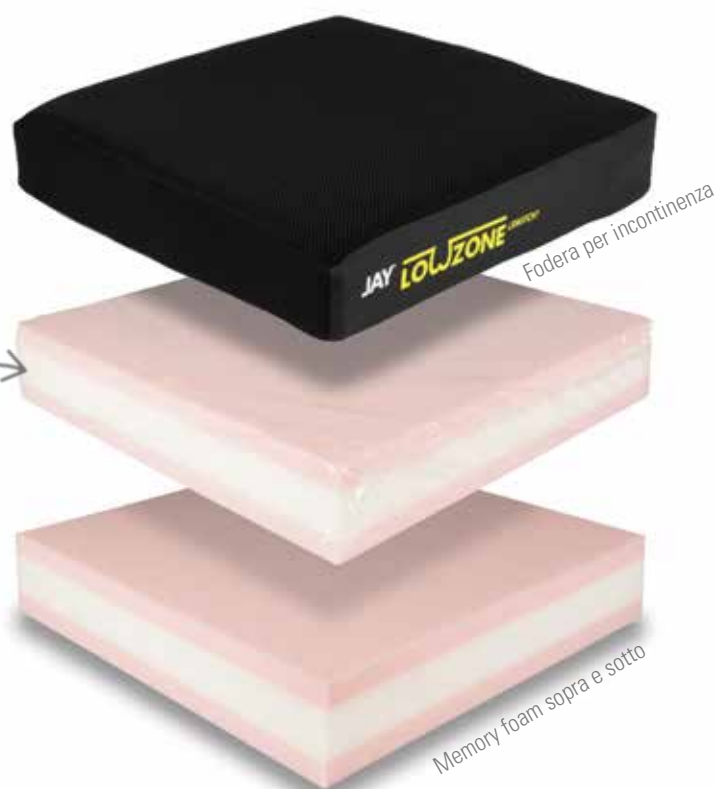

Peso	0,90 kg
Portata massima	114 kg
Altezza	50 mm
Larghezza	300 - 600 mm
Profondità	300 - 600 mm

Qui è indicata la gamma delle misure disponibili, per il dettaglio vedere la scheda d'ordine.

Range Cuscini Jay

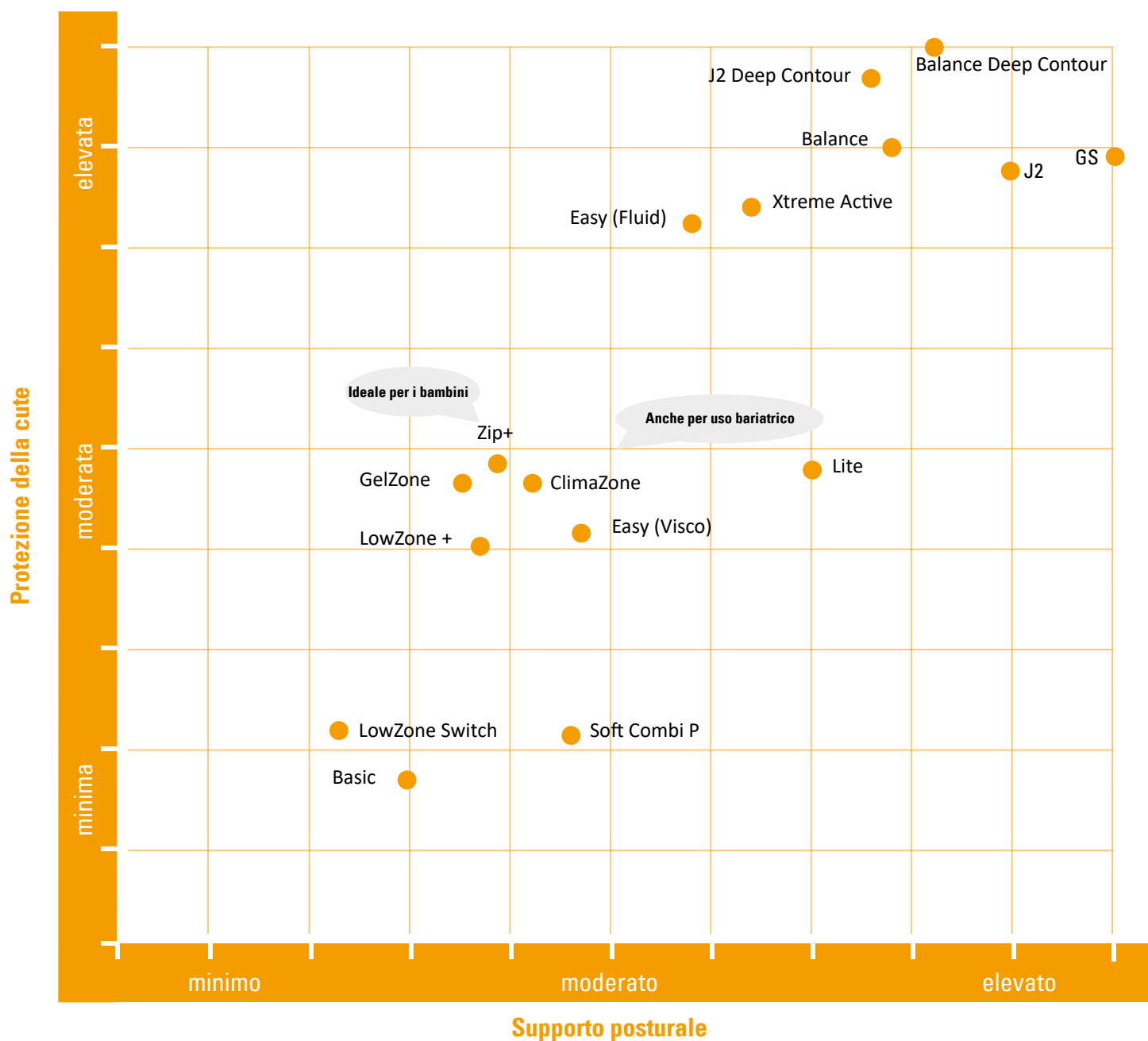

Le problematiche che richiedono l'utilizzo di un cuscino antidecubito sono sempre diverse poichè le persone sono uniche e i compromessi nella pratica clinica non sono accettabili. Per questo motivo, i nostri cuscini JAY offrono soluzioni di seduta che possano adattarsi alle varie esigenze in continuo mutamento mantenendo l'efficacia clinica. Tutti i nostri cuscini JAY combinano la protezione della pelle con un efficace supporto posturale e con la massima facilità d'uso.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Sunrise Medical raccomanda vivamente di consultare un medico o un terapeuta esperto in sistemi di postura per determinare il cuscino e/o lo schienale più adatto alle necessità dell'utente, al fine di evitare lesioni.