

Zip+

Ce coussin d'assise pour fauteuil roulant enfant est formé à la base de deux couches de mousse avec cuvette anatomique pour une meilleure stabilité du bassin. La pression s'en trouve diminuée aux endroits vulnérables et le poids est réparti sur l'ensemble de l'assise.

La couche supérieure du coussin est composée de mousse viscoélastique à mémoire de forme qui permet, en combinaison avec le bord avant arrondi, un meilleur confort. Ce coussin d'assise offre une protection cutanée modérée et un soutien postural léger et il est disponible en deux galbes différents.

Housse :


- 1. Housse CoolOver (bleu nuit) :** régule la température cutanée pour prévenir les escarres, évacue l'excès de chaleur de la peau, facilite en cas de besoin la rétention de chaleur et maintient une température cutanée optimale.
- 2. Housse aérée (noir) :** textile extensible dans les deux sens pour favoriser l'irrigation sanguine et la protection cutanée.



Mousse :

Excellente redistribution de la pression sur l'ensemble de la surface d'assise

Couche supérieure en mousse viscoélastique à mémoire de forme

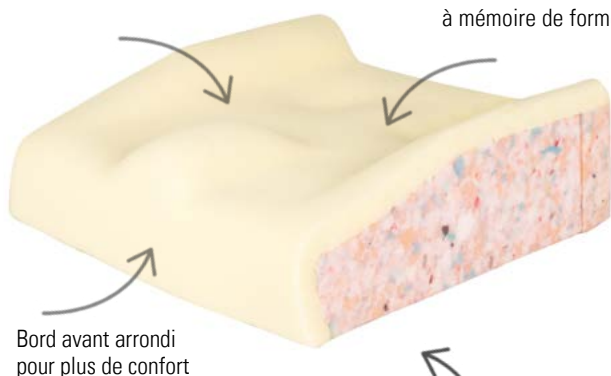

Bord avant arrondi pour plus de confort

Enveloppe
Extensible,
respirante et étanche

Version galbée / version plate


Disponible en version plate ou galbée pour couvrir différents besoins posturaux



Ces dimensions sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande pour modifications ou dimensions spéciales.

Poids	0,55 kg
Charge maximale	158 kg
Hauteur d'assise	50 mm
Largeur d'assise	200 - 340 mm
Profondeur d'assise	200 - 460 mm

Gamme des coussins JAY

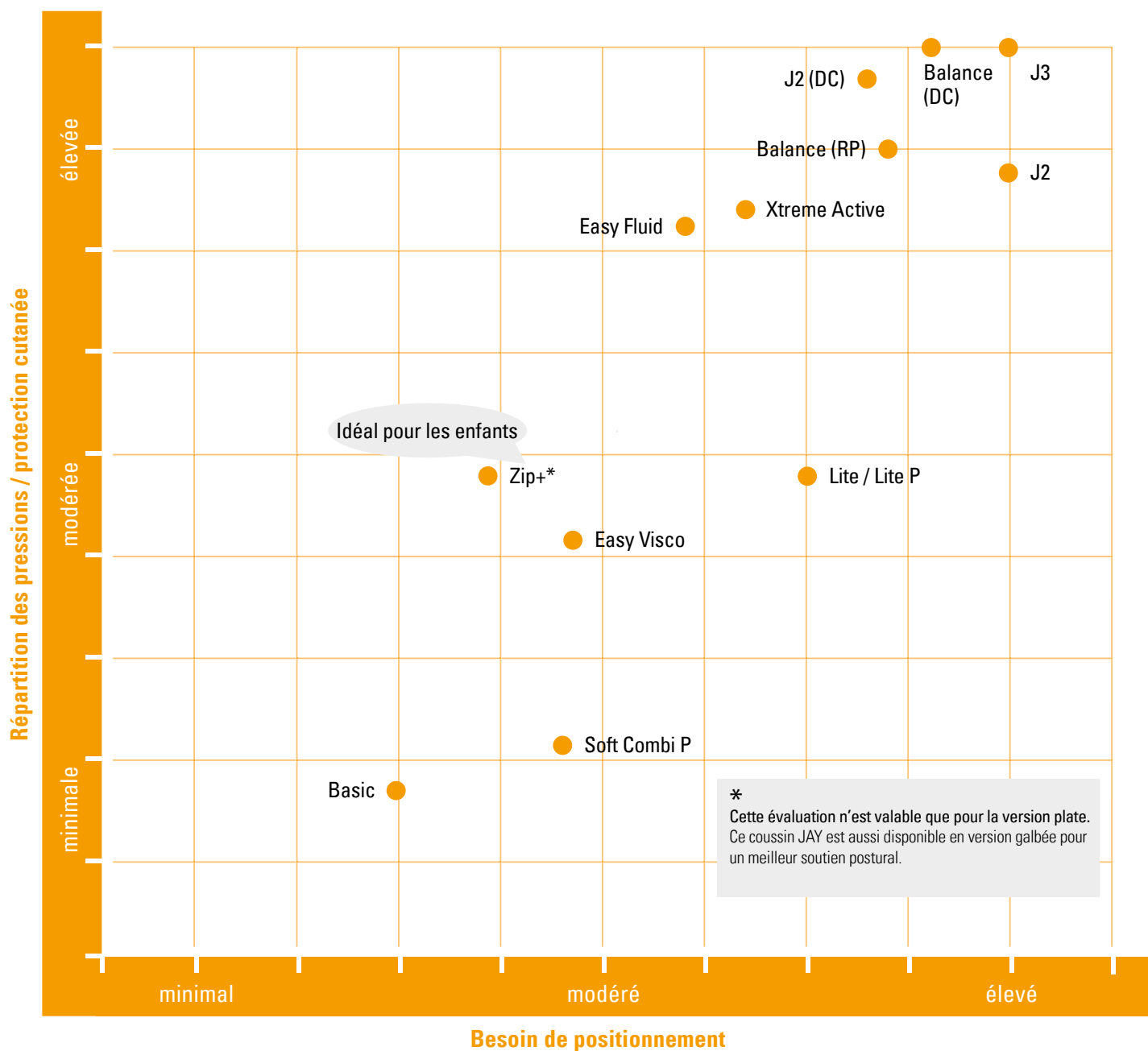

Les exigences relatives à un coussin d'assise sont aussi diverses que les individus et les compromis en matière d'utilisation clinique sont inacceptables. C'est pourquoi notre gamme JAY offre des solutions d'assise qui couvrent le large éventail des besoins cliniques tout en garantissant l'efficacité clinique. Tous nos coussins JAY associent une excellente protection cutanée à un soutien postural efficace et une grande facilité d'utilisation.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

Sunrise Medical recommande vivement qu'un professionnel de santé, tel qu'un médecin ou un thérapeute expérimenté en matière d'assise et de positionnement, soit consulté pour déterminer le coussin et/ou le dossier approprié aux besoins spécifiques de l'utilisateur afin d'éviter toute blessure. Les coussins, les dossiers et les supports de positionnement ne doivent être installés que par un détaillant formé par Sunrise Medical.