

SUNRISE
MEDICAL.

Empulse.



E | F35

NOTRE ASSISTANCE À LA TRACTION
LA PLUS PETITE ET LA PLUS LÉGÈRE

F35 - VOTRE MODE DE VIE DYNAMISÉ



EN FINIR AVEC LES DISPOSITIFS DE TRACTION ENCOMBRANTS !

À première vue, se déplacer au quotidien n'a pas l'air d'être un défi insurmontable mais avec le temps, les épaules sont de plus en plus sollicitées.

On pourrait définir les accessoires d'assistance électrique comme les super héros de la mobilité si certains n'étaient pas trop encombrants et trop lourds pour un usage quotidien – surtout pour un saut rapide en ville ou pour partir en voyage.

Ce dispositif de traction n'attire pas seulement les regards, il est le laisser-passer pour une mobilité rapide et sans efforts dans la jungle des grandes villes.



Notre dispositif de traction le plus petit et le plus léger de tous les temps



Se cale dans les petites voitures



Très faible rayon de braquage et jusqu'à 15 km d'autonomie dans sa version 15 km/h (28 km dans sa version 6 km/h)



2 modes d'arrimage pour entrer, sortir, aller n'importe où



Se combine à la plupart des fauteuils roulants rigides et pliants



Batterie adaptée aux voyages, idéale pour les modes de transport (avion, train, bateau, voiture)



Scannez le QR code pour voir le F35 en mouvement!

CARACTÉRISTIQUES




Idéal pour les arrêts fréquents :
le F35 se détache en quelques secondes du châssis intermédiaire qui le relie au fauteuil.

DEUX POSSIBILITÉS D'ARRIMAGE CHOISISSEZ LA VÔTRE SELON VOS BESOINS

1 «La plus rapide» : brevet en instance, arrimage en un seul geste pour des arrêts rapides en ville. **Le F35 se détache facilement de l'adaptateur, tandis que le châssis intermédiaire reste sur le fauteuil roulant.** Idéale pour les petits arrêts lorsque l'assistance du F35 n'est pas nécessaire, par exemple dans un café, à l'université ou au bureau. Et le meilleur dans tout cela? Il se remet en place en quelques secondes quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce.

Poignées rabattables et verrouillables : plus besoin de se battre avec un équipement encombrant! Se range facilement dans le plus petit des coffres de voiture ou sur le siège arrière, permettant des transferts en voiture en toute autonomie.

Pièce restant sur le fauteuil :
le châssis intermédiaire de liaison et support

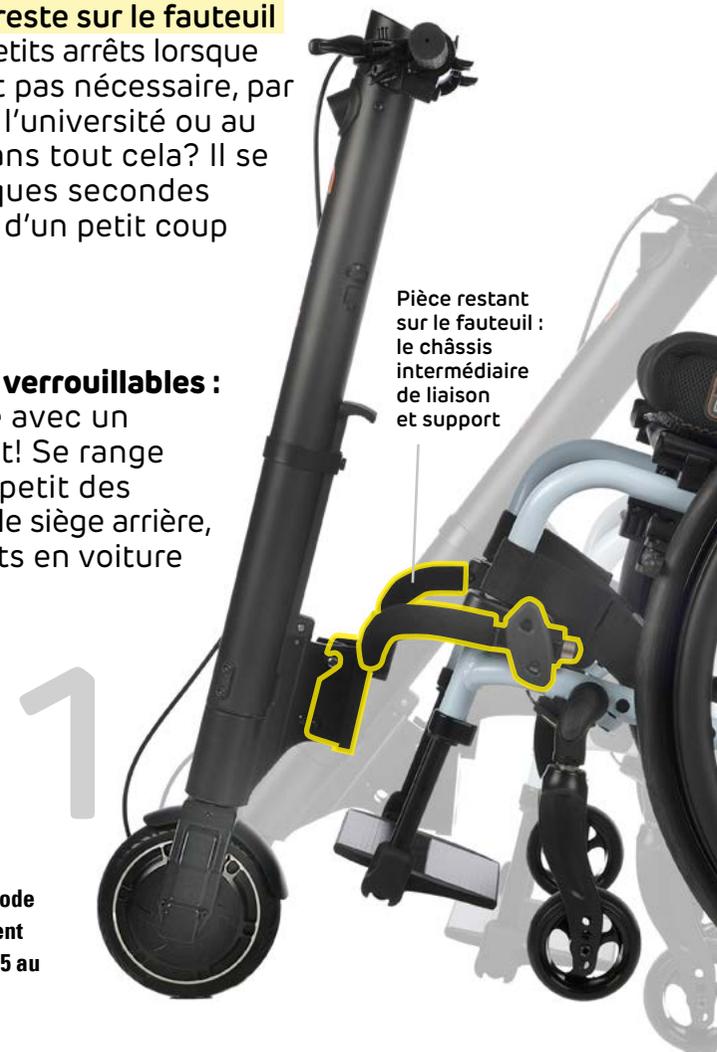

Scannez le QR code pour voir comment s'accroche le F35 au fauteuil.

2

2 «Pour le stockage» : si vous voulez vous simplifier la vie, le dispositif peut facilement être entièrement enlevé du fauteuil avec le châssis intermédiaire. Pour ranger votre F35, enlevez simplement la barre de guidage et le châssis intermédiaire du fauteuil à l'aide des attaches.



Démontage en deux parties plus légères pour faciliter le chargement (châssis intermédiaire et F35 peuvent être séparés)

LÉGER ET COMPACT POUR DES TRANSFERTS VOITURE EN TOUTE AUTONOMIE

Léger comme une plume : que vous partiez seul ou accompagné, le F35 ne pèse que 7,5 kg (sans le châssis intermédiaire), ce qui facilite grandement les transferts en voiture et favorise votre indépendance dans vos aventures quotidiennes.

Design compact et épuré : un profil élégant et compact grâce à notre conception de tube tout-en-un, assurant une manipulation et un transport simples, sans l'encombrement.

CHARGEMENT

Batterie 4 Ah adaptée à l'avion – compacte et puissante, elle répond exactement à vos besoins, pour les trajets en ville comme pour les voyages (veuillez-vous renseigner en amont auprès de votre compagnie aérienne pour connaître ses conditions spécifiques relatives à la batterie).

Système de gestion de batterie intelligent : le système et les cellules de batteries innovantes 21700 vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque charge.

Rayon de braquage ultra compact : que ce soit au milieu d'une foule ou dans un ascenseur – tourner est un jeu d'enfant.



Avec une **autonomie de 15 km***, appréciez une nouvelle liberté, allez où vous voulez.



Système de freinage puissant : vous bénéficiez d'un double système de freinage – un frein électronique proportionnel et un frein tambour fiable – et d'un frein de parking pour un contrôle précis et une sécurité optimale lors de vos déplacements.



Régulateur de vitesse : maintient une vitesse constante en montée et en descente.



Vaincre les pentes : parking, rampes d'accès, transports en commun... – surmontez avec brio ces obstacles gênants du quotidien! Le F35 peut gravir une pente de 6°, même avec un poids maximal utilisateur de 110 kg.

Stabilité au plus haut niveau : dites adieu aux balades instables ! Grâce à un mécanisme de verrouillage, en instance de brevet, le F35 est pratiquement collé au cadre de votre fauteuil. Pas de secousses, pas de cliquetis – une stabilité à toute épreuve, juste une conduite ultra stable.



Moteur puissant à couple élevé : profitez d'une conduite dynamique grâce à un moteur de 250 watt qui garantit une conduite souple et réactive.





3 Vitesses de conduite disponibles : choisissez votre rythme, qu'il s'agisse d'une vitesse confortable de 6 km/h, d'une vitesse modérée de 10 km/h ou rapide de 15 km/h.



Pas de roue qui patine : 3 niveaux d'accélération (Slow, Std, Fast) adaptant les performances à chaque environnement.



Le port de charge USB
Vous permet de charger votre téléphone à tout moment. Vous n'avez donc pas à vous soucier de décharger la batterie de votre téléphone lorsque vous utilisez la navigation ou écoutez de la musique.



Scannez le QR code pour accéder aux vidéos de mise en service!



L'ÉCLAIRAGE LED s'intègre parfaitement au design du F35, vous offrant un moyen pratique d'éclairer votre chemin et d'améliorer votre visibilité.

ÉCLAIRAGE

DONNÉES TECHNIQUES

Poids utilisateur max.	110 kg
Dimensions max.	915 mm x 584 mm x 610 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Autonomie*	jusqu'à 15 km (15 km/h) jusqu'à 28 km (6 km/h)
Pente max. sécurité	jusqu'à 11% (6°)
Poids	
incl. batterie et châssis int.	à partir de 9 kg
poids de transport (sans châssis int)	à partir de 7,5 kg
Largeur avant du châssis	260 – 480 mm**
Couleur	noir
Vitesse maximale	6 km/h; en option 10/15 km/h (vitesse réglable sur 3 niveaux)
Batterie	Lithium-Ion 36 V, 4 Ah, 144 Wh
Temps de charge	env. 2 heures
Taille roue motrice	6,5"
Puissance de moteur max.	250 W
Système de freinage	Système de freinage double: frein tambour mécanique + frein séparé électronique proportionnel et frein parking
Garantie	selon réglementations locales
Conformité	EN12184

* L'autonomie dépend de la surface du sol, du poids utilisateur, du comportement de conduite, de la température ambiante et du terrain, conformément à la norme ISO 7176-4.

** Largeur du châssis avant du fauteuil mesurée du centre du tube du châssis avant au centre du tube opposé à la position du montage.



F35 – bon de commande

SUNRISE MEDICAL SE SOUCIE DE VOTRE SÉCURITÉ.
S'il-vous-plait, lisez le mode d'emploi pour prendre connaissance d'instructions d'utilisation et de directives de maintenance sûres.

AU CHOIX !



Support smartphone : avec le support pour smartphone vous êtes joignable même en conduisant et vous garder le contrôle.



Adaptateur de charge pour voiture : avec l'adaptateur de charge pour la voiture, vous êtes toujours parfaitement préparé, quelle que soit votre destination.



Antivol : l'antivol garantit que votre F35 reste là où vous l'avez laissé, vous avez l'esprit tranquille, quel que soit l'endroit où vous vous garez.

Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise medical.



Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.



www.SunriseMedical.ch

